

Niewielkie pociągnięcia pędzelkiem
Duży efekt.



VITA AKZENT® LC

Kolorowe światłoutwardzalne
farbki kompozytowe do
estetycznej charakteryzacji
uzupełnień protetycznych.





Charakteryzacja

VITA AKZENT® LC

System światłoutwardzalnych farbek/glazury.

Światłoutwardzalne farby kompozytowe VITA AKZENT LC do odtwarzania indywidualnych efektów kolorystycznych, jak również do wykonywania korekt kolorystycznych. System farbek oprócz wielu aspektów estetycznych imponuje wydajną i precyzyjną aplikacją barw oraz trwałym kolorem i połyskiem.

Farby VITA AKZENT LC mają uniwersalne zastosowanie i idealnie nadają się do zewnętrznej charakteryzacji uzupełnień protetycznych wykonanych z takich materiałów jak:

- ceramika hybrydowa
- kompozyt CAD/CAM
- kompozyt licujący
- podstawy protez
- druk 3D
- zęby konfekcyjne

Ponadto idealnie nadają się do wewnętrznej charakteryzacji w technice licowania kompozytami.

Niezawodnie

Niezawodne, realistyczne odwzorowanie kolorów naturalnych zębów dzięki szerokiej gamie efektów kolorystycznych oraz intuicyjnej obróbce.

Łatwo

Prosta modyfikacja koloru poprzez pociągnięcia pędzlem przy użyciu kolorów chromatycznych, co pozwala na systematyczną kontrolę nasycenia koloru i optymalną estetykę dziąseł.

Wydajna

Efektywne użytkowanie dzięki precyzyjnym efektom kolorystycznym lub kolorom nakładanym na dużą powierzchnię przy idealnie dobranej lepkości.



Zęby konfekcyjne



Kompozyt CAD/CAM



Materiał do druku w 3D



Podstawa do protezy cyfrowo/analogowo



Kompozyt licujący



Ceramika hybrydowa

Szczegółowe efekty

Naturalna czerwono-biała estetyka

W celu kolorystycznej indywidualizacji podstawy protez można zastosować VITA AKZENT LC EFFECT STAINS. EFFECT STAINS idealnie nadają się do naturalnej reprodukcji dziąseł.


Masy te charakteryzują się wyjątkową płynnością, dzięki czemu idealnie nadają się do precyzyjnej aplikacji. [Zastosowanie jest bardzo proste: szczegóły znajdziecie Państwo w broszurze użytkownika materiału nr. 10748.](#)



Wieloaspektowa indywidualizacja

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS to uniwersalne kolory, które pozwalają na realistyczne odwzorowanie efektów, takich jak

przebarwienia szyjek/bruzd, przezroczyste obszary szkliwa, zwapnienia i wiele innych.

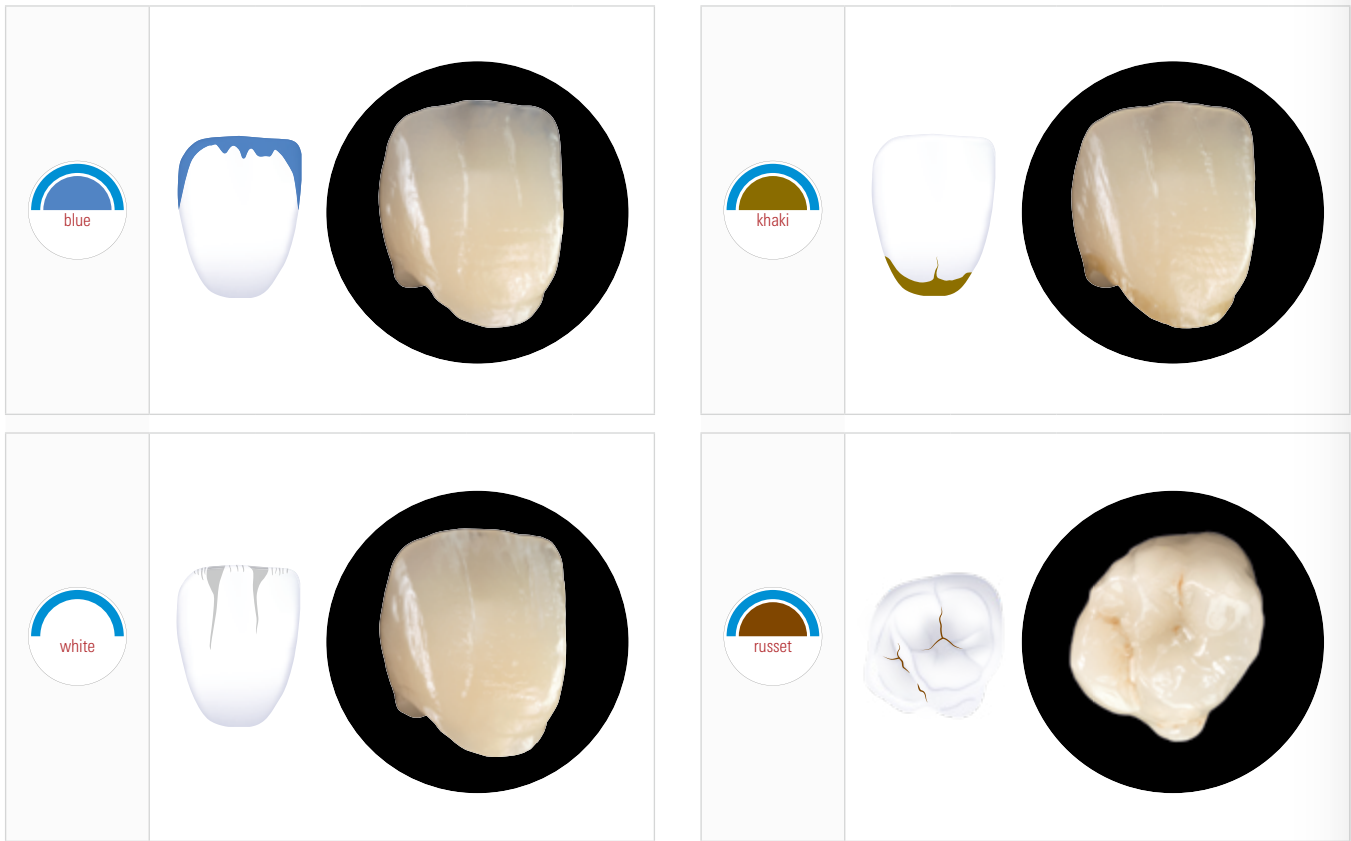

Niezawodna korekta kolorów dla najlepszego dopasowania kolorów

VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS

VITA AKZENT LC CHROMA STAINS służą do systematycznego wzmacniania nasycenia barw w obrębie grupy kolorystycznej.

VITA classical A1–D4

	Kolory				
	A1	A2	A3	A3.5	A4
	Kolory				
	B1	B2	B3	B4	
	Kolory				
	C1	C2	C3	C4	
	Kolory				
	D2	D3			

PERFECT MATCH



słabe dopasowanie kolorów



Korekta koloru przy pomocy VITA AKZENT LC Idealne dopasowanie koloru CHROMA STAINS



Teraz możesz dowiedzieć się więcej z video tutorials:
www.vita-zahnfabrik.com/tutorial/akzentlc/all/ifu/correctionc

Spojenie i przyczepność

Test przyczepności


VITA AKZENT LC, VITA

OPTIGLAZE color, GC



Próbka wzorcowa: malowane zęby VITAPAN do protez przed symulowanym starzeniem

Symulowane starzenie za pomocą termocyklingu
(5000 cykli, 5 °C / 55 °C)

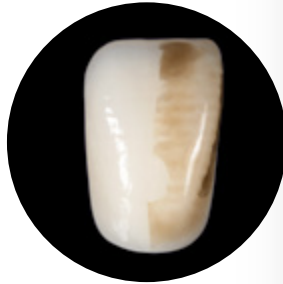

Wynik:
pomalowane zęby VITAPAN po symulowanym starzeniu

Tekst źródłowy: badania przeprowadzono w VITA F&E. Raport 0628/19, 03/20, dr. M. Gmehling ([1] patrz tylna strona broszury)

Precyzyjna aplikacja koloru

VITA AKZENT LC oferuje stabilne farbkę o idealnej lepkości do precyzyjnego nakładania, w celu szczegółowej reprodukcji wszystkich indywidualnych cech kolorystycznych.

Test stabilności

VITA AKZENT LC (white)




1. Nakładanie farbkę na szklaną płytkę



2. Test stabilności materiału poprzez pochylenie płytki

Tekst źródłowy: badania przeprowadzono w firmie, VITA PM, Raport 0478/21, 10/21, H. Kimmich ([2] patrz tylna strona broszury)

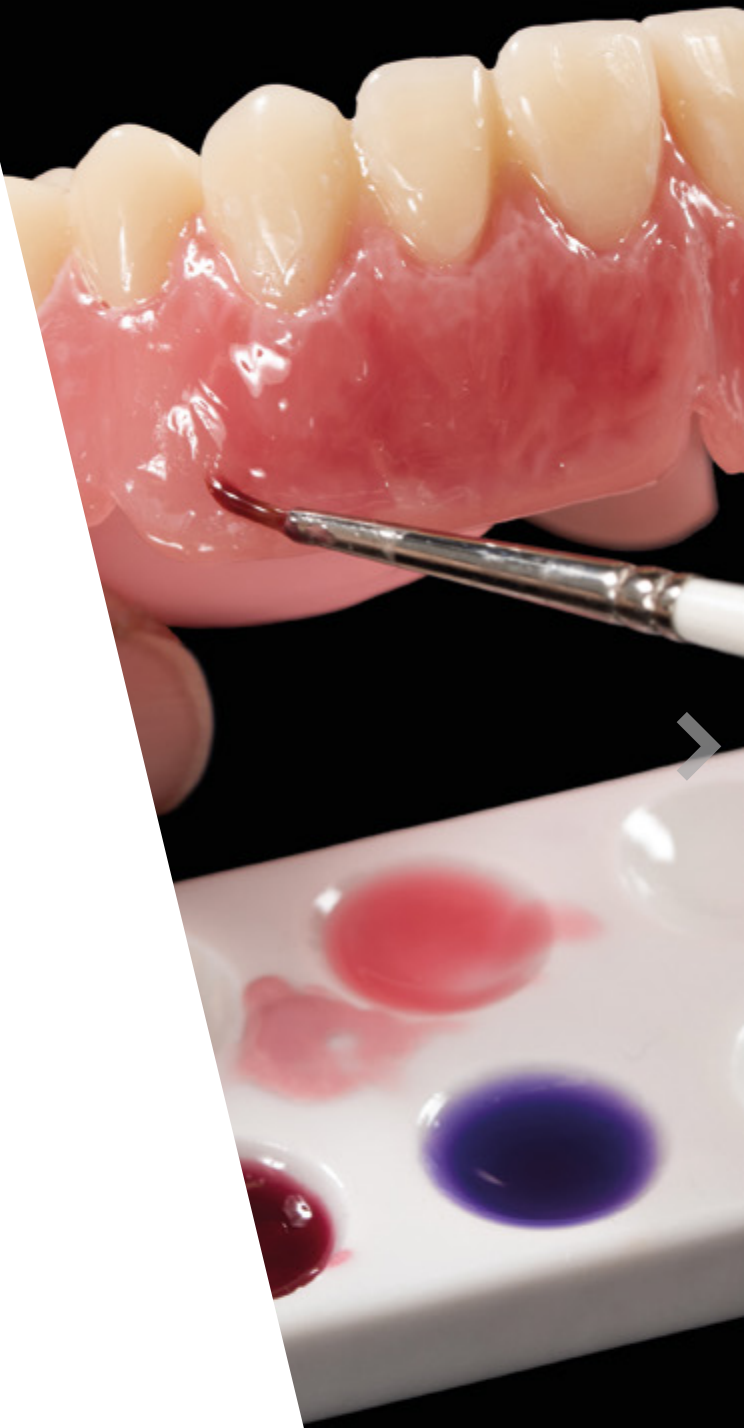


Wysoki stopień odporności

VITA AKZENT LC charakteryzuje się jednorodną powierzchnią, która zapewnia doskonałą odporność na przebarwienia. Wykazuje doskonałą stabilność koloru w teście po przechowywaniu w wodzie, herbatce i kawie przez okres 12 tygodni. VITA AKZENT LC umożliwia bardzo spójne, doskonałe odzwierciedlenie

barw oraz zachowanie wysokiego połysku dzięki matrycy polimerowej wzmocnionej wypełniaczami krzemionkowymi. Wykazuje w teście doskonały stopień połysku po 20 godzinach symulowanego zużycia za pomocą ścierania szczoteczką (200 dni mycia zębów - 2 x 3 minuty dziennie).

Doskonała odporność na przebarwienia

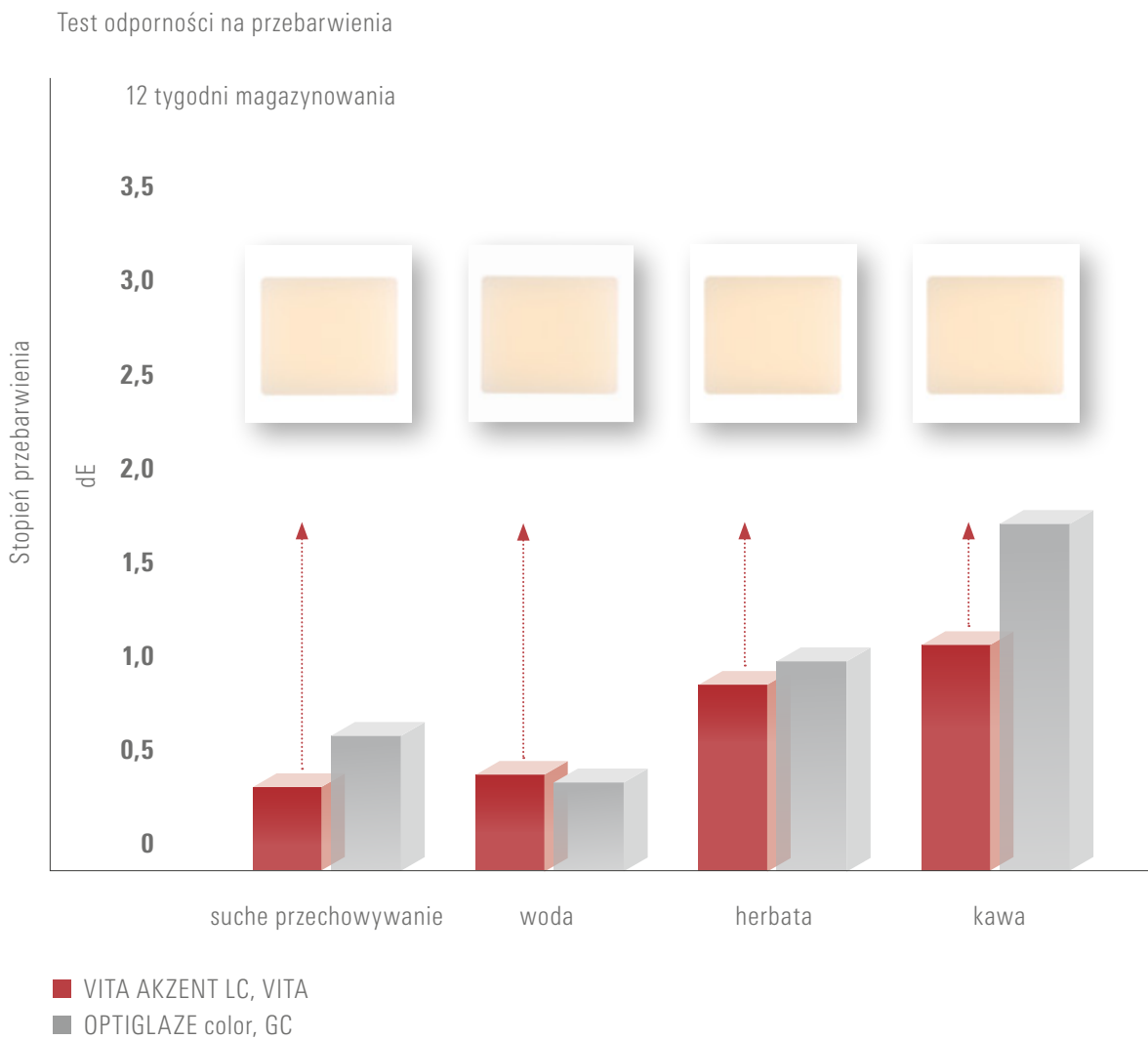

Tekst źródłowy: badania przeprowadzono w VITA F&E. Raport 0559/19, 03/20, dr. M. Gmehling ([1] patrz tylna strona broszury)

Wysoka odporność na zużycie / stałość połysku

Test odporności na zużycie




Pomalowana korona przed testem na zużycie




Pomalowana korona po teście na zużycie

Badania przeprowadzono w firmie, VITA F&E, Raport 0083/21, 07/21, dr. S. Aechtner ([1] patrz tylna strona broszury)

Przegląd kolorów i wariantów.

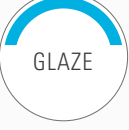Przegląd asortymentu VITA AKZENT® LC		
VITA AKZENT® LC EFFECT STAINS		
	Do szczegółowej reprodukcji indywidualnych cech i efektów	 white  cream  lemon  sun  orange  russet  khaki  pink  dark-red  purple  blue  grey-blue  grey  black
VITA AKZENT® LC CHROMA STAINS		
	Do systematycznego zwiększania chroma-tyczności	VITA Classical A1–D4  A red-brown  B red-sun  C grey-brown  D grey-red VITA SYSTEM 3D-MASTER  L corn-yellow  M2 red-yellow  M3 dark-yellow  R light-red
VITA AKZENT® LC GLAZE		
	Dla trwale błyszczącej i zabezpieczonej powierzchni	 glaze
VITA AKZENT® LC COMPONENTS		
	Idealnie dobrane komponenty systemu zapewniają wydajną obróbkę	- Cleaner - pędzelki do malowania, microbrushes - płytką do mieszania

VITA AKZENT® LC asortyment

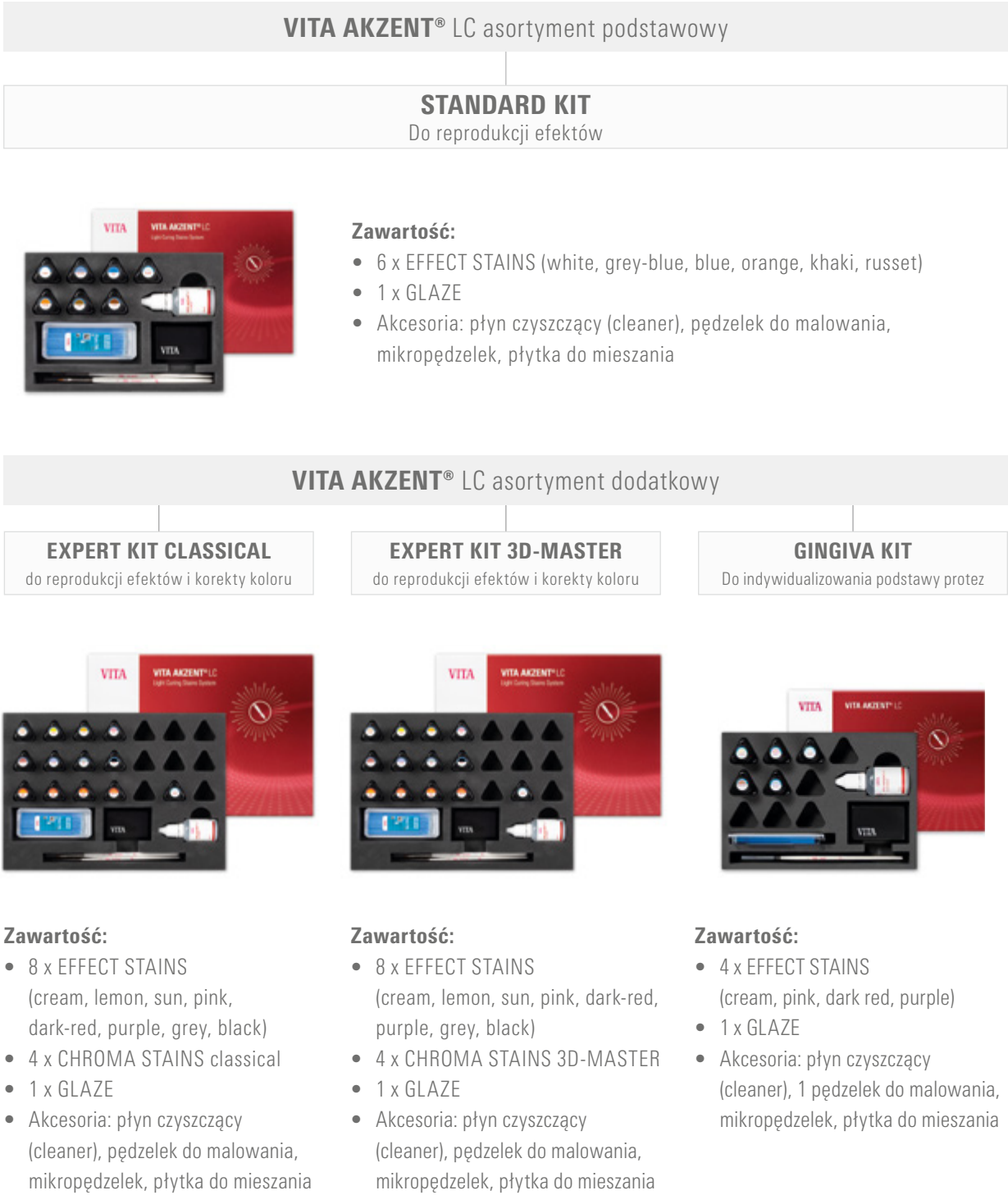

Dopasowane rozwiązania do procesu technologicznego



Wyznaczanie koloru zębów

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide



Wykonawstwo uzupełnień prot.

VITA ENAMIC, kompozyt CAD/CAM, kompozyt licujące, podstawy protez, VITA VIONIC SOLUTIONS, zęby konfekcyjne VITA



Charakteryzacja Glazura

VITA AKZENT LC



Polerowanie

VITA Polish Hybrid



Cementowanie

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Chętnie udzielamy dalszej pomocy



Pomoc Hotline Sprzedaż-Obsługa

Telfon +49 7761 562-890
Faks +49 7761 562-233
od 8.00 do 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Pomoc techniczna Hotline

Telfon +49 7761 562-222
Faks +49 7761 562-446
od 8.00 do 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Infolinia VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Należy przestrzegać wskazówek

Nasze produkty należy stosować wg instrukcji użytkowania. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Przed użyciem produktu, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy dany produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania. Odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona, gdy produkt przetwarzany jest w połączeniu z niekompatybilnymi lub nieautoryzowanymi materiałami i urządzeniami innych producentów, które mogą spowodować szkody. Skrzynka modułowa VITA nie musi konieczne wchodzić w skład ww. zestawu. Publikacja niniejszej broszury produktu: 2025-03

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikacje wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące

produkty posiadają oznaczenia **CE 0124**:

VITA AKZENT® LC

W tym dokumencie wszystkie wymienione produkty/systemy innych producentów posiadają zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich producentów.

Rx only **MD**

Referencje

Badania przeprowadzone w firmie VITA R&D

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Resort badań i rozwoju
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Niemcy
dr. Stefan Aechtner, kierowniczka projektów VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Szczegółowe dane testów:

Patrz dokumentacja naukowo-techniczna
VITA LUMEX AC
Download via www.vita-zahnfabrik.com



Dalsze informacje dotyczące VITA AKZENT LC
proste skanowanie kodu QR
<https://www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc>



VITA AKZENT® LC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Telefon: +49 7761 562-0
Infolinia: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

