

VITA

Dokładne ustalenie koloru.
Maksymalna niezawodność.



VITA Easyshade® V

Dokładne ustalenie koloru
zębów naturalnych, uzupełnień
ceramicznych oraz w planowanych
zabiegach wybielania.





Cyfrowy dobór koloru

VITA Easyshade® V

Wysoce precyzyjne ustalenie koloru – pewna reprodukcja koloru

Podstawowym atutem jakości estetycznego uzupełnienia jest dopasowanie do naturalnych zębów pacjenta. Warunkiem koniecznym jest właściwe wyznaczenie koloru zęba i jego dokładne odtworzenie.

VITA Easyshade V wspiera stomatologów i techników dentystycznych we właściwej komunikacji dotyczącej koloru, jego właściwej reprodukcji oraz kontroli koloru w czasie wykonywania uzupełnień ceramicznych. System znacznie zwiększa pewność całego procesu technologicznego.

- Niezależność od warunków oświetleniowych otoczenia dzięki spektrofotometrycznemu pomiarowi koloru.
- Efektywne wyznaczenie koloru poprzez jednorazowy pomiar zamiast wizualnego dochodzenia do właściwego koloru
- Dzięki obiektywnym procedurom metrycznym może być również wykonywane przez niedoświadczony personel stomatologiczny lub w przypadku niższego stopnia zgodności koloru
- Wyświetlenie wyników pomiaru przy użyciu czterech różnych systemów kolorów: VITA classical A1–D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA Bleachedguide 3D-MASTER® – do kolorów wybielonych, przy planowanych zabiegach wybielania, współrzędne kolorów (wartości LCh- lub Lab)
- Różne metody pomiaru, takie jak uśredniony kolor i wyznaczenie koloru zęba jako pomiar trzypunktowy (szyjkowy, centralny i sieczny) w celu precyzyjnego wyznaczenia koloru zęba
- Uproszczona komunikacja i dokumentacja dobranych kolorów zębów w połączeniu z VITA Assist i VITA mobileAssist+

Dokładny

Proste i dokładne określenie koloru w ciągu kilku sekund. Niezawodny proces i łatwa komunikacja między gabinetem i laboratorium.

Wszechstronne zastosowanie

Stosujemy na naturalnym uzębieniu i uzupełnieniach ceramicznych. Skuteczny w doradzaniu i monitorowaniu zabiegów wybielania.

Wydajnie

Wyznaczenie koloru zęba za pomocą VITA PERFECT MATCH pozwala zaoszczędzić czas, redukując liczbę reklamacji i poprawek.



// VITA Easyshade V daje nam i naszym pacjentom pewność w określaniu koloru zębów – również jako kontrolę wstępną. Użytkujemy jednoznaczne wyniki - na przykład przed i po zabiegach wybielania. Daje nam to jednoznaczną wartość dodaną w naszej codziennej praktyce”.

Dr. med. dent. Iris Kraljevic
Centrum Profilaktyki Zurich
Szwajcaria

Wszechstronne zastosowanie.

Które urządzenie Easyshade spełnia Twoje wymagania?

Podczas gdy Easyshade V oferuje wszechstronne możliwości pomiarowe, które ułatwiają również komunikację z laboratorium, Easyshade LITE skupia się na nieskomplikowanym doborze koloru wyłącznie na naturalnych zębach.



Chcę ...	VITA Easyshade® V	VITA Easyshade® LITE
... określić dokładnie skalę kolorów naturalnych zębów w VITA classical A1 - D4 lub VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... otrzymaj informacje o odchyleniach koloru mierzonego zęba od najbliższej wartości koloru.	✓	✓
... niezawodne narzędzie do monitorowania i doradzania w trakcie zabiegów wybielania, umożliwiające łatwą transmisję obrazów i danych pacjenta.	✓	-
... konkretne zalecenia dotyczące tego, jak można uzyskać jeszcze dokładniejszą adaptację do mierzonego koloru zęba, np. poprzez mieszanie kolorów (w VITA SYSTEM 3D-MASTER).	✓	-
... precyzyjne wyznaczanie koloru uzupełnień ceramicznych wg kolornika VITA classical A1–D4 i VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	-
... korzystanie z oprogramowania VITA Assist i aplikacji VITA mobileAssist+ App, w celu komunikacji i tworzenia dokumentacji koloru zębów.	✓	-
... wyświetlanie wartości Lab i LCh.	✓	-
Obsługa	Przycisk pomiarowy, wyświetlacz dotykowy	Przycisk pomiarowy
Zasilanie	Akumulator (wtyczka sieciowa)	Baterie 2x AA



VITA Assist i VITA mobileAssist +

Profesjonalna komunikacja i dokumentacja kolorów uzębienia dla gabinetu i pracowni.


Oprogramowanie VITA Assist bazujące na systemie Windows profesjonalnie dokumentuje i zarządza przypadkami klinicznymi oraz informacjami o kolorze zębów. VITA Assist integruje wyniki pomiarów VITA Easyshade V z cyfrowymi zdjęciami pacjentów i oferuje dodatkowe narzędzia do edycji obrazu, a także szeroki zakres funkcji komentarzy. Baza danych pozwala zarządzać przypadkami klinicznymi pacjentów i skutecznie wymieniać informacje między gabinetem i laboratorium.



Dzięki praktycznej aplikacji VITA mobileAssist+ dane z VITA Easyshade V można bezprzewodowo przysyłać do aplikacji, łączyć ze zdjęciem pacjenta i wysyłać pocztą elektroniczną. Wszystkie istotne informacje dotyczące koloru zębów oraz zdjęcie pacjenta mogą być wysyłane ze smartfona lub tabletu.



Dopasowane rozwiązania do procesu technologicznego

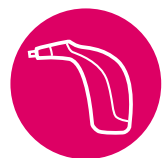

Wyznaczanie koloru zębów

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1–D4, VITA Bleachedshades, VITA Bleachedguide 3D-MASTER, VITA Toothguide 3D-MASTER z Bleached Shades



CAD/CAM

VITABLOCS, VITA YZ, VITA ENAMIC, VITA SUPRINITY PC



Charakteryzacja

VITA AKZENT Plus farbki / glazury
VITA AKZENT LC



Proces napalania

VITA VACUMAT 6100 M,
VITA SMART.FIRE ADVANCED



Polerowanie

VITA CERAMICS Polishing Set /
VITA Polish Cera Paste



Cementowanie

VITA ADIVA Solutions



Chętnie udzielamy dalszej pomocy.

Pomoc Hotline Sprzedaż-Obsługa

Telfon +49 7761 562-884
Faks +49 7761 562-299
od 8.00 do 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Infolinia VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Pomoc techniczna Hotline

Telfon +49 7761 562-222
Faks +49 7761 562-446
od 8.00 do 17.00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Należy przestrzegać wskazówek

Nasze produkty należy używać zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Przed użyciem produktu, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy dany produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania. Odpowiedzialność z naszej strony jest wykluczona, gdy produkt przetwarzany jest w połączeniu z niekompatybilnymi lub nieautoryzowanymi materiałami i urządzeniami innych producentów, które mogą spowodować szkody. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww. zestawu. Publikacja niniejszej broszury produktu: 2025-04 Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące produkty posiadają oznaczenia: VITA Easyshade® V posiada znak CE zgodnie z dyrektywą UE 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. VITA Easyshade® LITE jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2014/30/WE i 2011/65/WE. W tym dokumencie wszystkie wymienione produkty/systemy innych producentów posiadają zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich producentów.

Referencje

Badania przeprowadzone w firmie VITA R&D

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Resort badań i rozwoju
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Niemcy
dr. Berit Gödiker, kierowniczka projektów VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Szczegółowe dane testów:

Patrz dokumentacja naukowo-techniczna
VITA Easyshade® V i **VITA Easyshade® LITE**
Download via www.vita-zahnfabrik.com



Dalsze informacje dotyczące **VITA Easyshade® V**
proste skanowanie kodu QR
www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHADE_V



VITA Easyshade® V

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

