

**Ultra schnell.
Ultra einfach.**



VITA ENAMIC®

Schleifen. Polieren. Fertig.

Der CAD/CAM Rohling aus einzigartigem PICN-Material – für zuverlässige Ergebnisse, effiziente Workflows und minimalinvasive Versorgung in nur einer Sitzung.



CAD/CAM

VITA ENAMIC®

Für ultra effiziente Workflows.

VITA ENAMIC ermöglicht eine fertige Restauration in weniger als 40 Minuten!

Vom digitalen Scan bis zur finalen Eingliederung – effizient, wirtschaftlich, sofort versorgt.

VITA ENAMIC im Materialvergleich*



> 25 % Zeitersparnis vs. Lithiumdisilikat

> 30 % Zeitersparnis vs. Zirkon

VITA ENAMIC



Lithiumdisilikat



Zirkon



Minuten zur fertigen Restauration



- Vorbereitung und Design
- Materialabhängige Fertigung
- Finalisierung/Eingliederung

* Vergleich basierend auf öffentlich zugänglichen Herstellerangaben und publizierten Referenzdaten (z. B. Schleif- und Ofenzeiten); modellhafte Ableitung der Prozesszeiten.

Effizient & wirtschaftlich.

Vom digitalen Scan bis zur finalen Eingliederung in nur einer Sitzung. Zeitsparend, Kostensenkend ohne zusätzliche Prozessschritte – sofort versorgt.

Ohne Brennprozess.

Schlank im Workflow, ohne Brennen, für hohe Produktivität und planbare Abläufe.

Minimaler Eingriff. Leicht gemacht.

Unterstützt den Erhalt natürlicher Zahnsubstanz – mit der VITA ENAMIC PICN-Netzwerkstruktur ultra einfach realisiert.


Minimal invasiv. Maximal effizient.

Weniger Eingriff. Mehr Erhalt.


Maximale Schonung der natürlichen Zahnschubstanz – durch präzise und dünn ausschleifbare Restaurationen ab nur 0,2 – 0,6 mm. Die einzigartige Netzwerkstruktur von VITA ENAMIC ermöglicht hochstabile Versorgung mit minimalem Eingriff.

Moderne Zahnmedizin bedeutet heute mehr als reine Versorgung. Sie bedeutet Verantwortung gegenüber der natürlichen Zahnstruktur des Patienten. Jede erhaltene Zahnschubstanz trägt dazu bei, die langfristige Stabilität und Vitalität des Zahns zu bewahren. Für Patienten bedeutet das: weniger Verlust gesunder Substanz, eine schonendere Behandlung und natürlich ästhetische Ergebnisse, die langfristig überzeugen.

VITA ENAMIC

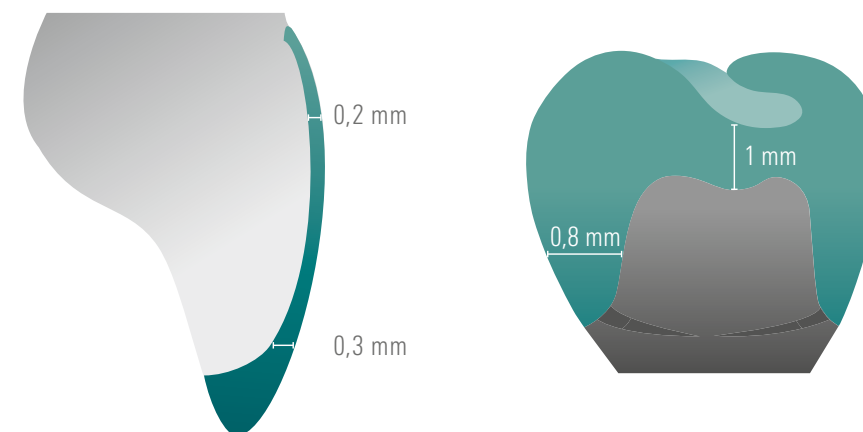


Traditionelle Keramik

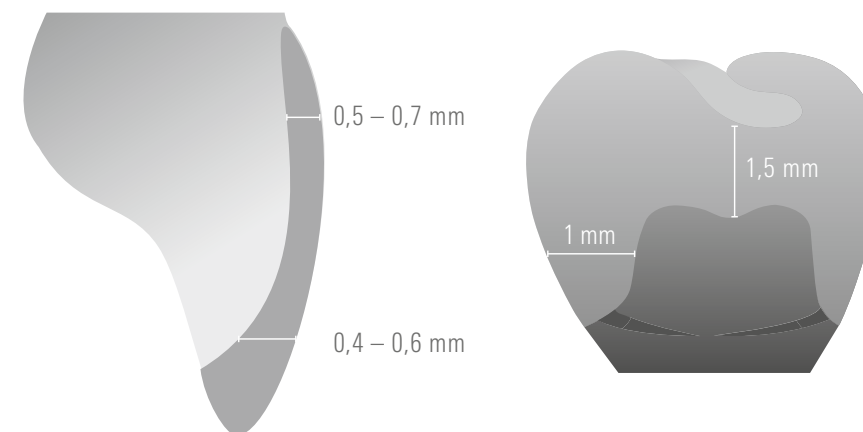

PICN: Polymer-Infiltrated Ceramic Network.

PICN – eine Klasse für sich.

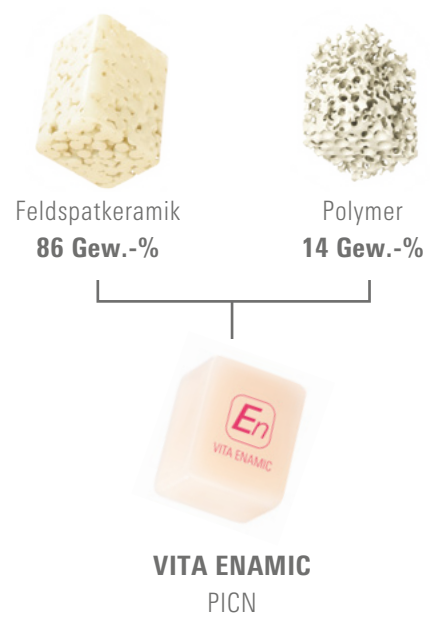


Das Polymer-Infiltrated Ceramic Network mit biomimetischem Verhalten.

Ein Feldspatkeramik-Block als Fundament. Unter Druck und Hitze mit Polymer durchdrungen. Zwei Netzwerke. Nahtlos verbunden. Keine Mischung. Echte Struktur.


Eine Materialarchitektur, die anders funktioniert. Das Ergebnis: eine kontrollierte Balance aus Festigkeit und Elastizität.

Vorteile im Überblick

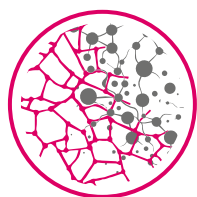

PICN-Struktur

Die Materialarchitektur schafft ein ausgewogenes Zusammenspiel von Festigkeit und Elastizität.

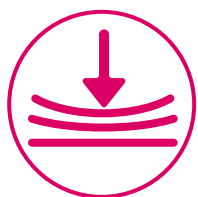

Dentinähnliche Elastizität

Stoßdämpfender Puffereffekt, reduziert Abrieb am Antagonisten und bietet ein natürliches Kaugefühl.



Ohne Brennprozess

Schleifen, polieren, finalisieren – ganz einfach ohne zusätzliches Brennen.



Minimalinvasiv

Maximale Schonung der natürlichen Zahnschubstanz – durch präzise und dünn ausschleifbare Restaurationen ab nur 0,2 – 0,6 mm.



Studienbelege
hier einsehen



Portfolio-Übersicht.

VITA ENAMIC®

Die passende Transluzenz für viele Indikationen.

Der monochromatische CAD/CAM Block ist in drei Transluzenzstufen erhältlich: T, HT und ST. Dadurch lässt sich die Ästhetik gezielt an unterschiedliche klinische Anforderungen anpassen.

Besonders VITA ENAMIC ST überzeugt mit einer natürlichen Lichtwirkung und eignet sich ideal für hochästhetische Inlays, Onlays und Tabletops im Praxisalltag.

VITA ENAMIC® multiColor

Natürliche Farbverlauf. Direkt aus dem Block.

Der integrierte Farbverlauf sorgt für eine natürliche Tiefenwirkung ganz ohne zusätzliche Bemalung oder Individualisierung.

So entstehen hochästhetische Restaurationen schnell, effizient und mit minimalem Aufwand.

VITA classical A1-D4® Farben							
Varianten	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	C1
VITA ENAMIC HT High Translucent monochromatisch							

NEU* Geometrien:
VITA ENAMIC:
EM-14: 12 x 14 x 18
EM-10: 8 x 10 x 15
VITA ENAMIC multiColor:
EMC-14: 12 x 14 x 18
EMC-16: 18 x 16 x 18

*erhältlich ab Herbst 2026

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben										
Varianten	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
VITA ENAMIC ST Super Translucent monochromatisch										
VITA ENAMIC HT High Translucent monochromatisch										
VITA ENAMIC HT multiColor High Translucent multichromatisch										

Beste Lösungen im Prozess.

Zahnfarbbestimmung

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE oder VITA Farbskalen



CAD/CAM

VITA ENAMIC



Konditionierung

VITA ADIVA CERA-ETCH



Charakterisierung

VITA AKZENT LC



Individualisierung

VITA VM LC flow



Politur

VITA ENAMIC Polishing Set /
VITA Polish Hybrid Paste



Befestigung

VITA ADIVA Luting Solutions



Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Hotline Vertriebs-Support

Phone +49 7761 562-890
Fax +49 7761 562-233
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Technische Hotline

Phone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 07.26

Mit der Herausgabe dieser Produktbroschüre verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vitazahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen

die Kennzeichnung **CE 0124**: VITA ENAMIC®

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.


Referenzen

Interne Untersuchungen, VITA F&E:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung und Entwicklung
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Dr. Berit Gödiker, Projektleiterin VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Detaillierte Testdaten:

Siehe Technisch-Wissenschaftliche
Dokumentation VITA ENAMIC
Download via www.vita-zahnfabrik.com

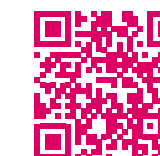

Für weitere Informationen zu VITA ENAMIC
einfach den QR-Code scannen
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/de/enamic>

Rx only



VITA ENAMIC®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

