

Ultrarrápido. Ultrasencillo.



VITA ENAMIC®

Fresar. Pulir. Listo.

La pieza en bruto CAD/CAM del exclusivo material PICN: resultados fiables, flujos de trabajo eficientes y restauraciones mínimamente invasivas en una sola sesión.



CAD/CAM

VITA ENAMIC®

Para crear flujos de trabajo ultraeficientes.

¡VITA ENAMIC permite tener lista una restauración en menos de 40 minutos!

Desde el escaneo digital hasta la colocación final: restauración eficiente, rentable e inmediata.

VITA ENAMIC en comparación con otros materiales*



> 25 % de ahorro de tiempo frente al disilicato de litio

> 30 % de ahorro de tiempo frente al circonio

VITA ENAMIC



Disilicato de litio



Circonio



Minutos para tener la restauración terminada



■ Preparación y diseño

■ Confección en función del material

■ Acabado/colocación

* Comparación basada en datos del fabricante puestos a disposición del público y datos de referencia publicados (p. ej., tiempos de fresado y de cocción); derivación de los tiempos de proceso a partir de modelos.

Eficiente y rentable.

Desde el escaneo digital hasta la colocación final en una sola sesión. Ahorra tiempo y reduce costes sin pasos de proceso adicionales: restauración inmediata.

Sin proceso de cocción.

Flujo de trabajo racionalizado, sin cocción, para conseguir una alta productividad y procesos planificables.

Intervención mínima. Fácilmente.

Favorece la preservación de la sustancia dental natural en un proceso ultrasencillo gracias a la matriz PICN de VITA ENAMIC.


Mínima invasividad. Máxima eficiencia.

Menos intervención. Más preservación.


Máxima conservación de la sustancia dental natural, gracias a las restauraciones fresables con precisión y con un grosor reducido a partir de solo 0,2–0,6 mm. La exclusiva matriz de VITA ENAMIC posibilita restauraciones altamente estables con una intervención mínima.

Hoy en día, la odontología moderna va más allá de la simple restauración. Significa responsabilidad frente a la estructura dental natural del paciente. Toda sustancia dental conservada contribuye a preservar la estabilidad y vitalidad del diente a largo plazo. Para los pacientes, esto se traduce en una menor pérdida de sustancia sana, un tratamiento más respetuoso y resultados con una estética natural que convencer a largo plazo.

VITA ENAMIC

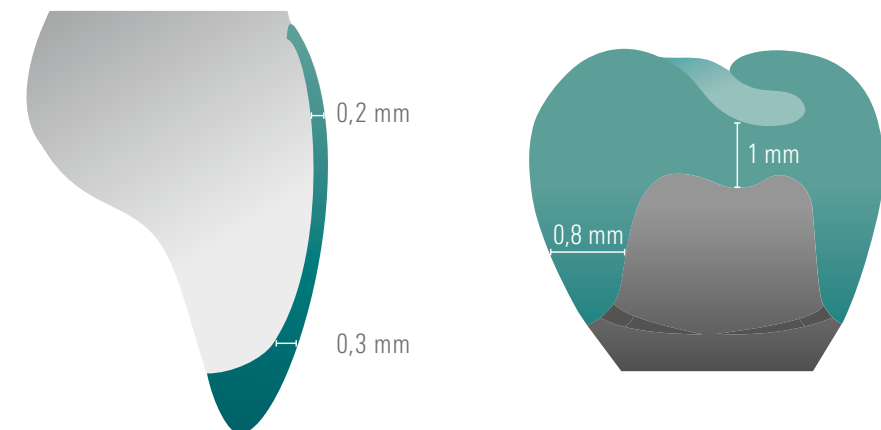

Cerámica convencional

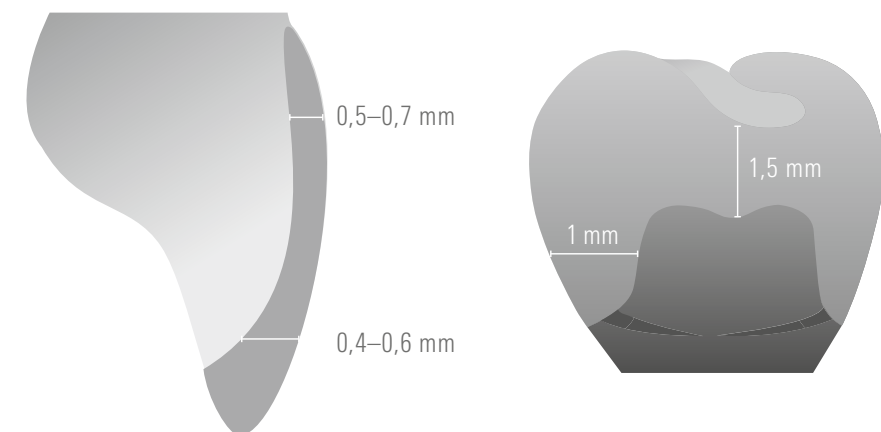

PICN: Polymer-Infiltrated Ceramic Network.

PICN: una categoría aparte.




La “Polymer-Infiltrated Ceramic Network” (PICN)
Red de Cerámica Infiltrada con polímero.

Un bloque de cerámica de feldespato como base.
Interpenetrado con polímero bajo presión y calor.
Dos matrices. Perfectamente unidas.
Sin mezcla. Una auténtica matriz.


Una arquitectura de material que funciona de otra manera.
El resultado: un equilibrio controlado entre resistencia y elasticidad.

Principales ventajas

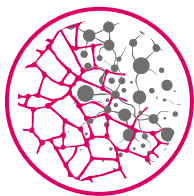

Matriz de PICN

La arquitectura del material crea una combinación equilibrada de resistencia y elasticidad.

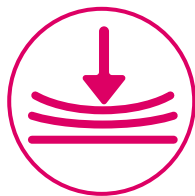

Elasticidad similar a la de la dentina

El efecto tampón amortiguador reduce el desgaste en el antagonista y proporciona una sensación de masticación natural.



Sin proceso de cocción

Fresar, pulir y acabar: con total sencillez y sin cocción adicional.



Mínima invasividad

Máxima conservación de la sustancia dental natural, gracias a las restauraciones fresables con precisión y con un grosor reducido a partir de solo 0,2-0,6 mm.



Consultar los estudios acreditativos





Sinopsis de la gama.

VITA ENAMIC®

La translucidez adecuada para numerosas indicaciones.

El bloque CAD/CAM monocromático está disponible en tres niveles de translucidez: T, HT y ST. Esto permite adaptar selectivamente la estética a distintos requisitos clínicos.

Sobre todo, VITA ENAMIC ST destaca por un efecto lumínico natural y resulta idóneo para inlays, onlays y carillas oclusales de gran estética en el día a día de la clínica.

VITA ENAMIC® multiColor

Transición cromática natural. Directamente desde el bloque.

La transición cromática integrada proporciona un efecto de profundidad natural, sin necesidad alguna de maquillaje o personalización

adicional. Esto permite crear restauraciones altamente estéticas de manera rápida, eficiente y con un esfuerzo mínimo.

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®										
Variantes	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
VITA ENAMIC ST Super Translucent monocromática										
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromática										
VITA ENAMIC T Translucent monocromática										
VITA ENAMIC HT multiColor High Translucent multicromático										

Colores VITA classical A1-D4®							
Variantes	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	C1
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromática							

NOVEDAD* Geometrías:
VITA ENAMIC:
EM-14: 12 x 14 x 18
EM-10: 8 x 10 x 15
VITA ENAMIC multiColor:
EMC-14: 12 x 14 x 18
EMC-16: 18 x 16 x 18

*Disponible a partir del otoño de 2026

Soluciones óptimas en el proceso.

Determinación del color dental

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE o guías de colores VITA



CAD/CAM

VITA ENAMIC



Acondicionamiento

VITA ADIVA CERA-ETCH



Caracterización

VITA AKZENT LC



Personalización

VITA VM LC flow



Pulido

VITA ENAMIC Polishing Set /
VITA Polish Hybrid Paste



Fijación

VITA ADIVA Luting Solutions



Estamos a su disposición para ayudarle.

Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839
Asistencia técnica EE. UU.:
+1 888-249-1640
info@vitnorthamerica.com

Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778
Asistencia técnica Canadá:
+1 800-324-6224



Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrecto. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 07.26

Con la publicación de este folleto de producto pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vitazahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124: VITA ENAMIC®**

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Referencias

Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Investigación y Desarrollo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)
Dra. Berit Gödiker, directora de proyectos de I+D de VITA,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Datos de ensayo detallados:

Véase la documentación científico-técnica de VITA ENAMIC
Descarga desde www.vita-zahnfabrik.com

Rx only



Para más información sobre VITA ENAMIC,
simplemente escanee el código QR
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/es/enamic>



VITA ENAMIC®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

