

**Ultra rapide.
Ultra simple.**



VITA ENAMIC®

Usinage. Polissage. Terminé.

Le bloc CFAO en matériau PICN unique en son genre, pour des résultats fiables, des flux de travail efficaces et des restaurations mini-invasives en une seule séance.



VITA ENAMIC®

Pour des flux de travail ultra efficaces.

VITA ENAMIC permet d'obtenir une restauration prête à poser en moins de 40 minutes !


De la numérisation à la pose définitive : une solution efficace, économique et immédiate.

VITA ENAMIC : comparaison des matériaux*



**> 25 % de gain de temps
vs disilicate de lithium**

> 30 % de gain de temps vs zircone

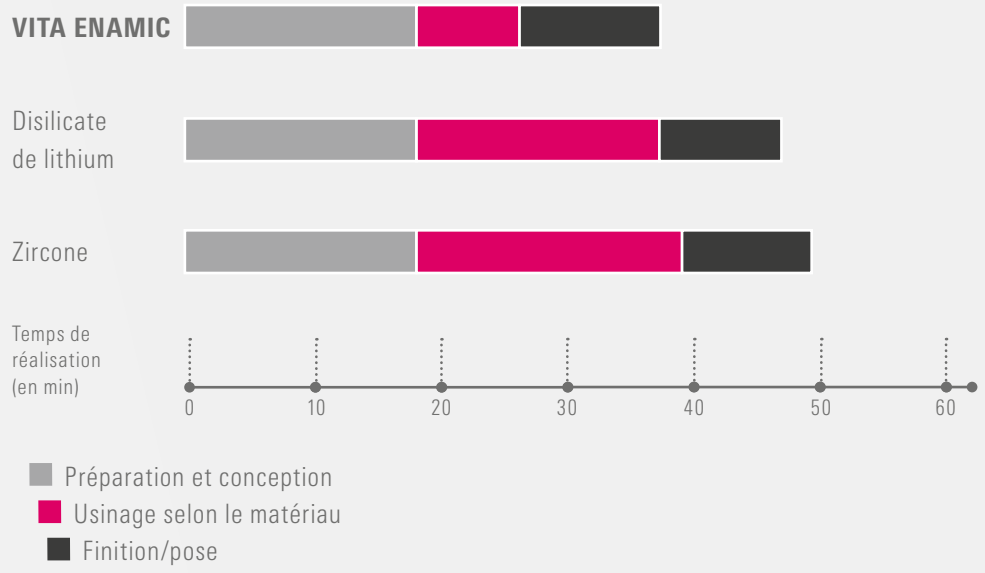

* Comparaison fondée sur les données publiques des fabricants et données de référence publiées (par exemple : temps d'usinage et de cuisson) ; estimation théorique des durées des processus.

Efficace et économique.

De la numérisation à la pose définitive en une seule séance. Gain de temps, réduction des coûts sans étapes supplémentaires – restauration immédiate.

Sans processus de cuisson.

Un flux de travail allégé, sans cuisson, pour une productivité élevée et des processus prévisibles.

Intervention minimale. Facile.

Contribue à la préservation de la substance dentaire naturelle – un objectif ultra simple à atteindre grâce à la structure en réseau PICN VITA ENAMIC.


Mini-invasif. Efficacité maximale.

Intervention réduite. Meilleure préservation.


Préservation maximale de la substance dentaire naturelle – grâce à des restaurations précises pouvant être usinées sur des épaisseurs de seulement 0,2 à 0,6 mm. La structure réticulaire unique de VITA ENAMIC permet de réaliser des restaurations très stables avec une intervention minimale.

Aujourd'hui, la dentisterie moderne va bien au-delà de la simple restauration. Elle implique une responsabilité vis-à-vis de la structure dentaire naturelle du patient. Chaque partie de la substance dentaire préservée contribue à maintenir la stabilité et la vitalité de la dent à long terme. Pour les patients, cela signifie : moins de perte de substance saine, un traitement plus doux et, bien sûr, des résultats esthétiques convaincants à long terme.

VITA ENAMIC

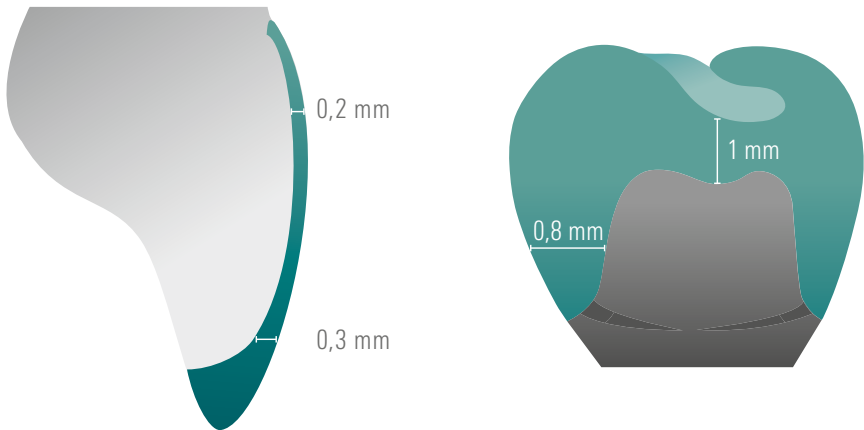

Céramique classique

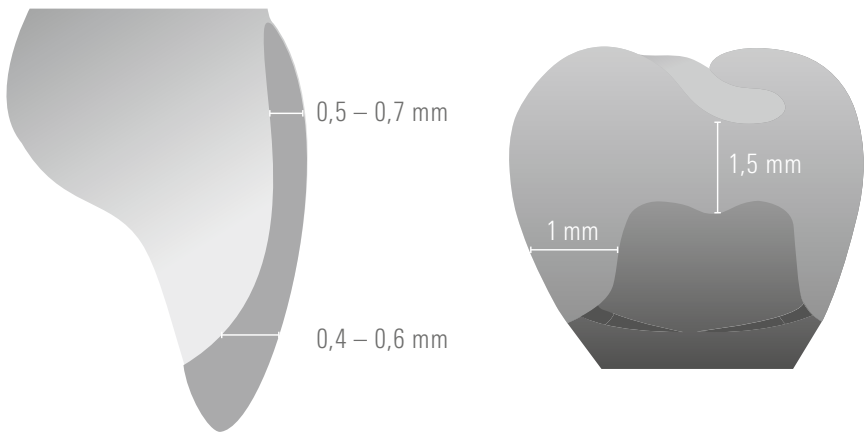

PICN : Polymer-Infiltrated Ceramic Network.

PICN – une classe à part.




Le réseau céramique imprégné de polymère (PICN - Polymer-Infiltrated Ceramic Network) présentant un comportement biomimétique.

Un bloc de céramique feldspathique comme base. Imprégné de polymère sous pression et à haute température. Deux réseaux. Parfaitement interconnectés. Pas de mélange. Une véritable structure.


Une architecture du matériau qui fonctionne autrement. Le résultat : un équilibre maîtrisé entre la résistance et l'élasticité.

Aperçu des avantages

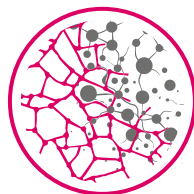

Structure PICN

L'architecture du matériau crée une interaction équilibrée entre résistance et élasticité.

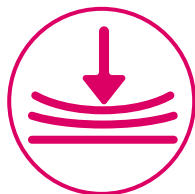

Élasticité similaire à celle de la dentine

Effet amortisseur, réduit l'abrasion de la dent antagoniste et procure une sensation de mastication naturelle.



Sans processus de cuisson

Usinage, polissage, finition – en toute simplicité, sans cuisson supplémentaire.



Mini-invasif

Préservation maximale de la substance dentaire naturelle – grâce à des restaurations précises pouvant être usinées sur des épaisseurs de seulement 0,2 à 0,6 mm.



Consulter les études cliniques ici





Présentation de la gamme.

VITA ENAMIC®

La translucidité adaptée à de nombreuses indications.

Le bloc CFAO monochrome est disponible en trois niveaux de translucidité : T, HT et ST. Cela permet d'adapter l'esthétique de manière ciblée aux différentes exigences cliniques. VITA ENAMIC ST se

distingue notamment par son rendu lumineux naturel et convient parfaitement à la réalisation d'inlays, d'onlays et de tablespots hautement esthétiques dans la pratique quotidienne.

VITA ENAMIC® multiColor

Dégradé de teintes naturel. Directement à partir du bloc.

Le dégradé de teintes intégré confère un effet de profondeur naturel, sans nécessiter de maquillage supplémentaire ni d'individualisation.

C'est ainsi que l'on obtient des restaurations d'une grande esthétique, rapidement, efficacement et avec un minimum d'efforts.

Teintier VITA SYSTEM 3D-MASTER®										
Variantes	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
VITA ENAMIC ST Super Translucent Monochrome										
VITA ENAMIC HT High Translucent Monochrome										
VITA ENAMIC T Translucent Monochrome										
VITA ENAMIC HT multiColor High Translucent Polychrome										

Teintier VITA classical A1-D4®							
Variantes	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	C1
VITA ENAMIC HT High Translucent Monochrome							

NOUVEAU*

Géométries :

VITA ENAMIC :

EM-14 : 12 x 14 x 18

EM-10 : 8 x 10 x 15

VITA ENAMIC multiColor :

EMC-14 : 12 x 14 x 18

EMC-16 : 18 x 16 x 18

*Disponible à partir de l'automne 2026

Des solutions adaptées en cours de processus.

Détermination de la teinte

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE ou teintiers VITA



CFAO

VITA ENAMIC



Conditionnement

VITA ADIVA CERA-ETCH



Caractérisation

VITA AKZENT LC



Personnalisation

VITA VM LC flow



Polissage

VITA ENAMIC Polishing Set /
VITA Polish Hybrid Paste



Assemblage

VITA ADIVA Luting Solutions



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.

Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis :
+1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Ligne d'assistance technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada :
+1 800-324-6224



N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre conformément à la notice d'utilisation. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est utilisé en combinaison avec des matériaux ou des équipements d'autres fabricants non compatibles ou non autorisés, entraînant un dommage. VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 07/26

Cette nouvelle édition de la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vitazahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage **CE 0124 VITA ENAMIC®**

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

Rx only

Références

Recherches internes, VITA R&D :

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Département de recherche et développement
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Allemagne
Dr Berit Gödiker, directrice de projet R&D VITA,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Données de test détaillées

Voir documentation technico-scientifique VITA ENAMIC
Téléchargement via www.vita-zahnfabrik.com



Pour plus informations sur VITA ENAMIC,
il suffit de scanner le code QR.
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/fr/enamic>



VITA ENAMIC®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

