

**Ultra rapido.
Ultra semplice.**



VITA ENAMIC®

Molaggio. Lucidatura. Fatto.

Il grezzo CAD/CAM nello straordinario materiale PICN per risultati affidabili, workflow efficienti e riabilitazioni minimamente invasive in un'unica seduta.



CAD/CAM

VITA ENAMIC®

Per workflow ultra efficienti.

VITA ENAMIC consente di ottenere un restauro completo in meno di 40 minuti!


Dalla scansione digitale fino all'inserimento finale: una riabilitazione efficiente, economica, immediata.

VITA ENAMIC a confronto*



Risparmio di tempo del > 25% vs. Disilicato di litio

Risparmio di tempo del > 30% vs. Zirconio

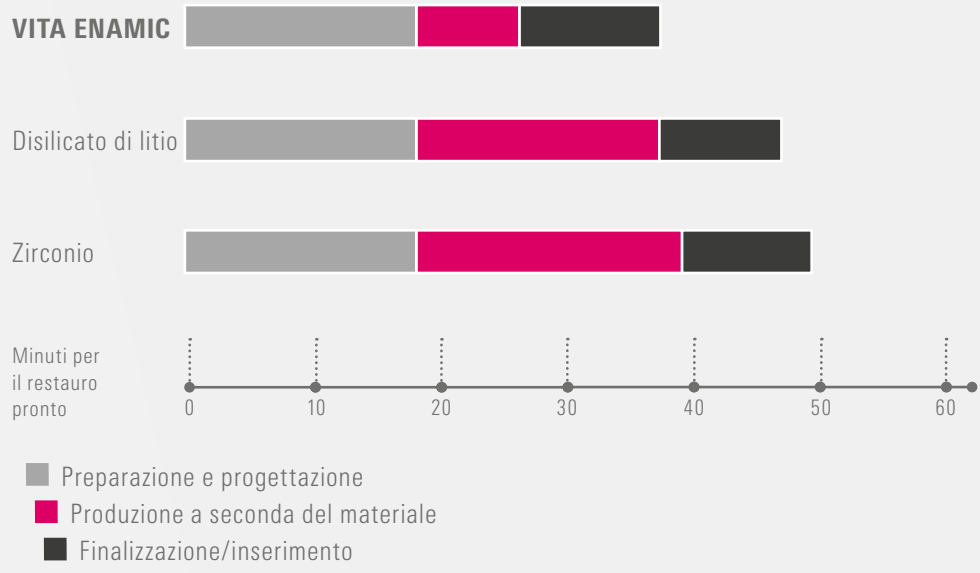

* Confronto basato sui dati dei produttori pubblicamente accessibili e su dati di riferimento pubblicati (es. tempi di molaggio e cottura in forno); stima derivata dei tempi di processo.

Efficiente ed economico.

Dalla scansione digitale fino all'inserimento finale in una sola seduta. Riduzione di tempi e costi senza ulteriori fasi di processo, per una riabilitazione subito pronta.

Senza processo di cottura.

Workflow ottimizzato senza cottura per un'elevata produttività e procedure prevedibili.

Minimo intervento. Semplicità di esecuzione.

Supporta la conservazione della sostanza naturale del dente in modo assolutamente semplice con la struttura a reticolo in PICN di VITA ENAMIC.


Minimamente invasivo. Massima efficienza.

Minore intervento. Maggiore conservazione.


Massima conservazione della sostanza naturale del dente per mezzo di restauri precisi e con capacità di molaggio a spessori molto ridotti a partire da soli 0,2–0,6 mm. La struttura unica a reticolo di VITA ENAMIC permette di ottenere restauri dall'elevata stabilità con un intervento minimo.

La moderna odontoiatria è molto più di una semplice riabilitazione. Significa responsabilità verso la struttura naturale dei denti del paziente. Tutta la sostanza dentale naturale conservata contribuisce a preservare nel lungo periodo la stabilità e la vitalità del dente. Per i pazienti ciò significa una minore perdita di sostanza dentale sana, un trattamento più delicato e risultati estetici naturali, convincenti a lungo.

VITA ENAMIC

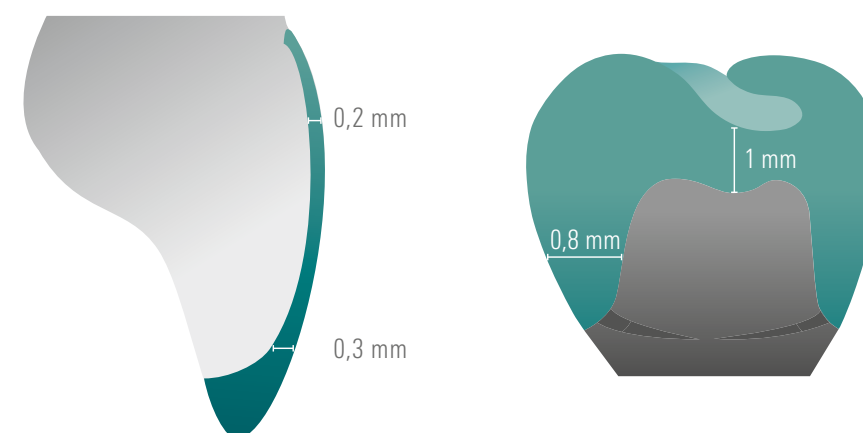

Ceramica tradizionale

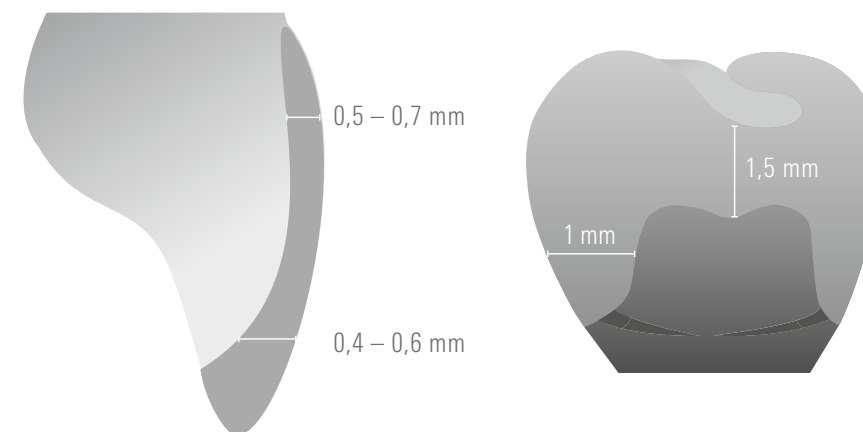

PICN: Polymer-Infiltrated Ceramic Network.

PICN: una categoria a parte.




Il materiale PICN (Polymer-Infiltrated Ceramic Network) dal comportamento biomimetico.

Un blocchetto in ceramica feldspatica come base. Integrato con polimero grazie all'azione di pressione e calore. Due reticoli. Perfettamente legati l'uno all'altro. Non una miscela. Ma una vera struttura.


Una struttura di materiale che funziona diversamente. Il risultato: un equilibrio controllato di rigidità ed elasticità.

I vantaggi a colpo d'occhio

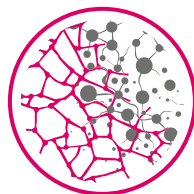

Struttura PICN

La struttura del materiale crea una combinazione equilibrata di rigidità ed elasticità.

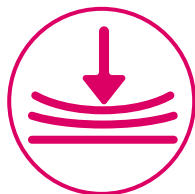

Elasticità simile a quella della dentina

Garantisce un effetto ammortizzante per assorbire gli urti, un'usura ridotta degli antagonisti e una sensazione naturale di masticazione.



Senza processo di cottura

Molaggio, lucidatura e finalizzazione in modo assolutamente semplice, senza cottura aggiuntiva.



Minimamente invasivo

Massima conservazione della sostanza naturale del dente per mezzo di restauri precisi e con capacità di molaggio a spessori molto ridotti a partire da soli 0,2–0,6 mm.



Visualizzare qui
le prove degli studi



Panoramica del portfolio.

VITA ENAMIC®

La traslucenza adatta per diverse indicazioni.

Il blocchetto monocromatico CAD/CAM è disponibile in tre livelli di traslucenza, T, HT e ST, che consentono di adattare in modo mirato l'estetica del materiale alle diverse esigenze cliniche. In particolare,

VITA ENAMIC ST convince grazie a effetti di luce naturali ed è ideale per inlay, onlay e tavolati occlusali di elevata resa estetica nella quotidianità dello studio.

VITA ENAMIC® multiColor

Gradiente cromatico naturale. Direttamente dal blocchetto.

Il gradiente cromatico integrato garantisce un effetto di profondità naturale senza necessità di ulteriore verniciatura o individualizzazione.

In questo modo è possibile realizzare restauri altamente estetici in modo rapido, efficiente e con il minimo sforzo.

Colori VITA classical A1-D4®							
Varianti	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	C1
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromatico							

NOVITA*

Geometrie:
VITA ENAMIC:
EM-14: 12 x 14 x 18
EM-10: 8 x 10 x 15
VITA ENAMIC multiColor:
EMC-14: 12 x 14 x 18
EMC-16: 18 x 16 x 18

*Disponibile dall'autunno 2026


Colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER®										
Varianti	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
VITA ENAMIC ST Super Translucent monocromatico										
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromatico										
VITA ENAMIC HT multiColor High Translucent multicromatico										

Soluzioni ottimali di processo.



Determinazione del colore dei denti

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE o scale colori VITA

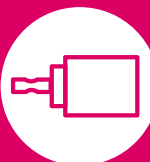

CAD/CAM

VITA ENAMIC



Condizionamento

VITA ADIVA CERA-ETCH



Caratterizzazione

VITA AKZENT LC



Individualizzazione

VITA VM LC flow



Lucidatura

VITA ENAMIC Polishing Set /
VITA Polish Hybrid Paste



Fissaggio

VITA ADIVA Luting Solutions



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884

Fax +49 7761 562-299

Dalle 8:00 alle 17:00 CET

info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839

Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640

info@vitanorthamerica.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222

Fax +49 7761 562-446

Dalle 8:00 alle 17:00 CET

info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778

Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di imperizia nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 07/26

Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito www.vitazahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE 0124** VITA ENAMIC®

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only  

Riferimenti

Studi interni, VITA R&S:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dott. Berit Gödiker, Capoprogetto VITA R&S,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati:

Consultare la documentazione tecnico-scientifica
VITA ENAMIC
Download dal sito www.vita-zahnfabrik.com



Per ulteriori informazioni su VITA ENAMIC
scansionare il QR-Code.
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/enamic>



VITA ENAMIC®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

