

**Ultra veloce.
Ultra semplice.**



VITA ENAMIC®

Molaggio. Lucidatura. Fatto.

Il grezzo CAD/CAM nello straordinario materiale PICN per risultati affidabili, workflow efficienti e riabilitazioni minimamente invasive in un'unica seduta.



CAD/CAM

VITA ENAMIC®

Per workflow ultra efficienti.

VITA ENAMIC consente di ottenere un restauro completo in meno di 40 minuti!


Dalla scansione digitale fino all'inserimento finale: una riabilitazione efficiente, economica, immediata.

VITA ENAMIC a confronto*



Risparmio di tempo del > 25% vs. Disilicato di litio

Risparmio di tempo del > 30% vs. Zirconio

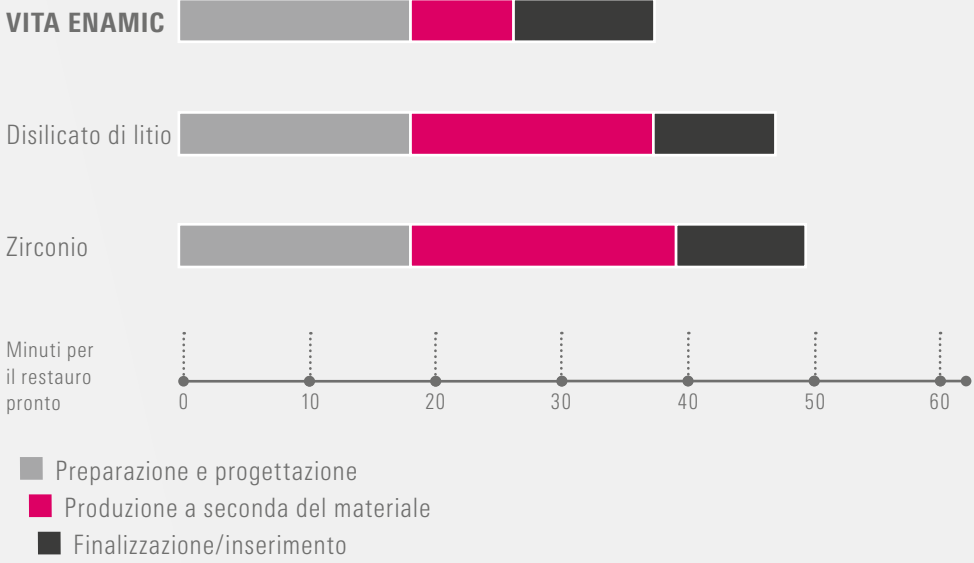

* Confronto basato sui dati dei produttori pubblicamente accessibili e su dati di riferimento pubblicati (es. tempi di molaggio e cottura in forno); stima derivata dei tempi di processo.

Efficiente ed economico.

Dalla scansione digitale fino all'inserimento finale in una sola seduta. Riduzione di tempi e costi senza ulteriori fasi di processo, per una riabilitazione subito pronta.

Senza processo di cottura.

Workflow ottimizzato senza cottura per un'elevata produttività e procedure prevedibili.

Minimo intervento. Semplicità di esecuzione.

Supporta la conservazione della sostanza naturale del dente in modo assolutamente semplice con la struttura a reticolo in PICN di VITA ENAMIC.


Minimamente invasivo. Massima efficienza.

Minore intervento. Maggiore conservazione.


Massima conservazione della sostanza naturale del dente per mezzo di restauri precisi e con capacità di molaggio a spessori molto ridotti a partire da soli 0,2–0,6 mm. La struttura unica a reticolo di VITA ENAMIC permette di ottenere restauri dall'elevata stabilità con un intervento minimo.

La moderna odontoiatria è molto più di una semplice riabilitazione. Significa responsabilità verso la struttura naturale dei denti del paziente. Tutta la sostanza dentale naturale conservata contribuisce a preservare nel lungo periodo la stabilità e la vitalità del dente. Per i pazienti ciò significa una minore perdita di sostanza dentale sana, un trattamento più delicato e risultati estetici naturali, convincenti a lungo.

VITA ENAMIC

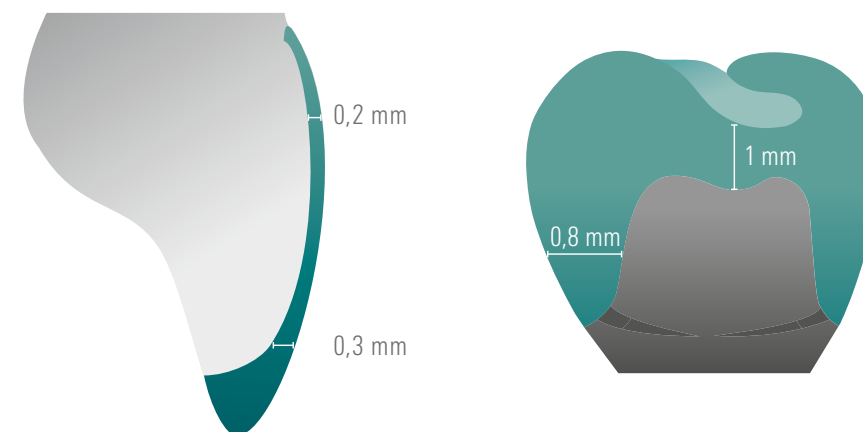

Ceramica tradizionale

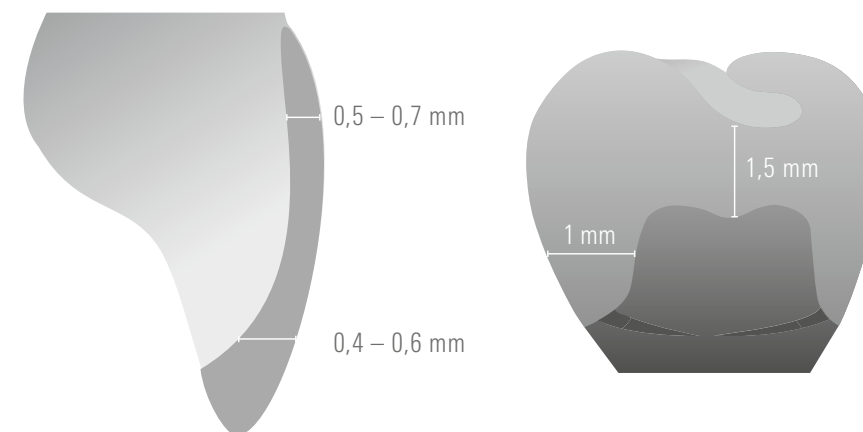

PICN: Polymer-Infiltrated Ceramic Network.

PICN: una categoria a parte.




Il materiale PICN (Polymer-Infiltrated Ceramic Network) dal comportamento biomimetico.

Un blocchetto in ceramica feldspatica come base. Integrato con polimero grazie all'azione di pressione e calore. Due reticoli. Perfettamente legati l'uno all'altro. Non una miscela. Ma una vera struttura.


Una struttura di materiale che funziona diversamente. Il risultato: un equilibrio controllato di rigidità ed elasticità.

I vantaggi a colpo d'occhio

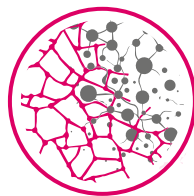

Struttura PICN

La struttura del materiale crea una combinazione equilibrata di rigidità ed elasticità.

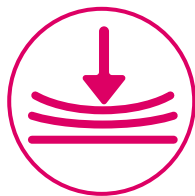

Elasticità simile a quella della dentina

Garantisce un effetto ammortizzante per assorbire gli urti, un'usura ridotta degli antagonisti e una sensazione naturale di masticazione.



Senza processo di cottura

Molaggio, lucidatura e finalizzazione in modo assolutamente semplice, senza cottura aggiuntiva.



Minimamente invasivo

Massima conservazione della sostanza naturale del dente per mezzo di restauri precisi e con capacità di molaggio a spessori molto ridotti a partire da soli 0,2–0,6 mm.



Visualizzare qui
le prove degli studi



Panoramica del portfolio.

VITA ENAMIC®

La traslucenza adatta per diverse indicazioni.

Il blocchetto monocromatico CAD/CAM è disponibile in tre livelli di traslucenza, T, HT e ST, che consentono di adattare in modo mirato l'estetica del materiale alle diverse esigenze cliniche. In particolare,

VITA ENAMIC ST convince grazie a effetti di luce naturali ed è ideale per inlay, onlay e tavolati occlusali di elevata resa estetica nella quotidianità dello studio.

VITA ENAMIC® multiColor

Gradiente cromatico naturale. Direttamente dal blocchetto.

Il gradiente cromatico integrato garantisce un effetto di profondità naturale senza necessità di ulteriore verniciatura o individualizzazione.

In questo modo è possibile realizzare restauri altamente estetici in modo rapido, efficiente e con il minimo sforzo.

Colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER®										
Varianti	0M1	1M1	1M2	2M1	2M2	2M3	3M1	3M2	3M3	4M2
VITA ENAMIC ST Super Translucent monocromatico										
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromatico										
VITA ENAMIC T Translucent monocromatico										
VITA ENAMIC HT multiColor High Translucent multicromatico										

Colori VITA classical A1-D4®							
Varianti	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	C1
VITA ENAMIC HT High Translucent monocromatico							

NOVITA* Geometrie:
VITA ENAMIC:
EM-14: 12 x 14 x 18
EM-10: 8 x 10 x 15
VITA ENAMIC multiColor:
EMC-14: 12 x 14 x 18
EMC-16: 18 x 16 x 18


*Disponibile dall'autunno 2026

Soluzioni ottimali di processo.



Determinazione del colore dei denti

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE o scale colori VITA

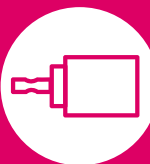

CAD/CAM

VITA ENAMIC



Condizionamento

VITA ADIVA CERA-ETCH



Caratterizzazione

VITA AKZENT LC



Individualizzazione

VITA VM LC flow



Lucidatura

VITA ENAMIC Polishing Set /
VITA Polish Hybrid Paste



Fissaggio

VITA ADIVA Luting Solutions



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884

Fax +49 7761 562-299

Dalle 8:00 alle 17:00 CET

info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839

Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640

info@vitanorthamerica.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222

Fax +49 7761 562-446

Dalle 8:00 alle 17:00 CET

info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778

Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di imperizia nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 07/26

Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile sul sito www.vitazahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE 0124** VITA ENAMIC®

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only  

Riferimenti

Studi interni, VITA R&S:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dott. Berit Gödiker, Capoprogetto VITA R&S,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati:

Consultare la documentazione tecnico-scientifica
VITA ENAMIC
Download dal sito www.vita-zahnfabrik.com



Per ulteriori informazioni su VITA ENAMIC
scansionare il QR-Code.
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/enamic>



VITA ENAMIC®

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

