Información para los pacientes:
El camino seguro hacia una prótesis limpia


Apreciado/a paciente:
Hoy ha recibido su nueva prótesis dental, por lo que queremos agradecerle la confianza depositada en nosotros. Su prótesis dental, confeccionada individualmente para usted, favorece su sonrisa natural y le brinda una gran comodidad de uso. Para que pueda disfrutar de ella durante mucho tiempo y a fin de mantener su salud bucal, le aconsejamos que aplique las siguientes pautas para su cuidado. Limpieza diaria, paso a paso:



1. Enjuague

Limpie a fondo la prótesis por la mañana y por la noche con agua corriente tibia. De este modo eliminará los restos de alimentos y evitará la formación de depósitos.
👉 Consejo: Limpie la prótesis sobre un lavabo lleno de agua o en el que haya colocado previamente una toalla. Esto protegerá la prótesis en caso de que se le resbale de las manos durante la limpieza.

2. Limpieza suave

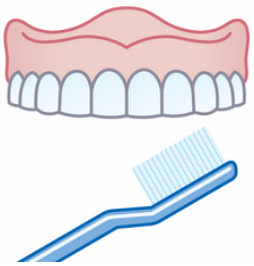

A continuación, limpie cuidadosamente la prótesis con:

- un cepillo dental suave
- y jabón líquido o detergente.

Por último, aclárela bien. Zonas que requieren especial atención:

- Espacios interdentales
- Transiciones hacia la encía
- Zonas de difícil acceso

3. Limpieza a fondo



Tras la limpieza diaria, recomendamos guardar la prótesis en un vaso con agua tibia (sin tableta limpiadora). Esto ayuda a mantener húmeda la prótesis, lo que preserva sus propiedades materiales y evita que se fragilice.

4. Antes del uso



Antes de ponerse la prótesis, vuelva a enjuagarla bien con agua corriente.

Qué debe evitar

Para prolongar al máximo la vida útil de su prótesis, evite lo siguiente:


- Cepillos dentales duros: pueden dañar la superficie.
- Pasta dentífrica con partículas abrasivas: raya la prótesis.
- Pasta dentífrica blanqueadora: deja la superficie mate.
- Agua muy caliente o hirviendo: puede deformar la prótesis.
- Productos de limpieza agresivos (p. ej., ácidos o disolventes)
- Manipulación inadecuada: evite caídas, especialmente en lavabos duros.

👉 Consejo: Limpie la prótesis siempre sobre una superficie blanda (agua o toalla).

Indicaciones importantes sobre el uso

- Limpie la prótesis a diario y regularmente.
- A ser posible, enjuáguela brevemente también tras las comidas.
- Conserve la prótesis en agua cuando no la utilice.
- Si observa cambios (p. ej. un mal ajuste, molestias), diríjase a su odontólogo.

Nota para prótesis parciales flexibles

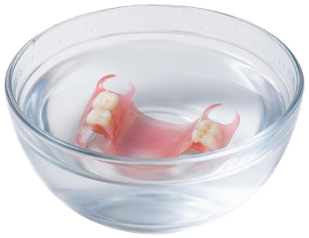

Antes de la colocación:

Sumerja la prótesis en agua templada (máx. 40 °C) durante un máximo de 5 minutos.

Esto facilita la colocación y protege los ganchos.

La limpieza periódica, así como el control por su odontólogo, contribuyen en gran medida a preservar a largo plazo la función y la estética de su prótesis.

Le deseamos que disfrute de su prótesis durante mucho tiempo.

10208SP –0726_V04

Su persona de

Reciba un cordial saludo de su odontólogo / protésico

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Alemania
Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299
Hotline: Tel. +49 7761 562-222· Fax +49 7761 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik