Informations destinées aux patients :
Bien nettoyer votre prothèse amovible


Chère patiente, cher patient,
Vous venez de recevoir votre nouvelle prothèse dentaire. Merci de votre confiance !
Votre prothèse dentaire a été fabriquée sur mesure pour vous et met en valeur votre sourire naturel tout en vous offrant un grand confort. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre prothèse amovible et de préserver votre santé bucco-dentaire, veuillez respecter les consignes d'entretien suivantes. Nettoyage quotidien – Étape par étape :

1. Rinçage



Nettoyez soigneusement votre prothèse amovible matin et soir sous l'eau courante tiède. Vous éliminez ainsi les résidus alimentaires et évitez la formation de dépôts.
👉 Conseil : il est préférable de nettoyer votre prothèse amovible au-dessus d'un lavabo rempli d'eau ou d'y déposer une serviette. Cela permet de protéger votre prothèse amovible si elle vous glisse accidentellement des mains pendant le nettoyage.

2. Nettoyage en douceur

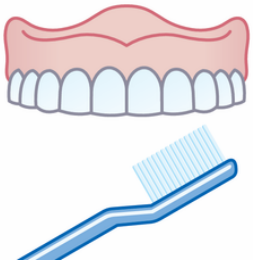

Nettoyez ensuite soigneusement la prothèse amovible avec

- une brosse à dents à poils souples
- et du savon liquide ou du liquide vaisselle

Rincez ensuite soigneusement la prothèse amovible. Veillez tout particulièrement :

- aux espaces interdentaires
- aux jonctions avec la gencive
- aux zones difficiles d'accès

3. Nettoyage en profondeur



Après le nettoyage quotidien, nous vous recommandons de conserver votre prothèse amovible dans un verre d'eau tiède (sans pastille nettoyante). Cela permet de maintenir la prothèse amovible humide et, par conséquent, de préserver les propriétés du matériau et d'éviter sa fragilisation.

4. Avant de la porter



Avant de la mettre en place, rincez à nouveau soigneusement la prothèse amovible sous l'eau courante.

Ce qu'il faut éviter

Pour garantir une longue durée de vie à votre prothèse amovible, veuillez respecter les consignes suivantes :


- Les brosses à dents à poils durs – peuvent endommager la surface
- Dentifrice contenant des particules abrasives – provoque des rayures
- Dentifrice blanchissant – rend la surface terne
- De l'eau très chaude ou bouillante – peut déformer la prothèse amovible
- Produits de nettoyage agressifs (par exemple, acides ou solvants)
- Mauvaise manipulation – évitez les chutes, en particulier dans les lavabos en matériau dur

👉Conseil : nettoyez toujours votre prothèse amovible sur une surface souple (de l'eau ou une serviette).

Remarques importantes concernant l'utilisation

- Nettoyez votre prothèse amovible tous les jours et régulièrement
- Si possible, rincez-la brièvement après les repas
- Lorsque vous ne portez pas votre prothèse amovible, conservez-la dans de l'eau
- En cas de modification (par exemple, une instabilité, une gêne), consultez votre dentiste.

Remarque concernant les prothèses amovibles partielles flexibles

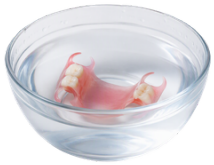

Avant la mise en place : Plongez votre prothèse amovible dans de l'eau tiède (max. 40 °C) pendant 5 minutes maximum. Cela facilite la mise en place et préserve les crochets.

Un nettoyage régulier ainsi que les contrôles effectués par votre dentiste contribuent de manière significative à préserver à long terme la fonctionnalité et l'esthétique de votre prothèse amovible. Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre nouvelle prothèse !

10208FR –0726_V04

Votre interlocuteur

Avec les recommandations de votre dentiste/prothésiste dentaire

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Allemagne
Tél. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299
Hotline : Tél. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik