

Des solutions toujours plus performantes pour **une prothèse optimale**



VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

Avec les SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA, vous bénéficiez d'une esthétique naturelle, d'une qualité de matériaux fiable et d'une diversité adaptée à la pratique.



Aperçu des gammes de dents

Fabriquer des prothèses amovibles de haute qualité.

La PROTHÈSE PREMIUM VITA vous offre des dents en résine composite MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) de haute qualité avec un jeu de formes et de couleurs naturel et vivant pour des prothèses amovibles complètes, partielles et implanto-portées convaincantes et très esthétiques.



Planifier et résoudre les cas les plus divers.

La PROTHÈSE UNIVERSELLE VITA vous propose depuis des décennies des dents en résine composite MRP (Microfiller Reinforced Polymermatrix) éprouvées, avec un vaste jeu de formes et de couleurs pour des résultats convaincants dans les cas les plus divers.



Un meilleur rapport esthétique/prix.

La PROTHÈSE STANDARD VITA vous propose des dents en polymère HR (hautement réticulé) pour la réalisation simple et fiable de restaurations standard solides.



VITA VIONIC SOLUTIONS : Passez au niveau supérieur

Passez au niveau supérieur : Nous vous accompagnons sur la voie de la prothèse amovible numérique. Qu'il s'agisse d'impression, de fraisage ou d'une combinaison intelligente des deux, choisissez le flux de travail qui vous convient le mieux.





Antérieures

VITAPAN EXCELL®

La génération de dents antérieures haute qualité avec un brillant jeu de formes, de couleurs et de lumière pour une prothèse naturelle et esthétique.

Morphologie

- Géométrie vivante des dents pour des résultats brillants
- Caractéristiques distinctes des bords libres pour une vitalité particulière
- Grandes crêtes palatines pour une structure papillaire/interdentaire parfaite

Caractéristiques spécifiques

- Texture de surface variée pour une diffusion et une réflexion naturelles de la lumière. Un simple polissage permet d'adapter très facilement la structure de la surface à l'âge du patient
- Stratification 3D des teintes pour un dégradé harmonieux des couleurs

Recommandé entre autres pour

- prothèses amovibles complètes et partielles
- prothèses implanto-portées

Concept de prothèse/montage

Pour tous les montages lingualés, ainsi que la plupart des concepts occlusaux bilatéralement équilibrés, par exemple selon Gysi, le professeur Dr A. Gerber, APF/TiF ou ABC.

Couleurs disponibles

- 29 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER
0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3
- 16 couleurs VITA classical A1–D4

Vraiment naturelle

Le grand assortiment de couleurs et de formes offre personnalisation et liberté de choix absolues.

Vraiment vivantes

La transmission lumineuse équilibrée conduit à une dynamique de la lumière fidèle à la nature et permet un meulage fin.

Vraiment forte

Les dents VITA Premium en résine composite MRP de qualité supérieure sont synonymes de longévité, d'un polissage facilité et d'esthétique naturelle.

Aperçu des formes

Antérieures maxillaires							
 Ovale	041  10,1 7,4	043  9,7 7,9	045  9,7 8,4	047  10,3 8,6	048  11,1 9,1	049  11,2 9,0	051  12,3 9,3
	T42  9,5 7,7	T44  9,7 8,1	T46  11,1 8,2	T47  11,2 8,5	T48  10,5 8,7	T50  11,6 9,2	T51  11,8 9,4
 Triangulaire	T54  12,7 9,8						
	R45  9,9 8,2	R47  11,2 8,6	R49  11,6 8,9				
 Rectangulaire	S46  10,3 8,5	S48  9,1 8,7	S52  10,7 9,6				
	S46  10,3 8,5	S48  9,1 8,7	S52  10,7 9,6				
 Carrée							

Antérieures mandibulaires							
L33  9,0 5,0	L35  9,9 5,2	L37  9,4 5,5	L37LC  11,4 5,6	L39  9,8 6,0	L41  10,8 6,1		

Combinaisons recommandées

VITAPAN EXCELL® Antérieures		VITAPAN® LINGOFORM Postérieures		VITAPAN EXCELL® Antérieures		VITAPAN® LINGOFORM Postérieures	
Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm
041 41,3	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	T47 46,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
043 43,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	T48 48,1	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
045 45,1	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1	T50 50,0	L39 39,0	24L 35,8	24L 36,4
047 47,3	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1	T51 51,4	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
048 48,1	L37/ L37LC 37,3/ 37,4	22L 31,6	22L 32,1	T54 54,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4
049 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8	R45 45,4	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
051 51,4	L41 41,2	24L 35,8	24L 36,4	R47 47,0	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
T42 42,0	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	R49 49,1	L39 39,0	23L 34,2	23L 34,8
T44 44,1	L33 33,2	21L 30,1	21L 30,7	S46 46,3	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1
T46 46,2	L35 35,3	22L 31,6	22L 32,1	S48 47,9	L37 37,3	22L 31,6	22L 32,1
				S52 52,1	L41 41,2	23L 34,2	23L 34,8

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.



Postérieures

VITAPAN® LINGOFORM

Les dents postérieures de haute qualité allient fonction et esthétique de manière exceptionnelle.

Morphologie

- Géométrie des dents universelle aux dimensions linguo-vestibulaires naturelles
- Conception multifonctionnelle de la surface de mastication avec contacts centrés définis

Recommandé entre autres pour

- prothèses amovibles complètes et partielles
- prothèses implanto-portées

Pour tous les montages lingualés, ainsi que la plupart des concepts occlusaux bilatéralement équilibrés, par exemple selon Gysi, le professeur Dr A. Gerber, APF/TiF ou ABC.

p. ex. selon Gysi, selon le Pr Dr A. Gerber, selon APF/TiF, selon ABC

Particulièrement adapté pour

concepts d'occlusion lingualée

Couleurs disponibles

- 29 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER
0M1, 0M2, 0M3, 1M1–5M3
- 16 couleurs VITA classical A1–D4

Vraiment fonctionnelle

Les zones occlusales conçues de manière fonctionnelle favorisent l'alignement statique optimal de la prothèse, préservent la substance et offrent un grand confort de port.

Vraiment simple

VITAPAN LINGOFORM convient à tous les concepts de montage, y compris l'occlusion lingualée. Le principe VITA Easy Centric permet un montage simple et intuitif, avec une détermination automatique de la centrique.

Vraiment esthétique

La stratification multiple et la morphologie de surface identique à la nature créent un comportement de réflexion de la lumière vivant et harmonieux.

Postérieures

21L	22L	23L	24L	
9,6	10,0	10,9	11,0	
10,0	10,2	10,8	11,2	



Antérieures

VITA PHYSIODENS®

Les dents antérieures haut de gamme pour des prothèses particulièrement fidèles aux détails.

Morphologie

- Géométrie des dents pleine et naturelle pour une très bonne intégration dans l'arcade résiduelle
- Caractéristiques incisives vivantes et courbure labiale naturelle
- Large collet dentaire pour une structure papillaire/interdentaire parfaite
- Volume (basal) élevé pour masquage de structures secondaires ou tertiaires

Caractéristiques spécifiques

- Saturation exacte pour un bon masquage de structures tertiaires
- Texture de surface aux facettes variées, pour un jeu de lumière naturel
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de teintes naturel

Recommandé entre autres pour

- Prothèses amovibles complètes
- Prothèses partielles
- Prothèses implanto-portées
- Restaurations télescopiques et coniques
- Travaux d'attachements et stellite

Particulièrement adapté pour

BLP (Prothèse BIO-Logique) selon le Dr E. End

Couleurs disponibles

- **28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER**
OM1, OM3, 1M1–5M3
- **16 couleurs VITA classical A1–D4**
A1–D4

Personnalisation

Un choix varié de couleurs et de teintes dans un design riche en détails - sur le modèle de la nature.

Ingéniosité

Design dentaire pour une fonction maximale, polyvalent et flexible.

Qualité supérieure

Matériau MRP de haute qualité, fonctionnalité et esthétique répondant aux exigences les plus élevées.

Aperçu des formes



*) Forme(s) uniquement disponible(s) dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Combinaisons recommandées

VITA PHYSIODENS® Antérieures		VITA PHYSIODENS® Postérieures		VITA PHYSIODENS® Antérieures		VITA PHYSIODENS® Postérieures	
Max./n° mm	Man./n° mm	Max./n° mm	Man./n° mm	Max./n° mm	Man./n° mm	Max./n° mm	Man./n° mm
01S 42,3	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7	T5M 46,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
02L 45,7	L2M 34,5	22E 32,9	22E 33,7	T6L 47,3	L5M 37,0	23E 33,5	23E 34,6
03M 47,2	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6	T7M 47,5	L7L 38,2	23E 33,5	23E 34,6
04L 49,2	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1	T8L 49,0	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
05L 50,1	L6L 38,2	24E 34,8	24E 36,1	T9L 49,6	L6L 38,2	25E 36,7	25E 37,3
06L 51,3	L8L 43,5	25E 36,7	25E 37,3				
T6S 41,0	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7	X1M 46,3	L3M 36,3	23E 33,5	23E 34,6
T2S 44,9	L2M 34,5	21E 30,5	21E 32,7	X2L 46,2	L4M 35,5	23E 33,5	23E 34,6
T1S 45,3	L1S 33,0	20E 29,4	20E 31,0	X3L 47,8	L5M 37,0	24E 34,8	24E 36,1
T3M 45,6	L3M 36,3	22E 32,9	22E 33,7	Z1S 44,1	L1S 33,0	21E 30,5	21E 32,7
T4M 45,6	L4M 35,5	22E 32,9	22E 33,7	Z2S 47,5	L5M 37,0	22E 32,9	22E 33,7

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.



Postérieures

VITA PHYSIODENS®

Dents postérieures haut de gamme entièrement anatomiques inspirées du modèle naturel

Morphologie

- Géométrie haut de gamme des dents grâce à une dimension dentaire naturelle
- Relief de surfaces occlusales/cuspides à l'image de l'anatomie naturelle

Caractéristiques spécifiques

- Volume (basal) important
- Angle cuspidien maxillaires : > 30°
- Conception de sillons fidèle

Recommandé entre autres pour

- Prothèses amovibles complètes
- Prothèses partielles
- Prothèses implanto-portées
- Restaurations télescopiques et coniques
- Travaux d'attachements et stellite

Particulièrement adapté pour

BLP (Prothèse BIO-Logique) selon le Dr E. End

Couleurs disponibles

- 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 16 couleurs VITA classical A1–D4 A1–D4

Morphologie naturelle

Une restauration simple de la fonction masticatoire naturelle grâce aux surfaces de mastication à la morphologie naturelle.

Recherche du centrage intuitif

Montage facile avec recherche automatique de la centrée grâce à une conception occlusale adaptée.

Excellente durabilité

Qualité fiable habituelle de VITA grâce à une résistance élevée et une grande stabilité à l'abrasion.

Postérieures

20E	21E	22E	23E	24E	25E
8,9	9,5	9,5	11,1	11,8	11,2
8,3	8,7	9,0	9,8	9,8	9,5



Antérieures

VITAPAN®

Dents antérieures universelles en
résine composite MRP conformes à l'âge.

Morphologie

- Géométrie des dents conforme à l'âge pour prothèses amovibles complètes /partielles
- Caractéristiques du bord libre plates et abrasées comme au naturel
- Collet dentaire étroit

Caractéristiques spécifiques

- Excellent équilibre entre translucidité et saturation
- Structure régulière de la surface avec caractéristiques de vieillissement
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Recommandé entre autres pour

- Prothèses amovibles complètes/partielles
- Prothèses gérontologiques
- Prothèses en cas d'espace limité

Pour tous les montages lingualés, ainsi que la plupart des concepts occlusaux bilatéralement équilibrés,

par. ex. selon Gysi, selon le Pr Dr A. Gerber, selon APF/TiF, selon ABC

Couleurs disponibles

- 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER
0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4
A1–D4 (sans B1)

Adaptabilité à l'âge

Des formes variées permettent de réaliser des prothèses amovibles complètes/partielles adaptées à l'âge.

Rendu naturel des couleurs

Dégradé de couleur 3D intégré du collet à l'émail.

Efficacité

Homogénéité des matériaux et stabilité des arêtes optimales.

VITAPAN
EXCELL®

VITAPAN®
NGOFORM

VITA
PHYSIODENS®

VITAPAN®

VITA MIFT®

DIGITAL DENTURES

Aperçu des formes



Ovale



Triangulaire



Rectangulaire



Carrée

Antérieures maxillaires						
013 9,5 7,9	025 9,9 8,1	034 9,7 8,0	035 9,8 8,0	043 9,4 8,2	086 9,9 8,9	097 11,5 9,0
098* 11,8 9,0	099 12,5 9,8					
T36* 10,1 8,1	T53 9,2 8,1	T56 10,0 8,3	T66 10,2 8,3	T67 10,0 8,4	T76* 10,4 8,2	T77* 10,6 8,5
T88* 10,6 8,7	T98 10,8 9,3	T99 11,1 9,0				
X13 9,3 7,7	X66 10,1 8,9	X77 10,1 8,5	X87 10,1 8,9	X96 10,0 9,3	X99 12,7 9,4	
Z51 8,8 8,3	Z61 8,7 8,2	Z74 9,6 8,8	Z84 9,4 8,7	Z85 9,7 8,6	Z97 10,2 9,5	

Antérieures mandibulaires							
L3 8,0 5,9	L5* 9,2 5,2	L5L 9,9 5,1	L7* 8,7 5,4	L9 9,0 5,6	L11* 9,1 5,7	L13 8,7 5,6	L15 12,2 5,7
L4* 8,3 4,7	L8 9,8 5,9	L10 9,2 5,9	L12 9,8 6,2	L14 10,9 6,1			

*) Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

Combinaisons recommandées

Pour prothèses partielles et combinées

VITAPAN antérieure en association avec VITAPAN CUSPIFORM postérieure

Pour prothèse gérontologique

VITAPAN antérieure en association avec VITAPAN SYNOFORM postérieure

VITAPAN® Antérieures		VITAPAN® CUSPIFORM Postérieures		VITAPAN® SYNOFORM Postérieures	
Max./n° mm	Man./n° mm	Max./n° mm	Man./n° mm	Max./n° mm	Man./n° mm
013 41,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
025 42,8	L3 33,4	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
034 43,3	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
035 43,2	L3 33,4	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
043 43,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
086 47,1	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
097 49,2	L8 38,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
098 48,1	L13 37,0	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
099 52,5	L14 41,7	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Vous trouverez d'autres combinaisons sur la page suivante. >

Combinaisons recommandées

VITAPAN® Antérieures		VITAPAN® CUSPIFORM Postérieures		VITAPAN® SYNOFORM Postérieures	
Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm
T36 43,7	L4 32,7	40C 28,1	40C 29,5	10S 29,0	10S 30,5
T53 44,6	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T56 44,4	L5 35,3	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
T66 44,6	L5 35,3	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T67 45,1	L4 32,7	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T76 45,9	L7 36,2	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T77 46,2	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
T88 47,1	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
T98 50,5	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
T99 48,0	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4

Combinaisons recommandées

VITAPAN® Antérieures		VITAPAN® CUSPIFORM Postérieures		VITAPAN® SYNOFORM Postérieures	
Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm
X13 41,5	L4 32,7	41C 29,9	41C 31,3	11S 30,0	11S 31,9
X66 45,9	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X77 47,0	L11 36,9	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
X87 46,9	L11 36,9	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X96 50,0	L10 39,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
X99 50,6	L15 38,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4
Z51 44,6	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	13S 31,3	13S 33,9
Z61 45,5	L3 33,4	43C 31,0	43C 32,3	12S 31,1	12S 32,7
Z74 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z84 46,7	L9 36,1	42C 31,7	42C 33,4	12S 31,1	12S 32,7
Z85 47,5	L13 37,0	44C 32,8	44C 34,6	14S 33,1	14S 35,4
Z97 52,2	L12 41,0	45C 34,8	45C 36,3	14S 33,1	14S 35,4

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.



Morphologie naturelle

Une restauration simple de la fonction masticatoire naturelle grâce à la morphologie naturelle des surfaces de mastication.

Excellente durabilité

Grâce à une grande résilience et résistance à l'abrasion.

Efficacité

Grâce à l'homogénéité des matériaux et à la stabilité des arêtes optimales.

Postérieures

VITAPAN® CUSPIFORM

Dents postérieures universelles en résine composite MRP conformes à l'âge.

Morphologie

- Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace lingual
- Relief marqué de la surface occlusale/des cuspides pour une bonne recherche de la centrée et une intercuspitation confortable

Caractéristiques spécifiques

- Angle cuspidien maxillaire : environ de 23° à 28°
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Recommandé entre autres pour

- Prothèses complètes/partielles
- Prothèses en cas d'espace limité

Pour tous les concepts courants d'occlusion linguale et équilibrée

p. ex. selon Gysi, selon le Pr Dr A. Gerber, selon APF/TiF, selon ABC

Particulièrement adapté pour concepts d'occlusion vestibulaire

Couleurs disponibles

- 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M3, 1M1–5M3
- 15 couleurs VITA classical A1–D4 (sans B1)

Postérieures

40C	41C*	42C*	43C	44C*	45C
7,8	8,4	8,3	8,5	9,1	9,4
7,6	8,0	8,0	8,1	8,7	8,6

*) Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.



Postérieures

VITAPAN SYNOFORM®

Dents postérieures universelles graciles en résine composite MRP avec relief plat de la surface occlusale.

Morphologie

- Géométrie des dents mince et gracile pour un large espace lingual
- Relief des surfaces occlusales/cuspides plat et réduit pour une grande liberté de mouvement

Caractéristiques spécifiques

- Angle cuspidien des maxillaires : environ 6°
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel

Recommandé entre autres pour

- Prothèses amovibles complètes et partielles
- Prothèses implanto-portées
- Prothèses gériatologiques

Pour toutes les montages linguales, ainsi que la plupart des concepts occlusaux bilatéralement équilibrés,

p. ex. selon Gysi, selon le Pr Dr A. Gerber, selon APF/TiF, selon ABC

Couleurs disponibles

- 15 couleurs VITA classical A1–D4
A1–D4 (sans B1)

Pour prothèse gériatologique

Reconstitution simple de la fonction de mastication grâce à un relief occlusal plat pour une grande liberté de mouvement.

Excellente durabilité

Grande résilience et résistance à l'abrasion.

Efficacité

Homogénéité des matériaux et stabilité des arêtes optimales.

Postérieures					
10S	11S	12S	13S	14S	
7,5	7,8	8,7	8,3	9,3	
6,8	7,3	7,8	7,4	8,3	



Antérieures et postérieures

VITA MFT®

Une efficacité étonnante et une qualité convaincante.

Morphologie

Antérieures

- Géométrie dentaire universelle avec une morphologie naturelle
- Design incisal naturel et élégant

Postérieures

- Géométrie des dents universelle avec une dimension linguo-vestibulaire naturel
- Conception multifonctionnelle des surfaces de mastication avec des points de contact prédéfinis

Caractéristiques spécifiques

- Rapport émail-dentine équilibré pour un jeu de lumière naturel
- Texture de surface riche en nuances avec mamelons intégrés
- Structure stratifiée tridimensionnelle pour un dégradé de couleurs naturel
- Angle cuspidien maxillaire : environ de 15° à 20°

Recommandé entre autres pour

- Solutions standard solides pour prothèse amovible complète/partielle

Pour tous les montages lingualés ainsi que la plupart des concepts occlusaux bilatéralement équilibrés,

p. ex. selon Gysi, selon le Pr Dr A. Gerber, selon APF/TiF, selon ABC

Couleurs disponibles

- **16 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER**
(0M1, 0M2, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)
- **16 couleurs VITA classical A1-D4**

Gain de temps

Montage simple et efficace grâce au principe VITA Easy Centric. Convient à tous les concepts de montage courants.

Rentabilité

Dent artificielle multifonctionnelle et économique dans une grande variété de couleurs et de formes. Disponible en 16 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et 16 couleurs VITA classical A1-D4.

Sérénité

Des résultats fiables et rapides d'une qualité convaincante enthousiasment non seulement vous en tant qu'utilisateur, mais aussi vos patients.

Aperçu des formes

Antérieures maxillaires				
 Ovale	O40  10,0 7,5	O44  10,2 8,1	O49  11,8 9,0	
 Triangulaire	T41  9,4 7,5	T43  10,3 8,2	T46  10,2 8,5	T49  11,8 9,0
 Rectangulaire	R42  9,3 7,9	R45  10,3 8,2	R47  11,0 8,5	
 Carrée	S47  10,8 8,9	S50  12,0 9,2		
Antérieures mandibulaires				
	L33  9,0 4,8	L34  8,6 5,1	L37  9,8 5,5	L37LN*  9,8 5,5
		L40  10,5 6,1		
Postérieures				
	PU29 – PL29  9,0 9,5	PU31 – PL31  9,6 10,0	PU33 – PL33  10,3 10,6	

*) Géométrie de dents LN avec collet plus long.

Combinaisons recommandées

VITA MFT® Antérieures		VITA MFT® Postérieures	
Max./n°  mm	Man./n°  mm	Max./n°  mm	Man./n°  mm
O40 40,0	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
O44 43,9	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
O49 49,2	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
T41 40,5	L33 32,6	PU29 28,8	PL29 29,6
T43 43,3	L34 34,0	PU31 30,6	PL31 31,1
T46 46,1	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
T49 48,8	L40 39,5	PU33 33,0	PL33 33,6
R42 42,1	L34 34,0	PU29 28,8	PL29 29,6
R45 44,5	L37 36,8	PU31 30,6	PL31 31,1
R47 46,6	L37 36,8	PU33 33,0	PL33 33,6

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.



Bibliothèque de dents artificielles **VITA VIONIC®**

Gain de temps lors du montage prothétique grâce à sept concepts prédéfinis.


Bibliothèque de dents artificielles VITA VIONIC VIGO : sept concepts de montage prédéfinis sont disponibles pour la conception de prothèses amovibles complètes avec la dent artificielle VITA VIONIC VIGO. Les prothèses d'essayage monoblocs et les bases prothétiques peuvent ainsi être fabriquées rapidement et facilement à l'aide de systèmes de fraisage et d'impression 3D ouverts courants. La dent artificielle VITA VIONIC VIGO s'insère alors facilement et avec précision. Profitez de l'expertise VITA en matière de design dentaire et du grand choix de concepts de montage.

Bibliothèque de dents artificielles VITA VIONIC DIGITAL VIGO : la version étendue de la bibliothèque de dents artificielles VITA comprend en outre la fonction d'exportation des données STL des prothèses amovibles dans leur ensemble (prothèses d'essayage) ou séparément en éléments dentaires et en conception de la base prothétique. Les prothèses créées à l'aide des géométries dentaires multifonctionnelles peuvent être fraisées à partir de disques ou fabriquées au moyen d'une imprimante 3D, selon les préférences. VITA VIONIC® DIGITAL VIGO ouvre ainsi de nouvelles possibilités flexibles de travail numérique.



« Les bibliothèques de dents artificielles VITA VIONIC sont les seules au monde à contenir quatre concepts d'occlusion différents. À cela s'ajoutent deux variantes droites de montage en plus des variantes courbes. Ici, j'ai la possibilité unique de planifier et de fabriquer numériquement bien plus de 80 % des cas de mes patients ».

Urban Christen,
Cabinet de prothèse dentaire, Suisse

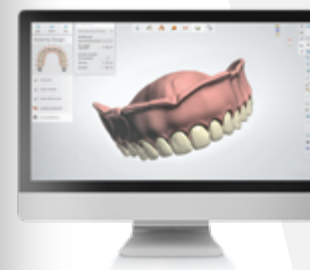

Flexibilité

Aide au montage numérique de prothèses amovibles partielles et complètes grâce à sept concepts pour toutes les classes d'occlusion. Réalisable aussi bien avec la dent artificielle VITA VIONIC VIGO qu'avec des restaurations fraisées ou imprimées.

Simple

Les propositions initiales prédéfinies minimisent la nécessité de retouches manuelles.

Rapide

Les prothèses amovibles peuvent être fabriquées rapidement et facilement à l'aide de nombreux systèmes de fraisage ouverts et d'impression 3D courants.

Une base de données. Toutes les possibilités.



« La bibliothèque de dents artificielles VITA VIONIC DIGITAL VIGO est fantastique. Elle nous fait gagner environ 15 minutes sur le temps de conception, ce qui n'est pas rien ! Avec la conception, nous créons la base d'un flux de travail prévisible et fluide. Nous recommandons à tous d'utiliser la bibliothèque VITA pour la conception des prothèses amovibles numériques ».

Frans Delfos
Cordent Group, Pays-Bas

Vos possibilités dans la conception de prothèses amovibles

Données dentaires multifonctionnelles : 7 concepts prothétiques & 4 classes d'occlusion réunis dans une seule base de données

Concepts prothétiques	Engrènement	Classe d'Angle
 Curved Set up vestibulaire  Lingual Curved Set up	 Occlusion inversée	 Classe d'Angle I
 Straight Set up vestibulaire  Lingual Straight Set up	 Occlusion normale	 Classe d'Angle II/1
 Occlusion inversée  Dutch Lingualized Occlusion		 Classe d'Angle II/2
 Pr Dr A. Gerber		 Classe d'Angle III

 Nouveaux concepts



VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Matériau d'impression 3D pour la fabrication de prothèses amovibles d'essayage.

Économique

Création rapide, économique en matériaux et en coûts de prothèses d'essayage fonctionnelles pour les prothèses amovibles partielles et complètes.

Facile à travailler

Vérification sans effort de l'adaptation, de la fonction, de l'occlusion et de la phonétique ainsi que bonne aptitude au polissage. Individualisation simple pour l'essayage esthétique possible.

Sans odeur et durable

Résine à faible odeur qui se distingue des autres produits du marché (Ø DLC 2 ans) par sa longue durée de conservation de 3 ans.



VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disque en PMMA haut de gamme pour la réalisation de bases prothétiques définitives.

Couleurs disponibles

- classic pink
- soft pink
- classic pink translucent
- dark pink

Géométries disponibles

Ø 98,5 mm / h 30 mm

Partenaire technique CAO pour les prothèses amovibles numériques VITA

- exocad GmbH
- 3Shape A/S

VITA VIONIC BASE DISC HI est disponible pour les systèmes

- Arum Dental (5x series)
- imes-icore GmbH (CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- vhf camfacture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)
- DGSHAPE/Roland DGA (DWX Linie)



Stable

Grande stabilité grâce à un matériau résistant aux chocs.

Précision

Excellente adaptation sur la crête.

Esthétique rose

Nouveau choix de couleurs gingivales.



VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT

Matériau d'impression 3D résistant aux chocs pour la fabrication de bases prothétiques définitives.

Passez au niveau supérieur de qualité en matière d'impression 3D avec le matériau d'impression résistant aux chocs pour bases prothétiques amovibles **VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT**. L'excellente résistance aux chocs du produit réduit le risque de rupture sous charge.

Outre le travail de rupture, une résistance à la flexion élevée et des valeurs de module d'élasticité optimisées assurent un profil de propriétés équilibré et constituent ainsi la base de restaurations prothétiques durables.

Couleurs disponibles
pink et pink translucents

Conditionnement disponible
Flacon de 1 kg

Durable

Les patients bénéficient de prothèses durables grâce à la haute résistance aux chocs du matériau, qui réduit le risque de rupture sous la charge. Une faible adhérence de la plaque dentaire contribue au confort de port.

Équilibré

Le profil équilibré des propriétés mécaniques est convaincant en ce qui concerne le travail à la rupture, la résistance à la flexion et le module d'élasticité.


Facilité de mise en oeuvre

Des temps d'impression courts, une faible rétraction et donc une grande précision d'ajustage sont autant d'arguments convaincants que la bonne aptitude au polissage.



Matériau résistant aux chocs testé

Charpy Test DIN EN ISO 179-1/1

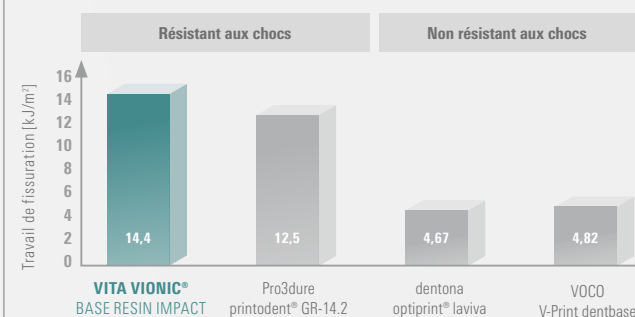

Source : Prüflabor polymerphys IK GmbH, Rapport N° LID_126612, LID_126614, LID_126615, LID_126618, 01/2025



Prothèse amovible numérique

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Matériau d'impression 3D pour la fabrication de bases prothétiques flexibles

La prothétique numérique offre aujourd'hui bien plus que des prothèses complètes : VITA VIONIC BASE RESIN FLEX permet de fabriquer des prothèses partielles flexibles pour une utilisation temporaire, avec précision, efficacité et confort. Insufflez une nouvelle légèreté dans votre quotidien au laboratoire. Fabriquez des restaurations rentables, de façon rapide et fiable. Le processus de fabrication numérique garantit un travail efficace et permet la production reproductible de plusieurs prothèses partielles en une seule impression. Le matériau flexible offre un grand confort et répond au souhait de nombreux patients en faveur de restaurations sans métal. Les variantes de couleurs transparentes laissent transparaître la teinte personnalisée de la gencive et contribuent ainsi à une esthétique naturelle. Autre avantage : les prothèses à crochets imprimées sont réparables et évolutives. Par rapport aux procédés d'injection classiques, elles sont également beaucoup plus faciles à polir.

Profitez de matériaux parfaitement adaptés les uns aux autres, dans la qualité bien connue de VITA. Faites confiance à des flux de travail sûrs, combinés à une multitude d'imprimantes et d'unités de post-polymérisation validées.

Consulter la liste de validation



Économique

Fabrication efficace, économe en matériaux et peu coûteuse de prothèses partielles flexibles pour une utilisation temporaire – avec une qualité reproductible et un gain de temps notable.

Confortable

Matériau flexible, sans métal, à l'esthétique naturelle et très confortable à porter. La couleur transparente laisse transparaître la teinte personnalisée des gencives, tout en conservant une prothèse réparabile et évolutive.

Simple

Des flux de travail sûrs grâce à la liaison chimique entre la base et les dents, une bonne usinabilité et un polissage haute brillance.



// Grâce à VITA VIONIC BASE RESIN FLEX, je peux concevoir et fabriquer des prothèses partielles plus rapidement, de façon plus précise et économique. Les patients apprécieront le confort et l'esthétique naturelle – pas de crochets métalliques, pas de compromis. Une innovation qui profite à tous. »

Darius Northey
All Smiles Denture Clinic, Australie

VITA VIONIC VIGO®

L'expert en prothèses amovibles complètes numériques.

VITA VIONIC VIGO est la dent « numérique » hautement esthétique pour les prothèses amovibles complètes. Grâce à la qualité VITA, une prothèse amovible fabriquée numériquement peut répondre aux mêmes exigences élevées qu'une prothèse analogique. Cela nécessite une dent qui soutient de manière optimale le processus de fabrication numérique tout en répondant aux attentes esthétiques élevées. La dent artificielle VITA VIONIC VIGO préfabriquée est donc directement prête à l'emploi sans préconditionnement, élimination de cire ou passage à la vapeur.

Conception de dents perfectionnée et fonction fiable



Dimensions de dent réduites, collets dentaires sablés



Conception basale sans contre-dépouille



Forme de collet conique-ovale avec protection anti-rotation



Easy-centric : engrènement automatique et guide de centrage

Forme naturelle – Jeu de couleurs fascinant

- Forme naturelle avec une texture à facettes et des crêtes palatines prononcées
- Dynamique lumineuse impressionnante grâce à la translucidité, au jeu de couleurs opalescentes et à la fluorescence naturelle

Couleurs et formes disponibles

- 7 couleurs VITA classical A1-D4 y compris une couleur éclaircie : 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, D3
- 8 formes pour dents antérieures du maxillaire, 4 pour la mandibule
- 4 formes de dents postérieures



Esthétique

Translucidité, fluorescence et opalescence sont combinées dans la dent artificielle VITA VIONIC VIGO stratifiée en trois dimensions pour une esthétique convaincante.

Qualité du matériau

Les propriétés mécaniques du matériau de la dent caractérisent VITA VIONIC VIGO comme une dent VITA Premium.

Fiabilité du processus

Grâce à la conception de la dent optimisée pour le flux de travail numérique, VITA VIONIC VIGO contribue à un gain de temps et d'efficacité.

Aperçu des formes



Ovale



Triangulaire



Rectangulaire

Antérieures maxillaires				
O43  10,7 7,9	O45  11,3 8,3			
T44  11,7 8,1	T46  11,6 8,2	T48  12,5 8,7	T50  12,9 9,2	
R47  10,7 8,6	R49  12,1 8,9			
Antérieures mandibulaires				
L33  8,9 4,9	L35  9,5 5,2	L37  10,0 5,5	L39  10,5 5,8	
Postérieures				
21L  9,2  10,0	22L  9,6  10,4	23L  10,3  11,3	24L  10,9  11,9	

Remarque : la dent artificielle VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.

Combinaisons recommandées

VITA VIONIC VIGO® Antérieures	Max./n° mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,8	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	Man./n° mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L37 37,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO® Postérieures	Max./n° mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	Man./n° mm	22L 32,6	23L 35,0	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31,0	21L 31,0	22L 32,6

Partenaires techniques de CAO pour VITA VIONIC

- 3shape A/S
- exocad GmbH

Partenaires techniques de CAO pour VITA VIONIC®

Systèmes

- imes-icore GmbH (CORiTEC-Serie),
- DGShape/Roland (DWS)
- Amann Girrbach AG (série Ceramill Motion, Ceramill Matik)
- vhf camfacture AG (séries K/S/Z/R)
- Sirona Dental Systems (inLab MC X5)

Logiciels

- MillBox, SUM3D Dental, hyperDENT Dental

Partenaires techniques d'impression 3D pour VITA VIONIC

- Rapid Shape GmbH (Rapid Shape-Serie), Formlabs Inc. (Form 2), Carbon3D Inc. (Carbon M2), NextDent B.V. (NextDent 5100)

Remarque : vous trouverez un aperçu actuel et complet des partenaires techniques, y compris les informations concernant la validation de ces partenaires, sous www.vita-zahnfabrik.com/vionicvigo





VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Pour les prothèses amovibles partielles et complètes ainsi que les prothèses sur implants*.

Couleurs disponibles

- 18 couleurs VITA classical A1–D4-/Bleach :
0 M1, 0 M3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Géométrie disponible

Ø 98,4 mm / h 20 mm

Partenaire technique CAO pour les prothèses amovibles numériques VITA

- exocad GmbH
- 3Shape A/S

Disponible pour les systèmes

- imes-icore GmbH
(CORiTEC® one+, 150i series, 250i series, 350i series, 650i series)
- vhf camfacture AG (R5, S5, K5+, K5, E5)
- Dentsply Sirona (inLab MC X5)
- DGS SHAPE/Roland DGA (DWX Linie)
- Arum Dental (5x series)
- Axsys Dental Solutions (Versamill Milling Systems 500, 500L)
- Orangedental (EASY MILL 5)
- TECNO-GAZ (Vector)
- Up3D (P53, P55D)

Qualité du matériau

Résistance à l'abrasion pour des dents artificielles durables.


Esthétique

Dégradé de couleur intégré pour un aspect plus naturel. Bonne aptitude au polissage.

Souplesse

Mise en œuvre simple et sûre. Compatible avec les systèmes de fraisage les plus courants.

Qualité contrôlée

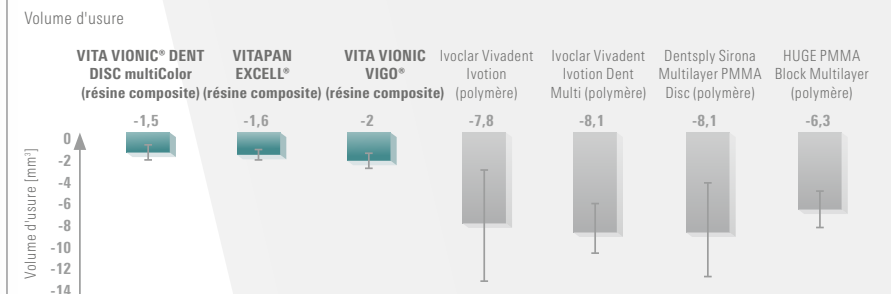

Source : UKR clinique universitaire Ratisbonne, polyclinique de prothèse dentaire, rapport no 2302_02, 4/2023

*qui nécessitent une structure porteuse



VITA VIONIC® DENT RESIN

Matériau d'impression 3D pour les éléments dentaires de prothèses amovibles partielles et complètes définitives.

Des arcades et éléments dentaires imprimés à moindre coût, présentant une grande stabilité à l'abrasion et répondant en outre à des exigences modernes et esthétiques – avec **VITA VIONIC DENT RESIN**, c'est possible.

Résultats stables en couleur avec VITA Perfect Match : vous avez le choix entre 8 couleurs VITA classical ainsi que la couleur éclaircie OM3. Avec VIONIC DENT RESIN, misez sur la sécurité en ce qui concerne la fidélité de la couleur et la tendance à la décoloration. Une bonne aptitude au polissage complète le produit.

Résistance et fiabilité : grâce à la composition finement adaptée des matériaux, les résines présentent une stabilité à l'abrasion relativement élevée ainsi qu'une stabilité remarquable. Pas étonnant alors que VITA VIONIC DENT RESIN soit utilisé aussi bien pour les prothèses amovibles permanentes que pour les couronnes/bridges.

Couleurs disponibles

9 couleurs VITA classical A1-D4 y compris une couleur Bleach : OM3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3

Conditionnement disponible

Flacon de 0,5 kg

Esthétique

Disponible en neuf couleurs naturelles et résistantes avec Perfect Match par rapport au teintier VITA, qui répond de manière fiable à des exigences élevées grâce à leur bonne aptitude au polissage.

Résistant

Les faibles valeurs d'usure confirment la qualité des restaurations stables et résistantes à l'abrasion.

Polyvalent

Convient aux dents artificielles permanentes ainsi qu'aux restaurations temporaires par couronnes et bridges et peut donc être utilisé de manière polyvalente en prothèse amovible partielle et complète.

Haute résistance à l'abrasion

Le graphique illustre bien : VITA VIONIC DENT RESIN présente des valeurs d'usure très faibles en comparaison. On peut donc en déduire d'excellentes performances en termes de longévité dans l'utilisation clinique. Les dents artificielles en VITA VIONIC DENT RESIN sont comparables aux dents artificielles et aux travaux fraisés en termes de stabilité.

Volume d'usure



Source : UKR clinique universitaire Ratisbonne, polyclinique de prothèse dentaire, rapport n° 2405_01, 01/2025



VITA VIONIC® BOND

Fixation adhésive efficace des dents artificielles et des éléments dentaires.

VITA VIONIC BOND est un système de collage auto-polymérisable à deux composants à base de MMA qui présente une consistance fluide pour une application précise sur les surfaces de collage. Pour une liaison sûre, VITA VIONIC BOND forme une couche limite réactive au niveau des surfaces de collage. La solution de premier choix pour les prothèses amovibles VITA VIONIC.

La présentation adaptée à vos exigences :



1. VITA VIONIC BOND KIT

Suffisant pour env. 2 applications (collage de 2 x 14 dents)

- VITA VIONIC BOND I, pot, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, flacon, 1 ml
- Microbrush, 3 unités



2. VITA VIONIC BOND multiDose COMPLETE KIT

Suffisant pour env. 25 applications (collage de 25 x 14 dents)

- VITA VIONIC BOND I multiDose (20 ml)
- VITA VIONIC BOND II multiDose (10 ml)
- Embouts de pinceaux à usage unique en nylon, 50 pièces
- Gobelet doseur VITA VIONIC BOND multiDose, 3 ml ; réutilisable

Collage alternatif de VITA VIONIC DENT DISC multiColor au moyen de VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT



- Pour le collage par remplissage du hiatus de la base prothétique imprimée avec VITA VIONIC DENT DISC multiColor
- Condition : pré-conditionnement de l'arcade fraisée et de la base imprimée durcie avec VITA VM LC
- Appliquer la résine liquide de base prothétique dans les cavités à l'aide d'un petit pinceau
- Post-polymérisation dans un appareil de photopolymérisation validé

Liaison sûre.

Le système auto-durcissant à 2 composants assure une liaison sûre.

Fixation précise

Une faible épaisseur de film dans la cavité permet une fixation précise et sans interstice.

Simple et rapide

Un travail rapide et propre pour une liaison sûre.

Des solutions adaptées en cours de processus.

1. Procédé de CAO

Bibliothèques de dents artificielles VITA VIONIC VIGO et VITA VIONIC DIGITAL VIGO



2. Fabrication de prothèses d'essayage

VITA VIONIC TRY-IN RESIN



3. Fabrication de la base prothétique

VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT
VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



4. Préparation des dents artificielles

VITA VIONIC VIGO



OU

4. Réalisation des éléments dentaires

VITA VIONIC DENT DISC multiColor
VITA VIONIC DENT RESIN



5. Collage

Prothèse amovible fraisée : VITA BOND VIONIC
Prothèse amovible imprimée :
VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT



6. Personnalisation

VITA AKZENT LC, VITA VM LC flow



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.

Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Ligne d'assistance technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis : +1 888-249-1640
info@vitainorthamerica.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada : +1 800-324-6224

N.B.

Nos produits doivent être utilisés conformément aux instructions figurant dans leurs notices d'utilisation respectives. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Publication de cette brochure produit : 2026-07. Cette nouvelle édition de la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage

CE 0124

VITAPAN EXCELL®, **VITAPAN**® LINGOFORM,
VITA PHYSIODENS®, **VITAPAN**®, **VITAPAN**® CUSPIFORM,
VITAPAN SYNOFORM®, **VITA MFT**®, **VITA VIONIC** VIGO®,
VITA VIONIC® DENT DISC multiColor, **VITA VIONIC**®
BOND, **VITA AKZENT**® LC, **VITA VM** LC flow

detax GmbH est certifiée selon la réglementation sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage

CE 0483

VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT, **VITA VIONIC**® DENT RESIN,
VITA VIONIC® TRY-IN RESIN, **VITA VIONIC**® BASE RESIN FLEX

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

Rx uniquement **MD**

Références

UKR clinique universitaire Ratisbonne,
polyclinique de prothèse dentaire,
rapport no 2405_01, 01/2025

UKR clinique universitaire Ratisbonne,
polyclinique de prothèse dentaire,
rapport no 2302_02, 04/2023

Prüflabor polymerphys IK GmbH, Rapport N°
LID_126612, LID_126614, LID_126615,
LID_126618, 01/2025



D'autres
solutions de flux
de travail sont
disponibles ici



VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!



www.vita-zahnfabrik.com