

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

Restaurations antérieures très esthétiques et naturelles, conçues en 3D avec la CFAO




Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Edition 01.11

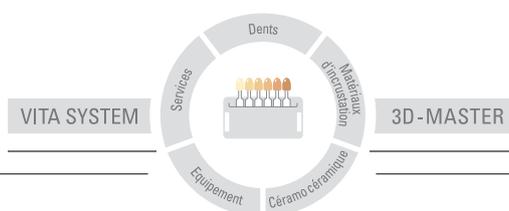

VITA

Description du produit :

Les VITABLOCS RealLife ont été spécialement conçus pour réaliser des restaurations antérieures très esthétiques. La structure tridimensionnelle de ces VITABLOCS avec un noyau dentinaire enrobé dans de l'émail reproduit le dégradé de teinte curviligne entre la dentine et l'incisal que l'on observe sur une dent naturelle.

Les restaurations VITABLOCS RealLife peuvent ainsi comporter une section cervicale ou incisale plus ou moins importante – selon la structure chromatique de la substance dentaire résiduelle. Le matériau VITABLOCS RealLife se compose de la céramique feldspathique à structure fine VITABLOCS, éprouvée cliniquement des millions de fois.

VITABLOCS RealLife® for CEREC® / inLab® MC XL

Indications

Les VITABLOCS RealLife conviennent parfaitement pour la fabrication de couronnes antérieures et de facettes très esthétiques.

Dimensions

VITABLOCS RealLife est proposé en taille RL-14/14 (14 x 14 x 18 mm).

Avantages

Esthétique naturelle des restaurations antérieures :
Reproduction simple des plus subtiles nuances de teinte naturelles car la structure tridimensionnelle du bloc imite la structure naturelle de la dent.

Fabrication simple :

Fabrication simple de l'esthétique des dents antérieures en un clic de souris grâce au logiciel à utilisation intuitive associé au concept innovant du bloc.

Rapidité d'exécution :

La synergie intelligente du bloc et du logiciel procure des résultats très esthétiques sans caractérisation ou personnalisation et avec un gain de temps appréciable.

Grande individualité :

Liberté créatrice maximale pour la réalisation de prothèses très individuelles compte tenu des possibilités de positionnement tridimensionnel de la restauration au sein du bloc.

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL Articles

Teintes	Désignation	Dimensions	Contenu	N° art.
0M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC40M1CRW1414
1M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M1CRW1414
1M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M2CRW1414
2M1C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC42M1CRW1414
2M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC42M2CRW1414
3M2C	RL-14/14	14 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC43M2CRW1414

Les VITABLOCS RealLife s'usinent avec le système CEREC/inLab MC XL de la société Sirona à partir de la version du logiciel V.3.80.