


VITA PHYSIODENS®



Dientes de resina

Versión: 02.07

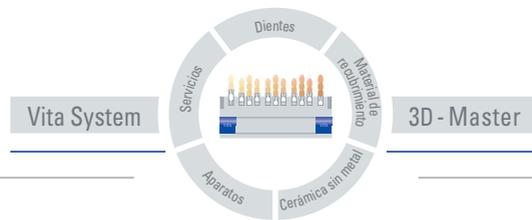

VITA

VITA PHYSIODENS® | La perfección maestra

La **nueva** forma dental extrapequeña:
Juego de dientes anteriores superiores T6S



La forma perfecta

Los dientes VITA PHYSIODENS convencen a todos aquellos que sean muy exigentes en cuanto a estética y funcionalidad. La determinación exacta del color, un montaje perfecto y materiales de la máxima calidad garantizan un resultado impecable. Así gana tiempo, clientes y prestigio.

Los dientes anteriores se han desarrollado sistemáticamente siguiendo las leyes de la naturaleza.

Las 21 formas diferentes de dientes anteriores superiores y las 8 de dientes anteriores inferiores –clasificados en cuatro grupos de formas– presentan las características siguientes:

- **Una técnica de estratificación multidimensional y una morfología superficial idéntica al modelo natural.**
El resultado es un juego cromático armónico y lleno de matices, así como un comportamiento natural de reflexión de la luz en cada diente.
- **Formas extraordinariamente plenas.**
Estas formas consiguen prótesis naturales muy atractivas en la técnica de prótesis parciales, sobre todo en la implantología. Las crestas palatinas anatómicas y las superficies labiales convexas contribuyen a la recuperación de la funcionalidad masticatoria y fonética y de la conformación de los labios.
- **Crestas interdentales de diseño funcional.**
Los VITA PHYSIODENS obtienen así una configuración natural de las papilas en función de la edad del paciente. Asimismo, se satisfacen a la perfección tanto los aspectos estéticos como los requisitos de funcionalidad e higiene, especialmente en las prótesis para pacientes de edad avanzada.

Piezas únicas artesanas

Los dientes VITA PHYSIODENS son obras maestras artesanas.

Cada diente:

- Se estratifica a mano.
- Es una pieza única en color, forma y función.
- Representa una simbiosis de “Handmade in Germany” y alta tecnología de última generación.



El éxito de lo elemental

Los dientes posteriores VITA PHYSIODENS siguen en todo momento los principios de la céntrica fisiológica. Ello permite a los protésicos un método de montaje fácil y rápido, al mismo tiempo que el paciente disfruta de la máxima comodidad de uso y funcionalidad. Estos resultados son posibles gracias a:

- **Relieves oclusales anchos.**
Garantizan una oclusión fisiológica en todos los métodos de montaje, con contactos uniformes en forma de puntos. Además, en la técnica de prótesis combinadas y de implantes consiguen transiciones armónicas y una integración óptima de los elementos de la construcción (véase fig. 1).
- **Superficies proximales encajadas entre sí.**
Son la garantía de un montaje siempre fácil y rápido de prótesis de alta calidad (véase fig. 2).



Fig. 1

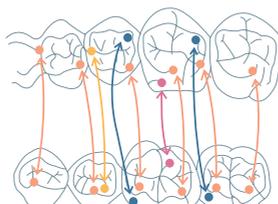


Fig. 2

Las determinantes propiedades del material

Los dientes VITA llevan décadas marcando la pauta en calidad de material. En el material MRP (microfiller reinforced polyacrylic desarrollado por VITA se introducen micropartículas inorgánicas en la trama reticulada y, aplicando el procedimiento de postprensado (NVP en sus siglas alemanas) único de VITA, se crea un material totalmente homogéneo que se caracteriza por su extraordinaria calidad y una excelente resistencia a la abrasión.


- respetuoso con los tejidos
- resistente a la placa
- estabilidad cromática
- Elevada resistencia a la abrasión
- desbastado sin astillamiento
- excelente resiliencia
- reducida absorción de agua
- excelente facilidad de pulido, incluso tras el tallado selectivo
- fácil de unir con el material de base de la prótesis

Tarjeta de formas vivas



Resistencia a la abrasión de dientes de resina Estudio comparativo in vitro Quintessenz Zahntech 29, 4, 51 0-521 (2003)

— Integral
— PolystarLUX
— Postaris
— Premium8
— VITA PHYSIODENS

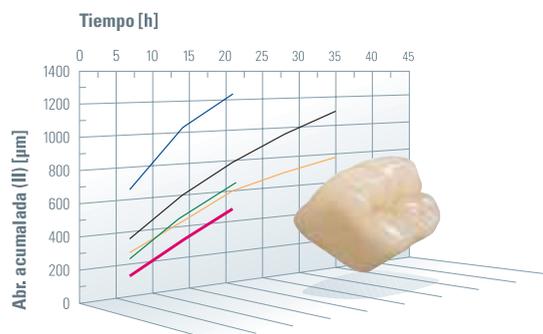

VITA PHYSIODENS® | Una innovación clara



Color de la máxima precisión

El VITA SYSTEM 3D-MASTER es el único sistema de colores acreditado en el mundo con el que se determinan y reproducen de forma sistemática todos los colores naturales de dientes.

El VITA SYSTEM 3D-MASTER permite asimismo reproducir colores que se hayan determinado con la antigua guía de colores VITAPAN classical. Por lo tanto, ya no necesita tener existencias de los colores de ambos sistemas: basta con los productos del VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Novedad en los dientes VITA PHYSIODENS

Para poder orientarse mejor durante la selección del color mediante el VITA SYSTEM 3D-MASTER:

- Indicación de la mejor aproximación de color en VITAPAN classical.



La finalidad es lo primero

El nuevo diseño de las placas para juegos de dientes y de la nueva tarjeta de formas vivas revela profesionalidad y espíritu innovador.




Código de barras y marcado CE 0124 en el dorso

El fondo de color neutro de la nueva placa proporciona la máxima comodidad de trabajo:

- Muestra el color real y el efecto cromático del diente
- Resalta con mayor intensidad la zona incisal.
- Facilita determinar y elegir el color.
- Llama la atención sobre el producto, es decir, el diente.
- Destaca la morfología superficial.



- Perlas de PMMA, hinchadas por la introducción de monómero
- Monómero reticulado
- Relleno de micropartículas inorgánicas, introducido en la trama reticulada del polímero

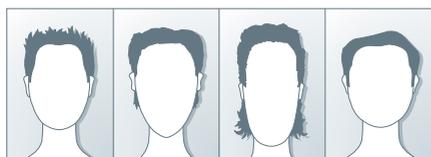

forma de pala triangular rectangular cuadrado



Excelente material

Gracias a su excelente material, los VITA PHYSIODENS son ideales para pacientes satisfechos y preocupados por la calidad de su prótesis. En el material MRP (microfiller reinforced polyacrylic) desarrollado por VITA se introducen micropartículas inorgánicas en la trama reticulada y, aplicando el procedimiento de postprensado (NVP en sus siglas alemanas) único de VITA, se crea un material totalmente homogéneo que se caracteriza por su extraordinaria calidad y una excelente resistencia a la abrasión.

Amplio espectro de indicaciones

El amplio espectro de indicaciones de VITA PHYSIODENS permite un almacenamiento reducido y una elevada rentabilidad. La línea Premium es igualmente adecuada para:

- Prótesis totales
- Estructuras de implantes
- Estructuras de coronas telescópicas y cónicas
- Restauraciones con conectores
- Prótesis de esqueléticos

Sistema de oclusión ideal

Los VITA PHYSIODENS garantizan:

- Un montaje eficiente en función del paciente y conforme a los principios de la céntrica fisiológica
- La máxima comodidad de uso y funcionalidad

Formas idénticas al modelo natural

Los VITA PHYSIODENS están disponibles en:

- 21 juegos de dientes anteriores superiores y 8 de dientes anteriores inferiores
- 6 juegos de dientes posteriores superiores y 6 de dientes posteriores inferiores

Para conseguir una estética de gran expresividad y adecuada a cada tipo de persona.

Sistema de colores único

El VITA SYSTEM 3D-MASTER representa la determinación del color más segura y precisa en todo el mundo. Este sistema de colores único ofrece:

- Una amplia selección de colores, no igualada por ningún otro sistema.
- Los VITA SYSTEM 3D-MASTER BLEACHED Colors 0M1 y 0M3 en una selección de juegos de dientes.

Personalización a gusto de cada paciente

El VITAVM LC INDIVIDUALISATION KIT permite modificar los VITA PHYSIODENS en función de los deseos del paciente.

EL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Los dientes VITA PHYSIODENS están disponibles en los colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER. Se garantiza la compatibilidad cromática con todos los materiales VITA 3D-MASTER.


1270SP 0307 (3) SI

Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

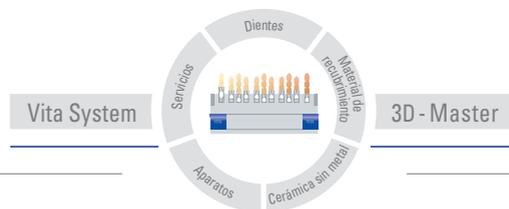

VITA

Nota importante: Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y deben utilizarse siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los dientes de resina VITA PHYSIODENS® llevan el marcado CE 0124 y cumplen los requisitos de la norma ISO 22112:2005. Fecha de publicación de estas instrucciones de uso: 03/07

US 5498157 A • AU 659964 B2 • EP 0591958 B1

VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338
D-79704 Bad Säckingen
Fon +49/ 7761/562-0
Fax +49/ 7761/562-299
Línea de atención permanente: +49/ 7761/562-222
Fax +49/ 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com