
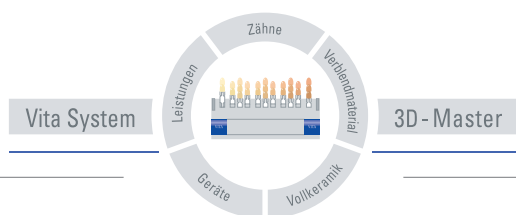


## VITA VACUMAT® 40 T

Das kompakte Leichtgewicht von VITA – bedienungsfreundlich, verlässlich, platzsparend.

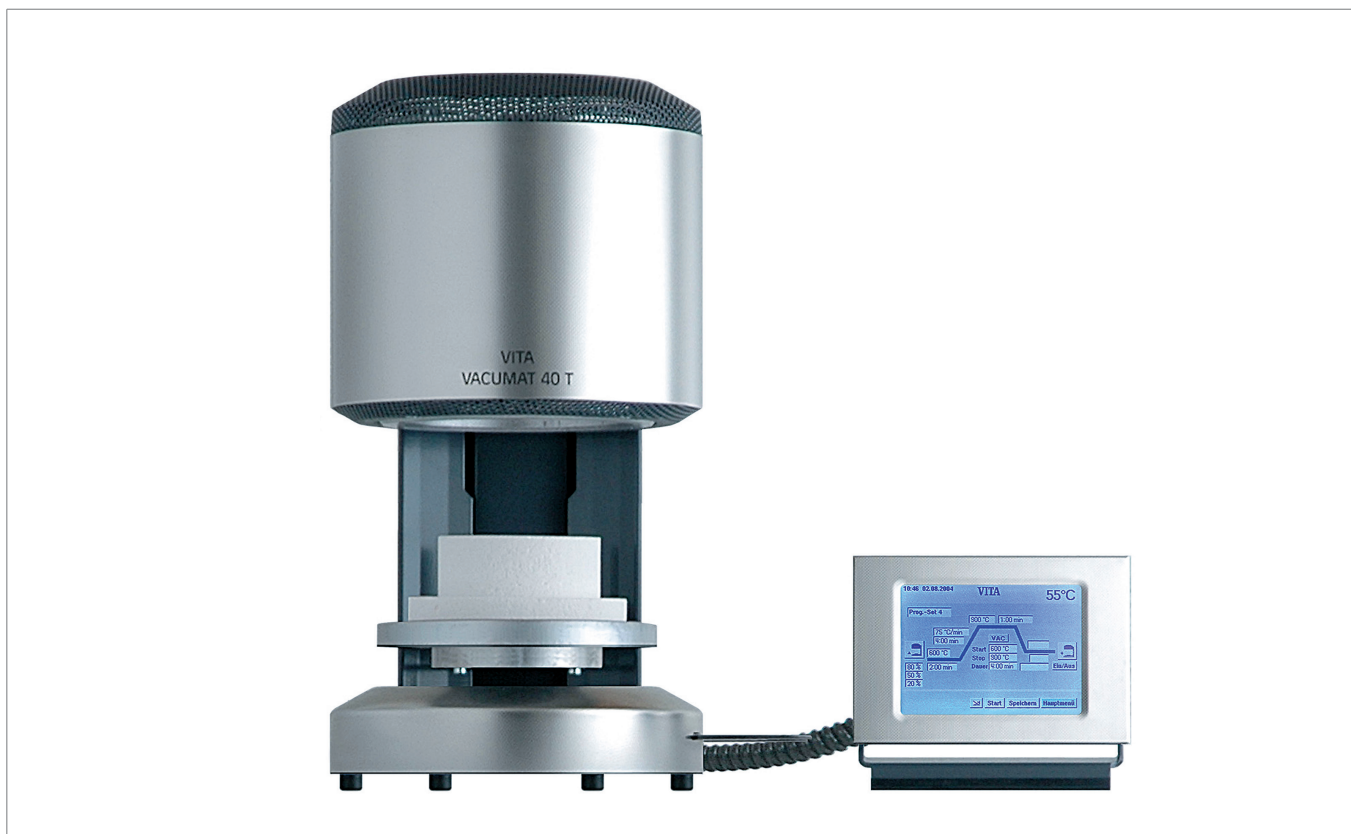

# VITA

### Produktbeschreibung

Vollautomatisches, mikroprozessorgesteuertes Keramikbrenngerät mit intuitiver Bedienung durch selbst-erklärende Handhabung am Touchscreen-Display.

Ein umfangreiches Paket an Sicherheitsfunktionen bietet Schutz auf höchstem Niveau.

Der VITA VACUMAT 40 T ist ein Leichtgewicht für maximale Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz.

### Leistungsbereich

- für alle Arten dentalkeramischen Zahnersatzes
- für Vakuum- und atmosphärische Brände
- für Ofenlötung bei Keramikarbeiten

# VITA VACUMAT® 40 T

## Technische Funktionen

- Serviceprogramme wie z. B. Temperatur-Vakuumkanibrierung, Software-Update, Betriebsstundenzähler, Sprachwahl, Speicherung der abgelaufenen Brennprogramme zur Übertragung in das FDS\*-Programm, Anzeige für Alterungsgrad der Brennmuffel
- Spannungsausfallschutz
- Liftüberwachung
- Vakuum-Überwachung
- Temperaturfühler-Überwachung
- bei Einsatz des FDS\* zusätzliche Eingabemöglichkeit für Bedienername und Auftragsnummer

## Lieferumfang

### Art.-Nr. DV40T220

Gerät im Spezialkarton, komplett mit: 1 Bedienteil, 1 Anschlußkabel für Bedienteil, 1 Brennschale, 1 Anschlußkabel für Netzanschluß, 1 Packung Brennräger A und B, 1 Packung Brennuntersätze G, 1 Ofenpinzette (25 cm), 1 Bedienstift für Bedienteil, 1 Bedienungsanleitung

## Sonderzubehör

- Vakuumpumpe PJ (230 V oder 100/110 V)
- \* FDS Firing-Data-System: PC-Programm zum Archivieren und Verwalten der durchgeführten Brennprogramme

## Drucksachen

- Bedienungsanleitung Nr. 1273
- Prospekt Nr. 1369

## Technische Daten Brenngerät

Breite	220 mm
Tiefe	320 mm
Höhe	420 mm
Gewicht	10 kg
Gehäuse	Stahl/Edelstahl
Brennraum-Durchmesser	90 mm
Brennraum-Höhe	55 mm
Brennraum-Temperatur	max. 1200°C
Elektrischer Anschluss	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,5 kW
Klassifikation	Schutzklasse 1

## Technische Daten Bedienteil

Breite	195 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	1,0 kg
Gehäuse	Stahl/Edelstahl
Elektrischer Anschluss	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,5 kW
Klassifikation	Schutzklasse 1

## Vorteile

- sichere, einfache, selbsterklärende Bedienung für effiziente Handhabung
- funktionell gestaltetes, externes Bedienelement mit Grafik-Touchscreen-Display
- zuverlässige Elektronik für eine präzise Steuerung der Programmabläufe
- integriertes Brenndatenüberwachungsprogramm
- automatische Temperaturjustage nach jedem Starten des Brennprogramms
- Information und Hinweise zu den Programm-Eingabemöglichkeiten
- ausziehbarer Brenngutablagetisch
- Nachtmodus-Programm
- Software-Updates über USB-Stick
- 200 frei wählbare Brennprogramme
- Gerätegarantie inkl. Brennmuffel: 2 Jahre