
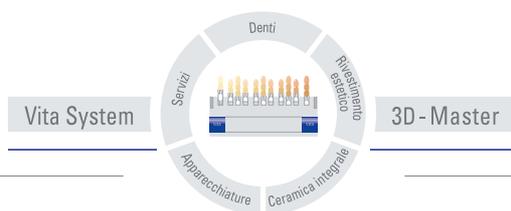


VITA VACUMAT® 40 T

Forno VITA per ceramica – alto confort d'uso, affidabile, ingombro ridotto

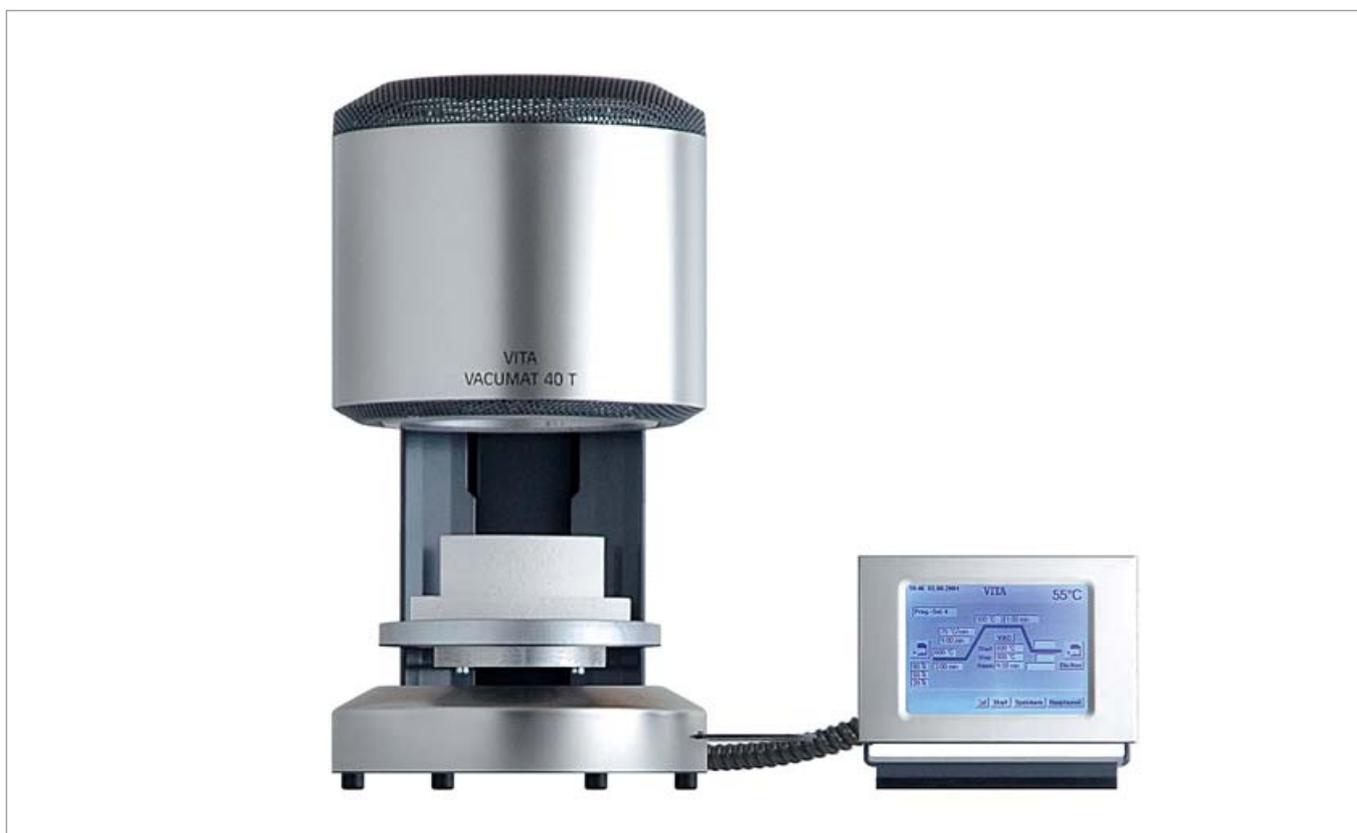

VITA

Descrizione

Forno per ceramica completamente automatico, con controllo a microprocessori e guida intuitiva per un impiego autoesplicativo sul display con touchscreen. La vasta gamma di funzioni di sicurezza garantisce protezione al massimo livello.

VITA VACUMAT 40 T è il peso leggero che prende poco spazio e lascia ordine sul posto di lavoro.

Prestazioni

- per tutti i tipi di restauri dentari in ceramica
- per cotture sotto vuoto e in pressione atmosferica
- per saldature in forno di lavori ceramici

VITA VACUMAT® 40 T

Funzioni tecniche

- programmi di servizio come ad es. calibratura del vuoto-temperatura, aggiornamento software, contatore di esercizio, selezione della lingua, memorizzazione dei programmi di cottura eseguiti per tra fermento nel programma FDS*, visualizzazione del grado di invecchiamento della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- monitoraggio lift
- monitoraggio vuoto
- monitoraggio termosonda
- in combinazione con FDS* possibilità di inserimento del nome utilizzatore e numero commessa

Dotazione

Cod. DV40T220

Forno in imballo speciale, completo di: 1 unità di comando, 1 cavo di allacciamento per unità di comando, 1 zoccolo di cottura, 1 cavo per allacciamento alla rete, 1 confezione di supporti di cottura A + B, 1 confezione di supporti di cottura G, 1 pinza (25 cm), 1 stick per unità di comando, istruzioni di impiego

Accessori

- Pompa per vuoto PJ (230 Volt oppure 100/110 Volt)
- * FDS Firing-Data-System: programma PC per l'archiviazione e gestione dei programmi di cottura eseguiti

Stampati

- Istruzioni di impiego Nr. 1273
- Prospetto Nr. 1369

Dati tecnici forno

Larghezza	220 mm
Profondità	320 mm
Altezza	420 mm
Peso	10 kg
Esecuzione	acciaio/acciaio inox
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200°C
Allacciamento di rete	230 Volt AC, 50 Hz o 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Dati tecnici unità di comando

Larghezza	195 mm
Profondità	150 mm
Altezza	150 mm
Peso	1,0 kg
Esecuzione	acciaio/acciaio inossidabile
Allacciamento di rete	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Vantaggi

- comandi sicuri, semplici, autoesplicativi: efficiente nell'impiego
- unità di comando separata, funzionale con display a touch screen e visualizzazione grafica
- elettronica affidabile per un controllo preciso dei programmi di cottura
- programma di controllo dei dati di cottura integrato
- taratura automatica della temperatura ad ogni avvio del programma di cottura
- informazioni su possibilità di impostazione
- piano portalavori estraibile
- programma notturno
- aggiornamenti software tramite stick USB
- 200 programmi liberamente definibili
- 2 anni di garanzia, compresa la muffola