

VITAPAN PLUS®

Πληροφορίες προϊόντος/Μεγεθολόγιο



Χρωματοληψία VITA

Σχετική με το χρώμα επικοινωνία VITA

Παραγωγή χρωμάτων VITA

Έλεγχος χρωμάτων VITA

Κατάσταση ενημέρωσης 07.14

VITA shade, VITA made.

VITA


Διατίθεται σε χρώματα των συστημάτων VITA SYSTEM
3D-MASTER και VITA classical A1–D4 (εκτός του B1)



VITAPAN PLUS® Εσωτερικά τέλειο. Εξωτερικά ολοκληρωμένο.

Η πρόοδος είναι ο συνδυασμός του εδραιωμένου με το νεωτερισμό. Με αυτό το σκεπτικό, η εταιρεία VITA εκσυγχρόνισε το κλασικό προϊόν VITAPAN διαμορφώνοντάς το εκ νέου με πρωτοποριακό τρόπο. Αυτό ισχύει ιδίως για τη μετεξέλιξη των ανατομικών χαρακτηριστικών. Κατά συνέπεια, το νέο προϊόν VITAPAN PLUS είναι ένας άψογος συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας.

Ταυτόχρονα, το VITAPAN PLUS είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς επιδίωξης της εταιρείας VITA, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και να βελτιστοποιεί διαρκώς τις διαδικασίες της διατηρώντας το συνήθη τρόπο εργασίας. Όλα αυτά αποτελούν το δικό σας κέρδος όσον αφορά στην ασφάλεια, στην ικανοποίηση του πελάτη και στην εξασφάλιση του μέλλοντος. Διότι συνολικά, το VITAPAN PLUS παρέχει πλέον ένα ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα.

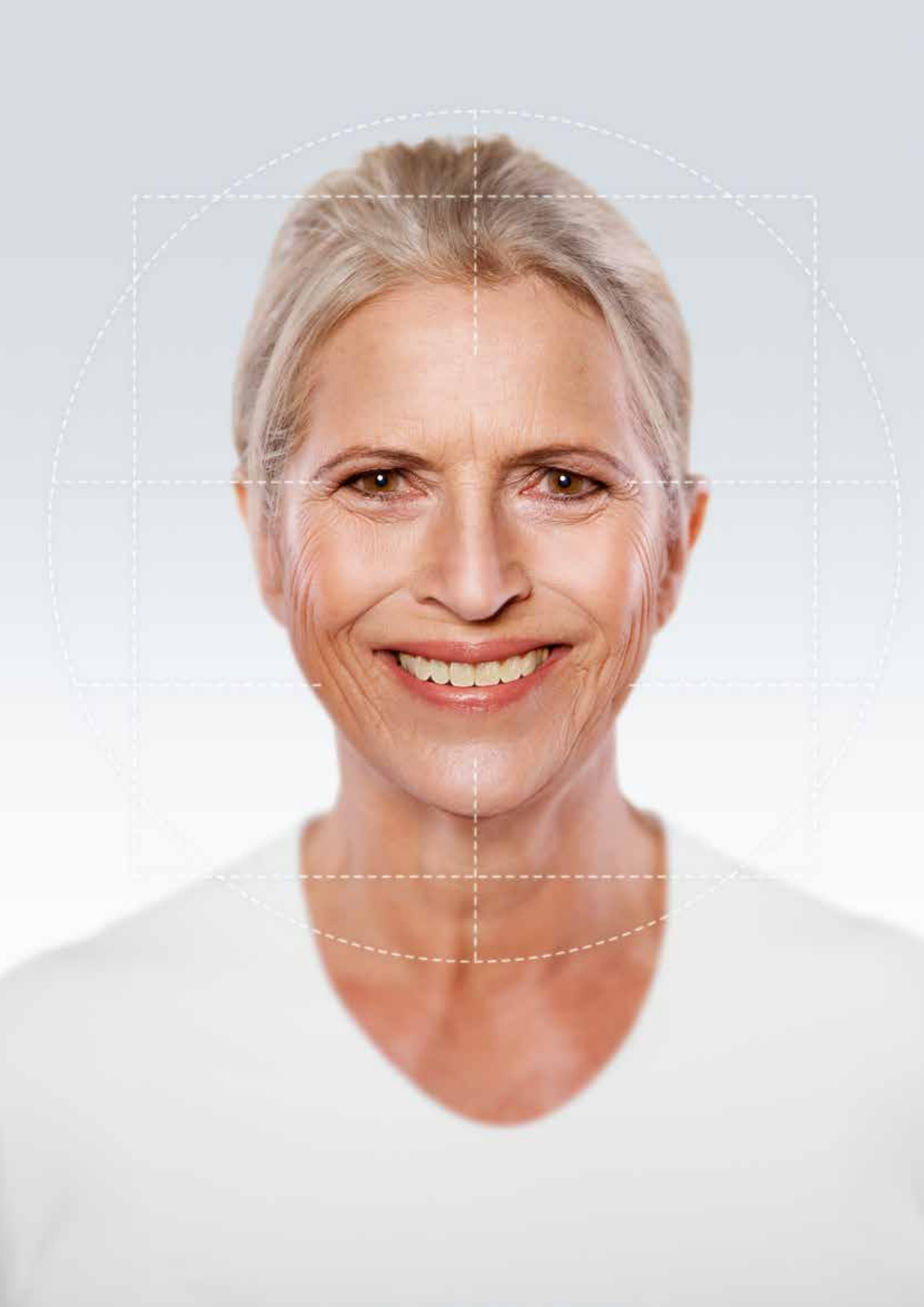

VITAPAN PLUS® Σχεδιασμένο με βάση τις επιθυμίες πελατών από ολόκληρο τον κόσμο.

«Αποτελεσματικοί νεωτερισμοί που διευρύνουν το φάσμα τοποθέτησης.»

«Συνεπείς και εξαιρετικά
επιτυχημένες μετεξελίξεις.»

«Άψογη ανατομία με απόλυτα
φυσικές ιδιότητες.»

«Εντυπωσιακή αισθητική χάρη στη
διαμόρφωση του σμάλτου και στην
αναπαράσταση βάθους του
χρώματος.»

«Η επιφάνεια και η επίστρωση
αναδεικνύουν αυτά τα δόντια σε
μοναδική εμπειρία.»



Δοκιμασμένο σε περισσότερες από 10
χώρες από περίπου 300 συμμετέχοντες
σε εργαστήρια.
Το αποτέλεσμα: Συμφωνία σε ποσοστό
άνω του 90%.

«Το VITAPAN PLUS μου παρέχει τη λύση ακόμα και σε δύσκολες εργασίες. Για μένα ένα πραγματικό ορόσημο.»

«Θεωρώ το VITAPAN PLUS ως ένα εντελώς καινούργιο για μένα σύστημα πολυλειτουργικής αποκατάστασης ολοκληρωμένης μορφής.»

«Τονισμένες περιοχές αυχένα του δοντιού για ανάλογη με την ηλικία και εύχρηστη όσον αφορά στην υγιεινή, διαμόρφωση των ούλων.»

«Εξορθολογισμός των προσφερόμενων μορφών με εύλογη κατανομή των μεγεθών.»

VITAPAN PLUS® Εσωτερικά τέλειο, εξωτερικά ολοκληρωμένο.



Αυθεντική μορφολογία επιφανείας και εξατομικευμένη δομή επαρμάτων οδοντίνης

 για ζωηρή αντανάκλαση του φωτός.

Ιριδισμός, φωτεινότητα και ημιδιαφάνεια

 Για πολυδιάστατη εναλλαγή χρωμάτων.

Υπόλευκοι χώροι προς το τέμνον άκρο των κοπτήρων

 για απόλυτα φυσική αισθητική.

VITAPAN PLUS® Εσωτερικά τέλειο, εξωτερικά ολοκληρωμένο.



Οριζόντια και κάθετα χαρακτηριστικά καμπυλότητας



για την αποτελεσματική στήριξη του χείλους για τη διατήρηση της εξατομικευμένης φυσιολογίας.



Απόλυτα φυσική διαμόρφωση των υπερώιων επιφανειών



για τη διατήρηση της φωνητικής και της συνηθισμένης αίσθησης της γλώσσας.



Σαφή γωνιακά χαρακτηριστικά



για ένα φυσικό και αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Ανάλογη με τον εκάστοτε τύπο διαμόρφωση των χειλικών επιφανειών άκρων



για την ανάδειξη των προσωπικών χαρακτηριστικών κάθε ασθενή.



Ελαφρά διευρυμένοι αυχένες του δοντιού χωρίς διαβαθμίσεις Μετάβαση από τον αυχένα προς τη στεφάνη του δοντιού



για μέγιστη ποικιλία: κάθε σειρά παρέχει, χάρη στο καθ' ύψος εξατομικευμένο διαμορφωμένο ούλο, πολλές δυνατότητες για μία ανάλογη με την ηλικία τεχνητή οδοντοστοιχία.



για την πολύπλευρη και εύχρηστη όσον αφορά στην υγιεινή διαμόρφωση των ούλων με ασφαλή σύνδεση μεταξύ των δοντιών.



για την κατάλληλων διαστάσεων διαμόρφωση των χώρων μεταξύ των δοντιών και την ασφαλή κάλυψη τυχόν κατασκευαστικών στοιχείων.

VITAPAN PLUS® υψηλής αισθητικής σειρά προϊόντων, μέγιστη ποικιλία.

VITAPAN PLUS®



δυνατότητα
συνδυασμού με

VITA PHYSIODENS®



VITA LINGOFORM®



VITAPAN® CUSPIFORM



VITAPAN® SYNOFORM



Στοιχεία χρωμάτων
VITA SYSTEM 3D-MASTER®
(με την καλύτερη δυνατή
προσαρμογή στο σύστημα
VITA classical A1-D4)
VITA classical A1-D4

Στοιχεία τύπου

Στοιχεία μορφής

(Ο χαρακτηρισμός της
σειράς δοντιών περιγράφει
ταυτόχρονα το κατά
προσέγγιση εύρος της
σειράς)




Αριθ. παρτίδας
ολογράφως

Κωδικός Data Matrix

CE 0124 στο οπισθόφυλλο

VITAPAN PLUS® Άνω πρόσθια δόντια

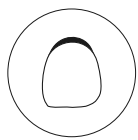


Καμπυλωτή μορφή

041



043

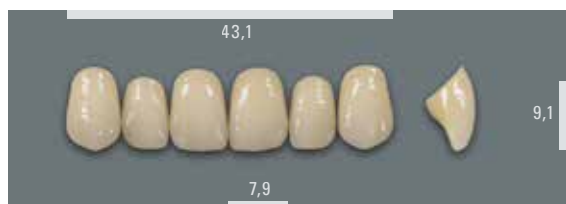

045



047




047L (047 με μακρύτερο αυχένα)



049




051

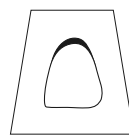

Τριγωνικό σχήμα

T42

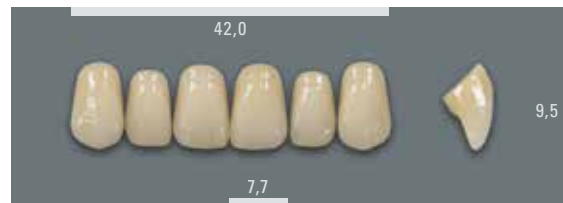


T44



T46



T47

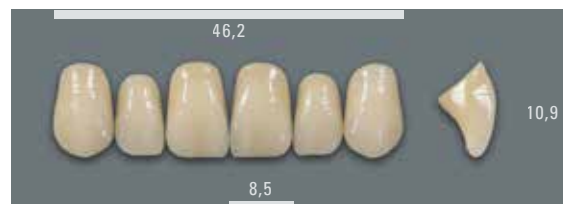

T48




T50



T54



VITAPAN PLUS® Άνω και κάτω πρόσθια δόντια

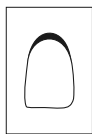

Ορθογώνιο σχήμα

R45



R47




R49




L33





L35

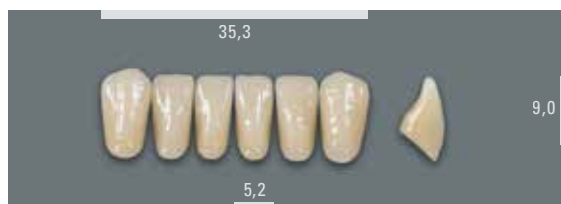

L37

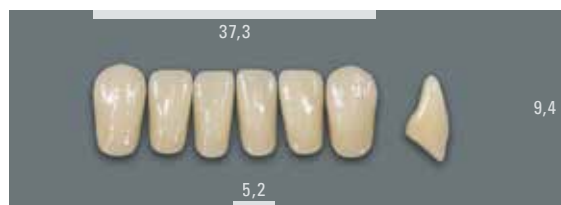


L37L (L37 με μακρύτερο αυχένα)

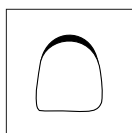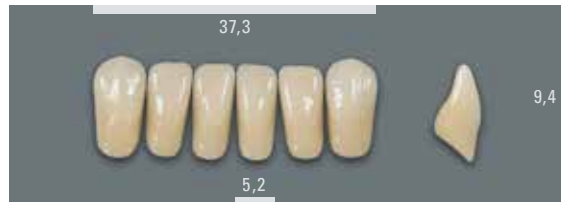

Τετράγωνο σχήμα



S46

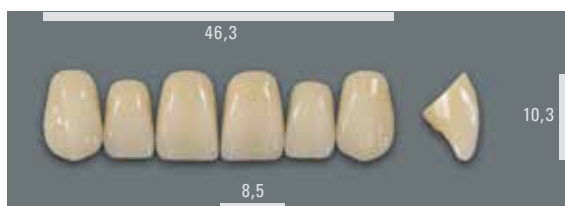

L39



L41

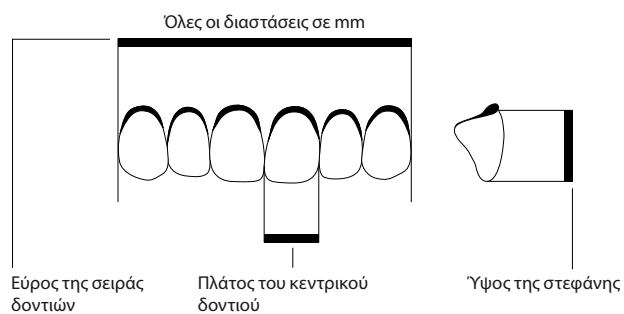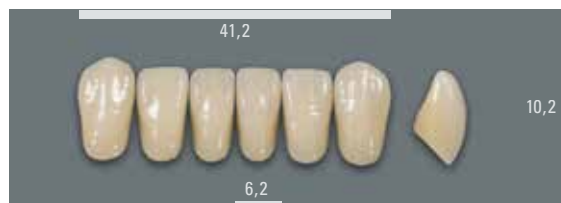

VITAPAN PLUS® Πίνακας συνδυασμών

Br.	 mm			Br.	 mm
041	41,3	9,1	7,4	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
043	43,1	9,1	7,9	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
045	45,1	9,7	8,4	L35 35,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
047	47,3	10,3	8,6	L37 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
047L*	47,3	10,3	8,6	L37L* 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
049	49,1	10,9	9,0	L39 39,0	45C 14S 22E 23L 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 35,4 34,8
051	51,4	12,3	9,3	L41 41,2	45C 14S 24E 24L 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
T42	42,0	9,5	7,7	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7
T44	44,1	9,9	8,1	L33 33,2	41C 11S 20E 21L 29,9 30,0 29,4 30,1 31,3 31,9 31,0 30,7

Br.	 mm			Br.	 mm
T46	46,2	10,4	8,2	L35 35,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,3 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
T47	46,9	10,9	8,5	L37 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
T48	48,1	11,3	8,8	L37 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
T50	50,0	11,6	9,2	L39 39,0	45C 14S 24E 24L 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
T54	54,4	12,7	9,8	L41 41,2	45C 14S 24E 24L 34,8 33,1 34,8 35,8 36,3 35,4 36,1 36,4
R45	45,4	9,9	8,2	L35 35,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
R47	47,0	11,2	8,6	L37 37,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1
R49	49,1	11,7	8,9	L39 39,0	45C 14S 23E 23L 34,8 33,1 33,5 34,2 36,3 35,4 35,4 34,8
S46	46,3	10,3	8,5	L35 35,3	42C 12S 22E 22L 31,7 31,1 32,9 31,6 33,4 32,7 33,7 32,1

Τα στοιχεία του πίνακα συνδυασμών αποτελούν γενικές, μη δεσμευτικές ενδεικτικές τιμές, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό ασθενούς. *μεγάλου μήκους (Ο47 ή L37 με μακρύτερο αυχένα)




Τα δόντια VITA ενδείκνυνται για:

- προσθετικές πλήρους οδοντοστοιχίας
- μερικές προσθετικές
- κατασκευές με στήριξη εμφυτεύματος
- τηλεσκοπικές και κωνικές εργασίες
- αφαιρούμενες κατασκευές
- προσωρινές τεχνητές οδοντοστοιχίες

Διατίθενται σε όλα τα χρώματα:

- VITA classical A1–D4 (εκτός του B1)
- VITA SYSTEM 3D-MASTER 1M1-5M3, συμπεριλαμβανομένων των 0M1 και 0M3

VITAPAN PLUS® Από άριστης ποιότητας υλικό.

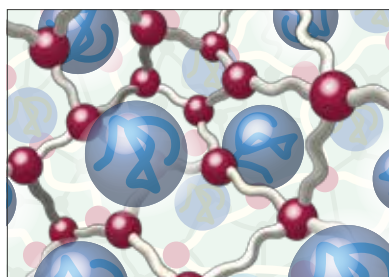

- Σφαιρίδια PMMA, διόγκωση μέσω μονομερούς
- Δικτυωμένο μονομέρες
- Ανόργανο μικροσωματιδιακό πληρωτικό υλικό, πολυμερισμένο εντός του πολυμερούς δικτύωματος



VITAPAN® VITAPAN PLUS® VITA PHYSIODENS® VITA LINGOFORM®

Δόντια από υλικό VITA MRP – επιτυχής επεξεργασία σε εκατομμύρια περιπτώσεων:


- εξαιρετική αισθητική
- ασφαλής επεξεργασία
- αξιόπιστη συμπεριφορά κατά τη χρήση
- πρώτης τάξεως ποιότητα υλικού – τα μοναδικά δόντια που όλες οι στρώσεις τους **διαμορφώνονται ομοιογενώς από μικροσκοπικά πληρωμένο υλικό** και διακρίνονται χάρη στη μέγιστη αντοχή τους στην τριβή και στη θραύση.

Στο υλικό **MRP (Microfiller Reinforced Polyacrylic)** που αναπτύχθηκε από την VITA, πολυμερίζονται ανόργανα μικροσκοπικά πληρωτικά υλικά με ιδανικά προσαρμοσμένη κατανομή μεγέθους σωματιδίων στο πολυμερικό δίκτυο.

Έτσι εξασφαλίζεται ένα απόλυτα ομοιόμορφο σύνολο ιδιοτήτων υψηλής ποιότητας σε ολόκληρο το δόντι.

Επιπλέον, χάρη στη μοναδική διαδικασία παραγωγής NPV (Μέθοδος συμπληρωματικού πρεσαρίσματος) της VITA **εξασφαλίζεται μια απόλυτα ομοιογενής δομή στρώσεων**, η οποία **διακρίνεται για την εσωτερική σύνδεση του αυχένα, της οδοντίνης και του σμάλτου** – τα πάντα από **ένα και μοναδικό υλικό**. Εκτός αυτού, από τη χημική δομή προκύπτει υψηλή αντοχή στη μηχανική καταπόνηση – ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αποκαταστάσεις, οι οποίες στηρίζονται από το βλεννογόνο ή από εμφυτεύματα.

VITA MRP – εξαιρετικές τιμές τριβής

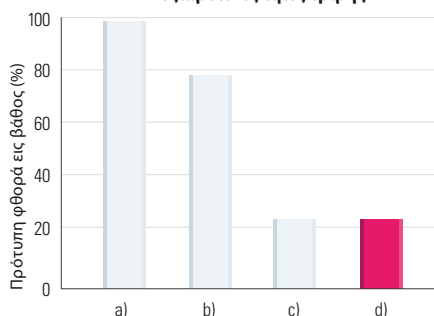

- a) Δικτυωμένο υλικό PMMA
- β) Υλικό PMMA υψηλού βαθμού δικτύωσης
- γ) Nano Hybrid/Nano Filled Composite
- δ) VITA MRP

Πηγή: Εξετάσεις φθοράς in vitro, Πανεπιστήμιο Regensburg, Γερμανία

Ιδιότητες

- Κορυφαία αντοχή στην τριβή
- Ήπιο για τους ιστούς και ανθεκτικό στο σχηματισμό οδοντικής πλάκας
- Δυνατότητα επεξεργασίας χωρίς θραύσματα και υποβάθμιση της ποιότητας του χρώματος και του υλικού
- Εξαιρετικές δυνατότητες στίλβωσης – ακόμη και μετά το τρόχισμα στο στόμα
- Εξαιρετικό σε συνδυασμό με το βασικό υλικό της τεχνητής οδοντοστοιχίας

Αποτελέσματα


- Μεγάλη διάρκεια ζωής της τεχνητής οδοντοστοιχίας
- Υψηλή βιοσυμβατότητα και εξαιρετικά άνετη χρήση
- Υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις, ιδιαίτερα κατάλληλο για αποκαταστάσεις με εμφυτεύματα
- Πολύ γρήγορη αποδοχή της οδοντοπροσθετικής από τον ασθενή

Ωφέλεια

- Ασφάλεια κατά τη διαδικασία κατασκευής της τεχνητής οδοντοστοιχίας
- Απόλυτα ικανοποιημένοι ασθενείς
- Καλλιέργεια της εικόνας της επιχείρησης για το οδοντιατρείο και το οδοντοτεχνικό εργαστήριο

Αυτή η ομάδα προϊόντων διατίθεται στα χρώματα VITA SYSTEM 3D-MASTER και VITA classical A1-D4. Εξασφαλίζεται η χρωματική συμβατότητα με όλα τα υλικά VITA 3D-MASTER και VITA classical.

Με το μοναδικό σύστημα VITA SYSTEM 3D-MASTER προσδιορίζονται συστηματικά και αποδίδονται πλήρως όλα τα φυσικά χρώματα δοντιών.

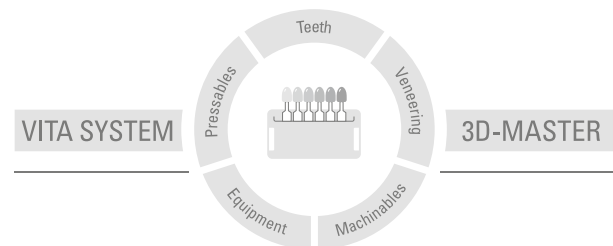

Λάβετε υπόψη: Τα προϊόντα της εταιρείας μας πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από τον αδόκιμο χειρισμό ή επεξεργασία τους. Κατά τα άλλα, ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για το προβλεπόμενο πεδίο εφαρμογής προτού το χρησιμοποιήσει. Αποκλείεται κάθε ευθύνη της εταιρείας μας όταν το προϊόν υποβάλλεται σε επεξεργασία σε μη συμβατικό ή απαγορευμένο συνδυασμό με υλικά και συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Κατά τα άλλα, η ευθύνη της εταιρείας μας για την ορθότητα αυτών των στοιχείων περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην αξία του παρεχόμενου προϊόντος βάσει τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ, ανεξαρτήτως νομικού λόγου και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν αναλαμβάνουμε, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ευθύνη για απωλεσθέντα κέρδη, για έμμεσες ζημιές, για παρεπόμενες ζημιές ή για αξιώσεις τρίτων κατά του αγοραστή. Εξαρτώμενες από την υπαιτιότητα αξιώσεις αποζημίωσης (υπαιτιότητα κατά τη σύναψη σύμβασης, θετική παραβίαση σύμβασης, ανεπίτρεπτοι χειρισμοί κλπ.) είναι δεδομένες μόνο σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας. Το ερμάριο VITA Modulbox δεν αποτελεί υποχρεωτικό συστατικό του προϊόντος. Έκδοση του παρόντος δελτίου πληροφοριών χρήσης: 07.14

Η εταιρεία VITA Zahnfabrik είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα και τα ακόλουθα προϊόντα φέρουν το σήμα **CE** 0124 :

VITAPAN PLUS®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Ταχυδρομική θυρίδα (PO Box) 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Γερμανία
Τηλ. +49(0)7761/562-0 · Φαξ +49(0)7761/562-299
Hotline: Τηλ. +49(0)7761/562-222 · Φαξ +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

