

VITA AKZENT® Plus

Информация за продукта



VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

Редакция 03.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Оптимизирано. Лесно. Всичко.

Лазирание, маркиране и глазиране - независимо от
коефициента на топлинно разширение (КТР)

VITA AKZENT® Plus Оптимизирано. Лесно. Всичко.



Повече свобода на действията в кабинета и в лабораторията

Искате лесно и ефикасно да лазирате, оцветявате и глазирате? Тогава VITA AKZENT Plus е Вашият комплект.

Системата от лазиращи, маркиращи и глазиращи оцветители Ви осигурява възможно най-голяма свобода на действията в клиниката и в лабораторията.

Подходящ е за всички денталнокерамични материали и за всеки КТР.

Нови цветове, нови форми на приложение, нови индикации - VITA AKZENT Plus Ви дава свобода на избор.

Дали на прах, или паста, или спрей - Вие сами решавате коя форма на VITA AKZENT Plus за Вас е най-харесваната и най-рентабилната.

VITA AKZENT® Plus SPRAY Равномерно нанасяне с натискане на копчето



AKZENT Plus SPRAY KIT		
Съдържание на комплекта		
Продукт	Цвят	Съдържание
BODY SPRAY	BS01 – BS05	5 x 75 ml
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
Принадлежности		



Особено подходящи за потребители в лабораторията и в кабинета, които например искат да напаснат цветово монолитни възстановявания.

Глазурата на спрей и лазурните оцветители на спрей са готови за употреба и лесни за нанасяне.

Предимства:

- равномерно нанасяне за лесна и равномерна обработка на повърхността
- целенасочено пръскане без загуби чрез нов, специален накрайник



VITA AKZENT® Plus POWDER съчетава гъвкавост и индивидуалност с икономичност



AKZENT Plus POWDER KIT		
Съдържание на комплекта		
Продукт	Цвят	Съдържание
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Принадлежности		



Прахообразните маси VITA AKZENT Plus POWDER са много подходящи за зъботехници, които искат да характеризират класически покривни керамики и финозърнестата фелдшпатна керамика VITA PM 9.

Предимства:

- неограничена гъвкавост и икономичност
- могат свободно да се смесват помежду си за постигане на други индивидуални цветови ефекти



VITA AKZENT® Plus PASTE За много бързо индивидуализиране



AKZENT Plus PASTE KIT		
Съдържание на комплекта		
Продукт	Цвят	Съдържание
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Принадлежности		



Пастообразните оцветители VITA AKZENT Plus PASTE са оптималното решение за бързо и лесно характеризиране на възстановявания от VITABLOCS, например.

Предимства:

- готова за употреба паста с непроменяща се консистенция и хомогенно пигментиране за бърза употреба
- могат да се смесват помежду си за постигане на индивидуални цветови ефекти
- могат да се разреждат респективно отново да се смесват



Течността VITA AKZENT Plus PASTE FLUID се грижи за оптималната консистенция, когато пастите засъхнат или изсъхнат.



AKZENT Plus предлагани цветове Асортимент						
Продукт	Мостра с цвета	Цвят	Кратко обозн.	Предлагана форма		
				Spray	Powder	Paste
BODY STAINS — транслучентни, лазиращи оцветители — за промяна на въздействието на цвета на основния материал		жълто жълто-кафяво оранжево маслиненосиво сиво-кафяво	BS01 BS02 BS03 BS04 BS05			
EFFECT STAINS — маркиращи, много добре покриващи оцветители — за естествени ефекти на повърхността — за оцветяване по време на нанасяне на керамиката		бяло крем лимоненожълто слънчевожълто оранжево ръждивочервено каки розово тъмночервено лилаво синьо сиво-синьо сиво черно	ES01 ES02 ES03 ES04 ES05 ES06 ES07 ES08 ES09 ES10 ES11 ES12 ES13 ES14			
GLAZE — за хомогенни, гланцови повърхности						
GLAZE-LT — нискотопима глазурна маса за керамики с температура на печене под 800 °C						
FINISHING AGENT — за копринено матови повърхности						



+ **Плюсът в многообразието**

Лазиране

Ново в системата: лазиращи оцветители (Body Stains)

Транслуцентните оцветители действат като тънък цветен филтър

Така те са идеални за:

- Оцветяване на повърхността
- Промяна на въздействието на цвета на основния материал

Маркиране

Изключително финозърнести: маркиращи оцветители (Effect Stains)

Тези оцветители се отличават предимно с:

- интензивно цветово въздействие и
- голяма покривна сила

Затова се препоръчват особено за нанасяне на естествени ефекти на повърхността и за вътрешно колориране.

Глазиране

За гланциращото завършване:


- VITA AKZENT Plus GLAZE – глазурната маса за блестяща, хомогенна и стъклообразна повърхност
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – нискотопимата глазурна маса за керамики с температура на печене под 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – лазурната маса за коприненоматови повърхности

+ **Плюсът в комфорта при работа с тях**

Всички оцветители са флуоресциращи, изключително финозърнести и цветово стабилни.

Тиксотропната консистенция на праховете и на пастите способства прецизното нанасяне на съответната маса.

С уникалната VITA SYSTEM 3D-MASTER всички естествени цветове на зъби се определят систематично и се възпроизвеждат изцяло.

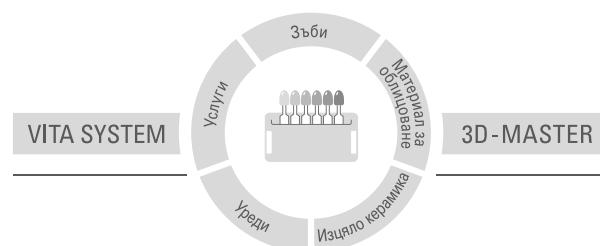

Да се има предвид: Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят в останалите случаи се задължава преди употреба да провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на други производители. В останалите случаи нашата отговорност за достоверността на тези данни, независимо от правното основание и доколкото е допустимо по закон, във всеки случай се ограничава до стойността на доставената стока съгласно фактурата без ДДС. По-специално ние не носим отговорност, доколкото е разрешено по закон, в никакъв случай за пропуснати ползи, за косвени щети, за произтичащи от това щети или за претенции на Трети лица към Купувача. Претенции за обезщетение на щети поради отговорност за вина (виновност при сключване на договор, лошо изпълнение на договора, непозволено увреждане и др.) са в сила само в случай на умисъл или груба небрежност Издаване на тази информация за потребителя: 03.13

VITA Zahnfabrik е сертифицирана по Директивата за медицински продукти и следният продукт носи обозначението **CE** 0124 :

VITA AKZENT[®] Plus

US 5498157 A AU 659964 B2 EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik