

# VITA MFT®

Multi Functional Teeth

## Информация за продукта



VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

състояние 01.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**


Доставят се в цвове по разцветките  
VITA SYSTEM 3D-MASTER и VITA classical A–D



#### **В съответствие с природата**

Да се доверите на VITA MFT – това е „плюс“ за Вас във всяко едно отношение. Аналогично на прототипа от природата изградените трислойни зъби – особено добре видимо при MFT фронталните зъби – изпълняват всички критерии, за да бъде пациентът доволен от възстановяването:

- Опалесцентност, луминисцентност и транслучентност в съчетание с естествена морфология и индивидуална структура на мамелоните – това създава богата на нюанси игра на цветовете, както и живо отразяване на светлината във всеки отделен зъб.
- Леко изпъкналите лабиални повърхности подпомагат целенасочено позицията на устните и усилват зъбно-лицевата хармония.
- Естественото оформяне на палатиналните повърхности съхранява за всеки пациент неговите фонетични способности и обичайното усещане на езика.
- Белезникавият инцизален кант подчертава допълнително изключителната естетика на фронталните зъби VITA MFT.

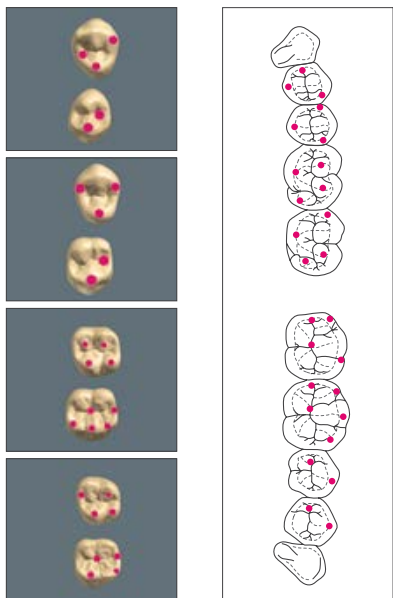

### Изключително висока продуктивност

Оформянето на дъвкателната повърхност на VITA MFT се основава на новаторския принцип easy-centric, т.е. тя е така оформена, че се получава оптимална центрика, почти като от само себе си.


- Easy-centric способства за професионалното и рационалното нареждане със сигурно намиране на оклузията и води до висока продуктивност и качество.
- Предварително абразирани дъвкателните повърхности на долните зъби намаляват сагиталните сили и способстват за идеалното статично нагласяване на протезата. Това е особено важно при имплантатни възстановявания.



- Перфектното оформяне на туберкулите при горните зъби води автоматично до правилната центрика и осигурява на пациента най-голям дъвкателен комфорт.
- Базалният кавитет позволява значително намаляване на пиленето и уголемява повърхността за сигурна връзка с материала на протезата.




- Леките разширения в зоната на зъбните шийки намаляват усилията за оформяне на съответните за възрастта интердентални пространства.

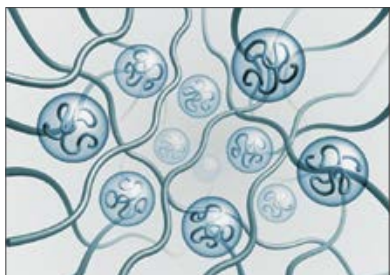


PMMA перли PMMA с омержени връзки

#### Устойчивост на износване с две тела<sup>1</sup>

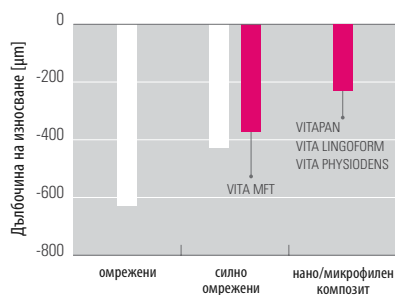

<sup>1</sup> Резултати от in-vitro изследвания на Университетска клиника Регенсбург, ноември 2009

#### Устойчивост на износване с две тела<sup>1</sup>

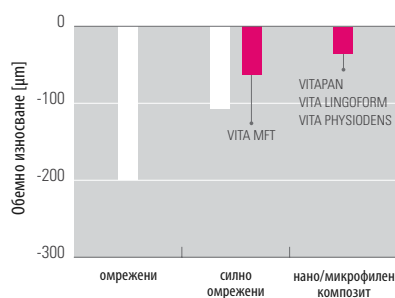

<sup>1</sup> Резултати от in-vitro изследвания на Университетска клиника Регенсбург, ноември 2009

#### Отлични качества на материала –


Благодарение на високата степен на омержване на пластмасата, която се отличава с първокласна плътност и изключителна биопоносимост.

- устойчивост на цвета
- абразивна устойчивост
- щадящ тъканите
- резистентен към образуване на плака
- пили се без отчупвания
- отлично полируем
- добра връзка с материала на протезата
- без остатъчни мономери
- нечуплив

#### Доволни и безгрижни пациенти – благодарение на VITA MFT

Живото въздействие на зъбите спомага за естествения вид и води до приемане на възстановяването в рамките на най-кратко време. Висококачественият VITA материал предлага възможно най-голяма поносимост от страна на тъканите и дълъг живот на възстановяването.



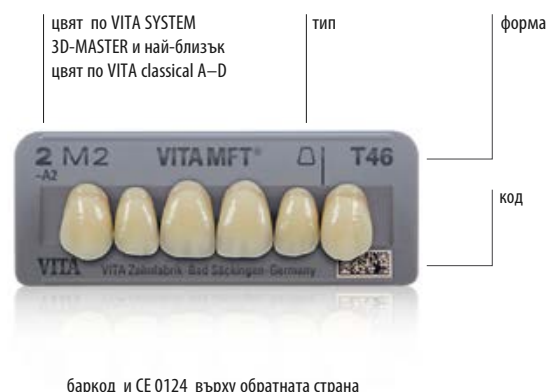

Целият спектър на индикации се покрива от компактен асортимент от зъби. Скромно и хармонично съчетаното предложение от форми и цветове гарантира висока ефективност.

Мултифункционалните зъби VITA MFT са подходящи за:

- Тотални протези
- Имплантатни протези
- Телескоп-конструкции
- Протези със стави
- Моделноляти протези
- Временни решения



#### Асортиментът от цветове на VITA MFT покрива

- 13 цвята от разцветката VITA SYSTEM 3D-MASTER

| VITA SYSTEM 3D-MASTER |       |     |      |              |       |     |        |       |      |      |     |     |
|-----------------------|-------|-----|------|--------------|-------|-----|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 1M1                   | 2L1.5 | 2M1 | 2M2  | 3L1.5        | 3L2.5 | 3M2 | 3R2.5  | 4L1.5 | 4M2  | 5M1  | 0M1 | 0M3 |
| ~ B1                  | ~ B2  |     | ~ A2 | ~ C2<br>~ D4 | ~ B3  |     | ~ A3.5 |       | ~ A4 | ~ C4 |     |     |

- 13 цвята от разцветката VITA classical A-D

| VITA classical A-D |     |    |       |     |     |       |       |       |    |     |    |       |
|--------------------|-----|----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|----|-----|----|-------|
| A1                 | ~A2 | A3 | ~A3.5 | ~A4 | ~B1 | ~B2   | ~B3   | ~C2   | C3 | ~C4 | D3 | ~D4   |
|                    | 2M2 |    | 3R2.5 | 4M2 | 1M1 | 2L1.5 | 3L2.5 | 3L1.5 |    | 5M1 |    | 3L1.5 |




VITA MFT се произвеждат в:

- 12 форми за горен фронт (в 4 групи по типове)
- 5 форми за долен фронт
- 3 форми за долни и 3 форми за горни странични зъби

Доставят се като гарнитури от 6 зъба (фронтове) или 8 зъба (странични) и гарнитури от 28 зъба. Доставка се също и комплект с мостри на всички форми.

С уникалната система VITA SYSTEM 3D-MASTER всички естествени цветове на зъби се определят систематично и се възпроизвеждат изцяло.

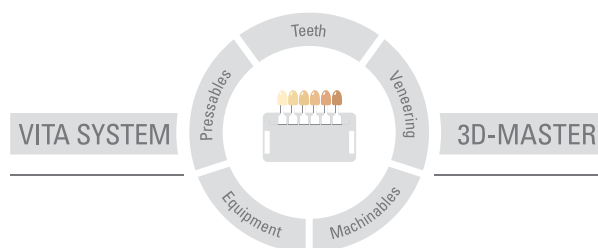

**Да се има предвид:** Нашите продукти трябва да се използват съгласно данните за употреба. Не поемаме отговорност за щети, които произтичат от некомпетентно боравене или обработка. Потребителят в останалите случаи се задължава преди употреба да провери продукта за неговата пригодност за предвидената област на използване. Отговорност от наша страна е изключена, когато продуктът се обработва в недоговорено, съответно непозволено съчетание с материали и устройства на други производители. В останалите случаи нашата отговорност за достоверността на тези данни, независимо от правното основание и доколкото е допустимо по закон, във всеки случай се ограничава до стойността на доставената стока съгласно фактурата без ДДС. По-специално ние не носим отговорност, доколкото е разрешено по закон, в никакъв случай за пропуснати ползи, за косвени щети, за произтичащи от това щети или за претенции на Трети лица към Купувача. Претенции за обезщетение на щети поради отговорност за вина (виновност при сключване на договор, лошо изпълнение на договора, непозволено увреждане и др.) са в сила само в случай на умисъл или груба небрежност. Издаване на тази информация за потребителя: 01.15

С изданието на тези данни за употреба всички досегашни издания стават невалидни. Актуалната версия за момента ще намерите на адрес [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik е сертифицирана по Директивата за медицински продукти и следният продукт носи обозначението **CE**<sub>0124</sub> :  
**VITA MFT®**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)