

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informační prospekt o výrobku



VITA určování barev

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Platí k: 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Dostupné v odstínech VITA SYSTEM 3D-MASTER
a VITA classical A–D




V souladu s přírodou

Rozhodnutí pro VITA MFT znamená plus v každém ohledu.

Třívrstvé zuby s věrnou stavbou – obzvláště pěkně to je vidět u předních zubů – splňují všechna kritéria pro náhradu, která uspokojí každého pacienta:

- Opalescence, luminiscence a translucence – v přirozeně působivé morfologii a ideálně sladěny s individuální strukturou mamelonu – vytvářejí souhru barev s bohatými nuancemi a zajišťují živé odrážení světla u každého jednotlivého zubu.
- Lehce vypouklý tvar labiálních ploch podporuje cílené tvarování rtů a podporují tím dentofaciální harmonii.
- Díky přirozenému vytvarování palatinálních ploch si každý pacient zachová své fonetické schopnosti a jeho jazyk si nemusí zvykat na novou situaci.
- Bělavý incisální okraj jako speciální zvýraznění umocňuje vynikající estetiku předních zubů VITA MFT.

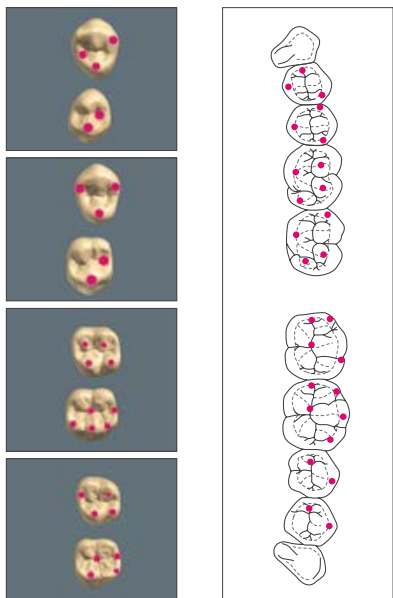

Nejvyšší produktivita

Tvarování žvýkacích ploch u VITA MFT vychází z inovativního principu easy-centric, tzn. že zuby jsou vytvářeny tak, že se optimální centrika objevuje téměř jakoby sama od sebe.


- easy-centric nabízí profesionální a racionální stavbu a zajišťuje bezpečné nalezení okluze, čímž vede k vyšší produktivitě v kvalitě hodné pacienta.
- Předabradované reliéfy žvýkacích ploch ve spodní čelisti minimalizují horizontální posuvné síly a podporují ideální statické vycentrování protézy. Toto je obzvláště důležité u protéz s implantátem.



- Ideální tvarování hrbolku v horní čelisti automaticky zajišťuje správnou centriku a pacientovi nabízí maximální pohodlí při žvýkání.
- Bazální kavita dovoluje významně omezit broušení a zvětšuje plochu pro bezpečné spojení se základním materiálem protézy.




- Lehce rozšířené oblasti zubních krčků u předních a postranních zubů redukuje náklady na tvarování interdentálního prostoru k dosažení přirozeného vzhledu, který odpovídá věku pacienta.

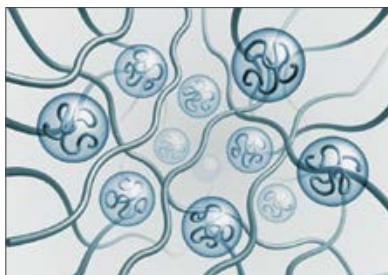


PMMA perličky síťovaný PMMA

Odolnost proti dvoutělesové abrazi¹

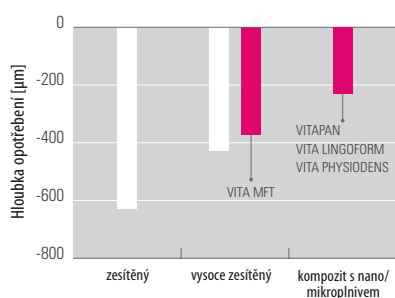

¹ Výsledky testů ze studie odolnosti proti abrazivnímu opotřebení in-vitro provedené na univerzitní klinice v Regensburgu v listopadu 2009

Odolnost proti dvoutělesové abrazi¹

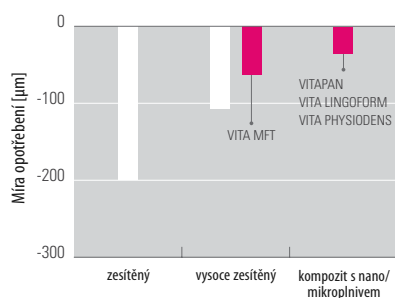

¹ Výsledky testů ze studie odolnosti proti abrazivnímu opotřebení in-vitro provedené na univerzitní klinice v Regensburgu v listopadu 2009

Vynikající kvalita materiálů

je zajištěna použitím vysoce zesítěného akrylového polymeru, který vyniká prvotřídní denzitou rovnoměrně po celém zubu a jedinečnou biokompatibilitou.

- barevně stabilní
- odolný proti obrušování
- šetrný vůči tkáni
- odolný proti plaku
- při broušení se netřítí
- výborně se leští
- dobře se pojí se základním materiálem protéz
- neobsahuje zbytkové monomery
- odolný vůči prasklinám

Bezstarostní a spokojení pacienti

díky VITA MFT. Živý účinek zubů podporuje jejich přirozený vzhled a vede k přijetí zubní náhrady během velice krátké doby. Jakostní materiál ve známé kvalitě VITA nabízí maximálně možnou snášenlivost s tkání a vysokou životnost zubní náhrady.





Kompletní indikační spektrum v sympaticky kompaktním sortimentu VITA MFT. Harmonicky sestavená a redukováná nabídka barev/tvarů zajišťuje vysokou hospodárnost.

Multifunkční zub VITA MFT je určen pro:

- totální protetiku
- implantační protetiku
- teleskopické a kónusové konstrukce
- zásuvné spoje
- modelové odlévané protézy
- provizorium



Nabídka barev odstínů zubů VITA MFT

- 13 odstínů VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 odstínů VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.


Balení VITA MFT obsahuje:

- 12 tvarů předních zubů pro horní čelist
(ve 4 typových tvarových skupinách)
- 5 tvarů předních zubů pro dolní čelist
- 3 tvary postranních zubů pro horní a 3 tvary pro dolní čelist

Druhy balení: soupravy po 6 a po 8, soupravy po 28,
„živá“ kartička tvarů



Pomocí jedinečného VITA SYSTEM 3D-MASTER můžete systematicky určovat a dokonale reprodukovat všechny přirozené barvy zubů.

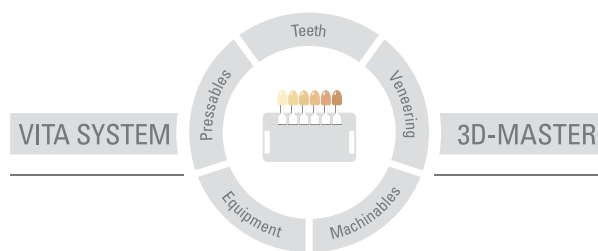

Upozornění: Naše produkty používejte v souladu s informacemi o jejich použití. Neručíme za žádné škody, které vzniknou v důsledku neodborné manipulace nebo zpracování. Uživatel je ostatně povinen si před použitím produktu ověřit, zda je produkt vhodný pro zamýšlenou oblast použití. Nárok na záruku je rovněž vyloučen tehdy, když je produkt použit v neslučitelné resp. nepřipustné kombinaci s materiály nebo přístroji jiného výrobce. Naše ručení za správnost těchto údajů nezávislé na právním důvodu, a pokud tak zákon připouští, je mimoto v každém případě omezeno na hodnotu dodaného zboží podle faktury bez DPH. Zejména neručíme, pokud tak zákon připouští, v žádném případě za ušlý zisk, nepřímé škody, za následné škody nebo nároky třetích osob vůči kupujícímu. Nároky na náhradu škody v závislosti na zavinění (provinění při uzavření smlouvy, následné nedodržení smlouvy, nedovolené jednání atd.) vznikají pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. VITA Modulbox není nutnou součástí výrobu.

Datum vydání tohoto informačního materiálu: 01.15

Vydáním těchto informací k používání pozbývají veškerá dosavadní vydání platnost. Aktuální verzi naleznete na stránkách www.vita-zahnfabrik.com

Společnost VITA Zahnfabrik je certifikována podle směrnic pro medicínské výrobky a následující produkty nesou značku **CE**₀₁₂₄ :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)