

# VITA MFT®

Multi Functional Teeth

## Información sobre el producto



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 01.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**

Disponible en colores VITA SYSTEM 3D-MASTER  
y VITA classical A-D




### **En armonía con la naturaleza**

La apuesta por VITA MFT tiene ventajas en todos los aspectos. Con una forma fiel al modelo de la naturaleza, los dientes de tres capas cumplen todos los criterios para confeccionar restauraciones que satisfagan a los pacientes, tal como puede apreciarse especialmente bien en los dientes anteriores VITA MFT:

- En una combinación óptima con una morfología de aspecto natural y mamelones individuales, la opalescencia, la luminiscencia y la translucidez producen un juego cromático rico en matices y un comportamiento natural de reflexión de la luz en cada uno de los dientes.
- Las superficies labiales ligeramente convexas facilitan la conformación correcta de los labios y favorecen la armonía dentofacial.
- Las superficies palatinas con una forma idéntica a las naturales preservan las capacidades fonéticas del paciente y conservan la sensación acostumbrada de su lengua.
- El borde incisal blanquecino constituye un hito adicional que apoya la excelente estética de los dientes anteriores VITA MFT.

## VITA MFT® El montaje, ahora más sencillo

Multi Functional Teeth

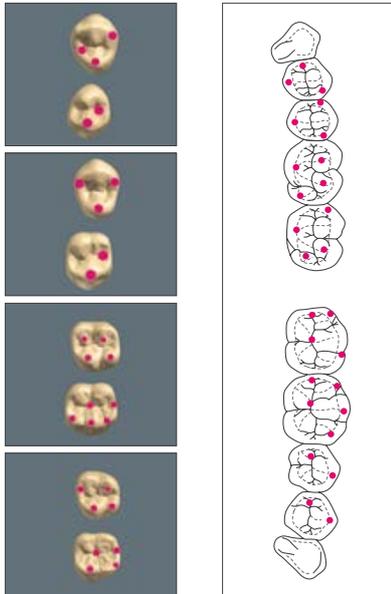

### La más alta productividad

La conformación de las superficies oclusales de VITA MFT se basa en el innovador principio easy-centric, es decir, la forma de las mismas permite encontrar la céntrica óptima sin dificultad alguna.


- easy-centric garantiza un montaje profesional y racional, asegura una buena oclusión y permite una elevada productividad con una calidad adecuada.
- Los relieves oclusales preabrasionados de los dientes inferiores minimizan las fuerzas de traslación horizontales y favorecen la orientación estática óptima de la prótesis, un factor especialmente importante en caso de prótesis implantosoportadas.



- La conformación ideal de las cúspides de los dientes superiores lleva automáticamente a la céntrica correcta y proporciona al paciente el máximo confort masticatorio.
- La cavidad basal permite reducir de forma considerable el trabajo de desbastado y aumenta la superficie para asegurar una unión segura al material de base de la prótesis.




- Los cuellos dentales ligeramente más amplios de los dientes anteriores y posteriores facilitan la configuración natural del espacio interdental de acuerdo con la edad del paciente.

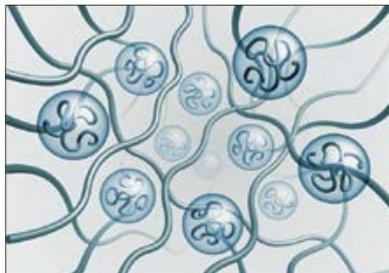


perlas de PMMA      PMMA reticulado

**Resistencia al desgaste de dos cuerpos<sup>1</sup>**

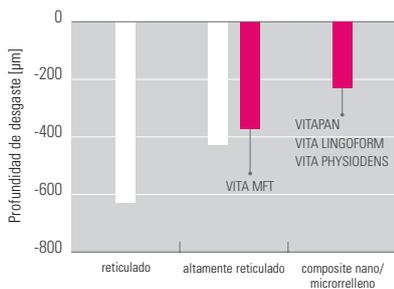

<sup>1</sup> Resultados del ensayo de resistencia al desgaste in vitro realizado por el Hospital Universitario de Ratisbona, nov. 2009

**Resistencia al desgaste de dos cuerpos<sup>1</sup>**

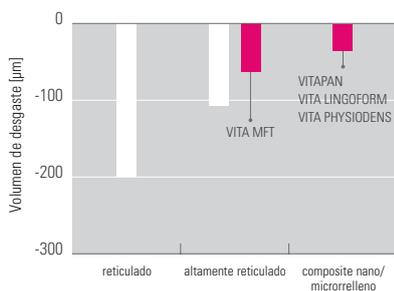

<sup>1</sup> Resultados del ensayo de resistencia al desgaste in vitro realizado por el Hospital Universitario de Ratisbona, nov. 2009

**La excelente calidad del material**

está asegurada gracias al material sintético altamente reticulado que se caracteriza por una extraordinaria densidad del material en todo el diente y una excelente biocompatibilidad.

- estabilidad cromática
- resistente a la abrasión
- tacto agradable a los tejidos
- resistente a la formación de placa
- desbastado sin astillamiento
- excelente facilidad de pulido
- buena unión con el material de base de la prótesis
- libre de monómeros residuales
- resistente al craquelé

**Pacientes contentos y sin preocupaciones**

gracias a VITA MFT. El aspecto vivo de los dientes proporciona una imagen natural y asegura la aceptación de la prótesis por parte del paciente en muy poco tiempo. El material de alta calidad de VITA ofrece la mayor compatibilidad con los tejidos y garantiza una larga duración de la prótesis.



# VITA MFT® Un máximo de rentabilidad

Multi Functional Teeth



Código de barras y marcado CE 0124 en el dorso

Todo el espectro de indicaciones en el cómodo surtido compacto VITA MFT. La oferta compacta y bien adaptada de colores y formas garantiza una alta rentabilidad.

Los dientes multifuncionales VITA MFT están indicados para:

- Prótesis completas
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis combinadas con ataches
- Prótesis esqueléticas
- Soluciones provisionales



## La gama de colores de VITA MFT incluye:

- 13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 colores VITA classical A–D

VITA classical A–D													
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4	
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5	




Los dientes VITA MFT están disponibles en

- 12 formas de dientes anteriores superiores (en 4 grupos de formas típicas)
- 5 formas de dientes anteriores inferiores
- 3 formas de dientes posteriores superiores y 3 de dientes posteriores inferiores

Presentaciones: tablillas de 6 y de 8, tablillas de 28, estuche de formas vivas

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

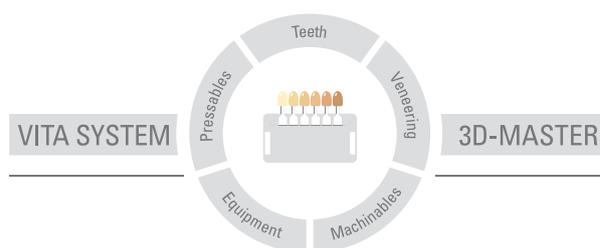

**Nota importante:** Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 01.15

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vitazahnfabrik.com](http://www.vitazahnfabrik.com)

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado **CE** 0124 :

**VITA MFT®**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)