

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Terméktájékoztató



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2015.01

VITA shade, VITA made.

VITA

Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER
és VITA classical A–D színekben




Összhangban a természettel

Aki VITA MFT mellett dönt, minden szempontból nyer.

A természetessel azonos felépítésű három rétegű fogak a páciensek igényeit kielégítő fogpótlások minden kritériumát teljesítik. Ez főképp VITA MFT frontfogaknál mutatkozik meg szembetűnően.

- Az opaleszcencia, lumineszcencia és translucencia – természetesnek ható morfológiában és egyedi mamelonszerkezetben ideálisan egymásra épülve – árnyalatokban gazdag színvilágot és életteli fényreflexiót alakít ki minden egyes fognál.
- Az enyhén konvex kialakítású labiális felszín célzottan támogatja az ajakformálást, ezáltal elősegíti a dentofaciális harmóniát.
- A természetessel azonos kialakítású palatinális felszín valamennyi páciens számára biztosítja a hangképzés zavartalanságát és a megszokott nyelvérzést.
- A fehéres incizális tartomány hangsúlyozza VITA MFT frontfogak kiváló esztétikáját.

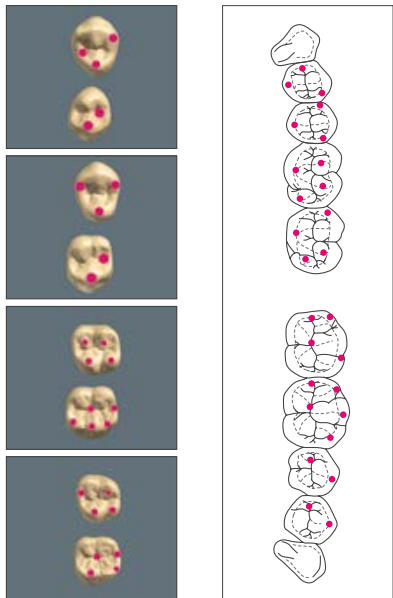

Maximális termelékenység

VITA MFT rágófelszínének kialakítása az innovatív easy-centric fogfelállítási elven alapul, azaz a rágófelület úgy van kialakítva, hogy az optimális centrikus reláció szinte magától beáll.


- Az easy-centric biztosítja a professzionális és racionális fogfelállítást az okklúzió pontos meghatározásával, és a páciensek elvárásainak megfelelő minőség mellett magas termelékenységhez vezet.
- Az alsó állkapcsban az előzetesen lecsiszolt rágófelszín minimálisra csökkenti a horizontális tolóerőt, ezzel elősegítve a protézis ideális statikai felépítését. Ez különösen fontos implantátumon elhorgonyzott fogpótlásnál.



- A felső állkapcsban ideálisan kialakított csücsök automatikusan helyes centrális helyzethez vezet, és a páciens számára maximális rágási komfortot biztosít.
- A bazális kavitással jelentősen csökkenthető a csiszolási munka, a megnövekedett felület révén pedig biztosabb kötés jön létre a protézisanyaggal.




- Frontfogaknál és oldalsó fogaknál enyhén kiszélesedett fognyak mellett kevesebb ráfordítással alakítható ki a természetes, életkornak megfelelő interdentalis tér.

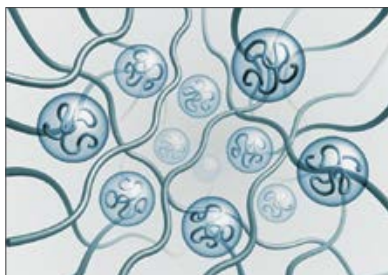


PMMA-gyöngyök térhálós PMMA

Felületpár kopási ellenállása¹

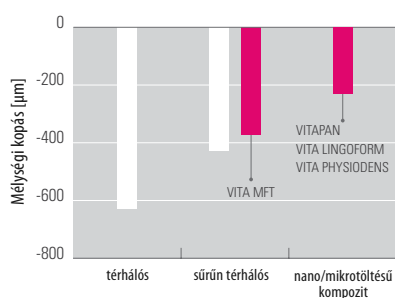

¹ A Regensburgi Egyetemi Klinika in-vitro kopás ellenállósági vizsgálatának eredményei, 2009. november

Felületpár kopási ellenállása¹

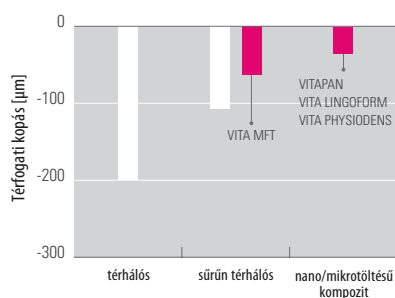

¹ A Regensburgi Egyetemi Klinika in-vitro kopás ellenállósági vizsgálatának eredményei, 2009. november

Kitűnő anyagminőség

a sűrűn térhálós akril anyag használatának köszönhetően, melyet a fog teljes terjedelmében következetesen megmutatkozó elsőrendű anyagsűrűség és kiváló biokompatibilitás jellemez.


- színtabil
- kopásálló
- szövetbarát
- plakkal szemben ellenálló
- szilánkmentesen csiszolható
- kitűnően polírozható
- jó kötést biztosít protézis-alapanyaghoz
- maradék monomerektől mentes
- hajszálrepedésekkel szemben ellenálló

Gondtalan és elégedett páciensek

VITA MFT jóvoltából. A fogak élettelinek hatnak, ami természetes megjelenést kölcsönöz és lehetővé teszi, hogy a fogpótlást a lehető legrövidebb idő alatt megszokják. A megszokott kiváló VITA-minőségben kínált anyag szövetbarát jellege kimagasló, hosszú élettartamot biztosít a fogpótlásnak.



VITA MFT® A gazdaságosság maximuma

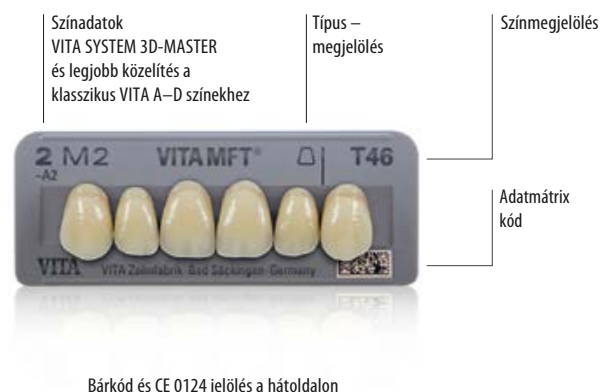

Teljes indikációs spektrum rokonszenvesen kompakt VITA MFT szortimentben. A következetes, harmonikusan összeállított szín- és formaválaszték kiemelkedő gazdaságosságot biztosít.

VITA MFT multifunkciós fog alkalmas

- teljes protetikához
- implantációs protetikához
- teleszkópos és kónuszos munkákhoz
- csúsztatóval elhorgonyzott fogpótláshoz
- fémlemezes munkákhoz
- ideiglenes megoldásokhoz



VITA MFT színkínálatában található

- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER szín

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 VITA classical A–D szín

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.


VITA MFT fogak rendelhető fajtái:

- 12 frontfog forma (felső állkapocs)
(fogtípusok szerint 4 csoportra osztva)
- 5 frontfog forma (alsó állkapocs)
- 3-3 oldalfog forma (felső és alsó állkapocs)

Szállítás: 6 és 8 darabos garnitúra, 28 darabos garnitúra, élethű formaválaszték



Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében reprodukálható.

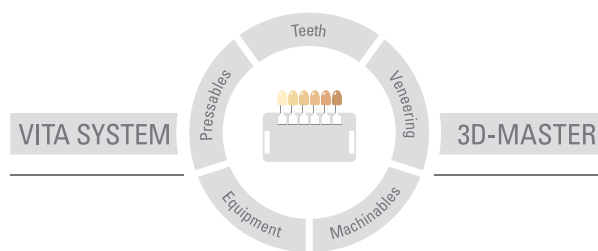

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket. Továbbá felelősségünk az adatok helyességéért a jogi alaptól függetlenül és - amennyiben törvényesen megengedett - minden esetben csak a szállított áru számla szerinti, forgalmi adó nélküli értékére korlátozódik. Amennyiben a törvény megengedi, különösen nem vállalunk felelősséget elmaradt haszon, közvetett károk, következménykárok, vagy vevővel szemben fellépő harmadik személyek követeléseinek tekintetében. Mulasztás miatti kártérítési igény (hibás szerződéskötés, szerződésszegés, nem megengedett cselekmény, stb.) csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében indokolt. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek.

Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2015.01.

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a www.vita-zahnfabrik.com oldalon.

VITA Zahnfabrik az orvosi termékekre vonatkozó irányelvek szerint került certifikálásra és az alábbi termék viseli a **CE** 0124 jelzést:

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)