

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA


Disponibili in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER
e VITA classical A-D



In sintonia con la natura

L'uso dei denti VITA MFT è un valore aggiunto sotto ogni aspetto. I denti a tre strati molto naturali – come è ben riconoscibile negli anteriori VITA MFT – soddisfano tutte le esigenze di una protesi che gratifichi pienamente il paziente:

- Opalescenza, luminescenza e traslucenza – adattate tra loro in modo ottimale per realizzare una morfologia piacevolmente naturale ed una struttura individuale dei mammelloni – producono un gioco di colori ricco di sfumature ed un comportamento di riflessione della luce estremamente vitale in ogni singolo dente.
- Superfici labiali leggermente convesse sostengono in modo mirato le labbra favorendo l'armonia dento-facciale.
- Superfici palatali con una configurazione altamente naturale consentono ad ogni paziente di conservare capacità fonetiche e sensazione linguale abituali.
- Il bordo incisale tendente al bianco favorisce ulteriormente l'eccellente estetica dei denti frontali VITA MFT.

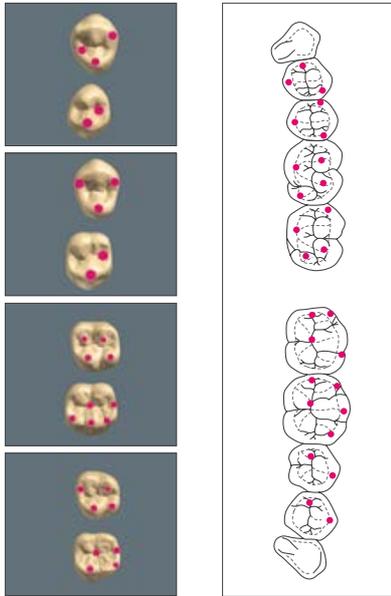

Massima produttività

La configurazione delle superfici occlusali dei denti VITA MFT si basa sull'innovativo principio easy-centric. Le superfici occlusali sono configurate in modo che la centrica ottimale si attui quasi automaticamente.

- Easy-centric offre un montaggio professionalmente corretto e razionale con identificazione sicura dell'occlusione, perciò elevata produttività ed insieme risposta alle aspettative del paziente.
- Rilievi occlusali preabrasati negli inferiori minimizzano le forze di spinta orizzontali e agevolano il posizionamento statico ideale della protesi. Questo è di particolare importanza per le riabilitazioni su impianti.




- La configurazione ottimale delle cuspidi nei superiori porta automaticamente nella corretta posizione di centrica, assicurando al paziente il massimo confort di masticazione.
- La cavità basale consente una significativa riduzione dei lavori di molaggio ed incrementa la superficie per un legame sicuro con il materiale per basi di protesi.



- L'area cervicale leggermente allargata negli anteriori e posteriori agevola la configurazione delle zone interdentali in funzione dell'estetica e dell'età.

VITA MFT® Qualità senza compromessi

Multi Functional Teeth

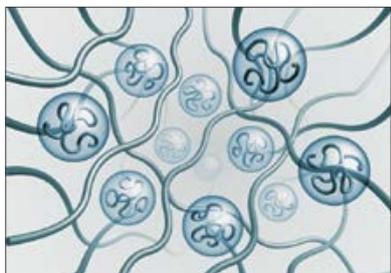


● Perle PMMA ■ PMMA reticolato

Eccellente qualità merceologica

E' assicurata dal polimetilmetacrilato ad elevata reticolazione, che si distingue per l'elevata densità in tutto il dente e l'eccellente biocompatibilità.

- cromaticamente stabile
- resistente all'abrasione
- rispettoso dei tessuti molli
- resistente alla placca
- possibilità di molaggio senza scheggiature
- lucidabilità eccellente
- legame ottimale con i materiali a base di protesi
- privo di monomero residuo
- resistente alla formazione di crepe

Resistenza all'abrasione a due corpi¹

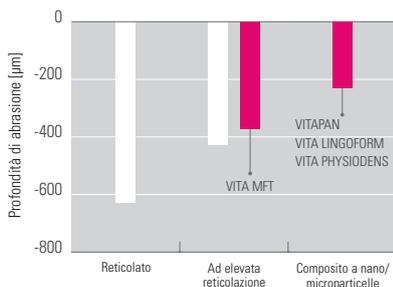


¹ Risultati di uno studio in vitro sulla resistenza all'abrasione, Clinica Universitaria di Regensburg, nov. 2009

Pazienti soddisfatti e sereni

grazie ai VITA MFT. La vitalità dei denti VITA MFT favorisce un aspetto naturale e l'accettazione della riabilitazione in brevissimo tempo. Il materiale, in affermata qualità VITA, assicura la massima biocompatibilità ed un'elevata durata della protesi.

Resistenza all'abrasione a due corpi¹

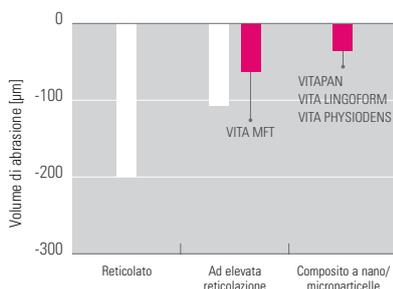

¹ Risultati di uno studio in vitro sulla resistenza all'abrasione, Clinica Universitaria di Regensburg, nov. 2009



VITA MFT® Massima redditività
Multi Functional Teeth



Codice a barre e CE 0124 sul retro.

L'assortimento VITA MFT opportunamente contenuto copre tutte le indicazioni. Una gamma di colori e forme ottimizzata ma armoniosa assicura elevata redditività.

I denti multifunzione VITA MFT sono indicati per:

- Protesi totale
- Protesi su impianti
- Protesi telescopica e conica
- Protesi con attacchi
- Protesi scheletrata
- Protesi di riabilitazione



I denti VITA MFT sono disponibili in

- 13 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 colori VITA classical A-D

VITA classical A-D													
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4	
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5	


I denti VITA MFT sono disponibili in

- 12 forme anteriori superiori (suddivise in 4 gruppi)
- 5 forme anteriori inferiori
- 3 forme posteriori superiori ed inferiori

Presentazione: file da 6 e da 8, bocche da 28, campionario vivente



Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

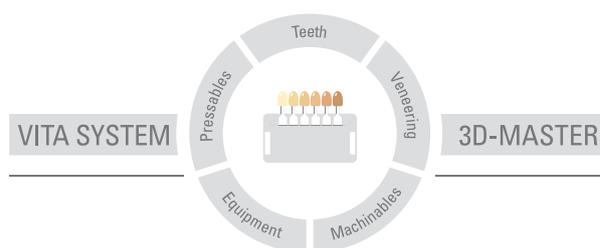

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di questa informazione per l'uso: 01.15

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA ZAHNFABRIK è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati **CE** 0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)