

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Productinformatie



VITA kleurbepaling

VITA kleurcommunicatie

VITA kleurreproductie


VITA kleurcontrole

Uitgiftedatum: 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA


Verkrijgbaar in VITA SYSTEM 3D-MASTER
en VITA classical A-D kleuren

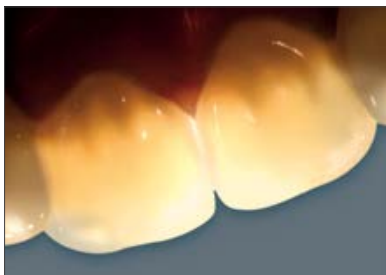

In harmonie met de natuur

Kiezen voor VITA MFT betekent in elk opzicht een toegevoegde waarde. Het natuurgetrouwe uitzicht van de tanden, opgebouwd uit minstens drie lagen – deels zichtbaar bij de VITA MFT fronttanden – zorgt ervoor dat aan alle criteria van een goede restauratie wordt voldaan en dat de wensen van de patiënt worden vervuld:

- Opalescentie, luminescentie en transluscentie – met een natuurlijk ogende morfologie en individuele mamelonstructuur – zorgen voor een kleurspel dat zowel rijk genuanceerd is als levendig gereflecteerd wordt in elke tand afzonderlijk.
- Het convexe ontwerp van de labiale facetten ondersteunt de vorm van de lippen en bevordert op die manier de dentofaciale harmonie.
- Het natuurgetrouwe design van het palatale vlak bewaart de fonetische vaardigheden van elke patiënt en het tongcontact dat hij/zij gewoon is.
- Het wit-translucente karakter van het glazuur ondersteunt de bijzondere esthetiek van de MFT tanden.

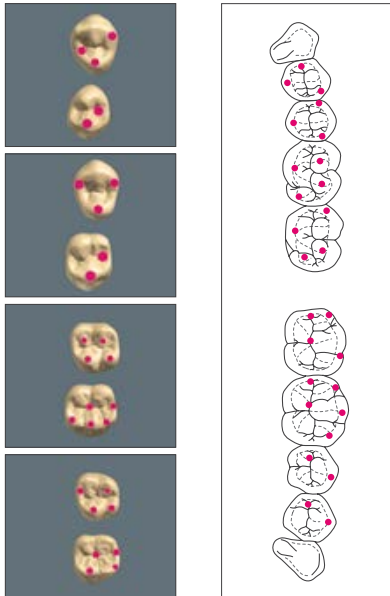

Hoogste productiviteit

Het VITA MFT ontwerp van de kauwvlakken is gebaseerd op het innovatieve easy-centric principe, wat betekent dat de kauwvlakken zodanig ontworpen zijn dat, bijna automatisch, de perfecte centrale relatie bereikt wordt.


- Easy-centric staat garant voor een professioneel alsook een eenvoudig opstellen. Bovendien resulteert dit in een hoge productiviteit die voldoet aan de behoeften van de patiënt.
- Pre-abrasieve occlusale vlakken van de onderste fronttanden hebben tot doel de horizontale krachten te verminderen en zorgen zo voor de ideale statische uitlijning van de prothese. Dit is vooral belangrijk bij implantaatgedragen prothesen.



- Het ideale ontwerp van de knobbels van de bovenste molaren zorgt voor een correcte centrale relatie en biedt de patiënt optimaal kauwcomfort.
- De uitgeholde vorm van het basale vlak vermindert aanzienlijk het slijpwerk en vergroot bovendien het oppervlak voor een optimale chemische hechting met de basiskunststof.




- Iets bredere tandhalzen zorgen voor minder werk en een natuurgetrouw en leeftijdsspecifiek ontwerp van de interdentale ruimte.

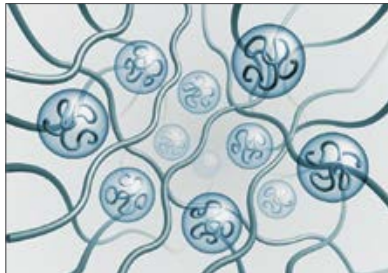


PMMA-parels cross-linked PMMA

Two-Body Wear Resistance¹

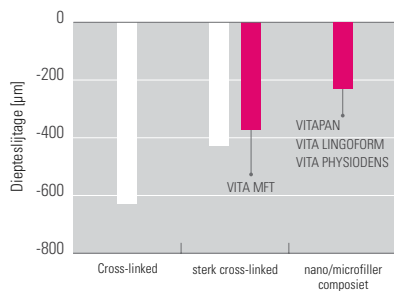

¹ Testresultaten van in vitro studie over slijtvastheid van de Universiteitskliniek Regensburg, November 2009

Two-Body Wear Resistance¹

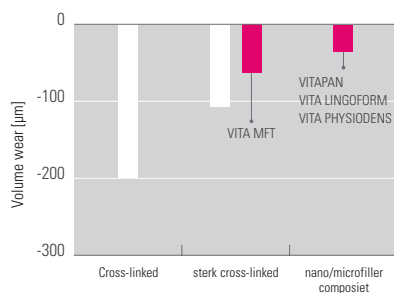

¹ Testresultaten van in vitro studie over slijtvastheid van de Universiteitskliniek Regensburg, November 2009

Een uitstekende kwaliteit van het materiaal

is gewaarborgd door het gebruik van sterk cross-linked acrylmateriaal dat uitblinkt door uitmuntende materiaaldichtheid consistent doorheen de hele tand en door een uitstekende biocompatibiliteit.

- kleurstabiel
- slijtvast
- weefselvriendelijk
- plaquebestendig
- splintervrij te beslijpen
- uitstekend te polijsten
- perfecte hechting aan het prothesemateriaal
- vrij van restmonomeren
- craquelé bestendig

Zorgeloze en tevreden patiënten

Dankzij VITA MFT. De levendige indruk van de tanden bevordert een natuurlijk voorkomen en zorgt ervoor dat de patiënt de restauratie snel accepteert. Dit uitstekende materiaal in de welgekende VITA kwaliteit zorgt voor een maximale weefselcompatibiliteit en duurzame restauraties.



VITA MFT® Maximale efficiëntie

Multi Functional Teeth



Een breed indicatiebereik in een gestroomlijnde VITA MFT productreeks. Een compact en harmonieus aanbod van kleuren en vormen zorgt voor een efficiëntere investering.

De multifunctionele VITA MFT tand is geschikt voor:

- Totale prothesen
- Implantaten
- Telescopische en conische constructies
- Attachement kunstgebitten
- Partiële prothesen
- Provisorische prothesen



Het kleurengamma van VITA MFT Omvat

- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER kleuren

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 VITA classical A-D kleuren

VITA classical A-D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5




VITA MFT is verkrijgbaar in

- 12 sets fronttanden boven
(in 4 specifieke vormgroepen)
- 5 sets fronttanden onder
- 3 sets zijdelingse tanden boven en 3 sets
zijdelingse tanden onder

Verkrijgbare modellen: Sets van 6 of 8 tanden,
set van 28 tanden, levende vormenkaart.

Dankzij het unieke VITA SYSTEM 3D-MASTER kunnen alle natuurlijke tandkleuren systematisch bepaald en gereproduceerd worden.

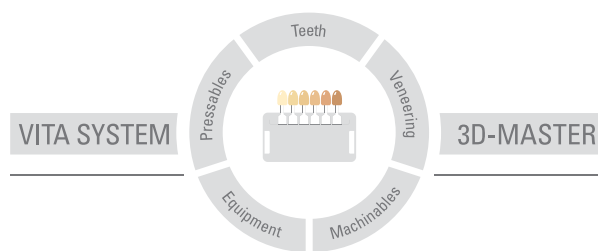

Let op: Onze producten moeten gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste handelingen of gebruik. De gebruiker is tevens verplicht om het product voor gebruik te controleren of het geschikt is voor het toepassingsgebied. Wij dragen geen verantwoordelijkheid indien het product gebruikt wordt in combinatie met porselein en met materialen van andere producenten die niet compatibel of goedgekeurd zijn voor gebruik met ons product. Bovendien is onze verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie rechtsonafhankelijk, in zover legaal toegestaan, en is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen exclusief omzetbelasting. In het bijzonder zijn we, voor zoverre legaal toegestaan, niet aansprakelijk voor winstverlies, indirecte schade, gevolgschade of klachten van derde partijen tegen de koper. Schadeclaims op basis van schuld aansprakelijkheid (culpa in contrahendo, contractbreuk, onwetige handelingen, enz.) kunnen enkel ingediend worden in geval van bewuste of grote nalatigheid. De VITA modulebox is geen noodzakelijk onderdeel van het product. Uitgiftedatum van deze gebruiksaanwijzingen: 01.15

Deze handleiding vervangt alle vorige uitgaven. De meest recente versie vindt u op www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik is gecertificeerd volgens de Medical Device Directive; de volgende producten dragen het kenteken  0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
 Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik