

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Data wydania 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA


Dostępne w kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER
i VITA classical A–D



W harmonii z naturą

Decyzja wyboru zębów konfekcyjnych VITA MFT oznacza w każdym przypadku dodatkowe korzyści. Naturalny wygląd zębów to przede wszystkim budowa trójwarstwowa, szczególnie widoczna w zębach przednich. VITA MFT spełnia wszystkie kryteria anatomicznofizjologiczne i dlatego satysfakcjonuje naszych pacjentów.

- Opalescencja, luminescencja i przezierność, czyli perfekcyjny dobór cech morfologicznych jak np. indywidualna struktura mamelonów, czego efektem jest naturalne odbicie światła oraz gra kolorów pełna niuansów.
- Anatomiczny przebieg krzywizny wargowej umożliwia dokładne i fizjologiczne wyznaczenie pozycji zęba. Dyskretny kontur szyjek zębów umożliwia wykonanie właściwych kieszonek dziąsłowych, dopasowanych do każdej grupy wiekowej.
- Identyczna z naturą powierzchnia podniebienna to poprawna fonetyka oraz fizjologiczne ułożenie języka pacjenta.
- Estetyka zębów przednich VITA MFT podkreślona została przez białawy brzeg sieczny.

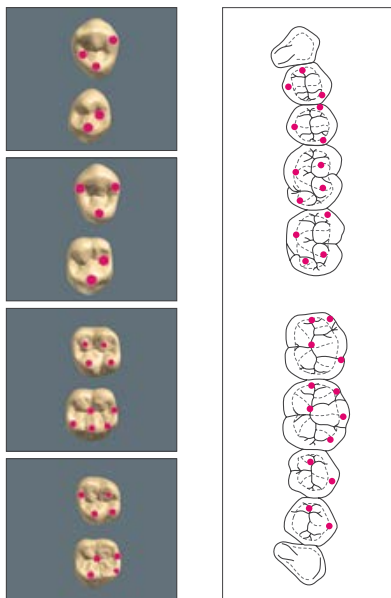


Najwyższa wydajność

Zęby konfekcyjne VITA MFT to zęby wielofunkcyjne i można je wykorzystać w każdej koncepcji ustawiania zębów. Budowa powierzchni redukuje siły poprzeczne działające poziomo i odciąża podłoże protezy. Kształt i wielofunkcyjność powierzchni pozwala na szybkie i właściwe ustawienie zębów na siodłach protezy. Dzięki funkcjonalnym powierzchniom okluzyjnym, zęby można zastosować w ustawkach statycznych i w ten sposób zredukować w znacznym stopniu negatywne działanie sił na podłoże protezy, czyli śluzówkę i wyrostek zębodołowy. Punkty kontaktowe powierzchni żującej łatwo określają właściwą okluzję.

- Znakomity kształt ułatwia właściwe przyporządkowanie zębów w czasie ustawiania oraz wymiennie skraca czas pracy. Poza tym prowadzi to do wysokiej wydajności dostosowanej do potrzeb pacjenta.
- Wstępne „doszlifowanie” punktów okluzyjnych w zgryzie dolnych zębów bocznych minimalizuje poziome siły ścinające i wspiera tym samym idealne ustawienie protezy. Jest to szczególnie ważne w implanto-protetyce.
- Idealna budowa guzków górnych zębów bocznych zapewnia zwarcie centralne i optymalny komfort żucia dla pacjenta.
- Właściwe ukształtowanie powierzchni retencyjnej redukuje szlifowanie i zwiększa przyczepność i połączenie z materiałem podłoża protezy.




- Nieznacznie poszerzone obszary szyjkowe w zębach przednich z łagodnym przejściem od szyjki do korony zęba, zezwalają na wiekowo adekwatną modelację woskową, zachowanie właściwej higieny oraz skuteczne zamknięcie przestrzeni międzyzębowych.

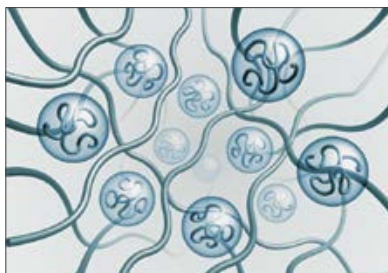


Perełki PMMA usieciowane PMMA

Oporność na ścieranie¹

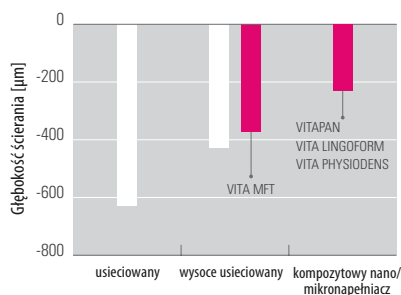

¹ Wyniki badań in vitro oporności na ścieranie Universitätsklinikum Regensburg, listopad 2009

Oporność na ścieranie¹

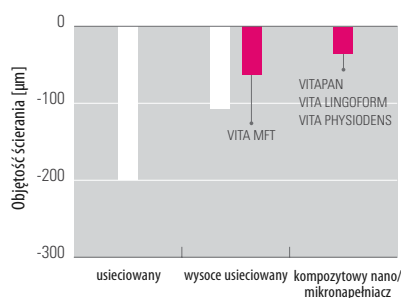

¹ Wyniki badań in vitro oporności na ścieranie Universitätsklinikum Regensburg, listopad 2009

Doskonała jakość materiału


jest zagwarantowana przez użycie gęsto usieciowanego materiału akrylowego, który wyróżnia się pierwszorzędną gęstością. Homogeniczna budowa warstw w całym zębie gwarantuje znakomitą biokompatybilność.

- stabilny kolor
- odporny na abrazję
- przyjazny tkankom
- odporny na tworzenie się złogów
- szlifowanie bez odprysków
- doskonałe właściwości polerowania
- doskonale łączy się z materiałem protezy
- wolny od monomeru resztkowego
- odporny na złamania

Komfort pacjentów

Kształt i kolor zębów wspomaga naturalny wygląd i prowadzi do bardzo szybkiej akceptacji uzupełnienia przez pacjenta. Pierwszorzędny materiał znanej z jakości firmy VITA posiada maksymalną zgodności tkankową oraz trwałość.



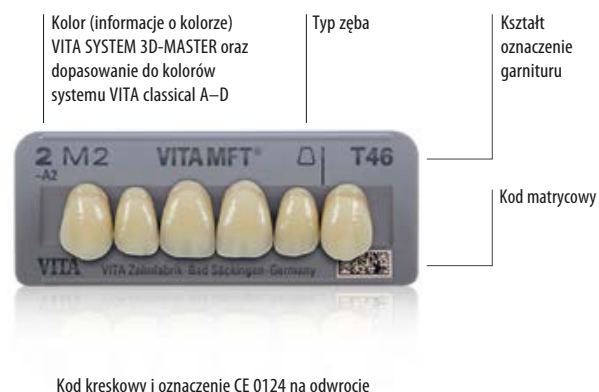

Właściwe oznaczenia na płytce to wyraz ergonomii produktu VITA MFT. Wysublimowany i harmonijny zakres odcieni gwarantuje wzrost wydajności.

Wielofunkcyjne zęby VITA MFT stosujemy w:

- protezach całkowitych
- implanto-protetyce
- protezach z elementami kotwiczącymi
- protezach teleskopowych i stożkowych
- protezach szkieletowych
- protezach tymczasowych



Asortyment VATA MFT pokrywa się

- z 13 odcieniami VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER											
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4	
											0M3

- z 13 odcieniami VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5




VITA MFT są dostępne w postaci:

- 12 górnych przednich garniturów
(w 4 określonych typach grup)
- 5 dolnych garniturów zębów przednich
- 3 górnych i 3 dolnych garniturów zębów bocznych

Asortyment: garnitur po 6 i 8 zębów, garnitur po 28 zębów
interaktywny folder kształtów

Za pomocą komornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.

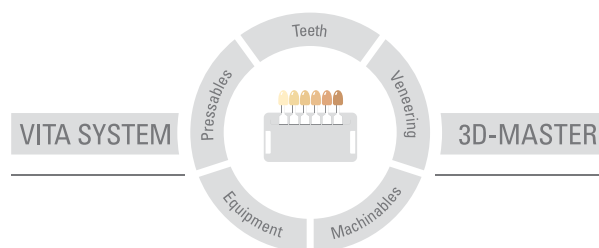

Uwaga: Produkt ten został opracowany do ściśle określonego zastosowania. Dlatego też powinien być stosowany zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego przygotowania i użytkowania. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do przetestowania produktu, jeżeli pragnie się go zastosować do innych potrzeb. Wyklucza się odpowiedzialność producenta, jeżeli produkt ten nie będzie stosowany ze zgodnymi z nim materiałami oraz urządzeniami innych firm. Poza tym nasza odpowiedzialność dotycząca danych, niezależnie od podstawy prawnej i przepisów prawnych, ogranicza się w każdym przypadku do wartości dostawy według rachunku bez VAT-u. Producent nie ponosi pod żadnym względem odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej za utracony zysk, pośrednie szkody, szkody będące następstwem zdarzenia losowego lub roszczenia osób trzecich przeciwko kupującemu. Zależności zadłużeniowe roszczeń z tytułu odszkodowania (zadłużenia w przypadku zawartego kontraktu, z pozycji prawnej naruszenia kontraktu, niedozwolonego działania itp.) są możliwe tylko w przypadku rozumnego działania lub poważnego zaniedbania. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu.

Wydanie instrukcji obróbki materiału: 01.15

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualną wersję instrukcji obróbki materiału znajdą Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfikat wg wytycznych dotyczących produktów medycznych. Następujące materiały posiadają certyfikat oraz oznaczenie **CE** 0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik