

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informação de Produto



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Data de Publicação 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Disponível nas cores VITA SYSTEM 3D-MASTER
e VITA classical A-D




Em concordância com a natureza

A escolha por VITA MFT representa um ganho de excelência em todos os aspectos. Os dentes confeccionados por três camadas reproduzem fielmente a natureza – característica bem nítida principalmente nos dentes anteriores VITA MFT – e satisfazem todos os critérios necessários para um tratamento reabilitador da mais alta qualidade:

- Opalescência, fluorescência e translucidez – associada a uma morfologia natural e individual configuração dos mamelões – produzem um jogo de luz com as mais variadas nuances, bem como uma natural reflexão de luz em cada dente.
- Faces vestibulares um pouco mais convexas auxiliam no suporte e movimento do lábio, resultando numa perfeita harmonia dento-facial.
- A configuração das faces palatinas com morfologia de dente natural preserva no paciente suas propriedades fonéticas e seu habitual contato com a língua.
- O halo incisal esbranquiçado favorece ainda mais a estética excepcional dos dentes anteriores VITA MFT

VITA MFT® A nova técnica simplificada para a montagem de dentes

Multi Functional Teeth

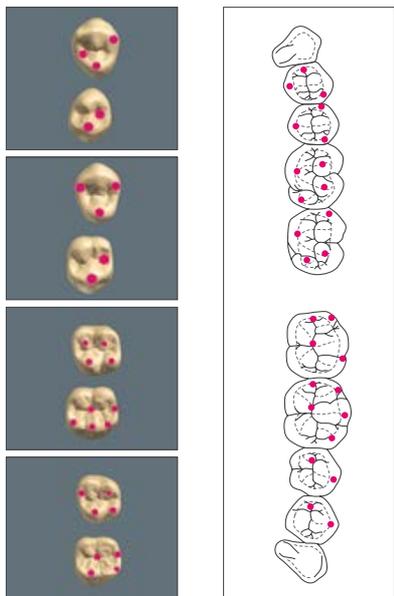

Da mais alta produtividade

A morfologia das superfícies oclusais dos dentes VITA MFT baseia-se no princípio inovador „easy-centric“, onde as superfícies oclusais são configuradas de tal forma, que a posição cêntrica ideal relaciona-se quase de forma automática.

- O princípio „easy-centric“ proporciona montagem de dentes profissional e racional com um acerto seguro da relação oclusal. Um ganho de produtividade com resultado excelente, da forma como o paciente merece.
- A superfície mastigatória dos dentes inferiores apresenta um pré-desgaste, o que minimiza as forças de deslocamento horizontal e auxilia no posicionamento estático ideal da prótese. Este fato é principalmente importante no caso de próteses implantossuportadas.




- A configuração ideal das cúspides dos dentes superiores automaticamente conduz para uma correta relação cêntrica e proporciona elevado conforto de mastigação ao paciente.
- Todos os dentes já apresentam uma perfuração na base. Esta característica reduz significativamente o tempo de trabalho do técnico e aumenta a área de superfície de união com o material base da prótese.



- Regiões cervicais levemente mais largas nos dentes anteriores e posteriores facilitam a configuração das áreas interproximais de acordo com a idade e a condição gengival do paciente.


VITA MFT® Qualidade indiscutível

Multi Functional Teeth

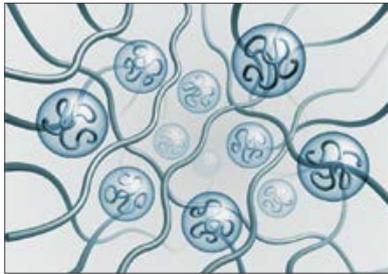


● Pérolas de PMMA
■ PMMA reticulado

Resistência ao desgaste abrasivo¹

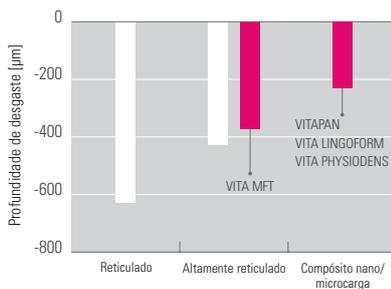

¹ Resultado do estudo in vitro sobre a resistência ao desgaste tipo dois corpos de dentes artificiais realizada pela Universidade de Regensburg, Nov. 2009

Resistência ao desgaste abrasivo¹

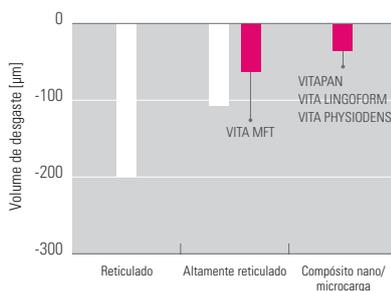

¹ Resultado do estudo in vitro sobre a resistência ao desgaste tipo dois corpos de dentes artificiais realizada pela Universidade de Regensburg, Nov. 2009

Uma qualidade de material excepcional

é assegurada devido a aplicação de uma resina acrílica altamente reticulada, que é responsável por uma densidade extraordinária ao longo de todo dente, além de uma biocompatibilidade perfeita.

- perfeita estabilidade de cor
- muito resistente à abrasão
- biocompatível
- resistente à placa
- desgaste sem a formação de estilhaços
- elevada capacidade de polimento
- excelente união ao material base da prótese
- livre de monômero residual
- resistente a formação de falhas e fissuras

Pacientes satisfeitos e sem preocupações

Graças aos dentes MFT. Os dentes aparentam vitalidade similar à dos dentes naturais, o que resulta em numa perfeita aceitação do trabalho restaurador pelo paciente. O excelente material com a marca de qualidade VITA oferece biocompatibilidade extraordinária associada a elevada durabilidade das próteses dentárias.



VITA MFT® Máxima versatilidade e economia

Multi Functional Teeth



Código de barras e CE 0124 na parte de trás

A solução perfeita para todas as indicações de trabalhos restauradores num compacto e simpático sortimento VITA MFT. A reduzida oferta de formas e cores garante grande economia.

Os dentes multifuncionais VITA MFT são indicados para:

- Prótese total
- Prótese sobre implante
- Prótese parcial removível
- Prótese parcial removível por encaixe
- Prótese parcial removível sobre coroas telescópicas
- Prótese provisória



A disponibilidade de cores do VITA MFT abrange:

- 13 cores VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 cores VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5




Os dentes VITA MFT estão disponíveis em:

- 12 formas de dentes ântero-superiores (em 4 grupos diferentes)
- 5 formas de dentes ântero-inferiores
- 3 formas de dentes posteriores para arcada superior e para arcada inferior

Disponibilidade: placas de 6 e 8 dentes, conjunto de 28 dentes, mostruário completo – onde todas as placas são apresentadas numa caixa muito atraente

Com o exclusivo sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER, todas as cores de dentes naturais são selecionadas de forma sistemática e reproduzidas na perfeição.

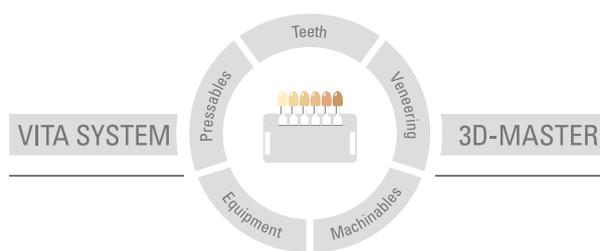

Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceite qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto. Ademais, nossa responsabilidade pela precisão destas informações independe de base legal e, até onde permitido, é limitada ao valor de nota fiscal dos produtos fornecidos, excluindo-se o imposto sobre o faturamento. Particularmente, e até onde legalmente permitido, não assumimos qualquer responsabilidade por perda de lucro, danos indiretos, danos imprevistos ou reclamações de terceiros contra o comprador. Reclamações fundadas em responsabilidade por culpa (culpa por elaboração do contrato, inadimplência contratual, atos ilícitos, etc.) podem ser feitas somente em casos de dolo ou negligência grave. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 01.15

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e em vigor encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada de acordo com o Guideline for Medical Devices e os seguintes produtos levam o selo  0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik