

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informații despre produs



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Ultima reactualizare: 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA


Disponibil în nuanțele VITA SYSTEM 3D-MASTER
și VITA classical A–D



În armonie cu natura

Hotărârea de a utiliza VITA MFT reprezintă un plus în toate privințele. Aspectul atât de natural al dinților, realizați în trei straturi - vizibil în special la dinții frontali din garniturile VITA MFT -, îndeplinește toate criteriile unei restaurări protetice care satisface cerințele pacientului:

- Opalescență, luminiscentă și transluciditate – morfologie și structură lobulară individuală armonizate între ele, ce dau aspect cât se poate de natural, produc un joc de culori bogat în nuanțe, precum și proprietăți de reflexie a luminii ce dau viață fiecărui dinte.
- Suprafețele vestibulare ușor convexe susțin plenitudinea buzelor și în acest fel îmbunătățesc cu mult armonia dento - facială.
- Forma identică cu natura a suprafețelor palatin ale păstrează pentru fiecare pacient caracteristicile fonetice și poziția obișnuită a limbii.
- Aureola incizală albicioasă suplimentează efectele estetice excepționale ale acestor dinți frontali VITA MFT.

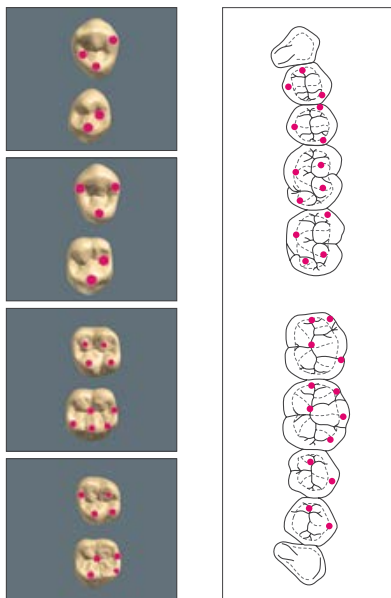

Maximă productivitate

Relieful suprafețelor ocluzale ale VITA MFT se bazează pe principiul inovator easy-centric, ceea ce înseamnă că au fost concepute astfel încât ocluzia centrică optimă se instalează aproape de la sine.


- Easy-centric garantează o montare atât profesională cât și rațională odată cu găsirea rapidă și sigură a ocluziei, ducând la productivitate crescută în condițiile păstrării calității la care sunt îndreptați pacienții.
- Relieful ocluzal pre-abrazat la mandibulă are drept efect micșorarea până la minimum a forțelor cu componentă orizontală suținând astfel statica ideală a protezei, efect cu importanță maximă în cazul sprijinului implantar.



- Designul ideal al cuspizilor la maxilar duce automat către ocluzia centrică corectă și permite pacientului să dobândească confort masticator sporit.
- Cavitățile bazale a dinților MFT permit o scădere semnificativă a efortului la prelucrare și le mărește suprafața, obținându-se astfel o legătură mai sigură cu baza protezei.




- Zonele de colet ușor mai late, atât la dinții frontali, cât și laterali, reduc efortul alocat obținerii unor spații interdentare cu aspect natural și conforme vârstei purtătorului protezei.

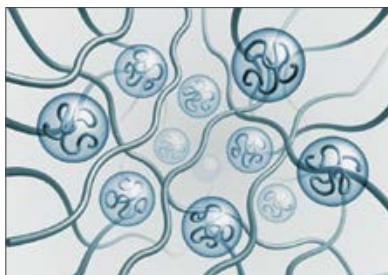


Perle PMMA PMMA reticulat

Rezistența la uzură a garniturii de dinți¹

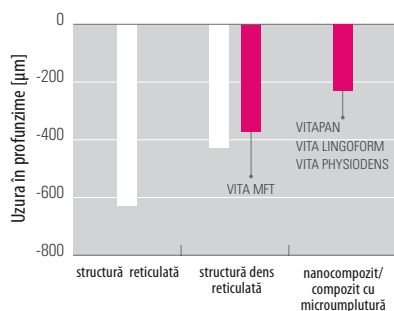

¹ Rezultatele testelor de rezistență la uzură efectuate in-vitro la Clinica Universitară din Regensburg, noiembrie 2009

Rezistența la uzură a garniturii de dinți¹

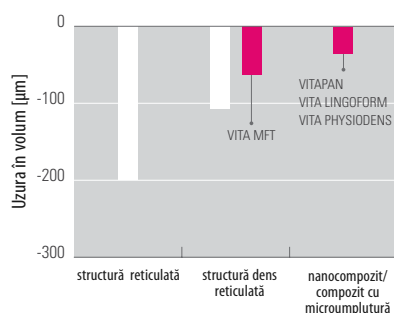

¹ Rezultatele testelor de rezistență la uzură efectuate in-vitro la Clinica Universitară din Regensburg, noiembrie 2009

Calitatea excelentă a materialului

este asigurată de materialul acrilic cu o structură strâns reticulată, care se remarcă prin densitate constantă pe întreaga suprafață a dintelui precum și printr-o biocompatibilitate excelentă.

- stabil cromatic
- rezistent la abraziune
- bio-compatibil
- rezistent la placă bacteriană
- necasant la slefuire
- poate fi lustruit foarte bine
- bună aderență la materialul de bază al protezei
- fără monomer rezidual
- rezistent la fisurare

Pacienți mulțumiți și fără griji

datorită VITA MFT. Efectul viu al dinților îmbunătățește aspectul natural și duce la acceptarea protezei dentare într-un timp mult mai scurt. Materialul premium cu care ne-am obișnuit deja de la VITA, oferă bio-compatibilitate și durabilitate maximă a protezei dentare.



VITA MFT® Un maxim de eficiență economică

Multi Functional Teeth



Cod de bare și CE 0124 pe verso

Întregul spectru de indicații îl regăsiți în sortimentul compact VITA MFT. Un spectru ce se concentrează în jurul esențialului, dar armonios alcătuit în ceea ce privește oferta de culori și forme, garantează o înaltă eficiență economică.

Dinții multifuncționali VITA MFT sunt adecvați pentru:

- Protezare totală
- Protezare cu sprijin implantar
- Construcții telescopate și cu coroane conice
- Proteze cu culise
- Proteze scheletate
- Lucrări provizorii



Gama de culori VITA MFT cuprinde

- 13 nuanțe VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER											
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4	

- 13 nuanțe VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5


VITA MFT sunt disponibili sub următoarele forme:

- 12 variante de dinți frontali pentru maxilarul superior (în 4 grupe de forme în funcție de tipul fizionomiei pacientului)
- 5 variante de dinți frontali pentru maxilarul inferior
- 3 variante de dinți laterali pentru maxilarul superior și 3 pentru maxilarul inferior

Forme de livrare: plăcuțe cu 6 sau 8 dinți, garnituri cu 28 de dinți. Catalog de forme.



Cu ajutorul sistemului unic VITA SYSTEM 3D-MASTER toate culorile dinților naturali se determină sistematic și se reproduc cu fidelitate.

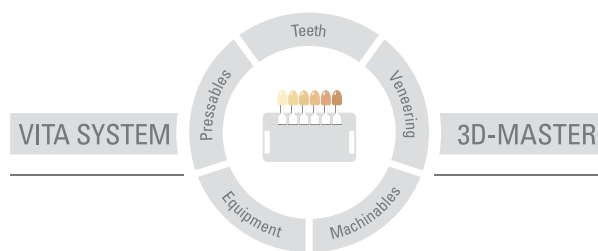

Atenție: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător. De altminteri răspunderea noastră pentru corectitudinea acestor date este limitată la valoarea mărfii livrate cf. facturii fără impozit, independent de motivul juridic și cu condiția ca acest lucru să fie permis prin lege. Răspunderea noastră este exclusă mai ales în cazuri de profit pierdut, de daune indirecte, daune intervenite ca urmări ale altor daune sau daune interese pretinse de terți, cu condiția ca acest lucru să fie permis de lege. Acordarea de daune-interese (eroare la încheierea contractului, încălcarea contractului, acțiuni nepermise etc.) se face numai în caz de premeditare sau de neglijență gravă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucțiuni s-a făcut la: 01.15

O dată cu publicarea acestei ediții cu informații privind utilizarea toate edițiile precedente își pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteți găsi la adresa www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată conform directivei cu privire la produsele medicale, iar următoarele produse poartă marca **CE** 0124 :

VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik