

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Информация об изделии



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска: 01.14

VITA shade, VITA made.

VITA

Предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER
и VITA classical A–D




В гармонии с природой

Если Ваш выбор падает в пользу зубов VITA MFT, то это во всех отношениях выгодный выбор.

Созданные по природным образцам трехслойные зубы – что в передних зубах VITA MFT особенно очевидно – отвечают всем критериям качественного протезирования во благо пациента:

- опалесценция, люминесценция и транслюценция – с соблюдением естественной морфологии, сочетающейся с индивидуальной структурой мамелонов – создают богатую игру цвета, как это имеет место в живых зубах.
- Слегка выпуклые лабиальные поверхности создают гармоничную опору для губ, что придает лицу приятный облик.
- Палатинальные поверхности в точном соответствии с природными образцами обеспечивают пациенту сохранение фонетических навыков и привычное ощущение для языка.
- Беловатая инцизальная кромка гармонично выделяет фронтальные зубы VITA MFT.

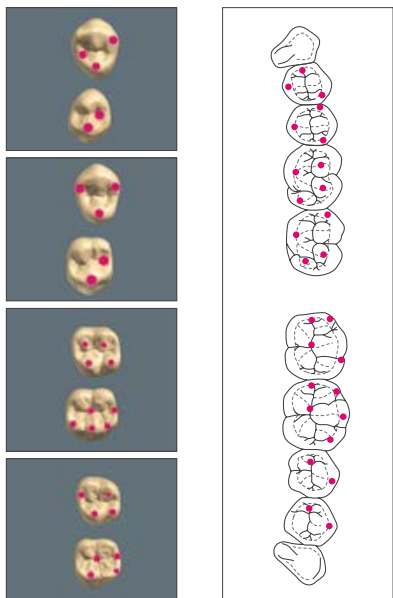

Высокая эффективность

Исполнение жевательных поверхностей VITA MFT базируется на инновационном принципе «easy-centric», т.е. жевательные поверхности исполнены таким образом, что оптимальное центральное соотношение устанавливается почти само собой.


- «easy-centric» обеспечивает профессионально рациональную постановку с хорошей окклюзией и является тем самым исключительно эффективным для создания комфорта пациенту
- Жевательный рельеф с признаками истирания на нижних зубах способствуют минимизации горизонтального усилия сдвига и обеспечивают идеальную статику протеза. Особо важно это при создании протезов с опорой на имплантаты.



- Идеальное исполнение бугров на верхних зубах автоматически приводит прикус в правильное центральное соотношение и дает пациенту возможность беспрепятственно жевать.
- Базальная полость позволяет значительно сократить доработки и увеличивает поверхность связки с базой протеза.




- Слегка расширенные области шеек на фронтальных и боковых зубах не требуют больших доработок при исполнении интердентальных пространств, соответственно возрастным особенностям.

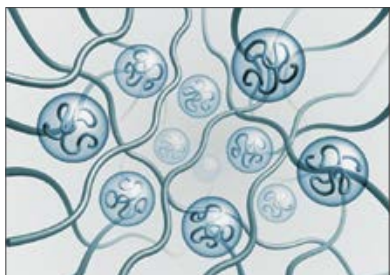


Перлы PMMA Структурированный PMMA

Устойчивость к истиранию¹

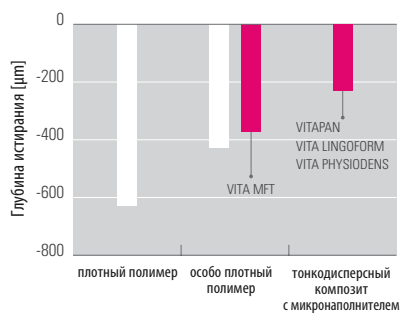

¹ Результаты исследования in-vitro, проведенные в клинике Университета Регенсбург, ноябрь 2009

Устойчивость к истиранию¹

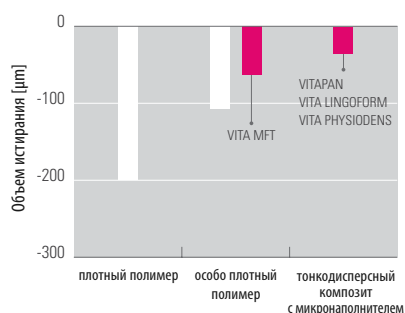

¹ Результаты от in-vitro исследования на Университетской клинике Регенсбург, ноябрь 2009

Отличное качество материала

обеспечивается плотной структурой пластмассы, что проявляется в исключительной биосовместимости и других замечательных свойствах

- стабильность цвета
- устойчивость к истиранию
- щадящее соотношение с живыми тканями
- устойчивость к образованию налета
- шлифуется без сколов
- отлично полируется
- хорошая связка с базой протеза
- не содержит остаточного мономера
- устойчивость к образованию трещин

Беззаботные и довольные пациенты

благодаря VITA MFT. Естественный вид зубов привлекателен и способствует быстрому привыканию к протезу.

Материал высокого качества, отличающего продукцию фирмы ВИТА, обеспечивает надежную биосовместимость и долговечность протеза.





Весь спектр показаний представлен в компактном ассортименте VITA MFT. Строгая и гармоничная комплектация форм и цветов обеспечивает высокую экономичность.

Многофункциональные зубы VITA MFT подходят для:

- полного протезирования
- имплантологии
- телескопических и конусных конструкций
- замковых конструкций
- бюгельных протезов
- временных реставраций



Выбор цветов VITA MFT охватывает

- 13 ходовых цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER												
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1	0M3
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4		

- 13 цветов VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3	~D4
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L1.5


Зубы VITA MFT предлагаются

- 12 форм верхних фронтальных зубов (4 группы форм различных типов)
- 5 форм нижних фронтальных зубов
- 3 формы боковых верхних зубов и 3 формы боковых нижних зубов

Расфасовка: гарнитуры по 6 и 8 зубов, гарнитуры по 28, Карта форм



С помощью уникальной цветовой шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизированно определяются и точно воспроизводятся.

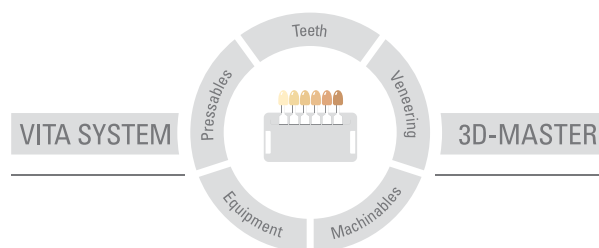

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не несем ответственности за дефекты, обусловленные неправильным применением. Пользователь обязан перед использованием продукта удостовериться в целесообразности его применения. Наша ответственность исключается, если продукт был использован не по назначению или в недопустимом сочетании с материалами и приборами других производителей. В остальном наша ответственность за достоверность данных сведений является юридически независимой, и в каждом отдельном случае ограничивается стоимостью поставленного согласно счету товара без налогов. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом пределах за неполученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные действия и т.п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность. VITA Модульбокс не является неотъемлемой принадлежностью данного продукта. Дата выхода данной брошюры: 01.15

С изданием этой инструкции все предыдущие издания утрачивают силу. Актуальную версию см. www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA сертифицирована как производитель медицинской продукции, и следующие виды ее продукции имеют маркировку **CE** 0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik