

VITA MFT®

Multi Functional Teeth

Informacije o proizvodu



VITA od  nje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja

VITA kontrola boja

Izdanje: 01.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Dostupno u VITA SYSTEM 3D-MASTER
i VITA classical A–D bojama




U skladu sa prirodom

Opređenje za VITA MFT predstavlja plus u svakom pogledu.

Troslojni zubi prirodnog izgleda, koji naročito lepo izgledaju kod VITA MFT prednjih zuba, ispunjavaju sve kriterijume za nadoknade sa kojima su pacijenti zadovoljni:

- Opalni sjaj, luminescentnost i transparentnost, sa idealno prilagođenom morfologijom strukture kvržično-grebenkog kompleksa koja deluje prirodno, pružaju bogato nijansiranje boja i obezbeđuju živopisnu svetlosno-refleksivnu karakteristiku kod svakog pojedinačnog zuba.
- Blago konveksno struktuirane labijalne površine ciljano podržavaju oblik usana i time doprinose dentofacijalnoj harmoniji.
- Potpuno prirodna konstrukcija palatinalnih površina pomaže da se kod svakog pacijenta ostvare njegove fonetske sposobnosti i uobičajeni osećaj jezika.
- Beličasti incizalni deo, kao dodatni naglasak, podržava izuzetnu estetiku VITA MFT prednjih zuba.

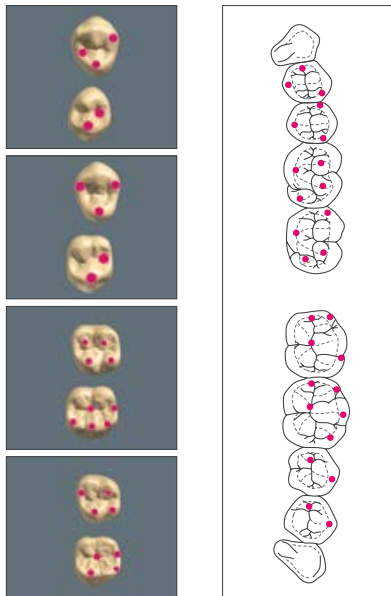

Visoka produktivnost

Struktura zagrižajnih površina VITA MFT zuba zasniva se na inovativnom principu „easy-centric“, tj. zagrižajne površine su konstruisane tako da se optimalna centričnost podešava skoro automatski.


- „easy-centric“ garantuje profesionalno, ali i racionalno postavljanje, sa sigurnom okluzivnom situacijom i obezbeđuje visoku produktivnost u postizanju kvaliteta koji zahteva pacijent.
- Prethodno abradirani reljef zagrižajnih površina u donjoj vilici dovodi do minimiziranja horizontalnih sila pritiska i podržava idealnu statičku konstrukciju proteze. To je naročito važno kod implantantskih nadoknada.



- Idealna struktura uzvišenja u gornjoj vilici automatski obezbeđuje pravilnu centričnost i omogućava maksimalni kapacitet žvakanja kod pacijenta.
- Bazalne šupljine omogućavaju značajno smanjenje radova na brušenju i povećavaju vezivnu površinu radi sigurnog vezivanja sa osnovnim materijalom proteze.




- Malo proširena područja vrata kod prednjih i bočnih zuba smanjuju troškove za strukturisanje međudentalnih razmaka koji deluju prirodno i priliče starosnom dobu. Kvalitet bez kompromisa

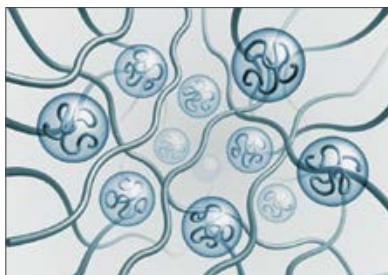


PMMA perle pokrivni PMMA

Adhezivno habanje¹

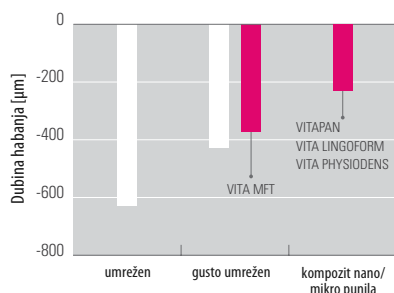

¹ Rezultati "in vitro" ispitivanja otpornosti na habanje u okviru studije na univerzitetnoj klinici u Regensburgu, novembar, 2009.

Adhezivno habanje¹

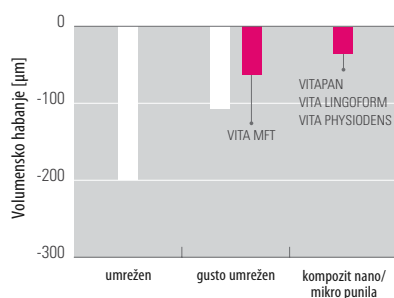

¹ Rezultati "in vitro" ispitivanja otpornosti na habanje u okviru studije na univerzitetnoj klinici u Regensburgu, novembar, 2009.

Materijal odličnog kvaliteta

je obezbeđen korišćenjem gusto umreženog akrilnog materijala koji, pre svega, konzistentno povećava gustinu materijala u celom zubu, a takođe se odlikuje i izuzetnom biokompatibilnošću.

Karakteristike materijala su:

- stabilnost boje
- otpornost na abraziju
- prijatan za tkivo
- otpornost na plak
- može da se brusi bez opiljaka
- izuzetna sposobnost poliranja
- dobro vezivanje za osnovni materijal proteze
- bez zaostalih monomera
- otpornost na pucanje

Bezbričnost i zadovoljstvo pacijenata


zahvaljujući VITA MFT zubima. Zubi koji izgledaju vitalno povećavaju utisak prirodnosti i skraćuju vreme prihvatanja zubnih nadoknada.

Visoko kvalitetan materijal poznatog VITA-kvaliteta nudi najveću moguću tkivnu podnošljivost.



VITA MFT® Maksimalna ekonomičnost

Multi Functional Teeth

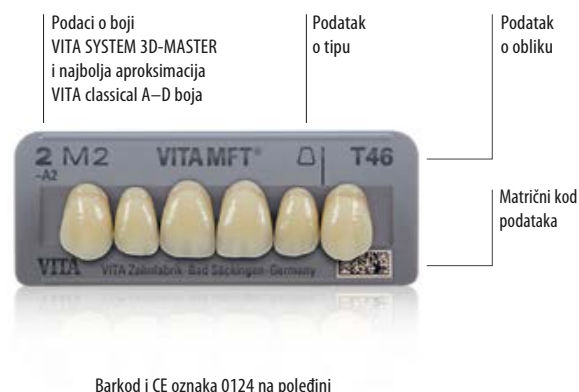

Kompletan spektar indikacija u praktično kompaktnom VITA MFT asortimanu. Kompaktna i harmonična ponuda boja i oblika garantuje visoku ekonomičnost.

Multifunkcionalni zub VITA MFT je podesan za :

- Totalnu protetiku
- Implantološku protetiku
- Teleskopske i konusne konstrukcije
- Proteze sa kopčama
- Proteze livene po kalupu
- Prelazna rešenja



Ponuda boja VITA MFT obuhvata

- 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER boja

VITA SYSTEM 3D-MASTER											
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1	0M1
~ B1	~ B2		~ A2	~ C2 ~ D4	~ B3		~ A3.5		~ A4	~ C4	

- 13 VITA classical A-D boja

VITA classical A-D											
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	C3	~C4	D3
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1	




VITA MFT zubi se mogu dobiti u sledećim konfiguracijama

- 12 OK-oblika prednjih zuba
(4 grupe tipičnih oblika)
- 5 UK-oblika prednjih zuba
- 3 OK- i 3 UK-oblika bočnih zuba

Oblici pakovanja: garniture od 6 i 8 komada, garniture od 28 komada, karta vitalnih oblika

Sa jedinstvenim VITA SYSTEM 3D-MASTER sistematski se određuju i potpuno reprodukuju sve prirodne boje zuba.

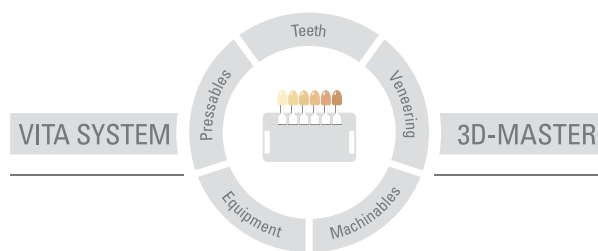

Pažnja: Naše proizvode koristiti prema uputstvima za upotrebu. Ne preuzimamo odgovornost za štete koje su nastale usled nepravilnog rukovanja ili obrade. Korisnik je u obavezi da pre upotrebe proveri da li je proizvod prikladan za predviđenu oblast primene. Odgovornost se ne prihvata i kada se proizvod obrađuje u nepovoljnoj, odnosno neodobrenoj kombinaciji sa materijalima i uređajima drugih proizvođača. U ostalim slučajevima naša odgovornost je ograničena za ispravnost podataka nezavisno od pravnog osnova, i u meri propisanoj zakonom, a u svakom slučaju do vrednosti isporučene robe po osnovu izdatog računa bez poreza. Naročito ne prihvatamo odgovornost, ukoliko je to dozvoljeno zakonom, za propuštenu korist, za posredne štete, za posledične štete ili za potraživanje trećih lica u odnosu na kupca. Zahtevi za nadoknadu štete (odgovornost zbog prekida ugovora, poz. kršenje ugovora, nedozvoljena rukovanja itd.) važe samo u slučaju namerne ili grube nemarnosti. VITA Modulbox nije obavezan sastavni deo proizvoda. Izdanje ovog informatora: 01.15

Sa objavljivanjem ovih informacija za upotrebu sva dosadašnja izdanja prestaju da važe. Najnoviju verziju ćete naći na www.vita-zahnfabrik.com.

VITA Zahnfabrik je usklađen sa smernicom za medicinske proizvode i sledeći proizvodi nose znak registrovane marke  0124 :
VITA MFT®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik