

VITA INTERNO® – Le naturel avec un bel effet de profondeur

Réussir avec une grande facilité les caractéristiques individuelles, les mamelons, les taches de calcification.



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 03.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Description du produit

Les VITA INTERNO sont des colorants à grain fin, saturés et très fluorescents destinés aux caractérisations internes des restaurations en céramique. Ils offrent un champ d'applications quasiment illimité pour des céramistes exigeants : toutes les caractéristiques individuelles au cœur de la dent se reproduisent ainsi avec une grande fidélité.

Les masses utilisables avec tous les CDT sont miscibles entre elles. Les utilisateurs profitent d'une liberté de création maximale avec des variations chromatiques à l'infini. Appliqués purs ou mélangés aux masses de céramique, les colorants VITA INTERNO s'utilisent avec **l'ensemble** des céramiques de VITA.

VITA INTERNO® – Le naturel avec un bel effet de profondeur

Champ d'applications

Les anomalies présentes sur la dent naturelle sont un modèle chromatique pour les couleurs VITA INTERNO. Ces masses permettent de reproduire les effets chromatiques naturels et de rendre les travaux en céramique parfaitement fidèles à l'exemple vivant.

Les effets chromatiques particulièrement observés dans la zone incisale des dents naturelles se reproduisent parfaitement avec les VITA INTERNO.

Ils s'utilisent purs ou en mélange dans les masses Base Dentine, Opaque Dentine, Dentine, Enamel ou dans les masses translucides.

Les masses universelles VITA INTERNO s'utilisent pour les produits suivants : VITA VM 7, VM 9, VM 11, VM 13, VM 15, VITA VMK Master et VITA TITANKERAMIK.

Voilà où se distinguent les masses VITA Interno...

- Fine granulométrie : de ce fait les masses VITA INTERNO se fondent remarquablement dans les masses de céramique.
- Saturées : leur saturation autorise des effets chromatiques qui transparaissent des masses qui les recouvrent et qui produisent une saturation issue de la profondeur de l'incrustation.
- Très fluorescentes : la fluorescence crée une forte intensité lumineuse des couleurs et favorise le passage de la lumière au sein de la céramique.
- Miscibles : le mélange de masses VITA INTERNO avec d'autres masses INTERNO permet d'atténuer la saturation et de personnaliser la couleur.
- Miscibles avec toutes les masses de céramique VITA : mélangées aux masses de céramique elles en augmentent la fluorescence et de ce fait leur pouvoir lumineux naturel sous différents éclairages.



VITA INTERNO® – L'assortiment




VITA INTERNO Set (BISETV2)

Quantité	Contenu	Matériau
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		Spatule en verre pour colorants
1		Pinceau n° 3/0 a & e
1		VITA INTERNO palette de mélange en plastique (Ø 144 mm avec creux)
1		Disque de couleurs échantillons VITA INTERNO

“ Les colorants VITA INTERNO sont pour moi la clé d'un montage cosmétique véritablement naturel. ”

Spécialistes de la céramique Renato Carretti, prothésiste de Zurich

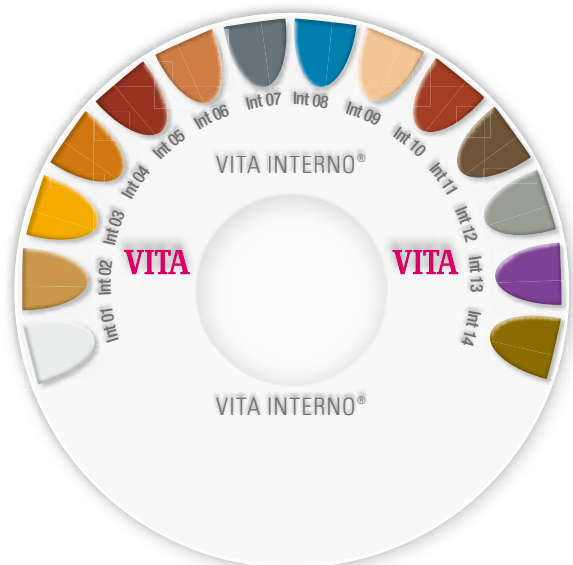

Colorants VITA INTERNO

L'assortiment VITA INTERNO comprend 14 couleurs. Elles sont à la base de multiples tonalités chromatiques. L'utilisateur profite d'une liberté sans limite pour reproduire de véritables effets naturels.

	Int 01 blanc		Int 08 bleu
	Int 02 sable		Int 09 beige
	Int 03 jaune		Int 10 brun
	Int 04 orange		Int 11 gris-brun
	Int 05 terracotta		Int 12 gris
	Int 06 brun clair		Int 13 lilas
	Int 07 anthracite		Int 14 kaki

Masses à l'unité

VITA INTERNO, 3 g

Désignation	Couleur	N° art. 3 g
Int01	blanc	BI013
Int02	sable	BI023
Int03	jaune	BI033
Int04	orange	BI043
Int05	terracotta	BI053
Int06	brun clair	BI063
Int07	anthracite	BI073
Int08	bleu	BI083
Int09	beige	BI093
Int10	brun	BI103
Int11	brun - gris	BI113
Int12	gris	BI123
Int13	lilas	BI133
Int14	kaki	BI143

Support de sélection des couleurs VITA INTERNO

Désignation	N° art.
Disque de couleurs échantillons VITA INTERNO	B444

Liquides VITA INTERNO

Désignation	N° art.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA