




Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

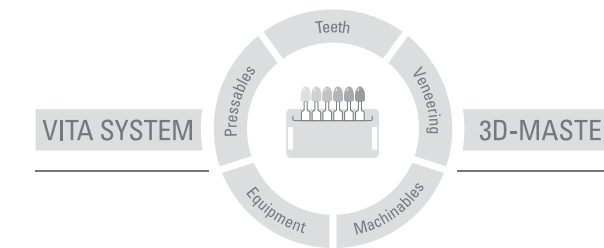

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En particulier et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut en aucun cas être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition de ce mode d'emploi : 09.14

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié conformément à la directive sur les dispositifs médicaux et le produit suivant porte le marquage CE
VITA V60 i-Line®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tél. hotline +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline : tél. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

1985F - 0914 (0,5) S1 - Version (02)



Édition 09.14

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITA V60 i-Line® – Un véritable classique sans aucun compromis



Dans le domaine de la céramique dentaire et des fours à céramique la marque VITA est synonyme de haute qualité et de maîtrise technique. Avec le VITA V60 i-Line VITA respecte fidèlement ces valeurs. Le VITA V60 i-Line se positionne sur deux aspects majeurs : l'excellence des cuissons à long terme et la convivialité d'utilisation.

Pour la mise au point de ce four, deux facteurs ont joué un grand rôle : un ensemble de fonctions ramené à l'essentiel et un rapport qualité/prix imbattable. Le VITA V60 i-Line séduira les utilisateurs par son écran tactile, son interface utilisateur intuitive et son célèbre et solide moufle en quartz VITA pour des cuissons parfaites. La carrosserie métallique ainsi que les tablettes de dépose intégrées sont extrêmement résistantes.

Le VITA V60 i-Line a été conçu pour répondre à la demande des clients dans le monde entier et repose sur des dizaines d'années d'expérience du département recherche et développement VITA. Voilà donc un four répondant à toutes les attentes.

VITA V60 i-Line® - Avantages



Résultats de cuisson remarquables



Programmes de base, de maintenance et de contrôle particulièrement conviviaux

- 1. Utilisation conviviale :** l'écran tactile et le menu intuitif permettent de travailler avec le VITA V60 i-Line beaucoup plus facilement. Le design minimaliste et la technique robuste mettent l'accent sur une fonction majeure : la fiabilité du processus de cuisson.
- 2. Installation & mise en marche :** pas de montage fastidieux - vous branchez, vous mettez en marche et vous commencez à travailler immédiatement !
- 3. Made in Germany :** ingénierie de pointe et qualité optimale.
- 4. La qualité VITA :** emploi de matériaux et composants de très haute qualité avec un seul objectif : la fiabilité sans aucun compromis !
- 5. Maintenance facile :** la conception modulaire, l'accès simple aux pièces d'usure et l'agencement sans concurrence facilitent la maintenance et diminuent les coûts.
- 6. Four à céramique très performant :** une véritable bête de somme. Extrêmement robuste, protection intégrée contre les fluctuations de courant et moufle en quartz VITA particulièrement résistant.
- 7. Ramené à l'essentiel :** un concept de four classique et éprouvé - aucune fonction supplémentaire coûteuse. Cet appareil se concentre sur ses fonctions de base, fiabilité absolue.



VITA V60 i-Line® - Données techniques et propriétés

Propriétés techniques

- Convient pour toutes les cuissons de céramique dentaire (également la céramique de silicate de lithium et VITA SUPRINITY).
- Programmes de maintenance, programmes de commande et de surveillance automatiques comme par ex. l'étalonnage automatique de la température avant le départ d'un programme (VITA AutoAdjust), le contrôle automatique de la température et du vide ainsi que l'enregistrement des données de cuisson.
- Prise en charge à court terme des fluctuations de courant.
- Réglage des durées de maintien sous vide.
- Surveillance du lift.
- Réglage personnalisé de la position du lift pour le préséchage et le refroidissement lent.
- Programme intégré de refroidissement rapide.
- VITA Energy Efficiency pour efficacité énergétique certifiée TÜV.

Données techniques	
Largeur	260 mm
Profondeur	420 mm
Hauteur	570 mm
Poids	18 kg
Carrosserie	Tôle acier, thermolaquée
Diamètre de l'enceinte de chauffe	90 mm
Hauteur de l'enceinte de chauffe	55 mm
Température de cuisson maximale	Max. 1200°C
Alimentation électrique	230 Volt, 50 Hz ou 100/110 Volt, 50/60Hz
Puissance maximale absorbée	Max. 1,5 kW
Classification	Classe de sécurité 1

