




El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

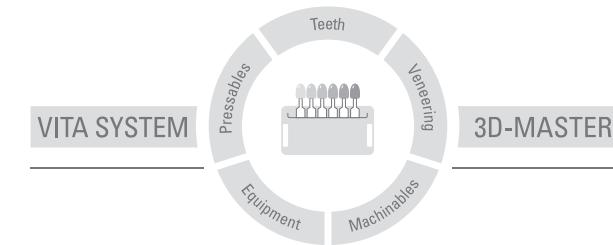

Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Solo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 09.14

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com.

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y el siguiente producto lleva el marcado CE
VITA V60 i-Line®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

1986SP - 0914 (0.25) S - Versión 02



Versión 09.14

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITA V60 i-Line® – Un auténtico clásico que no hace concesiones.



VITA es sinónimo de excelente calidad y tecnología acreditada en las áreas de cerámica dental y hornos de cocción de cerámica dental. Con el VITA V60 i-Line, VITA hace el debido honor a estos valores. El VITA V60 i-Line es el resultado de priorizar dos aspectos fundamentales: unos resultados de cocción extraordinarios y duraderos y la facilidad de uso.

Durante el desarrollo de este horno de cocción dental se prestó especial atención a la reducción del número de funciones a las esenciales y a una relación calidad-precio inmejorable. El VITA V60 i-Line convence por su pantalla táctil, una interfaz de usuario intuitiva y la conocida y duradera mufla de cuarzo de VITA para conseguir unos resultados de cocción perfectos. Su estable carcasa metálica y las bandejas integradas para depositar las piezas de cocción son sumamente resistentes y robustas.

El VITA V60 i-Line se ha desarrollado a partir de encuestas realizadas a clientes de todo el mundo y de las décadas de experiencia del departamento de Investigación y Desarrollo de VITA. El resultado es un aparato que satisface todo cuanto usted puede esperar de un horno de cocción de cerámica.

VITA V60 i-Line® – Sus ventajas



Excelentes resultados de cocción



Programas básicos, de mantenimiento y control sumamente fáciles de manejar

1. Facilidad de uso: la pantalla táctil y los menús intuitivos facilitan en gran medida el trabajo con el VITA V60 i-Line. Su diseño minimalista y la robusta tecnología centran la atención en una función esencial: un proceso de cocción fiable.

2. Instalar y utilizar: sin engorrosos procesos de montaje; ¡basta con conectar, encender y comenzar a trabajar!

3. Made in Germany: ingeniería superior y calidad óptima.

4. La calidad de VITA: empleo de materiales y componentes de primera calidad con un único objetivo: ¡fiabilidad absoluta!

5. Facilidad de mantenimiento: diseño modular, fácil acceso a todas las piezas de desgaste y una disposición sin parangón facilitan el mantenimiento y reducen sus costes.

6. Horno de cocción de cerámica de alto rendimiento: un auténtico caballo de batalla. Sistema de protección integrado frente a las fluctuaciones eléctricas extremadamente robusto y mufla de cuarzo de gran durabilidad.

7. Reducido a lo esencial: un concepto de horno clásico y acreditado que prescinde deliberadamente de caras funciones adicionales. Este aparato se centra en su función básica con total fiabilidad.



VITA V60 i-Line® – Datos técnicos y características

Características técnicas

- Apto para la cocción de todo tipo de cerámicas dentales (incluida la cerámica de disilicato de litio y VITA SUPRINITY).
- Programas de mantenimiento y control automático, así como de monitorización, por ejemplo, calibración automática de la temperatura antes del inicio del programa (VITA AutoAdjust), control automático de la temperatura y el vacío o memoria de datos de cocción.
- Rápida compensación de las fluctuaciones en el suministro eléctrico.
- Tiempos de mantenimiento del vacío ajustables.
- Control del elevador.
- Posiciones del elevador ajustables individualmente para los procesos de presecado y enfriamiento lento.
- Incluye un programa de enfriamiento rápido.
- VITA Energy Efficiency para una eficiencia energética certificada por TÜV.

Datos técnicos	
Anchura	260 mm
Profundidad	420 mm
Altura	570 mm
Peso	18 kg
Carcasa	De chapa de acero, con revestimiento en polvo
Diámetro de la cámara de cocción	90 mm
Altura de la cámara de cocción	55 mm
Temperatura de cocción máxima	1200 °C, como máximo
Alimentación	230 voltios, 50 Hz o 100/110 voltios, 50/60 Hz
Consumo máximo	máx. 1,5 kW
Clasificación	Clase de seguridad 1

