




Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

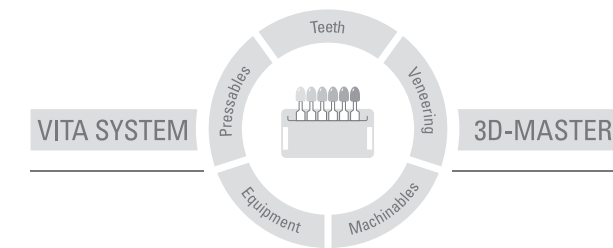

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora venga avanzata una richiesta di risarcimento per comportamento colposo (violazione contrattuale positiva, atto illecito, ecc.) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di questa informazione per l'uso: 09.14

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati CE

**VITA V60 i-Line®**

**VITA**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germania  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

1985 - 0914 (0.25) S1 - Versione (02)



VITA Presa del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 09.14

VITA shade, VITA made.

**VITA**

VITA V60 i-Line® – Prestazioni senza compromessi.



Parlando di ceramica dentale e forni VITA sta per altissima qualità e tecnica collaudata. VITA V60 i-Line corrisponde a questi valori. Il forno VITA V60 i-Line è focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego.

Nello sviluppo di questo forno due fattori hanno avuto un ruolo: una gamma di funzioni essenziali ed un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile. Il forno VITA V60 i-Line è caratterizzato da un touchdisplay, una Interfaccia utente autoesplicativa e l'affermata muffola in quarzo VITA di lunga durata per risultati di cottura perfetti. La robusta costruzione ed i piani di appoggio lavori integrati sono estremamente caricabili e resistenti.

VITA V60 i-Line è stato sviluppato sulla base di esigenze di clienti in tutto il mondo e dell'esperienza decennale del Reparto Ricerca e Sviluppo VITA. Ne è risultato un apparecchio che soddisfa tutti i requisiti di un forno per ceramica.

VITA V60 i-Line® – Vantaggi



Risultati di cottura eccellenti



Programmi base, Service e di controllo particolarmente semplici.

**1. Semplicità d'uso:** il touchdisplay e la guida a menu autoesplicativo facilitano notevolmente il lavoro con il VITA V60 i-Line. Il design minimalista e la tecnica robusta focalizzano la funzione principale: cotture affidabili.

**2. Plug & play:** nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro.

**3. Made in Germany:** ingegneria avanzata e qualità ottimali.

**4. Qualità VITA:** utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi!

**5. Semplicità di manutenzione:** costruzione modulare e agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi.

**6. Forno ad elevate prestazioni:** instancabile. Estremamente robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.

**7. Ridotto all'essenziale:** un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia espressamente a costose ma non produttive funzioni aggiuntive. L'apparecchio si concentra sulle funzioni base, affidabilità assoluta.



VITA V60 i-Line® – Dati tecnici e caratteristiche

#### Caratteristiche tecniche:

- indicato per tutte le cotture ceramiche (anche ceramica al disilicato di litio e VITA SUPRINITY)
- programmi Service, di controllo e monitoraggio automatici come ad es. taratura automatica della temperatura prima dell'avvio di un programma (VITA AutoAdjust), controllo automatico della temperatura e del vuoto e memorizzazione dei dati di cottura
- superamento di brevi variazioni di corrente nell'alimentazione elettrica
- tempi di mantenimento del vuoto regolabili
- controllo lift
- posizioni lift regolabili individualmente per processi di preessiccazione e raffreddamento lento
- programma di raffreddamento rapido intergrato
- VITA Energy Efficiency per efficienza energetica certificata TÜV

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	420 mm
Altezza	570 mm
Peso	18 kg
Custodia	lamiera d'acciaio, laccata
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura cottura massima	Max. 1200°C
Allacciamento elettrico	230 Volt, 50 Hz o 100/110 Volt, 50/60Hz
Potenza assorbita	Max. 1,5 kW
Classificazione	Classe di sicurezza 1

