




Com o excepcional sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER, todas as cores naturais de dentes são selecionadas de forma sistemática e reproduzidas na totalidade.

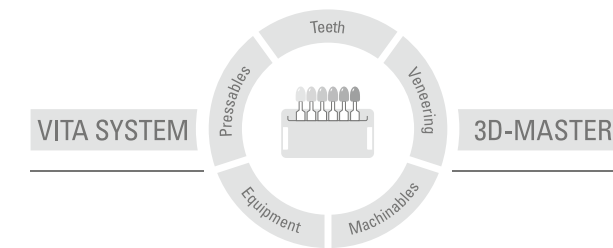

**Nota importante:** os nossos produtos devem ser utilizados de acordo com as informações de utilização.  
 Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de manuseamento ou utilização incorretos. Além disso, o utilizador tem a obrigação de verificar a adequabilidade do produto à área de aplicação prevista antes da sua utilização. Declinamos qualquer responsabilidade em caso de utilização do produto juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes, cuja utilização seja incompatível e/ou não permitida em conjunto com o nosso produto. Além disso, a nossa responsabilidade pela exatidão destes dados é independente da base jurídica e, nos limites juridicamente admissíveis, está limitada, em qualquer circunstância, ao valor dos produtos fornecidos conforme fatura, sem IVA. Em particular, e na medida do legalmente admissível, não assumimos qualquer responsabilidade por perdas de lucro, danos indiretos, danos consequenciais ou reclamações de terceiros contra o comprador. A reivindicação de indemnizações por danos imputáveis (Culpa na formação dos contratos, violação positiva dos termos do contrato, atos ilícitos, etc.) tem lugar apenas em caso de dolo ou negligência grosseira. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Publicação destas informações de utilização: 10/14


Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação destas informações de utilização. Poderá aceder à respetiva versão atualizada em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

A VITA Zahnfabrik está certificada de acordo com a Diretiva relativa a Produtos Médicos e os seguinte produtos possuem a marca CE  
**VITA V60 i-Line®**

**VITA**

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
 Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Alemanha  
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
 Linha de assistência: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

1985PDR-1014 (0.0) S - Versão 02

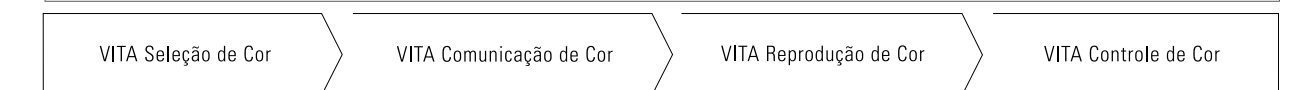

Versão 10.14

VITA shade, VITA made. **VITA**

VITA V60 i-Line® – Incondicionalmente, um verdadeiro clássico.



A VITA representa a mais alta qualidade e tecnologia comprovada no âmbito das cerâmicas odontológicas e dos fornos para cerâmica dental. Com o V60 VITA i-Line, a VITA leva em conta esses valores de forma consistente. O i-Line VITA V60 está centrado em dois aspectos fundamentais: excelentes resultados de queima durante um longo período de tempo e facilidade de uso.

Este forno odontológico foi desenvolvido com especial atenção na redução de funções, focando-se somente nas essenciais, e na relação preço-qualidade imbatível. O VITA V 60 i-Line convence com o seu painel touchscreen, sua superfície de funcionamento autoexplicativa e a mufla de quartzo VITA de longa duração, que oferece um resultado de queima perfeito. A estrutura de metal resistente e a tabela de armazenamento integrados são extremamente duráveis e resistentes.

O VITA V 60 i-Line foi desenvolvido com base em pesquisas com clientes globais e décadas de experiência do departamento de pesquisa e desenvolvimento VITA. O resultado é um dispositivo que corresponde a todas as expectativas existentes para um forno de cerâmica.

VITA V60 i-Line® - Suas Vantagens



Excelentes resultados de queima



Programas de base, serviço e controle patricularmente de fácil utilização

**1. Fácil de utilizar:** o painel touchscreen e o menu de navegação autoexplicativo facilitam muito o trabalho com o V60 VITA i-Line. O design minimalista e uma tecnologia robusta atraem o foco para uma função central: o procedimento de queima confiável.

**2. Instalar & começar:** sem processos de instalação complicados - basta conectá-lo, ligar e começar a trabalhar!

**3. Feito na Alemanha:** excelência em engenharia e ótima qualidade.

**4. Qualidade VITA:** materiais de qualidade superior e componentes com um único objetivo: confiabilidade incondicional!

**5. Manejo amigável:** construção modular, acesso fácil a todas as peças de reposição e uma ordem ímpar para facilitar o serviço e reduzir seus custos.

**6. Forno cerâmico de alto desempenho:** uma verdadeira força de trabalho. Extremamente robusto, proteção integrada contra picos de energia e uma mufla de quartzo especialmente duradoura.

**7. Reduzida ao essencial:** um conceito clássico e comprovado de forno, que deliberadamente evita funções adicionais onerosas. Este aparelho concentra-se em sua função básica, absolutamente confiável.



VITA V60 i-Line® - Dados técnicos e propriedades

#### Propriedades técnicas

- Adequado para todas as queimas cerâmicas odontológicas (incluindo dissilicato de lítio e VITA SUPRINITY)
- Programas de serviços e de controle e monitoramento automáticos, tais como: calibração automática de temperatura antes de iniciar o programa (VITA AutoAdjust), controle automático de temperatura e de vácuo, além de memória de dados interna
- Resolução rápida para as flutuações no fornecimento de energia
- Tempos de espera de vácuo ajustáveis
- Monitorização do elevador
- Posições de elevação ajustáveis individualmente para processos de pré-secagem e de refrigeração de longa duração
- Programa integrado de resfriamento rápido
- VITA Energy Efficiency para eficiência energética certificada pela ATA

Dados técnicos	
Largura	260 mm
Profundidade	420 mm
Altura	570 mm
Peso	18 kg
Caixa	Tabuleiro de aço, revestido a pó
Diâmetro da câmara de combustão	90 mm
Altura da câmara de combustão	55 mm
Temperatura máxima de queima	Max. 1200°C
Abastecimento de energia	230 Volt, 50 Hz ou 100/110 Volt, 50/60Hz
Absorção máxima de energia	Máx. 1,5 kW
Classificação	Classe de Segurança 1

