

# VITAPM®9

Produktinformation



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 01.19

VITA – perfect match.

**VITA**

VITAPM®9 Presskeramiksystem

VITAVM®9 ADD-ON Individualisierungssystem

## VITAPM<sup>®</sup>9 – garantiert rationelle Verarbeitung



### VITAPM<sup>®</sup>9: „All-in-One“-Presskeramik für mehr Wirtschaftlichkeit

VITA PM 9 (Pressable Material) ist eine „All-in-One“-Presskeramik und basiert auf der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9. VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche Versorgung eines breiten Indikationsspektrums. Sie ist sowohl für die gerüstfreie Presstechnik (Inlay/Onlay, Veneer und Frontzahnkrone) als auch für das Überpressen von Zirkoniumdioxidgerüsten geeignet. Das übersichtliche Farbangebot umfasst drei Transluzenzstufen (O, T, HT) mit je 10 Farbvarianten.

#### Die Vorteile

- Rationelle Fertigung: Das breite Indikationsspektrum (gerüstfreie Presstechnik sowie Überpresstechnik) von VITA PM 9 ermöglicht die wirtschaftliche und sichere Herstellung unterschiedlicher Restaurationen mit einem identischen Pressprogramm bei gleichzeitig effizienter Lagerhaltung.
- Klinische Sicherheit: VITA PM 9 Keramik wurde auf Basis der millionenfach bewährten Feinstruktur-Verblendkeramik VITA VM 9 entwickelt und garantiert damit höchste klinische Sicherheit.
- Natürliches Farbspiel: Insbesondere die hochtransluzenten VITA PM 9 HT-Pellets überzeugen durch ihren Chamäleoneneffekt und garantieren damit eine ganz natürliche Farbwirkung.
- Zahntypische Eigenschaften: Die natürlichen Zahneigenschaften der VITA PM 9 Keramik zeigen sich beispielsweise durch homogene Oberflächen, hohe Plaque-resistenz sowie schmelzähnliches Werkstoffverhalten.

#### Das Farbangebot

Das übersichtliche Farbangebot mit jeweils 10 Farbvarianten in drei unterschiedlichen Transluzenzstufen (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent) ermöglicht die Herstellung hochästhetischer Versorgungen.

VITA PM 9 ist auf das VITA SYSTEM 3D-MASTER-Farbsystem abgestimmt.

#### Farbübersicht O-/T-Pellets:



	Farbvarianten
O-Pellets	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P und 3M3P
T-Pellets	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P und 3M3P

#### Farbübersicht HT-Pellets:

	Farbvarianten
Dentinfarben	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Schmelzfarben	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

#### Die Systemkompatibilität

VITA PM 9 kann mit allen handelsüblichen Einbettssystemen und Keramikpressöfen verarbeitet werden.

## VITAVM®9 ADD-ON – garantiert natürliche Zahnästhetik

### VITAVM®9 ADD-ON : Individualisierungsmassen für Topästhetik

Speziell für das Individualisieren (Schichttechnik) gerüstfreier VITA PM 9 Restaurationen gibt es jetzt die niedrigschmelzenden VITA VM 9 ADD-ON-Massen. Die Massen wurden auf Grundlage der bewährten VITA VM 9 Verblendkeramik entwickelt. Sie sind in acht unterschiedlichen Farbnuancen erhältlich. Damit kann der Techniker schnell und sicher individuelle Farbnuancen reproduzieren und so erstklassige Zahnästhetik erzielen.



### Die Vorteile

- **Natürliche Farbwirkung:** VITA VM 9 ADD-ON-Massen sorgen durch hervorragende Transluzenz, schmelzähnliches Lichtbrechungsverhalten und harmonische Verbindung mit der VITA PM 9 Basisstruktur für ein natürliches Farbspiel.
- **Verbund sicherheit:** VITA VM 9 ADD-ON-Massen sind optimal auf die VITA PM 9 Keramik abgestimmt und überzeugen durch ihren hervorragenden, verzugsfreien Sinterverbund mit der VITA PM 9 Basis. Damit ist eine dauerhafte Belastbarkeit garantiert.
- **Wirtschaftlichkeit:** Die exzellente Standfestigkeit beim Schichten, das minimale Schrumpfungsverhalten und die erstklassige Brennstabilität sichern einen rationalen Bearbeitungsprozess.
- **Einfache Verarbeitung:** VITA VM 9 ADD-ON-Massen überzeugen durch ihr homogenes Gefüge und sichern damit eine gute Schleif- sowie Polierbarkeit.



### Das Farbangebot

Schmelz-/ Transparentmassen	ADD1 (transparent), ADD2 (Schmelz hell), ADD3 (Schmelz dunkel), ADD4 (weißlich transparent)
Transluzenzmassen	ADD5 (gelblich-transluzent), ADD6 (orange-transluzent), ADD7 (rot-transluzent), ADD8 (blau-transluzent)

### Die Systemkompatibilität

VITA VM 9 ADD-ON-Massen wurden speziell für die Individualisierung von gerüstfreien VITA PM 9 Restaurationen entwickelt. Die niedrigschmelzenden Massen können entsprechend Verarbeitungsanleitung bei 800°C mit allen handelsüblichen Keramiköfen gebrannt werden.


### VITA AKZENT Plus Malfarben: Optimiert. Einfach. Alles.

Mit 28 Farben bietet VITA AKZENT Plus Praxen und Laboren ein umfassendes System mit vielfältigen Möglichkeiten zur farblichen Modifikation. Dabei können mit VITA AKZENT Plus nicht nur VITA PM 9 Restaurationen charakterisiert werden, die Malfarben eignen sich auch für alle anderen dentalkeramischen Werkstoffe, unabhängig vom WAK der Restauration. Mit diesen neuen fluoreszierenden Malfarben gelingt es einfach, Restaurationen sowohl intern, während des Schichtens, als auch oberflächlich zu bemalen und fein zu lasieren.

Die VITA AKZENT Plus Malfarben sind je nach Verarbeitungspräferenz und Einsatzgebiet als Pulver und gebrauchsfertige Pasten erhältlich. Die lasierenden Body Stains und Glaze gibt es zusätzlich als Spray.



Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.

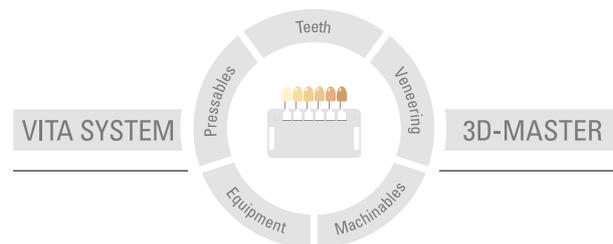

**Zur Beachtung:** Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 01.19

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung **CE 0124**.

VITA**VM**9 · VITA**PM**9 · VITA AKZENT® **Plus**

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)