


VITA ENAMIC® Nově definuje zatížitelnost!*

První hybridní keramika s duální sítovou strukturou, která optimálně absorbuje síly stisku čelistí

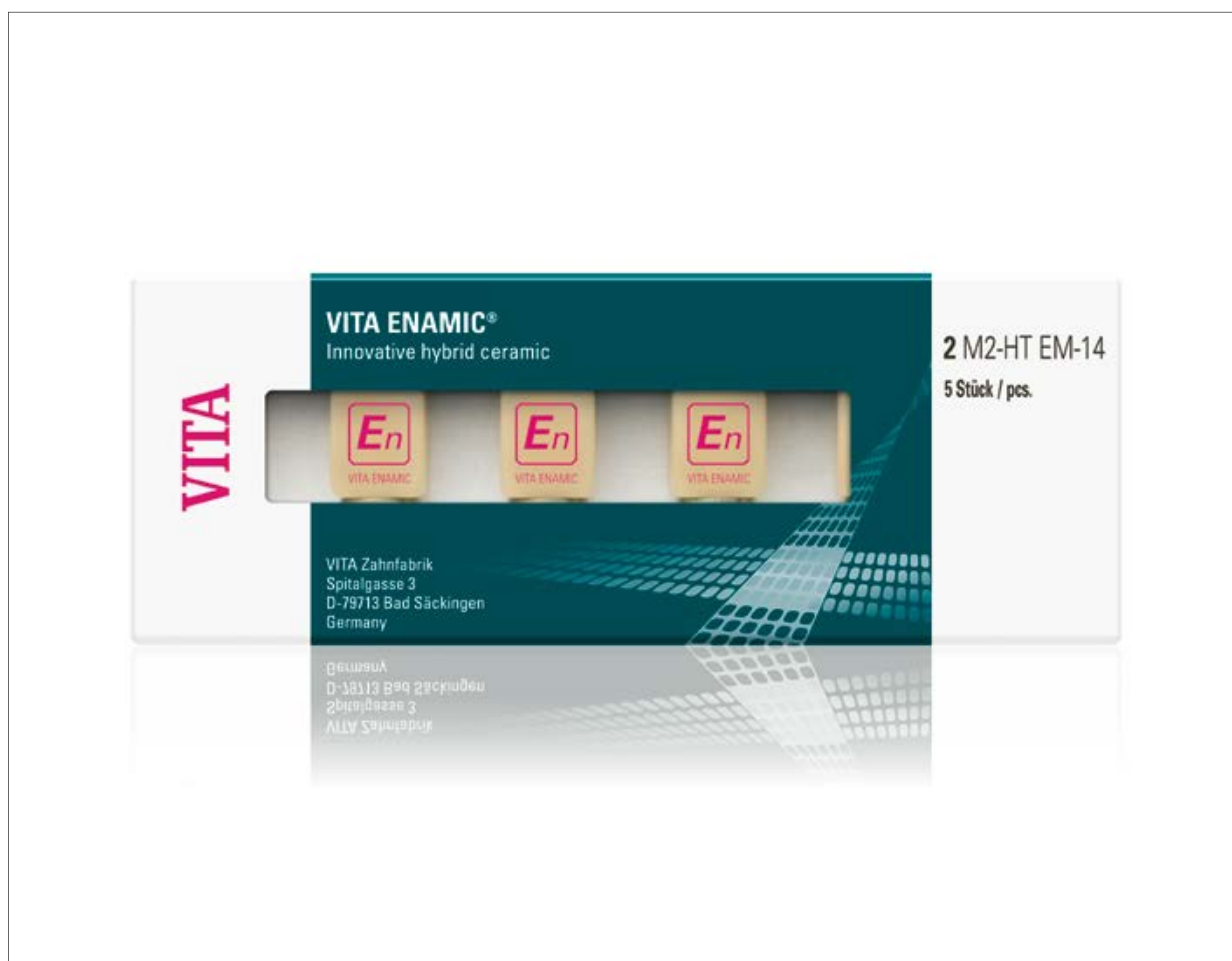

VITA určení barvy

VITA barevná komunikace

VITA barevná reprodukce

VITA kontrola barvy

Platí od 11.14

VITA shade, VITA made.

VITA

Popis výrobku

VITA ENAMIC je celosvětově první dentální hybridní keramika s duální sítovou strukturou. Dominující keramická síť zesiluje polymernou síť, přičemž obě sítě do sebe kompletně pronikají. VITA ENAMIC je tak dentální spojovací materiál, který spojuje pozitivní vlastnosti keramiky a kompozitu.

Tato inovativní hybridní keramika zaručuje v první řadě kromě vynikající pružnosti také enormní zatížitelnost po adhezivním spojení.

Tím se materiál výborně hodí pro korunkové restaurace v oblasti post-ranních zubů a umožňuje tenké stěny pro minimalinvasivní náhrady.

Dále přesvědčuje VITA ENAMIC maximální spolehlivostí, přesnými, stabilními a tím detailně věrnými výsledky broušení. Nakonec disponuje tento hybridní materiál v barvě zubů materiálovými vlastnostmi maximálně podobným zubům a díky excelentní světelné vodivosti zajišťuje přirozenou hru barev.

*) Tato inovativní hybridní keramika zaručuje v první řadě kromě vynikající pružnosti také enormní zatížitelnost po adhezivním spojení.

Přednosti výroby

Enormní zatížitelnost:

VITA ENAMIC je po spojení se zbylou zubní hmotou enormně zatížitelný. Tento "spojovací materiál" zaručuje optimální rozdělení síly stisku čelistí a polymerová síť výborně absorbuje intraorální zatížení.

Vysoká spolehlivost:

Dále je VITA ENAMIC maximálně spolehlivý materiál. Například disponuje hybridní keramikou díky své speciální „struktuře duální sítě“ integrovanou „funkcí zastavení prasklin“.

Náhrada šetrná k zubní hmotě:

VITA ENAMIC zaručuje kromě vysoké zatížitelnosti také potřebnou pružnost a umožňuje tak minimalizovat náhrady, takže lze pomocí zeslabených tlouštěk stěn zachovat zdravou zubní hmotu.

Přesné a detailně věrné restaurace:

Přesné a detailně věrné restaurace:

VITA ENAMIC hybridní keramikou ukazuje po broušení – obzvláště u zeslabujících se okrajů restaurací – excelentní stabilitu hran a zajišťuje detailně věrnou morfologii a přesný konečný výsledek.

Rychlé a hospodárné zpracování:

Excelentní brusné vlastnosti VITA ENAMIC zaručují, že se restaurace vypracuje s úsporou času a šetrně k brusnému nástroji. Dále má hybridní keramika už svoji konečnou pevnost a může se použít okamžitě po broušení.

Výsledky jsou přirozené a v barvě zubů:

VITA ENAMIC je dentální materiál v barvě zubů a má vynikající světelnou vodivost. Tím se restaurace VITA ENAMIC výborně začleňují zbylé zubní hmoty a zajišťují přirozenou hru barev.

Spektrum indikací:

VITA ENAMIC se hodí kromě klasických restaurací jednotlivých zubů (inleje, onleje, fazety a korunky) obzvláště pro náhrady s vysokým zatížením stisku čelistí (molární oblast) a minimalizující restaurace.

Údaje k výrobku:

Geometrie: VITA ENAMIC je nabízeno v geometriích EM-14 (12 x 14 x 18 mm) a EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.

Nabídka barev: VITA ENAMIC lze zakoupit ve stupních průsvitnosti HT (HT = high translucent) a T (T = translucent) a v pěti barvách VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2 a 3M2.

VITA ENAMIC® für CEREC®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER® nabídka barev

VITA ENAMIC® high translucent

Barva	Označení	Geometrie	Obsah	Č. výr.
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC43M2HTEM14
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kusů	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kusů	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kusů	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kusů	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kusů	EC43M2HTEM10

VITA ENAMIC® translucent

Barva	Označení	Geometrie	Obsah	Č. výr.
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kusů	EC43M2TEM14

Primární indikace vysoce průsvitná:

inleje, onleje, fazety a korunky

Primární indikace průsvitná:

Maskování zbarvených čepů, obzvláště u korunek

VITA ENAMIC® Starter Set

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Č. výr. EC4EMSTSETC

Obsah	Barvy	Množství
5 bal. VITA ENAMIC vysoce průsvitná	0M1 - 3M2	na každou barvu 1 balení à 5 ks
5 bal. VITA ENAMIC průsvitná	0M1 - 3M2	na každou barvu 1 balení à 5 ks
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	—	8 Leštič pro předběžné leštění a leštění na vysoký lesk pro kolénko

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Č. výr. EC4EMSTSETT

Obsah	Barvy	Množství
5 bal. VITA ENAMIC vysoce průsvitná	0M1 - 3M2	na každou barvu 1 balení à 5 ks
5 bal. VITA ENAMIC průsvitná	0M1 - 3M2	na každou barvu 1 balení à 5 ks
VITA ENAMIC Polishing Set technical	—	8 Leštič pro předběžné leštění a leštění na vysoký lesk pro násadec

Systémová kompatibilita

VITA ENAMIC lze zpracovávat se systémem CEREC resp. inLab-MC XL firmy Sirona od verze softwaru > V4.0.

*) Geometrie EM-10 je k zakoupení pouze u stupně průsvitnosti HT!

Další informace k VITA ENAMIC najdete na: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA