


# VITA ENAMIC® дефинира по нов начин възможността за натоварване!\*

Първата хибридна керамика с двойна мрежова структура, която оптимално поема дъвкательните сили

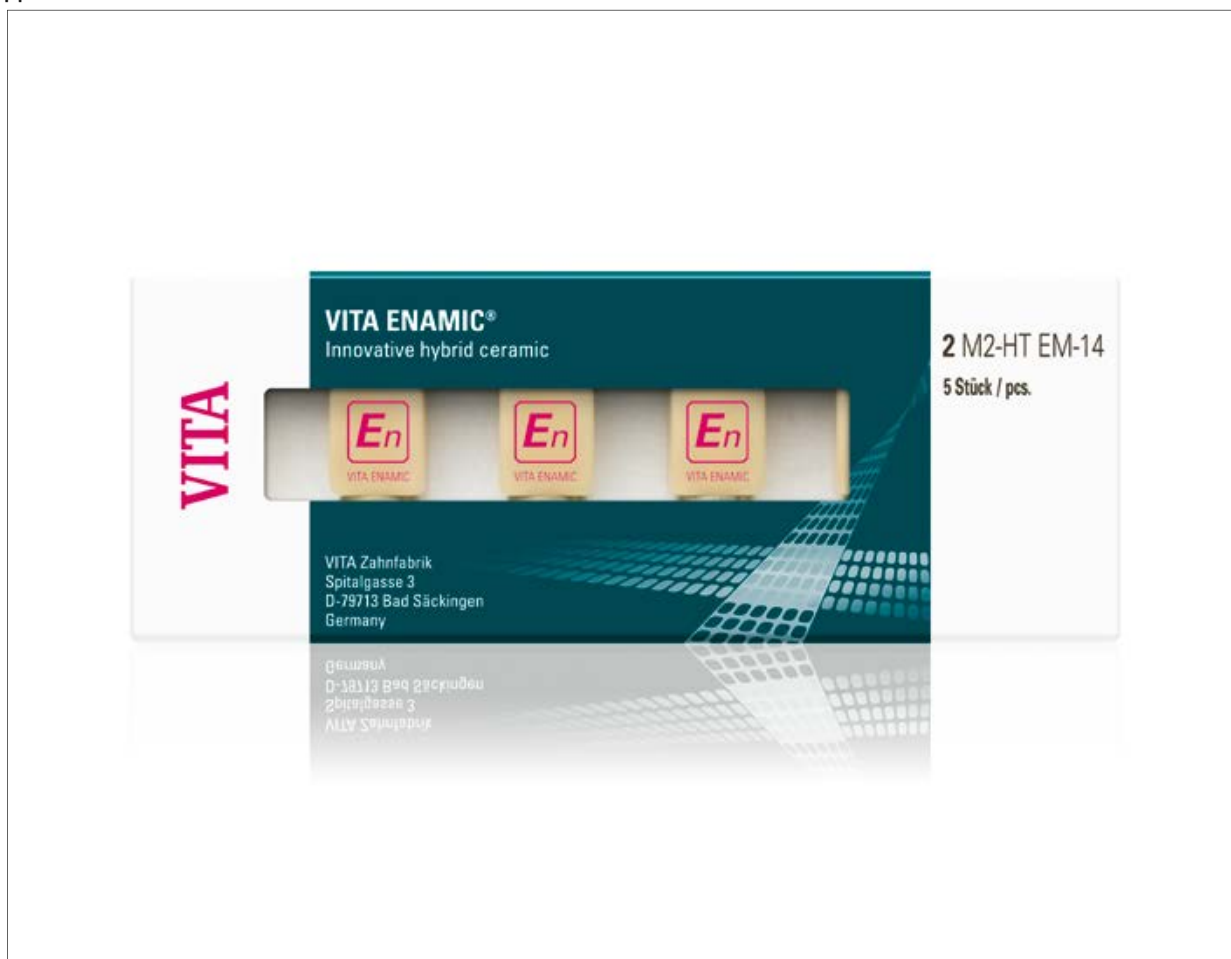

VITA определяне на цвят

VITA комуникация на цвят

VITA възпроизвеждане на цвят

VITA контрол на цвета

Редакция 05.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Описание на продукта

VITA ENAMIC е първата в света дентална хибридна керамика с двойна мрежова структура. При този дентален материал доминиращата керамична мрежова структура се подсилва от полимерна мрежова структура, при което двете мрежи напълно проникват една в друга. Така VITA ENAMIC е дентален хибриден материал, който обединява в себе си положителните свойства на керамиката и на композита.

Тази нова хибридна керамика гарантира за първи път освен голяма еластичност също огромна способност за натоварване след адхезивното свързване.

Така материалът е изключително подходящ за изработване на корони в дисталната зона и позволява малки дебелини на стените за минимално инвазивни възстановявания.

VITA ENAMIC убеждава също така със своята възможно най-висока надеждност, с продукти, които са прецизни до малки детайли и със стабилни кантове след изрязването. В крайна сметка този хибриден материал с цвят на зъб има качества, подобни на тези на естествените зъби и благодарение на отличната му светлопроводимост се получава естествена игра на цветовете.

\*) Тази иновативна хибридна керамика гарантира за първи път освен голяма еластичност също и огромна способност за натоварване след адхезивното свързване.

моля обърнете!

## Предимства на продукта

### Огромна издържливост на натоварване:

След свързването си с останалата зъбна субстанция VITA ENAMIC придобива възможност за огромно натоварване. Този хибриден материал гарантира оптимално разпределение на дъвкателните сили, а полимерната мрежа абсорбира отлично интраоралните натоварвания.

### Висока надеждност:

Освен това VITA ENAMIC е възможно най-надежден материал. Хибридна керамика на базата на специалната си двойна мрежова структура има, например, интегрирана функция „Стоп пукнатини“.

### Щадящи субстанцията възстановявания:

VITA ENAMIC гарантира заедно с огромната издържливост на натоварване, и необходимата еластичност, като по този начин прави възможно изработването на минимално инвазивни възстановявания, така че чрез намалени дебелини на стените се съхранява здрава зъбна субстанция.

### Прецизни до най-малкия детайл възстановявания:

След шлифовачния процес, особено при възстановявания, които изтъняват в кантовете хибридна керамика VITA ENAMIC има отлична здравина на ръбовете и осигурява точна до най-малък детайл морфология, както и точно напасване на възстановяването.

## VITA ENAMIC® für CEREC®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER® предлагани цветове

### VITA ENAMIC® high translucent

Цвят	Означение	Геометрия	Съдържание	Арт.-№.
0M1-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC40M1НТЕМ14
1M1-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC41M1НТЕМ14
1M2-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC41M2НТЕМ14
2M2-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC42M2НТЕМ14
3M2-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC43M2НТЕМ14
4M2-НТ	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC4EM4282765
0M1-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC40M1НТЕМ10
1M1-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC41M1НТЕМ10
1M2-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC41M2НТЕМ10
2M2-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC42M2НТЕМ10
3M2-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC43M2НТЕМ10
4M2-НТ	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 броя	EC4EM4282645

### VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Арт.-№. EC4EMSTSETC

Съдържание	Цветове	Количество
5 opak. VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя
5 opak. VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя
VITA ENAMIC Комплект за полиране за клинично приложение	–	8 инструмента за предварително и финашно огледално полиране за обратен наконечник

\*) Геометрията EM-10 се предлага само в степен на трансlucentност НТ!

### Съвместимост на системите

Информация за съвместимостта на системите и изискванията към съответните хардуери и софтуери ще намерите на страницата [www.vita-zahnfabrik.com/cadcam](http://www.vita-zahnfabrik.com/cadcam) - Download Съвместимост на VITA CAD/CAM материали, както и от съответните партньори с CAD/CAM системи. Обхватът на размерите и цветовете при различните CAD/CAM партньори може да е различен.

Допълнителна информация за VITA ENAMIC ще намерите на адрес: [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

### Бързо и икономично обработване:

Отличните шлифовачни качества на VITA ENAMIC гарантират бързо и щадящо изрязващите инструменти изработване на възстановяване. Освен това хибридна керамика без допълнителна обработка е с крайна здравина и може веднага след изрязването да бъде вградена.

### Естествени резултати с цвят на зъб:

VITA ENAMIC е дентален материал с цвят на зъба, отличаващ се с изключителна проводимост на светлината. По този начин VITA ENAMIC- възстановяванията се вграждат отлично в останалата зъбна субстанция и осигуряват естествена игра на цветовете.

### Области на приложение:

VITA ENAMIC е подходящ освен за класически единични възстановявания (инлеи, онлеи, фасети и корони), особено за възстановявания в зони с голямо дъвкателно натоварване (моларната зона), както и за минимално инвазивни възстановявания.

### Данни за продукта:

VITA ENAMIC се предлага в геометриите EM-14 (12 x 14 x 18 mm) и EM-10 (8 x 10 x 15 mm)\*. Предлагани цветове: VITA ENAMIC се предлага в трансlucentните степени НТ (НТ = високо трансlucentтен), и Т (Т = трансlucentтен), съответно в шестте VITA SYSTEM 3D-MASTER цвята 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 и 4M2.

### VITA ENAMIC® translucent

Цвят	Означение	Геометрия	Съдържание	Арт.-№.
0M1-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC40M1ТЕМ14
1M1-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC41M1ТЕМ14
1M2-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC41M2ТЕМ14
2M2-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC42M2ТЕМ14
3M2-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC43M2ТЕМ14
4M2-Т	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 броя	EC4EM3282765

### Първа индикация на материала с висока трансlucentност:

инлеи, онлеи, фасети, частични и цели корони

### Първа индикация на трансlucentния материал:

маскиране на оцветени пънчета, особено при корони.

### VITA ENAMIC® Starter Set technical

Арт.-№. EC4EMSTSETT

Съдържание	Цветове	Количество
5 opak. VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя
5 opak. VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	от всеки цвят по 1 опаковка с 5 броя
VITA ENAMIC Комплект за полиране за зъботехническо приложение	–	8 инструмента за предварително и финашно огледално полиране за наконечник

**VITA**