


# VITA ENAMIC® redéfinit la résistance mécanique !\*

La première céramique hybride dotée d'une structure à double réseau qui absorbe parfaitement les forces masticatoires !

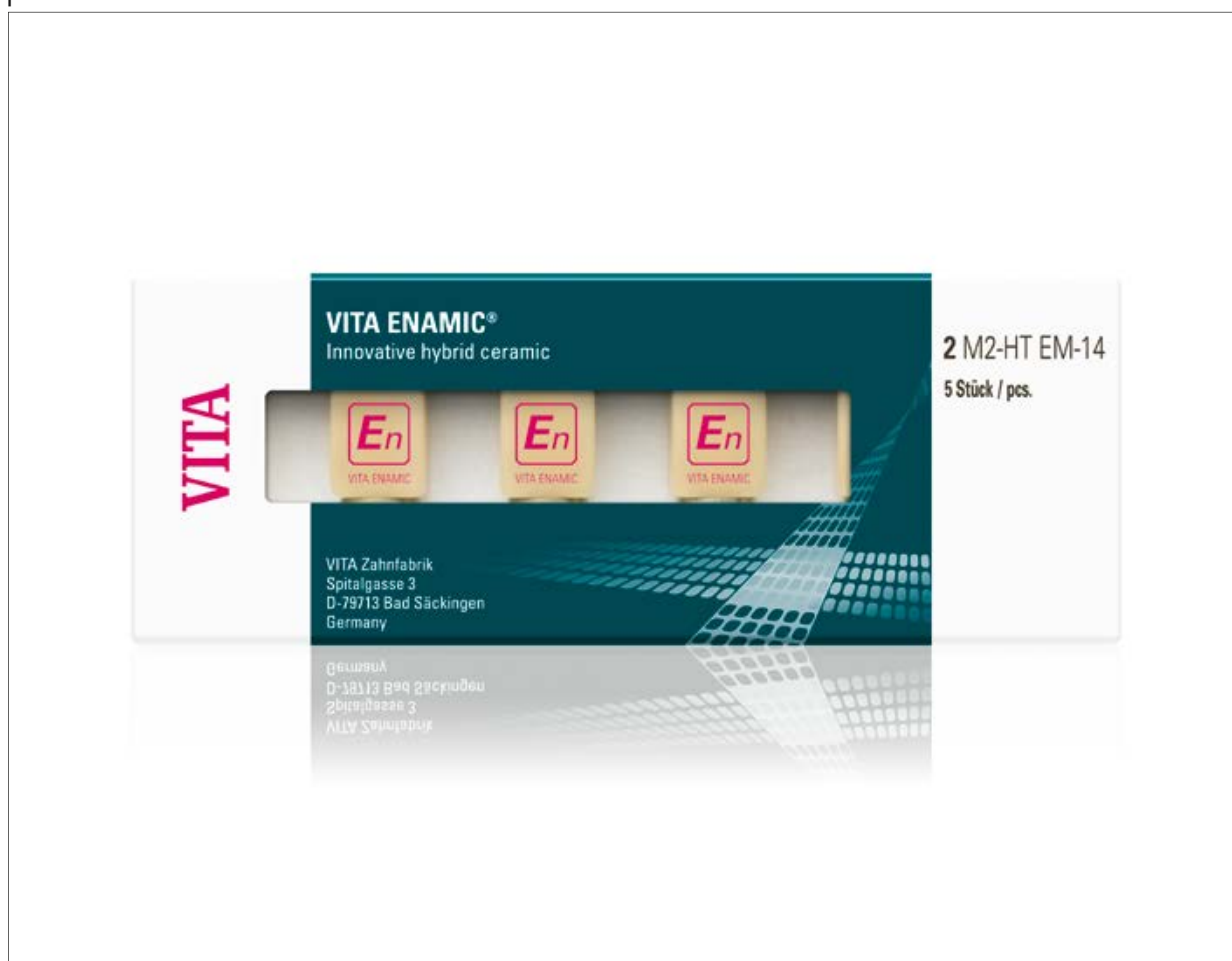

Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 02.15

VITA shade, VITA made.

**VITA**

## Description du produit

VITA ENAMIC est la première céramique dentaire hybride dotée d'une structure à double réseau. Le principal réseau de céramique au sein de ce matériau est renforcé par un réseau polymère et les deux réseaux s'imbriquent totalement. VITA ENAMIC est donc un matériau dentaire d'assemblage où l'on retrouve les bonnes propriétés de la céramique et des matériaux composite.

Cette céramique hybride innovante garantit pour la première fois non seulement une élasticité particulière mais aussi une énorme résistance mécanique après collage.

Le matériau est donc excellent pour les couronnes en secteur postérieur et autorise des épaisseurs de paroi réduites pour des restaurations a minima.

De plus, VITA ENAMIC séduit par sa très grande fiabilité, un comportement à l'usinage associant la précision, la solidité des bords et la fidélité à l'original. En conclusion ce matériau hybride en couleurs dentaires possède des propriétés intrinsèques similaires à celles des dents naturelles ce qui lui permet de véhiculer remarquablement la lumière et de créer un jeu de couleurs naturel.

## Avantages du produit

### Énorme résistance mécanique

VITA ENAMIC après scellement à la substance dentaire résiduelle possède une énorme résistance mécanique. Ce "matériau d'assemblage" garantit une parfaite répartition des forces masticatoires et le réseau de polymère absorbe remarquablement les forces en bouche.

### Grande fiabilité

De plus, VITA ENAMIC est extrêmement fiable. La céramique hybride possède par exemple une "structure particulière à double réseau" avec une "fonction de blocage des fissures" intégrée.

### Restauration préservant la substance

Parallèlement à une grande résistance mécanique, VITA ENAMIC garantit également l'élasticité requise et permet ainsi des restaurations a minima. Il est donc possible de conserver la substance dentaire saine grâce à des épaisseurs de paroi réduites.

### Des restaurations précises et fidèles à l'original

La céramique hybride VITA ENAMIC après usinage présente une excellente solidité des bords – notamment lorsque les bords de la restauration vont en s'amenuisant. Elle permet de respecter la morphologie d'origine et garantit la précision d'adaptation.

## VITA ENAMIC® pour CEREC®/inLab®

Palette de couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER®

### VITA ENAMIC® high translucent

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC43M2HTEM14
4M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC4EM4282765
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC43M2HTEM10
4M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 pièces	EC4EM4282645

### VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Art.-Nr. EC4EMSTSETC

Contenu	Couleurs	Quantité
Boîte de 5 VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur
Boîte de 5 VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	–	8 pointes de prépolissage et lustrage pour contre-angle

\*) La taille EM-10 est disponible uniquement en degré de translucidité HT !

### Systèmes compatibles

Vous trouverez les conditions à remplir en matière d'équipement et de logiciel auprès des partenaires CFAO ainsi que sur le site [www.vita-zahnfabrik.com/cadcam](http://www.vita-zahnfabrik.com/cadcam) en téléchargement à la rubrique "Systèmes compatibles matériaux VITA CFAO".

La palette des géométries/couleurs peut varier en fonction du système CFAO utilisé.

Vous trouverez de plus amples informations sur VITA ENAMIC sous : [www.vita-enamic.de](http://www.vita-enamic.de) / [www.vita-enamic.com](http://www.vita-enamic.com)

### Mise en œuvre rapide et rentable

Grâce aux excellentes qualités d'usinage de VITA ENAMIC, la restauration peut être dégrossie en peu de temps et sans endommager les instruments. De plus, la céramique hybride possède déjà sa résistance définitive et après usinage elle peut être immédiatement posée en bouche.

### Résultats naturels en couleurs dentaires

VITA ENAMIC est un matériau en couleurs dentaires, à même de véhiculer remarquablement la lumière. Les restaurations en VITA ENAMIC s'intègrent donc remarquablement dans la substance dentaire résiduelle et créent un jeu de couleurs naturel.

### Les indications

VITA ENAMIC, parallèlement aux restaurations unitaires classiques (inlays, onlays, facettes et couronnes) est particulièrement indiquée pour les restaurations a minima ainsi que pour les restaurations soumises à de fortes sollicitations masticatoires (secteur des molaires).

### Données sur le produit

Géométries : VITA ENAMIC est proposé dans les tailles EM-14 (12 x 14 x 18 mm) et EM-10 (8 x 10 x 15 mm)\*.

Palette de couleurs : VITA ENAMIC et dans les degrés de translucidité HT (HT = high translucent) et T (T = translucent) et pour chaque degré dans les six couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 et 4M2.

### VITA ENAMIC® translucent

Couleur	Désignation	Géométrie	Contenu	N° art.
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC43M2TEM14
4M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 pièces	EC4EM3282765

Indications principales high translucent : inlays/onlays, facettes, couronnes complètes et partielles.

Indications principales translucent : masquage de moignons décolorés notamment pour les couronnes.

### VITA ENAMIC® STARTER Set technical – N° art EC4EMSTSETT

Contenu	Couleurs	Quantité
Boîte de 5 VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur
Boîte de 5 VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	1 boîte de 5 blocs dans chaque couleur
VITA ENAMIC Polishing Set technical	–	8 pointes de prépolissage et lustrage pour pièce à main

**VITA**