


VITA ENAMIC® új jelentést ad a terhelhetőségnek!*

Az első, kettős hálószerkezettel bíró hibrid kerámia, amely optimálisan nyeli el a rágóerőket

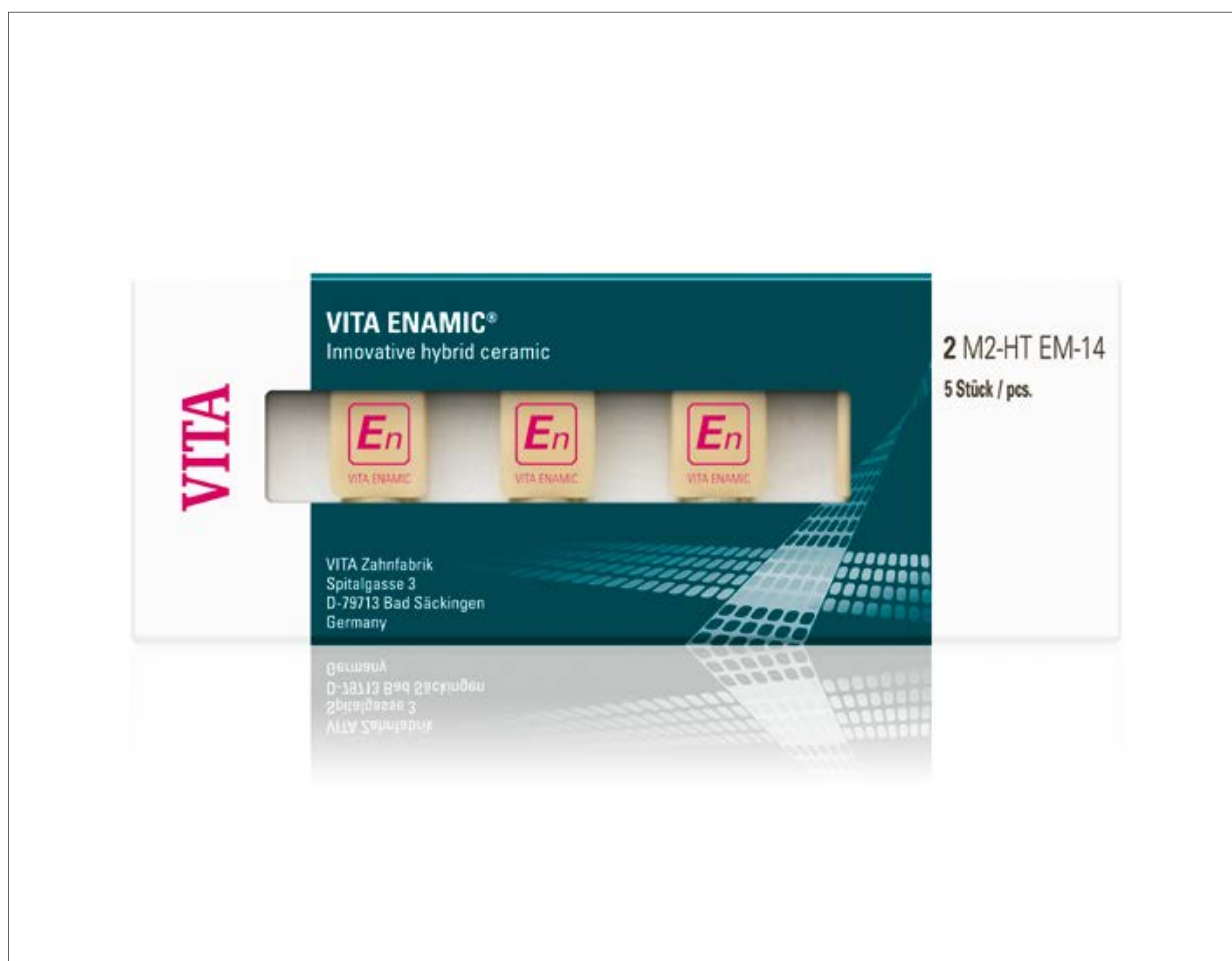

VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2015.03.

VITA shade, VITA made.

VITA

Termékleírás

VITA ENAMIC a világon az első olyan fogászati hibrid kerámia, amelynek kettős hálószerkezete van. Ennél a fogászati anyagnál a domináns kerámia hálózatot egy polimer hálózat erősíti meg, miközben a két háló teljesen egymásba hatol.

Így tehát VITA ENAMIC olyan társított anyag, amely egyesíti magában a kerámia és a kompozit pozitív tulajdonságait.

Ez az innovatív hibrid kerámia a különleges rugalmasság mellett első ízben garantál rendkívüli terhelhetőséget is az adhezív kötést követően.

Az anyag így kiválóan alkalmas koronaellátásokhoz az oldalfogak tartományában, és használatával csökkentett falvastagság érhető el a minimál invazív ellátásokhoz.

VITA ENAMIC ezen felül maximális megbízhatóságával, precíz, stabil élű, ezáltal részleteiben valóság-hű csiszolási eredményével győz meg. Ráadásul ez a fogszínű hibrid anyag a foghoz maximálisan hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló fényvezető képességének köszönhetően természetes fényjátékot biztosít.

*) Ez az első innovatív hibrid kerámia, amely különleges rugalmassága mellett rendkívüli terhelhetőséget is biztosít az adhezív kötés után.

Termék előnyei

Rendkívüli terhelhetőség:

VITA ENAMIC a maradék fogállományhoz történő kötést követően rendkívüli mértékben terhelhető. Ez a "társított anyag" biztosítja a rágóerő optimális eloszlását, a polimer hálózat pedig kiválóan elnyeli az intraorális terheléseket.

Kiemelkedő megbízhatóság:

VITA ENAMIC ezen túlmenően maximálisan megbízható anyag. Ez a hibrid kerámia különleges "kettős hálószerkezete" alapján például integrált repedést gátló funkcióval rendelkezik.

Fogállományt kímélő ellátás:

Magas terhelhetősége mellett VITA ENAMIC biztosítja a szükséges rugalmasságot is, és minimál invazív ellátásokat tesz lehetővé azért, hogy a csökkentett falvastagság révén megtartható az egészséges fogállomány.

Precíz, részleteiben valóság-hű fogpótlások:

A VITA ENAMIC hibrid kerámia a csiszolás után – főleg a fogpótlások vékonyan kifutó széleinél – kiváló élstabilitást mutat, és gondoskodik a részleteiben valóság-hű morfológiáról, valamint a pontosan illeszkedő végeredményről.

VITA ENAMIC® für CEREC®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER® szíkinálat

VITA ENAMIC® high translucent

Szín	Megnevezés	Méret	Tartalom	Cikkszám
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC43M2HTEM14
4M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC4EM4282765
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC43M2HTEM10
4M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 darab	EC4EM4282645

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Cikkszám EC4EMSTSETC

Tartalom	Színek	Mennyiség
5 csomag VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	színenként 1 csomag (á 5 db)
5 csomag VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	színenként 1 csomag (á 5 db)
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	–	8 előpolírozó és magasfényű polírozó a könyökdarabhoz

*) Az EM-10 méret csak HT translúcencia fokozatban kapható!

Kompatibilitás más rendszerekkel

A rendszerkompatibilitásról és a mindenkori hardver- és szoftverkövetelményekről www.vita-zahnfabrik.com/cadcam oldalon talál információt a Letöltéseknél, VITA CAD/CAM anyagok rendszerkompatibilitása címszó alatt, valamint az adott CAD/CAM rendszerpartnereknél tájékozódhat.

A méret- és színválaszték az egyes CAD/CAM rendszereket kínáló partnereknél ill. rendszereknél eltérhet.

További információ VITA ENAMIC anyagról a www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com oldalakon.

Gyors és gazdaságos megmunkálás:

VITA ENAMIC kiváló csiszolási tulajdonságai garantálják a fogpótlás időtakarékos, és a csiszoló szerszámot kímélő kialakítását. A hibrid kerámiának ezen kívül már megvan a végszilárdsága, így csiszolás után azonnal beilleszthető.

Természetes és fogszerű eredmények:

VITA ENAMIC egy fogszerű fogászati anyag, amely kiemelkedő fényvezetési képességgel rendelkezik. Épp ezért a VITA ENAMIC fogpótlások kiválóan illeszkednek a maradék fogállományba, és biztosítják a természetes fényjátékot.

Indikációs spektrum:

VITA ENAMIC a klasszikus szülő fogpótlások (inlay, onlay, veneer és koronák) mellett különösen alkalmas nagy rágóterheléssel járó ellátásokhoz (moláris tartományban), valamint minimál invazív restaurációkhoz.

Termékadatok:

Méretek: VITA ENAMIC anyagot EM-14 (12 x 14 x 18 mm) és EM-10 (8 x 10 x 15 mm)* méretben kínáljuk.

Színválaszték: VITA ENAMIC a HT (HT = high translucent), valamint a T (T = translucent) translúcencia árnyalatokban, minden esetben hat VITA SYSTEM 3D-MASTER színben (0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 és 4M2) rendelhető.

VITA ENAMIC® translucent

Szín	Megnevezés	Méret	Tartalom	Cikkszám
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC43M2TEM14
4M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 darab	EC4EM3282765

Primer indikáció, high translucent:

inlay, onlay, veneer, részleges és teljes koronák

Primer indikáció, translucent:

elszíneződött csonkok maszkolása, különösen koronáknál

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Cikkszám EC4EMSTSEIT

Tartalom	Színek	Mennyiség
5 csomag VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	színenként 1 csomag (á 5 db)
5 csomag VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	színenként 1 csomag (á 5 db)
VITA ENAMIC Polishing Set technical	–	8 előpolírozó és magasfényű polírozó a kézidarabhoz