


VITA ENAMIC® definiuje na nowo odporność na obciążenia!*

Pierwsza ceramika hybrydowa o podwójnie usieciowanej budowie, która optymalnie absorbuje siły żucia.

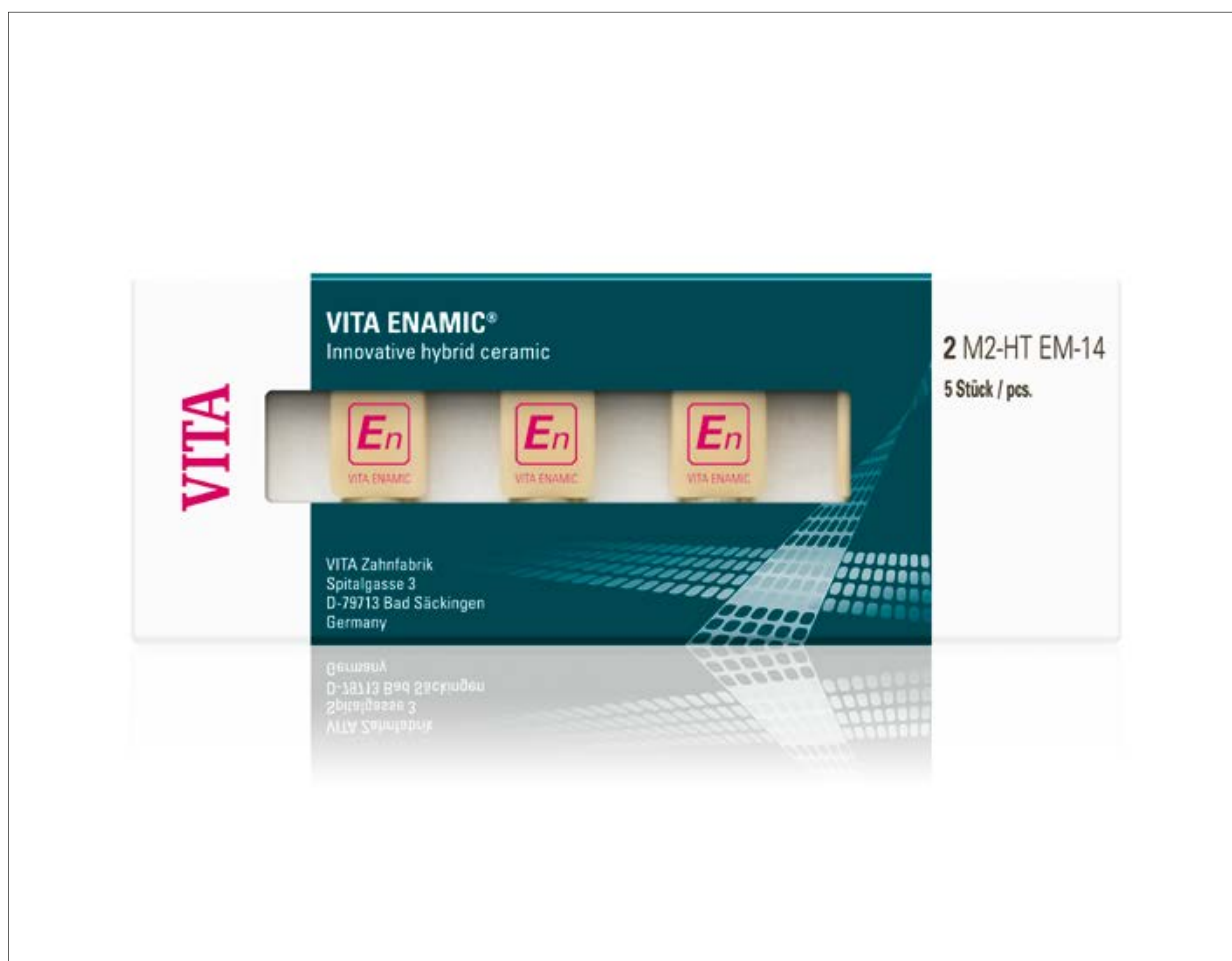

VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 05.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Opis produktu

VITA ENAMIC jest pierwszą dentystyczną ceramiką hybrydową na świecie, która posiada podwójnie usieciowaną strukturę. W tym materiale dominuje siatka ceramiczna, która jest wzmocniona przez siatkę polimerową - obie siatki przenikają się wzajemnie. VITA ENAMIC to dentystyczny materiał dwuskładnikowy, który scala pozytywne właściwości ceramiki i kompozytu.

Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia, i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.

Dzięki temu materiał znakomicie nadaje się do wykonywania koron w odcinku bocznym oraz umożliwia wykonywanie uzupełnień o zredukowanej grubości ścianek metodą małoinwazyjną.

Poza tym materiał VITA ENAMIC przekonuje swoją wysoką niezawodnością, precyzją kształtu, stabilnością krawędzi oraz wiernym odzwierciedleniem detali anatomicznych w procesie frezowania. Materiał hybrydowy łatwo integruje się z resztą uzębienia oraz gwarantuje naturalną grę kolorów dzięki znakomitej przewodności światła.

*) Ta nowatorska ceramika hybrydowa gwarantuje po raz pierwszy nie tylko znakomitą elastyczność, lecz również wyjątkową odporność na obciążenia i to natychmiast po adhezyjnym zacementowaniu.

Zalety produktu

Ogromna odporność na obciążenia:

Po zacementowaniu VITA ENAMIC na pozostałej substancji zęba, materiał cechuje ogromna odporność na obciążenia. Ten "materiał dwuskładnikowy" gwarantuje optymalne rozpraszanie sił żucia, a siatka polimerowa znakomicie absorbuje obciążenia zachodzące w jamie ustnej.

Wysoki stopień niezawodności:

Materiał VITA ENAMIC jest wyjątkowo niezawodnym materiałem. Dzięki podwójnej strukturze, materiał posiada funkcję "blokady powstawania pęknięć".

Znakomite uzupełnienie przy oszczędnej preparacji ubytku:

VITA ENAMIC gwarantuje poza wysoką odpornością na obciążenia, wymaganą elastyczność oraz umożliwia małoinwazyjną ingerencję w ubytek, a to oznacza zredukowaną grubość ścianek uzupełnienia i podtrzymanie zdrowej substancji zęba.

Precyzyjne uzupełnienia w każdym detalu:

Po procesie frezowania, ceramika hybrydowa VITA ENAMIC charakteryzuje się szczególnie wyrównanym przebiegiem krawędzi, znakomitą ich stabilnością oraz gwarantuje dokładną morfologię i adekwatne wyniki w każdym detalu.

VITA ENAMIC® für CEREC®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER® Oferta kolorów

VITA ENAMIC® high translucent

Kolor	Oznaczenie	Wymiary	Zawartość	Nr. art.
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC43M2HTEM14
4M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC4EM4282765
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC43M2HTEM10
4M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 sztuk	EC4EM4282645

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Nr. art. EC4EMSTSETC

Zawartość	Kolory	Ilość
5 opakowań VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk
5 opakowań VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	—	8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do uzyskiwania wysokiego połysku na kątnicę

*) Kształt EM-10 są dostępne tylko w wersji przezierniej HT!

Kompatybilność systemu

Informacje dotyczące oprogramowania i frezarek sterowanych komputerowo oraz pliki do pobrania na temat kompatybilnych systemów i materiałów VITA CAD/CAM, jak również firm partnerskich systemów CAD/CAM znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com/cadcam. Rozmiary i kolory materiałów dla pojedynczych systemów CAD/CAM mogą się różnić.

Dalsze informacje dotyczące VITA ENAMIC znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

Szybka i ekonomiczna obróbka:

Znakomite właściwości obróbki skrawaniem VITA ENAMIC gwarantują oszczędność czasu i niskie zużycie instrumentów w czasie frezowania. Ceramika hybrydowa posiada wytrzymałość ostateczną i po wyfrezowaniu może być natychmiast zacementowana.

Wyniki osiągnięte pod względem naturalnej kolorystyki:

VITA ENAMIC to materiał dentystryczny o kolorach zgodnych z naturalnym uzębieniem, który charakteryzuje się znakomitą przewodnością światła. Dzięki wyjątkowej estetyce, uzupełnienia z materiału VITA ENAMIC znakomicie integrują się z pozostałym uzębieniem pacjenta i gwarantują perfekcyjną grę kolorów.

Zakres zastosowania:

VITA ENAMIC stosujemy w klasycznych uzupełnieniach pojedynczych ubytków (wkłady koronowe, nakłady, licówki i korony), a w szczególności w uzupełnieniach, gdzie występują duże siły żucia jak np. w trzonowcach. Materiał stosujemy do wykonywania uzupełnień małoinwazyjnych.

Informacje o produkcie:

Rozmiary bloczków: oferta obejmuje rozmiary bloczków VITA ENAMIC EM-14 (12 x 14 x 18 mm) i EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.

Oferta kolorów: VITA ENAMIC można zakupić w kolorach przeziernych HT (HT = high translucent) oraz T (T = translucent) jak również w sześciu kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 i 4M2.

VITA ENAMIC® translucent

Kolor	Oznaczenie	Wymiary	Zawartość	Nr. art.
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC43M2TEM14
4M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 sztuk	EC4EM3282765

Podstawowe zastosowanie materiału high translucent (HT):

wkłady, nakłady, licówki, półkorony i korony

Wskazane zastosowanie materiału przeziernego (T):

maskowanie przebarwionych kikutów, szczególnie w przypadku koron.

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Nr. art. EC4EMSTSETT

Zawartość	Kolory	Ilość
5 opakowań VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk
5 opakowań VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	każdy kolor w 1 opakowaniu po 5 sztuk
VITA ENAMIC Polishing Set technical	—	8 instrumentów do polerowania wstępnego oraz do uzyskiwania wysokiego połysku na prostnicę