


VITA ENAMIC® redefine resistência!*

A primeira cerâmica híbrida de rede dupla que absorve perfeitamente as forças mastigatórias

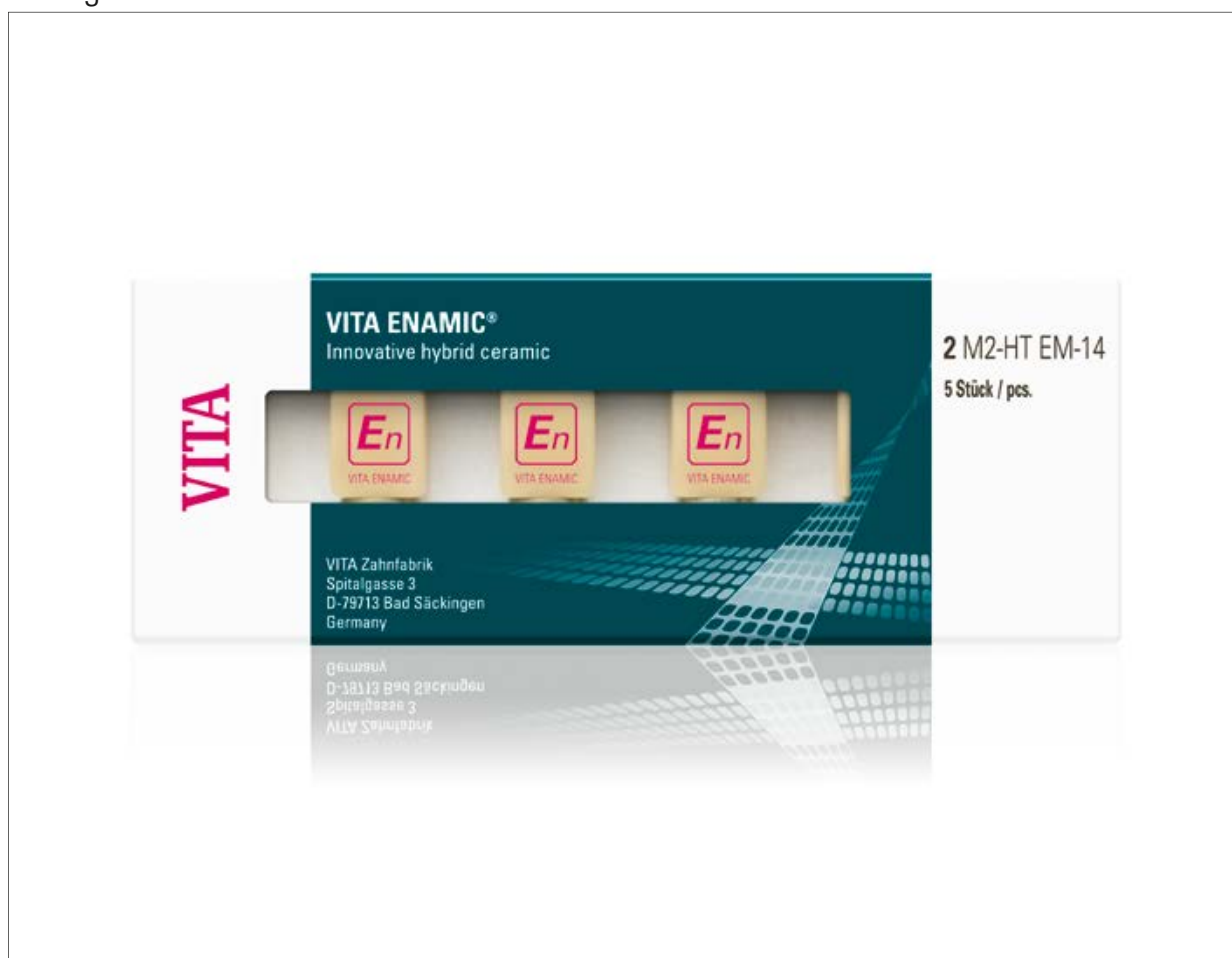

VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 03.15

VITA shade, VITA made.

VITA

Descrição do produto

VITA ENAMIC é a primeira cerâmica dentária híbrida com estrutura de rede dupla a nível mundial. Neste material dentário, a rede cerâmica dominante é reforçada por uma rede de polímeros, sendo que ambas as redes se atravessam por completo.

VITA ENAMIC é, por isso, um material compósito dentário que reúne as propriedades positivas da cerâmica e do compósito.

Esta inovadora cerâmica híbrida garante, pela primeira vez, para além de uma grande elasticidade, também uma enorme resiliência após a união adesiva.

Desta forma, o material é ideal para coroas posteriores e permite espessuras de parede reduzidas para restaurações minimamente invasivas.

Além disso, VITA ENAMIC convence pela sua máxima fiabilidade e resultados de fresagem precisos, detalhados com estabilidade dos bordos. Este material híbrido da cor do dente possui propriedades materiais extremamente semelhantes ao dente, assegurando tonalidades naturais graças a uma excelente fotocondutividade.

*) Esta inovadora cerâmica híbrida garante, pela primeira vez, além de uma elasticidade especial, também uma enorme resistência após a união adesiva.

Vantagens do produto

Resistência elevada:

Após a união à substância dentária remanescente, VITA ENAMIC apresenta uma enorme resistência. Este material de recobrimento garante uma distribuição perfeita da força mastigatória e a rede polimérica absorve as cargas intraorais de forma extraordinária.

Elevada fiabilidade:

VITA ENAMIC é um material altamente fiável. Devido à sua "estrutura de rede dupla" especial, a cerâmica híbrida integra, por exemplo, uma "função antifissuras" integrada.

Proteção da substância dentária

Além de uma elevada resistência às forças mastigatórias, VITA ENAMIC também garante a elasticidade necessária, o que possibilita a produção de restaurações minimamente invasivas, preservando a saúde da substância dentária através de espessuras de paredes reduzidas.

Restaurações precisas e detalhadas:

Após o processo de fresagem, a cerâmica híbrida VITA ENAMIC demonstra uma excelente estabilidade dos bordos, especialmente em casos de margens extremamente finas, e garante uma morfologia detalhada e um resultado final preciso.

VITA ENAMIC® para CEREC®/inLab®

Oferta de cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC® high translucent

Cor	Designação	Dimensão	Conteúdo	N.º art.
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC43M2HTEM14
4M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4EM4282765
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC43M2HTEM10
4M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 unidades	EC4EM4282645

VITA ENAMIC® STARTER Set clinical

N.º do art. EC4EMSTSETC

Conteúdo	Cores	Quantidade
5 embalagens VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	1 embalagem de 5 unidades por cor
5 embalagens VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	1 embalagem de 5 unidades por cor
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	—	8 polidores de polimento preliminar e de alto brilho para o contra ângulo

*) A dimensão EM-10 está disponível apenas no nível de translucidez HT!

Compatibilidade do sistema

Informações sobre a compatibilidade do sistema e os respectivos requisitos de hardware e software estão disponíveis em formato de download através do site www.vita-zahnfabrik.com/cadcam em "Compatibilidade do sistema VITA de materiais CAD/CAM", bem como através dos sistemas parceiros CAD/CAM. O âmbito da oferta de cores/geometria podem variar para sistemas parceiros CAD/CAM, assim como para outros sistemas.

Para mais informação sobre VITA ENAMIC aceda a: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

Processamento rápido e eficaz:

As excelentes propriedades de fresagem de VITA ENAMIC asseguram o processamento rápido da restauração e com um desgaste mínimo do instrumento de fresagem. Além disso, a cerâmica híbrida já possui a sua resistência final, podendo ser cimentada na boca imediatamente após a fresagem.

Resultados perfeitos e muito naturais:

VITA ENAMIC é um material dentário da cor do dente e possui uma excelente fotocondutividade. Isto permite a integração perfeita de restaurações VITA ENAMIC na substância dentária remanescente, garantindo tonalidades naturais.

Indicações:

Além das restaurações clássicas de dentes individuais (inlays, onlays, facetas e coroas), VITA ENAMIC está especialmente indicado para tratamentos com elevada carga mastigatória (região molar), bem como restaurações minimamente invasivas.

Dados do produto:

Dimensões: VITA ENAMIC está disponível nas dimensões EM-14 (12 x 14 x 18 mm) e EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.

Gama de cores: VITA ENAMIC está disponível nos graus de translucidez HT (HT = high translucent) e T (T = translucent), bem como nas seis cores VITA SYSTEM 3D-MASTER 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 e 4M2.

VITA ENAMIC® translucent

Cor	Designação	Dimensão	Conteúdo	N.º art.
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC43M2TEM14
4M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 unidades	EC4EM3282765

Indicação principal high translucent:

inlays/onlays, facetas, coroas parciais e totais

Indicação principal translucent:

disfarce de cotos manchados, especialmente em coroas.

VITA ENAMIC® STARTER Set technical

N.º do art. EC4EMSTSETT

Conteúdo	Cores	Quantidade
5 embalagens VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	1 embalagem de 5 unidades por cor
5 embalagens VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	1 embalagem de 5 unidades por cor
VITA ENAMIC Polishing Set technical	—	8 polidores de polimento preliminar e de alto brilho para a peça de mão