


VITA ENAMIC® ponovo definiše izdržljivost!*

Prva hibridna keramika sa dualnom mrežnom strukturom koja optimalno apsorbuje zagrižajne sile

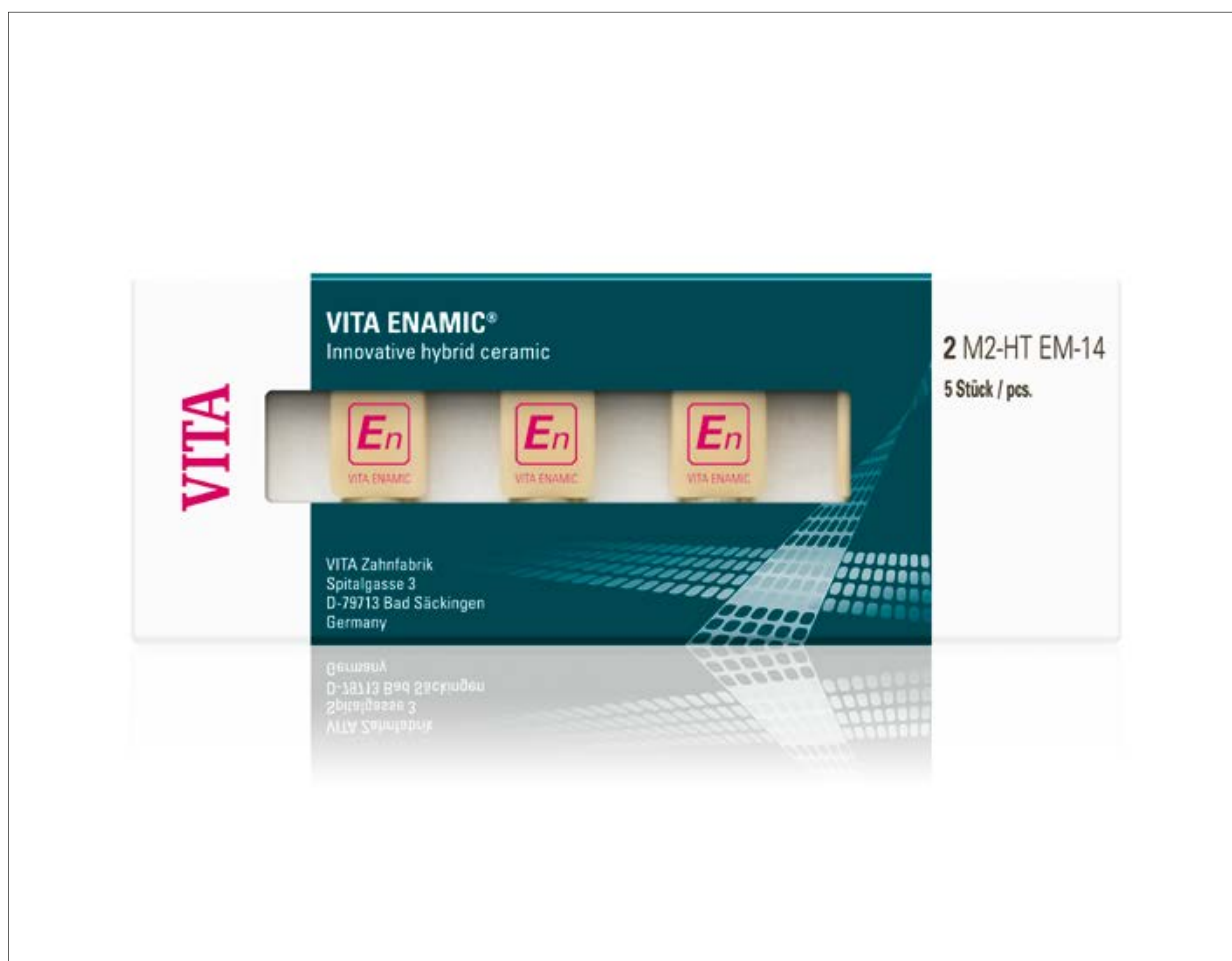

VITA određivanje boja

VITA komunikacija boja

VITA proizvodnja boja

VITA kontrola boja

Izdanje 05.16.

VITA shade, VITA made.

VITA

Opis proizvoda

VITA ENAMIC je prva dentalna hibridna keramika na svetu sa dualnom mrežnom strukturom. Kod ovog dentalnog materijala je dominantna keramička mreža ojačana polimernom mrežom, gde se obe mreže potpuno prožimaju.

VITA ENAMIC je zato dentalni vezni materijal koji u sebi objedinjuje pozitivne karakteristike keramike i kompozita.

Ova inovativna hibridna keramika, pored izuzetne elastičnosti, po prvi put garantuje i ogromnu izdržljivost nakon lepljenja.

Zbog toga je ovaj materijal izuzetno pogodan za izradu krunica u području bočnih zuba i omogućava smanjene debljine zidova za minimalno invazivne nadoknade.

Osim toga, VITA ENAMIC karakteriše maksimalna pouzdanost, stabilne ivice i verni rezultati brušenja. Konačno, ovaj hibridni materijal u boji zuba krasi karakteristike koje su najpribližnije karakteristikama zuba, a zahvaljujući odličnoj fotoprovodnosti, obezbeđuje prirodno nijansiranje boja.

*) Ova inovativna hibridna keramika, pored izuzetne elastičnosti, po prvi put garantuje i ogromnu izdržljivost nakon lepljenja.

Prednosti proizvoda

Ogromna izdržljivost:

VITA ENAMIC je nakon spajanja sa preostalom denticijom veoma izdržljiv. Ovaj „vezivni materijal“ garantuje optimalnu raspodelu zagrižajnih sila, dok polimerna mreža odlično apsorbuje intraoralna opterećenja.

Visoka pouzdanost:

VITA ENAMIC je maksimalno pouzdan materijal. Na primer, zahvaljujući posebnoj „strukтури sa dvostrukom mrežom“, hibridna keramika ima integrisanu „funkciju zaustavljanja pukotina“.

Nadoknada koja šteti materijal:

Pored velike izdržljivosti, VITA ENAMIC garantuje i potrebnu elastičnost i time omogućuje minimalno invazivne nadoknade koje zbog smanjene debljine zidova mogu da sadrže zdravu zubnu supstancu.

Precizne i verne restauracije:

Posebno kod finih tankih rubova restauracija, VITA ENAMIC hibridna keramika nakon brušenja pokazuje odličnu stabilnost ivica i obezbeđuje vernu morfologiju i precizan rezultat.

Brza i ekonomična obrada:

Odlične karakteristike brušenja VITA ENAMIC proizvoda garantuju izradu restauracija sa uštedom vremena i zaštitom brusnog alata. Osim toga, hibridna keramika već ima svoju finalnu čvrstoću, tako da se može primeniti odmah nakon brušenja.

Prirodni rezultati u boji zuba:

VITA ENAMIC je dentalni materijal u boji zuba koji karakteriše izuzetna fotoprovodnost. Zbog toga se VITA ENAMIC restauracije izuzetno dobro uklapaju u preostalu denticiju i obezbeđuju prirodno nijansiranje boja.

Spektar indikacija:

VITA ENAMIC je pogodan za klasične restauracije pojedinačnih zuba (inleji, onleji, fasete i krunice), a naročito je podesan za nadoknade sa većim opterećenjem pri žvakanju (područje molara) i minimalno invazivne restauracije.

Podaci o proizvodu:

Geometrije: VITA ENAMIC se nudi u geometrijama EM-14 (12 x 14 x 18 mm) i EM-10 (8 x 10 x 15 mm)*.

Ponuda boja: VITA ENAMIC je dostupan u stepenu transparentnosti HT (HT = high translucent) i T (T = translucent), i uvek u šest VITA SYSTEM 3D-MASTER boja 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2 i 4M2.

VITA ENAMIC® za CEREC® / inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER® ponuda boja

VITA ENAMIC® high translucent

Boja	Oznaka	Geometrija	Sadržaj	Art. br.
0M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC40M1HTEM14
1M1-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC41M1HTEM14
1M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC41M2HTEM14
2M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC42M2HTEM14
3M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC43M2HTEM14
4M2-HT	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC4EM4282765
0M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC40M1HTEM10
1M1-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC41M1HTEM10
1M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC41M2HTEM10
2M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC42M2HTEM10
3M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC43M2HTEM10
4M2-HT	EM-10	8 x 10 x 15 mm	5 kom.	EC4EM4282645

VITA ENAMIC® translucent

Boja	Oznaka	Geometrija	Sadržaj	Art. br.
0M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC40M1TEM14
1M1-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC41M1TEM14
1M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC41M2TEM14
2M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC42M2TEM14
3M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC43M2TEM14
4M2-T	EM-14	12 x 14 x 18 mm	5 kom.	EC4EM3282765

Primarna indikacija high translucent:

inleji, onleji, fasete, parcijalne i pune krunice

Primarna indikacija translucent:

maskiranje prebojenih patrljaka, naročito kod krunica.

VITA ENAMIC® Starter Set clinical

Art. br. EC4EMSTSETC

Sadržaj	Boje	Količina
5 pak. VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	prema boji 1 pakovanje od 5 komada
5 pak. VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	prema boji 1 pakovanje od 5 komada
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	–	8 polirera za predpoliranje i visoki sjaj za kolenjak

VITA ENAMIC® Starter Set technical

Art. br. EC4EMSTSETT

Sadržaj	Boje	Količina
5 pak. VITA ENAMIC high translucent	0M1 - 3M2	prema boji 1 pakovanje od 5 komada
5 pak. VITA ENAMIC translucent	0M1 - 3M2	prema boji 1 pakovanje od 5 komada
VITA ENAMIC Polishing Set technical	–	8 polirera za predpoliranje i visoki sjaj za nasadnik

*) EM-10 geometrija je dostupna samo u translucennoj fazi HT!

Kompatibilnost sistema

Informacije o kompatibilnosti sistema i odgovarajućih hardverskih i softverskih zahteva možete dobiti na stranici www.vita-zahnfabrik.com/cadcam u delu Download za preuzimanje VITA CAD/CAM dokumentacije, kao i kod odgovarajućih partnera za CAD/CAM sisteme. Opseg ponude geometrija/boja može da se razlikuje za određene CAD/CAM sisteme, odnosno partnere u toj oblasti.

Više informacija o proizvodu VITA ENAMIC naći ćete na adres: www.vita-enamic.de / www.vita-enamic.com

VITA