

VITA VMK Master®

Magistrale per tutti i casi



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 01.19



VITA – perfect match.

VITA

Magistrale - risultati ottimali



VITA VMK Master®

Magistrale

Precisione che piace. In sicurezza!

Con VITA VMK Master VITA offre una ceramica feldspatica naturale per rivestimento estetico che assicura risultati magistrali con tutte le leghe classiche - per fusione, fresate o sinterizzate.

VITA VMK Master consente una sicurezza cromatica assoluta, qualitativamente controllata e sempre affidabile. Perché VITA punta esclusivamente sui massimi standard produttivi – le masse VITA vengono realizzate nella stessa fabbrica, che produce anche le scale colori VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER note in tutto il mondo.

Verificate direttamente: con VITA VMK Master risultati sempre precisi ed estetici – affidabile, cromaticamente brillante e per tutti i casi!



Disco cromo-cobalto Zirkonzahn®

Vantaggi in un colpo d'occhio

- Precisa e sicura nella lavorazione e quindi di facile apprendimento
- Materiale senza compromessi in termini di sicurezza ed estetica
- Caratteristiche di lavorazione di eccellenza, come ad es. modellabilità migliorata, semplicità di impiego e retrazione minima (che permette di realizzare le corone con una sola cottura)
- Individualizzabile con VITA AKZENT Plus e VITA INTERNO
- Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4



Performance eccellenti – verificate



Performance eccellenti

Le nostre conoscenze per la vostra estetica

VITA è uno dei pionieri del settore dentale. L'insieme dei nostri progressi e delle nostre esperienze è alla base di performance tecnico-merceologiche ottimali e del successo clinico - in tutto il mondo e senza compromessi.

VITA Zahnfabrik ha consolidato sul mercato un sistema di rivestimento metallo-ceramica da oltre oltre mezzo secolo – ai tempi è stata la prima in assoluto in tutta Europa. Abbiamo ulteriormente sviluppato questa offerta fino alla perfezione. Ne risulta una sicurezza di processo che non ha eguali.

VITA VMK Master ha una gamma di indicazioni, che soddisfa tutti i requisiti di una ceramica – individualizzabile, ad elevata brillantezza cromatica e naturalmente sempre senza compromessi.



Fluorescenza naturale

Vantaggi in un colpo d'occhio

- Risultati brillanti grazie a colori cromaticamente convincenti e alla fluorescenza naturale
- Ampia gamma di utilizzi, da obiettivi semplici fino a casi clinici complessi con caratteristiche individuali
- Elevata sicurezza di processo grazie all'esperienza pluriennale



Performance eccellenti



Figura 1a*

Le vecchie corone non sono adeguate alla dentatura residua per colore, grado di opacità, forma, tessitura superficiale e risultano innaturali.



Figura 1b*

Con un gioco di luci simile allo smalto le nuove corone risultano molto più naturali.



Figura 2a*

La riproduzione di denti fortemente abrasivi richiede una ricostruzione di tutte le particolarità tipiche del bruxismo.



Figura 2b*

La corona su 11 si orienta sul modello naturale (dente 21): margini incisali taglienti, crepe, fessure, faccette di molaggio ed elementi cromatici tipici dell'età.

Performance eccellenti



Figura 3a*

Rispetto ai denti contigui 21 e 12, la corona su 22 appare come un corpo estraneo.



Figura 3b*

La nuova corona 22, con il suo croma intenso e gli effetti smalto, si inserisce armoniosamente tra i denti contigui.



Figura 4a*

Colore, forma e superficie evidenziano che il dente 22 è una riabilitazione.



Figura 4b*

L'illusione di profondità ed il vivace gioco di luci conferiscono alla nuova corona 22 un aspetto naturale analogo al dente contiguo 21.

Performance eccellenti



Figura 5a*

La marcata opacità specifica dell'età dei denti contigui deve essere riprodotta nella ricostruzione.



Figura 5b*

Grazie alla perfetta imitazione dell'opacità e della fluorescenza tipiche di un dente giovanile, la corona 12 si integra nell'arcata dentaria senza dare nell'occhio.



Figura 6a*

Oltre agli effetti di profondità e alla marcata opalescenza giovanile, il colore base chiaro del dente contiguo 21 costituisce la particolare sfida di questo caso.



Figura 6b*

La nuova corona 22 convince con effetti di profondità naturali, un gioco di luci vivace ed un'opalescenza tipica dell'età.

Performance eccellenti



Figura 7a*

Le caratteristiche del dente 21, come colore, superficie e grado di lucentezza, non corrispondono al dente contiguo 11.



Figura 7b*

La corona 21 in metallo-ceramica non è riconoscibile come tale, perchè rispecchia tutte le particolarità del dente contiguo naturale.



Figura 8a*

Modello per il dente 21 fratturato è il dente 11 con i suoi particolari distintivi: colore base chiaro, margine incisale integro e molto traslucido, effetti perlacci dello smalto.



Figura 8b*

Sia per il colore che per gli effetti dello smalto, la corona 21 riproduce in modo convincente il dente contiguo in tutte le sue particolarità – compresi gli effetti perlacci.

Precisa – soddisfa ogni esigenza



Precisa


Sempre uno strato avanti!

I nostri ricercatori lavorano quotidianamente su materiali che assicurino risultati ottimali con un dispendio minimo. Vi sono ragioni valide se ad es. il nostro opaco copre il materiale strutturale già dopo una sola cottura – che sia in polvere, pasta o applicato con la tecnica Spray-On.

Quanto più intuitivo l'impiego, tanto più è possibile concentrarsi sui dettagli essenziali. Per questo motivo puntiamo sulla classica stratificazione standard. Perché fin dal primo momento offre tutti i vantaggi di una lavorazione precisa, rapida ed efficace.

Vantaggi in un colpo d'occhio

- Stratificazione classica per un impiego intuitivo
- Caratteristiche merceologiche di prima classe – quindi ad es. retrazione ridotta, decisivo risparmio di tempo e stabilità cromatica duratura
- Elevata economicità e risultati esteticamente convincenti

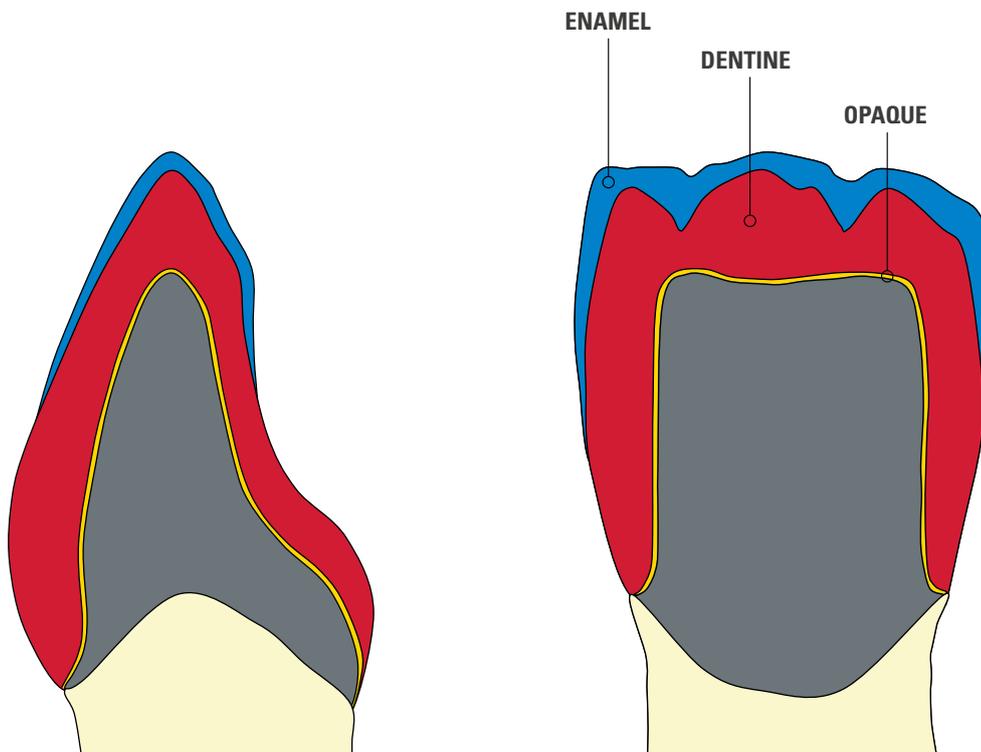

Classico schema di stratificazione

Precisa

Per un plus di umidità: VITA MODELLING FLUID RS

Per la stratificazione ceramisti esperti preferiscono VITA MODELLING FLUID RS (red solution) non solo per l'eccellente stabilità e la ridotta retrazione.

Grazie alla consistenza cremosa della ceramica si ha sempre sufficiente umidità sul lavoro. Mantiene a lungo i requisiti di umidità delle masse durante la stratificazione e permette ai colori di compenetrarsi. Si ottengono effetti di luce diffusi, che risultano pienamente evidenti solo dopo la finitura.

Vantaggi in un colpo d'occhio

- Stabilità eccellente
- Retrazione ridotta
- Tempo di lavorazione più lungo



Precisa

Per un plus di sicurezza: VITA NP BOND

E' un fatto: VITA VMK Master offre la massima tolleranza di lavorazione con praticamente tutte le leghe non nobili e viene usata con successo in tutto il mondo. Se a causa di un metallo, in fase di raffreddamento si dovessero tuttavia verificare irregolarità relative al CET, VITA NP BOND Paste consente anche in questo caso la sicurezza auspicata.

L'innovativo bonder agisce da ammortizzatore, compensa le tensioni dovute alle differenze di CET e assicura un legame stabile tra struttura e ceramica - sempre. Che si tratti di strutture in leghe non nobili per fusione, CAD/CAM o a sinterizzazione laser.

Vantaggi in un colpo d'occhio

- Sicurezza praticamente illimitata – anche con singole leghe specifiche
- Lavorazione semplice, legame adesivo affidabile e pasta pronta per l'uso
- Tonalità dorata per risultati estetici

Abbiamo testato le seguenti leghe:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



VITA NP BOND Paste pronto per l'uso



Base cromatica calda per metalli


Variabile – quindi così versatile



Variabile

VITA VMK MASTER® - assortimenti

VITA VMK è disponibile in una molteplicità di assortimenti, che offrono una soluzione completa praticamente per qualsiasi indicazione. Quanto migliore è il sistema, tanto più ampie sono le possibilità di impiego.

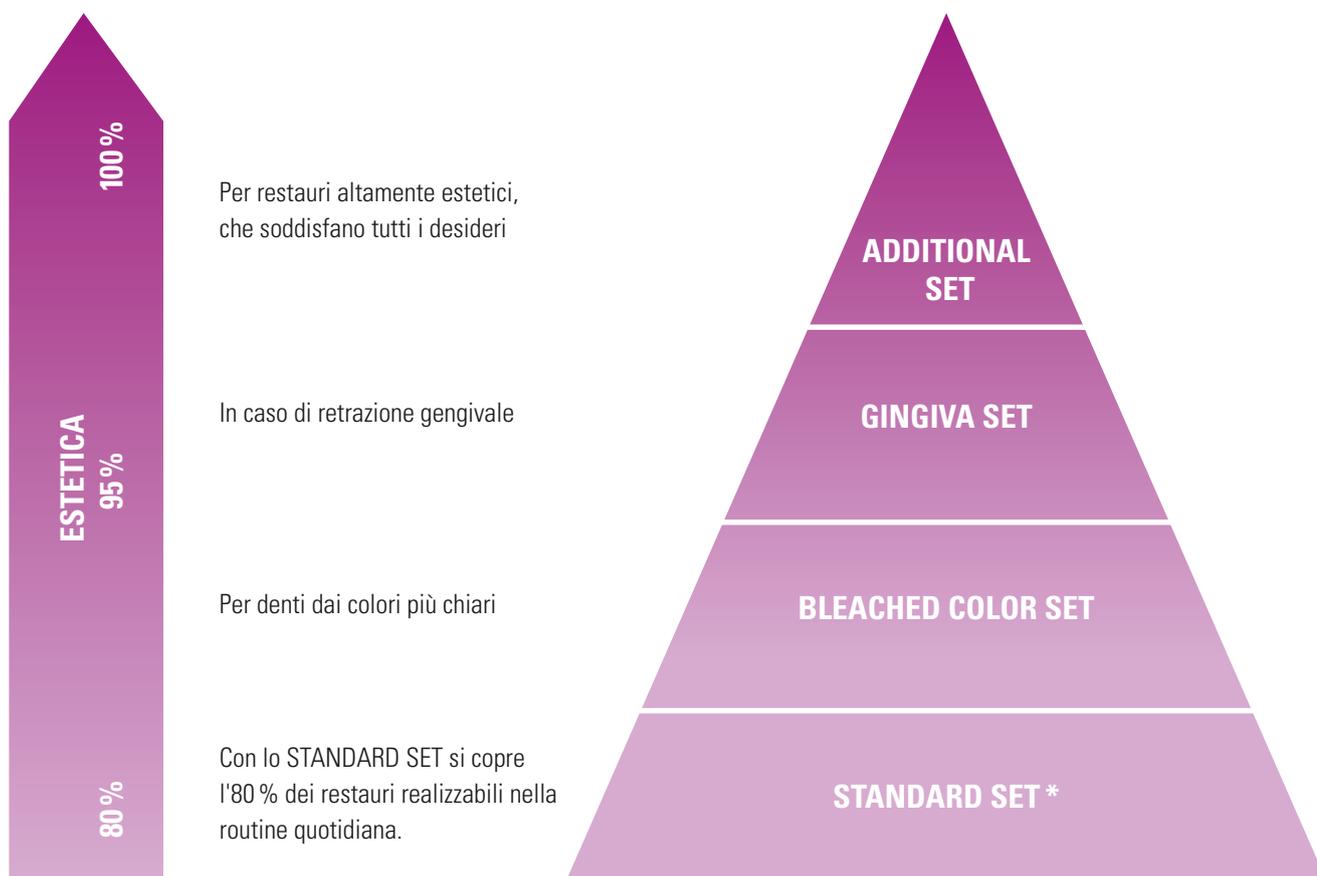

* Lo STANDARD SET è disponibile nelle seguenti versioni:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1–D4
- STANDARD SET PASTE VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

Variabile

VITA VMK Master® MARGIN



Grazie al procedimento di produzione brevettato delle masse spalla VITA, l'utilizzo della ceramica di rivestimento è analogo alle resine per corone e ponti.



VITA VMK Master® LUMINARY



Masse altamente fluorescenti, per controllare la fluorescenza dalla profondità del restauro.



Variabile

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Per effetti cromatici in profondità



VITA VMK Master® CERVICAL



Per incrementare gli effetti di profondità



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 tonalità traslucenti per riprodurre le più diverse trasparenze dello smalto naturale



Variabile

VITA VMK Master® NECK




Con le masse NECK è possibile sostenere la riproduzione cromatica ottimale nella zona cervicale.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Riflessi perlacei / per creare effetti opalescenti su denti giovanili e traslucenti

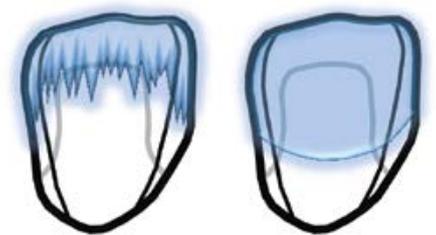

Variabile

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



Per il ripristino cromaticamente esatto di gengiva mancante



VITA VMK Master® WINDOW




Massa WINDOW trasparente



La ceramica di rivestimento VITA VMK MASTER è disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

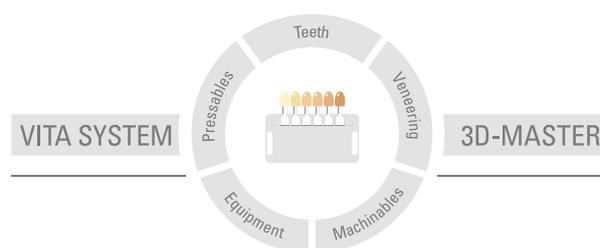

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 01.19

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati **CE** 0124:

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik