

Instructions pour l'installation des mises à jour de logiciels sur les appareils

- 1.VITA VACUMAT 6000 M**
- 2.VITA VACUMAT 6000 MP**
- 3.VITA ZYRCOMAT 6000 MS**
- 4.VITA vPad comfort**
- 5.VITA vPad excellence**

Cher(e) Client(e),

Nous aimerions vous informer de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre appareil VITA. Vous trouverez ci-après les instructions pour procéder à cette mise à jour.

Pour toute question, nous vous prions de contacter votre fournisseur régional des équipements VITA. Vous pouvez également joindre le SAV VITA de la manière suivante :

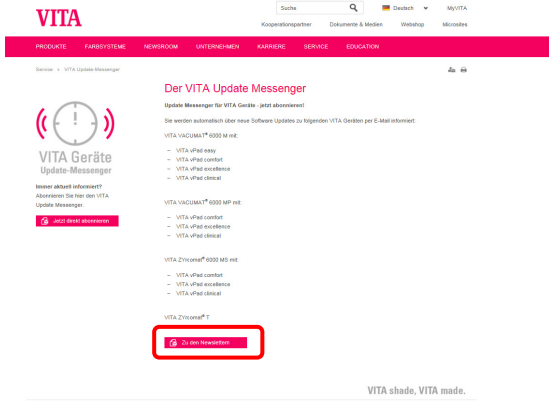
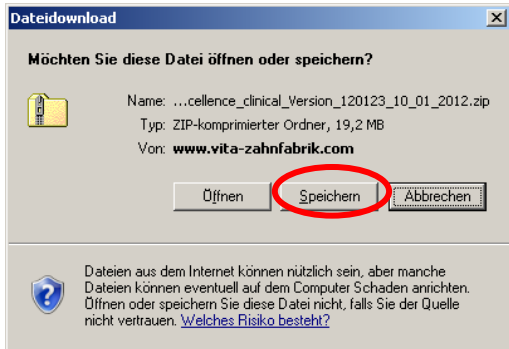
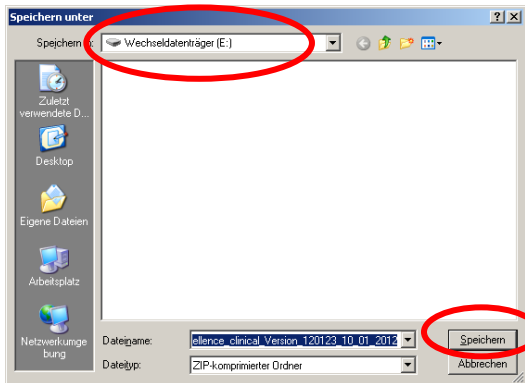
- Tel. +49 (0)77 61 / 562 – 101, -105 ou -106
- Fax: +49 (0)77 61 / 562 – 102
- Email: instruments-service@vita-zahnfabrik.com

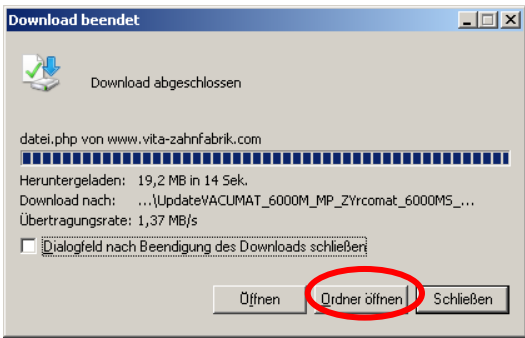
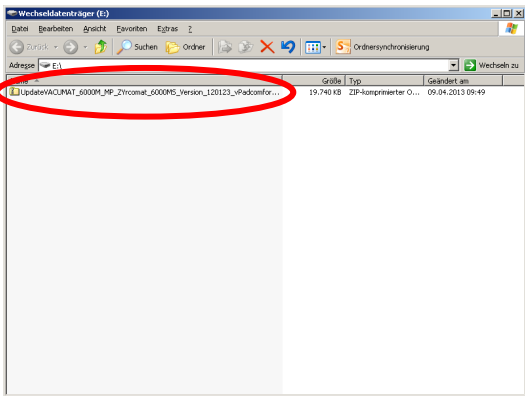
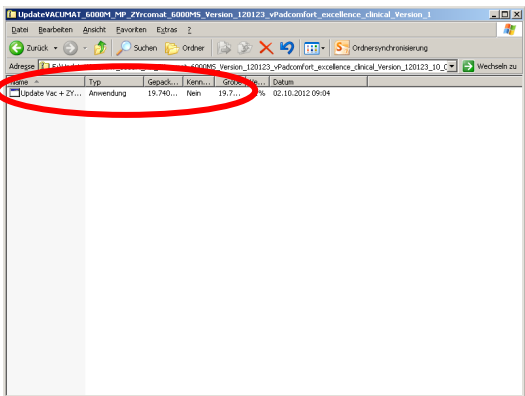
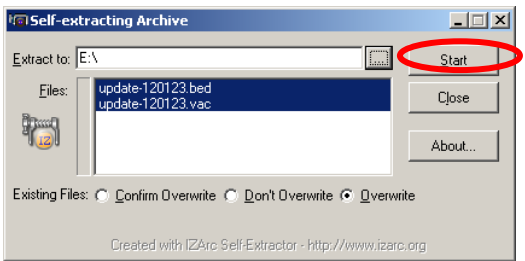
1. Procédure

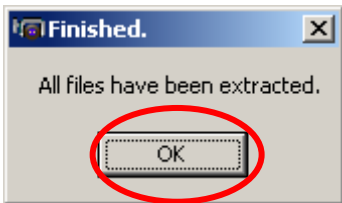

1. Télécharger la mise à jour sur Internet et l'enregistrer sur une clé USB
2. Créer une copie de sauvegarde de vos propres profils utilisateurs, matériaux et programmes
3. Installer la mise à jour pour VITA VACUMAT 6000 M, VACUMAT 6000 MP et VITA ZYRCOMAT 6000 MS
4. Vérifier et saisir les données et réglages de l'appareil
5. Installer à nouveau vos profils utilisateurs (précédemment sauvegardés), les matériaux et programmes
6. Enregistrement dans VITA Update-Messenger

2. Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation



- a) Accès Internet
- b) Clé USB vide

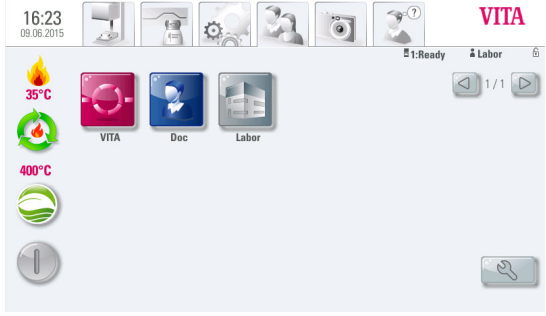

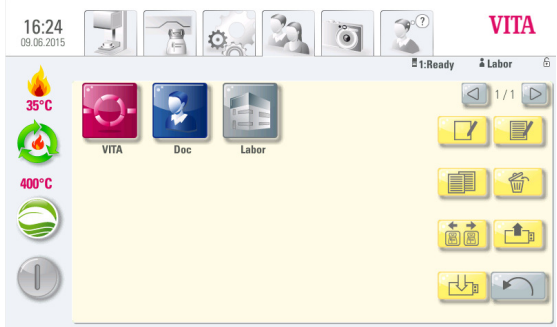
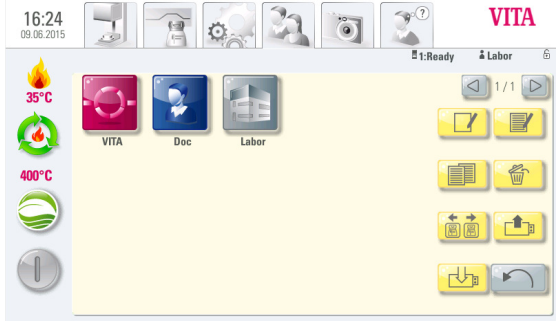

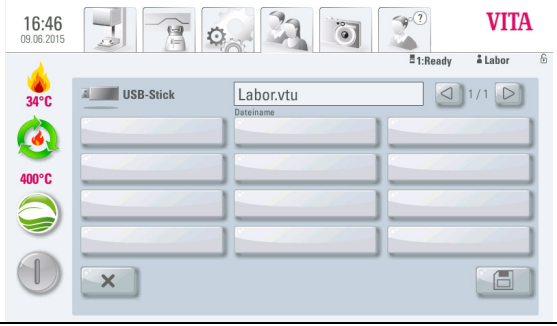

3	Choisir "vers les Newsletters »	
Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction
4	Choisir la Newsletter actuelle	
5	Choisir la mise à jour souhaitée	
6	Choisir « Enregistrer »	
7	Choisir le lecteur de la clé USB (support de données amovible) puis « Enregistrer »	


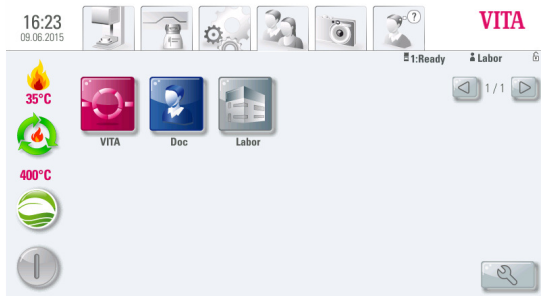
8	Choisir « ouvrir répertoire »	
9	Double clic sur Fichier	
10	Double clic sur Fichier	
11	Confirmer par la touche « Start »	

12	Confirmer le message par « OK »	
13	La clé USB contient à présent les fichiers suivants	
14	Retirer la clé USB de l'ordinateur	

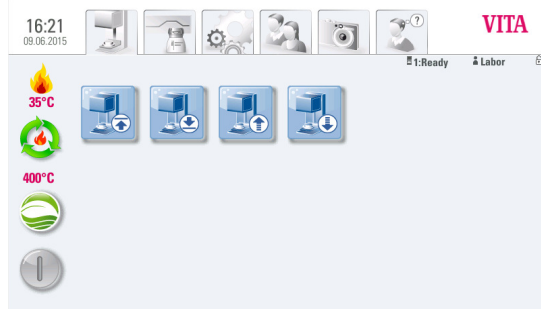


2. Créez une copie de sauvegarde de vos propres profils utilisateurs, programmes

Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
1	Allumer l'appareil avec l'interrupteur principal.	Le lift descend
2	Brancher la clé USB vide sur le côté du VITA vPad	L'écran affiche : 
3	Activer 	L'écran affiche :

		
4	Activer 	L'écran affiche : 
5	Choisir l'utilisateur qui doit être exporté	L'utilisateur est indiqué L'écran affiche : 
6	Activer la touche 	L'écran affiche : 
7	Activer la touche 	L'utilisateur est enregistré sur la clé USB

8	Activer la touche 	<p>L'écran affiche :</p> 
---	---	---

3. Installer la mise à jour pour VITA VACUMAT 6000 M, VACUMAT 6000 MP et VITA ZYRCOMAT 6000 MS

Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
<p align="center"><u>OBSERVATION IMPORTANTE :</u> Le lift doit être en position basse + aucun programme actif (stand-by compris)</p>		
1	Brancher la clé USB contenant la mise à jour sur le côté du VITA vPad	<p>L'écran affiche :</p> 
2	Choisir l'onglet 	<p>L'écran affiche :</p> 

3	Activer 	L'écran affiche le processus de mise à jour La mise à jour terminée, l'écran affiche « Mise à jour terminée »
4	Confirmer le message par la touche 	L'écran affiche : 

OBSERVATION IMPORTANTE :
Pendant toute l'installation, la clé USB doit rester en place
et aucune touche ne doit être activée !

L'installation est terminée lorsque l'écran de départ est à nouveau affiché



ATTENTION:

La température réelle dans l'enceinte de chauffe ainsi que la température stand-by programmée doivent être affichées!

Si pour ces deux paramètres „0 °C“ s'affiche, cela signifie que l'installation de la mise à jour n'est pas terminée!

Pour information :

Si en activant la touche



s'affiche le message « **Aucune nouvelle mise à jour trouvée** »

confirmer ce message par la touche



et activer de nouveau la touche



Mise à jour pour plusieurs fours en circuit





Pour effectuer une mise à jour de logiciel sur plusieurs fours, il faut procéder four par four. Il faut donc retirer la VITA Switchbox et connecter la VITA vPad aux appareils les uns après les autres et effectuer la mise à jour selon ces instructions.

Afin d'afficher les appareils sur VITAvPad dans l'ordre que l'on souhaite, il faut après la mise à jour allumer les appareils dans l'ordre correspondant.


Autre solution : après la mise à jour effectuer un classement via les réglages Multifours dans le VITA vPad


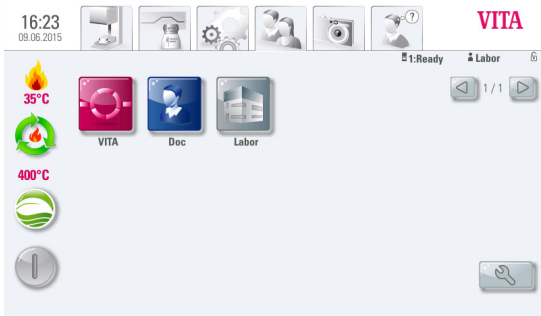

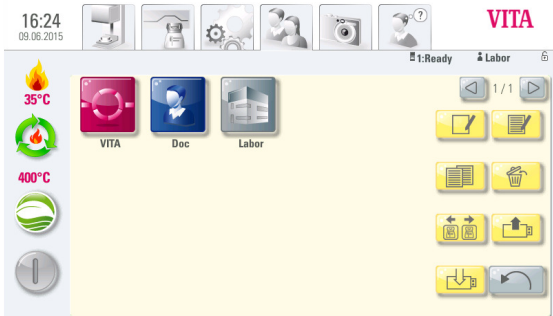



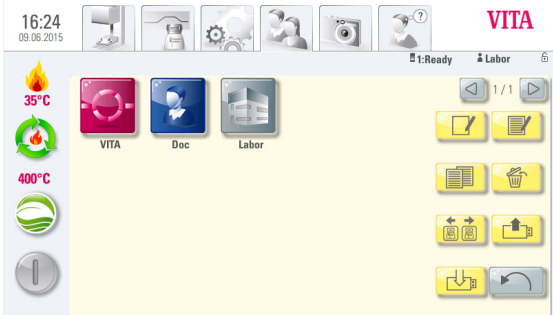
Veuillez noter qu'après l'installation du nouveau logiciel il faut vérifier et entrer les données et les réglages des appareils à la rubrique Service dans chacun des appareils ! Voir à ce sujet le point suivant de ces instructions.

4. Vérifier et entrer les données et réglages de l'appareil

Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
1	Activer 	<p>L'écran affiche :</p> 
2	Activer 	<p>L'écran affiche :</p> 
3	<p>Avec le n° de révision, vérifiez l'installation correcte du nouveau logiciel</p> <p>Si la version actuelle ne s'affiche pas, il faut à nouveau effectuer la mise à jour !</p>	

4	<p>Confirmer ensuite par la touche</p> 	<p>L'écran affiche :</p> 
---	--	---

5. Installer à nouveau vos profils utilisateurs, matériaux et programmes		
Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
1	<p>Brancher la clé USB contenant les utilisateurs et les programmes précédemment sauvegardés dans le VITA vPad</p>	<p>L'écran affiche :</p> 

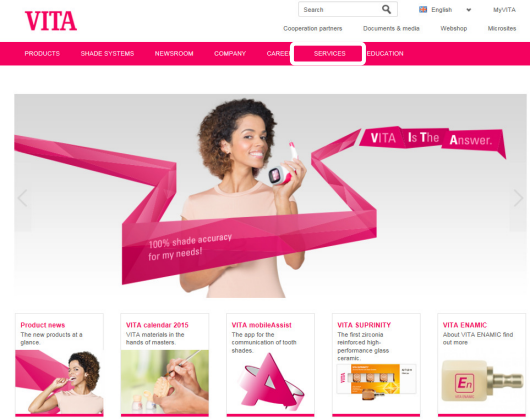
2	Activer 	L'écran affiche : 
3	Activer 	L'écran affiche (sans votre utilisateur) : 
4	Choisir Utilisateur à importer	L'utilisateur est indiqué
5	Activer la touche 	L'écran affiche : 
6	Activer la touche 	L'écran affiche (avec votre utilisateur) : 

7	Activer 	L'écran affiche (avec votre utilisateur) : 
---	---	--

Pour information :

Pour importer les matériaux et programmes, veuillez procéder de la même façon. Activez pour cela l'onglet correspondant dans le menu.

6. Enregistrement dans VITA Update-Messenger		
Etape	A saisir par l'utilisateur	Fonction
1	www.vita-zahnfabrik.com à entrer dans votre navigateur Web	

<p>2</p>	<p>Choisir « Service » + « VITA Update-Messenger »</p>	
<p>3</p>	<p>Choisir « S'abonner dès maintenant » puis suivre les étapes de l'enregistrement.</p>	