

VITAVM[®].CC

Termékismertető



VITA Szinmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

2017.04.

VITA – perfect match.

VITA

Töltőanyagmentes hidegpolymerizátum
ideiglenes ellátások és javítási munkák
extraorális előállításához.

Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és
VITA classical A–D színekben.


VITAVM[®].CC Összhangban minden indikációval




VITAVM CC egy töltőanyagmentes hidegpolymerizátum. Ideális anyag ideiglenes fogpótlások és javítások extraorális előállításához.

Indikációk

- ideiglenes koronák és hidak készítése
- VITA műanyagfogak rögzítése, pl. mintára öntött fémlemezre
- javítások
- kombinált munkáknál csúsztatók fedése

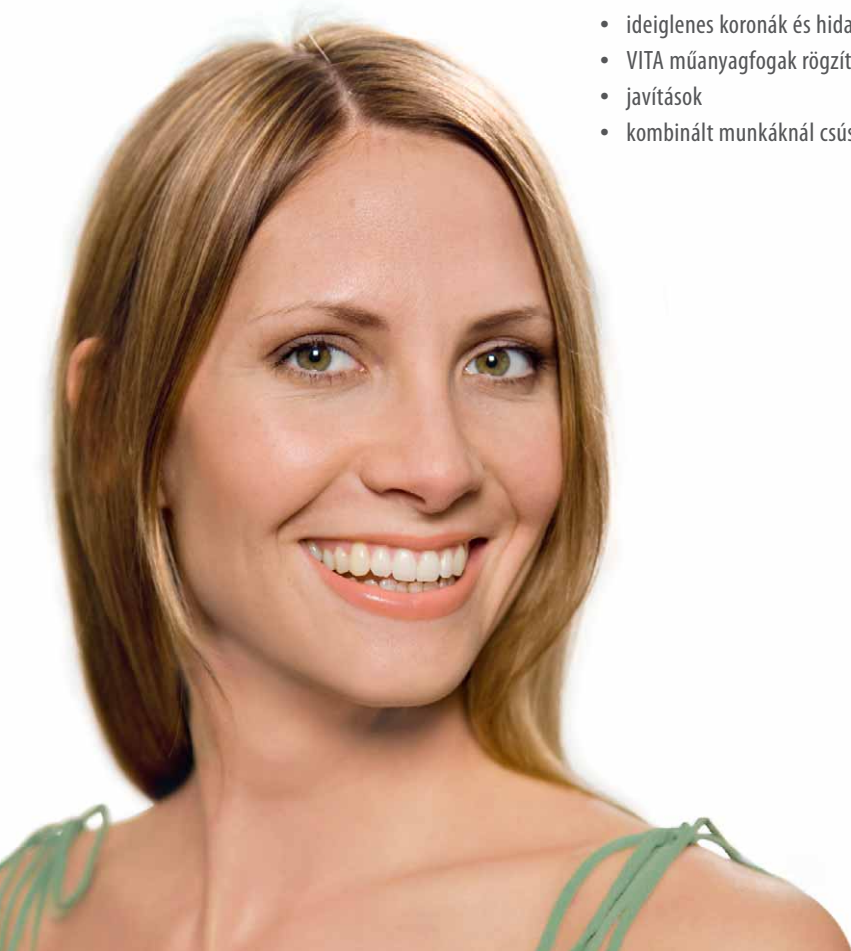

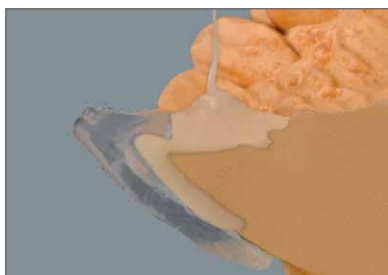

1. ábra: A keresztmetszet valamennyi terület buborékmentes, egyenletes folyását mutatja.

Az első osztályú polimer alapanyagok választékának és a gondos előkészítésnek köszönhetően VITAVM CC kiváló anyagtulajdonságokkal rendelkezik.

Könnyű feldolgozhatóság

A kitűnő feldolgozási tulajdonságokat a felhasználók igényeihez szabták: remek keverési tulajdonsága és első osztályú folyásképesége gyors és ésszerű munkavégzést tesznek lehetővé.


Sima felületek

Könnyű polírozhatósága és a homogén anyagszerkezet megnehezíti a plakkfelhalmozódást. Az anyag lehetővé teszi hosszú életű, esztétikus provizórium készítését, amely a páciensnek magas viselési komfortot biztosít.

A hidegpolimerizátum előnyei

- Első osztályú folyásképeség
- Kiváló keverési tulajdonság
- Könnyű polírozhatóság
- Színstabilabb, mint az összehasonlítható rendszerek
- Kitűnő anyagstabilitás, ezáltal csökkentett törésveszély a hajlítási szilárdság és a rugalmassági modul ideális összehangolásának köszönhetően
- Plakkfelhalmozódás erős korlátozása
- Buborékmentes kikeményedés, túlnyomásos edényben vagy anélkül is



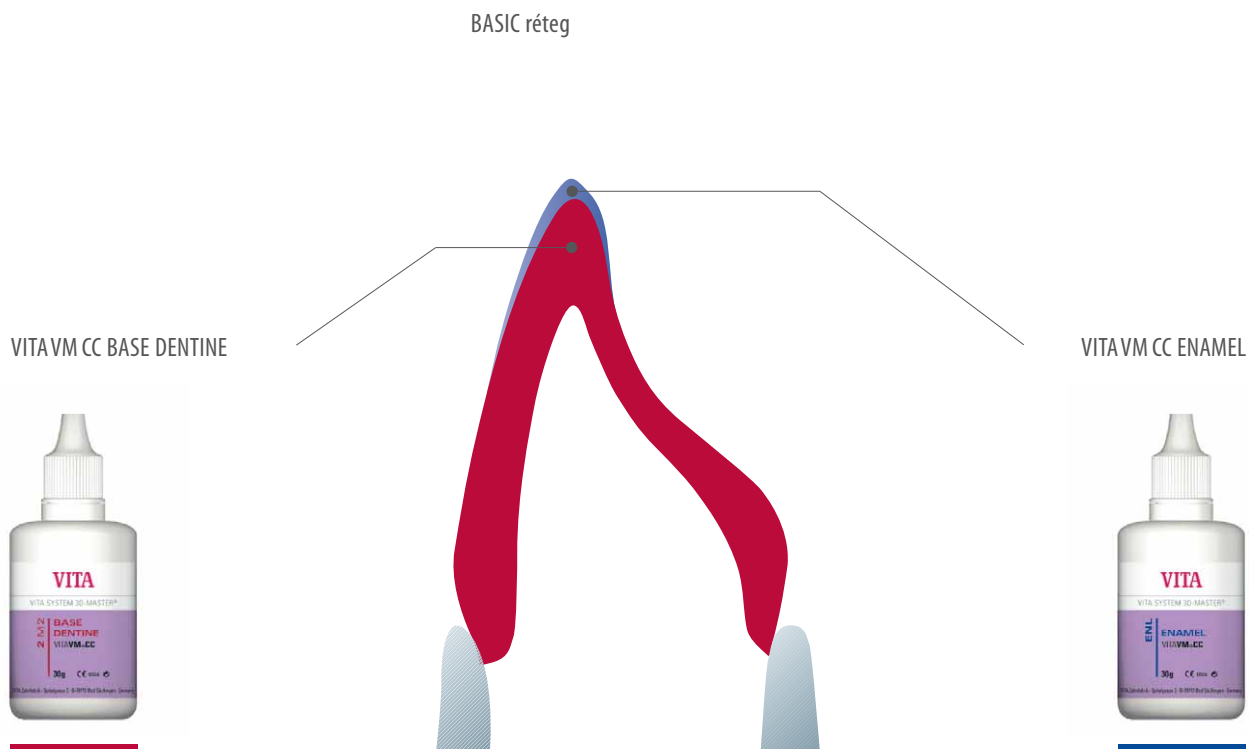

BASIC réteg

A színintenzív VITAVM CC BASIC réteg két masszából áll:

- BASE DENTINE
- ENAMEL

A felhasználó már két réteggel természetesnek ható ideiglenes ellátást hozhat létre.

Individualizálás

Az adalékmasszákkal a természetes effektek és karakterisztika könnyen és hitelesen megteremthetők.



A provizorium, mint a siker alapja

Egy páciens rögzített fogpótlással való ellátásának során a kezelési folyamat fontos alkotóeleme az ideiglenes fogpótlás. Alapvetően a preparált fogak védelme és az esztétika és funkció ideiglenes helyreállítása a feladata.

Helyesen használva azonban a provizorium még többet nyújt: segítségével a végleges fogpótlás optimális kialakítása célzottan készíthető elő. Különösen frontfogak pótlásakor már az ideiglenes pótlásnál elvégezhető az esztétikai, fonetikai és funkcionális korrekciók.



Mindezen túl a provizorium a fogpótlás elfogadását is megkönnyíti a páciens számára, mivel időben elkezdhet hozzászokni az új helyzethez. VITAVM CC mindezekben fontos szerepet játszik. Segítségével az elégedett páciensek már az ideiglenes ellátás idejére is természetesnek ható esztétikához jutnak.



1.ábra: Rehabilitáció előtti helyzet

2.ábra: Ideiglenes ellátás és frontkialakítás
VITAVM CC-vel

3.ábra: Frontfogak helyzete közvetlenül behelyezés után
(VITA In-Ceram ZY VITAVM 9-cel leplezve)



Egy ideiglenes ellátás kialakításakor mód van arra, hogy a formát és színt konfekció fogak segítségével, típusnak megfelelően válasszuk ki.

A megfelelő fogforma és fogszín meghatározásához különösen alkalmasak az élethű fogminta garnitúrák, pl. VITA PHYSIODENS.


Így a páciens képet alkothat a későbbi foghelyzetről és részt vehet a kiválasztásban.

VITAVM®CC Moduláris, hatékony szortiment kialakítás

	<p>VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR* Alap szortiment a BASIC réteghez</p>
	<p>VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR* Csökkentett alap szortiment a BASIC réteghez, csökkentett masszakínálattal</p>
	<p>VITAVM®CC CLASSICAL COLOR KIT Bővített szortiment azoknak a VITAVM CC 3D-MASTER felhasználóknak, akik már meglévő szortimentjüket VITA classical A1–D4 színekkel (B1 kivételével) szeretnék kiegészíteni.</p>
	<p>VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT** Természetes effektekhez és karakterisztikához</p>

* Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A–D színekben

**Alkalmazható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A–D színekhez

	<p>VITA Easychade[®] V</p> <p>Digitális színmeghatározás céljára használja a VITA Easychade[®] V készüléket, vizuális színmeghatározáshoz pedig pl. a Vita Linearguide 3D-MASTER[®] vagy a VITA klassisch A1-D4[®] színkulcsot.</p>
	<p>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER[®]</p> <p>VITA System 3D-MASTER-rel gyorsan és precízen meghatározható a korrekt fogszín. VITA Linearguide 3D-MASTER a jól bevált VITA Toothguide 3D-MASTER alternatívája, a különbség a színmintafogak lineáris elrendezésében található.</p>
	<p>VITA classical színskála A1–D4</p> <p>Az Eredeti – a fogszín meghatározásához VITA classical A1–D4 színekben. A VITA Bleached (fehérített) árnyalatokkal kiegészítve a fehérített fogak színe is biztosan határozható meg.</p>
	<p>VITA műanyagfogak VITA PHYSIODENS[®], VITAPAN[®], VITAPAN PLUS[®], VITA LINGOFORM[®]</p> <p>Mind a négy termékcsoport megfelelő megoldást kínál minden indikációhoz. Több évtizede bevált anyaguk bizonyítottan a legjobb kopási tulajdonságokkal rendelkezik. VITAVM CC és a VITA műanyagfogak optimálisan kombinálhatók egymással.</p>
	<p>VITACOLL[®] tapadásközvetítő</p> <p>A VITACOLL tapadásközvetítő megbízható kémiai kötést hoz létre a műanyagfogak és a meleg- és hidegpolymerizátumok, pl. VITA VM CC között és megakadályozza a fogak kitorését.</p>

Még több információt talál a www.vita-zahnfabrik.com weboldalon.

A VITAVM CC leplező műanyag VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A–D színekben kapható. Valamennyi VITA 3D-MASTER és VITA classical A–D anyaggal biztosított a színt kompatibilitás.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és tökéletesen reprodukálható.



Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelőségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket. Továbbá felelőségünk az adatok helyességéért a jogi alaptól függetlenül és - amennyiben törvényesen megengedett - minden esetben csak a szállított áru számla szerinti, forgalmi adó nélküli értékére korlátozódik. Amennyiben a törvény megengedi, különösen nem vállalunk felelősséget elmaradt haszon, közvetett károk, következménykárok, vagy vevővel szemben fellépő harmadik személyek követeléseinek tekintetében. Mulasztás miatti kártérítési igény (hibás szerződés-kötés, szerződésszegés, nem megengedett cselekmény, stb.) csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében indokolt. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2017.04.

VITA Zahnfabrik az orvosi termékekre vonatkozó irányelvek szerint került certifikálásra és az alábbi termék viseli a CE 0124 jelzést:

VITAVM[®]CC · VITA PHYSIODENS[®] · VITAPAN[®] · VITAPAN PLUS[®]
VITA LINGOFORM[®] · VITACOLL[®]

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com