


# SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA

## Cartes de formes

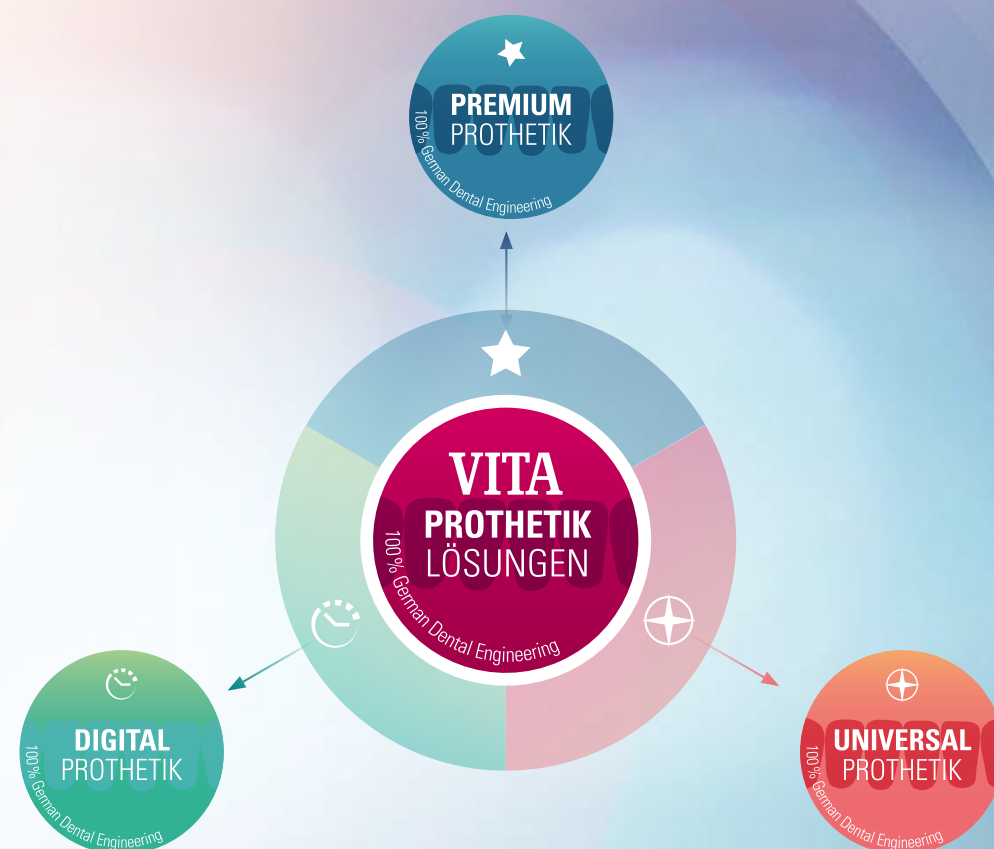

Pour les meilleures prothèses dentaires : naturelles, fiables, diversifiées.

**C'est aussi simple que cela – la forme de dents adaptée en trois étapes !**

**1.**

### **Choisissez la catégorie / gamme de dents**

Sélectionnez une catégorie / gamme de dents en fonction des exigences posées par le cas ou indication.

**2.**

### **Choisissez le groupe de formes**

Choisissez le groupe de formes correspondant à la forme de visage / mâchoire du patient.

**3.**

### **Déterminez la forme de dent adaptée**

Déterminez la forme de dent adaptée sur la base du tracé des pointes canines et de la ligne du sourire.



**1.**

## **Choisissez la catégorie / gamme de dents adaptée**

**Un jeu de couleurs et de formes vivant pour des résultats naturels.**





**Diversité convaincante de couleurs et de formes pour tous les cas.**



**Prothèses CFAO efficaces pour une plus grande productivité.**



## > Combinaisons antérieures / postérieures recommandées

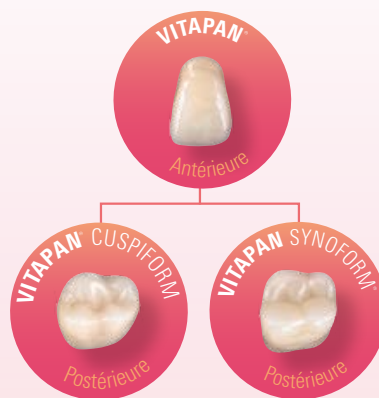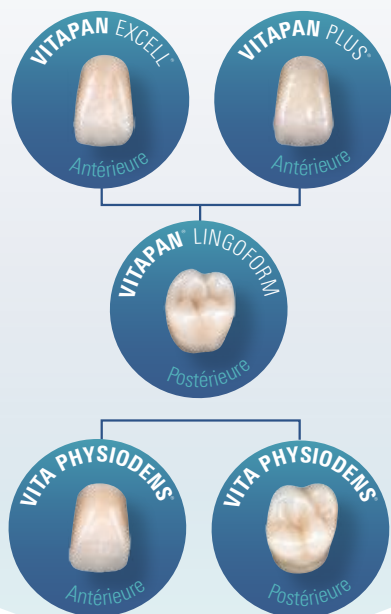

## > Indication(s) conseillée(s)\*

|                          | ★                 |              |                 | ⊕                 |                  | 😊                |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Antérieure               | VITAPAN EXCELL    | VITAPAN PLUS | VITA PHYSIODENS | VITAPAN           |                  | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| Postérieure              | VITAPAN LINGOFORM |              | VITA PHYSIODENS | VITAPAN CUSPIFORM | VITAPAN SYNOFORM | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
| Prothèse totale          | ●                 | ●            |                 | ●                 |                  | ●                | ●                 |
| Prothèse partielle       | ●                 | ●            | ●               | ●                 |                  |                  | ●                 |
| Prothèse combinée        |                   |              | ●               |                   |                  |                  |                   |
| Prothèse implanto-portée | ●                 | ●            |                 |                   |                  |                  |                   |
| Prothèse gérontologique  |                   |              |                 |                   | ●                |                  |                   |

\* Il s'agit ici d'indications conseillées pour les différentes solutions prothétiques / dents artificielles, toutefois l'ensemble des prothèses totales, partielles, combinées et implanto-portées est généralement possible !

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN


VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO


VITA VIONIC  
FRAME

## 2. Choisissez le groupe de formes adapté

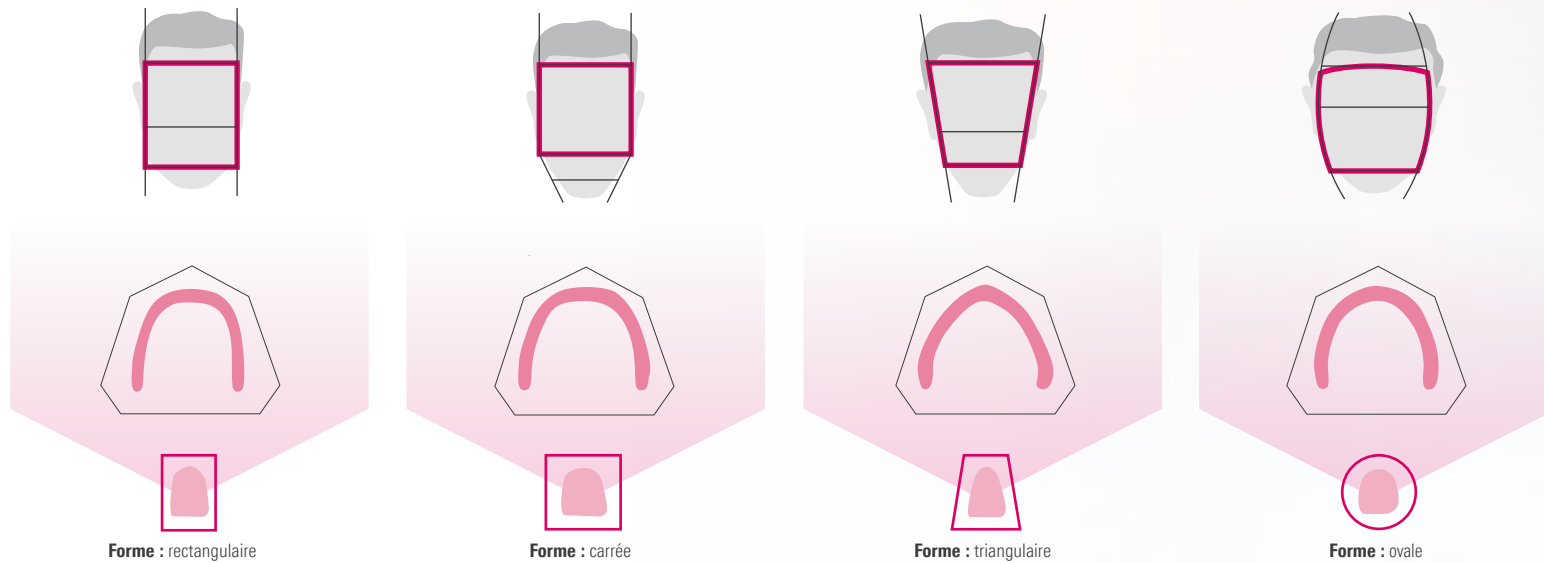


## 3. Déterminez la forme de dent adaptée

La largeur et la longueur nécessaires des dents antérieures sont déterminées par le tracé des pointes canines et de la ligne du sourire.

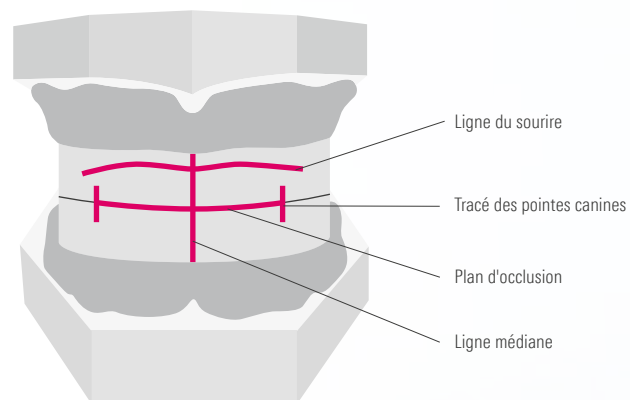

### Ligne du sourire

Elle est capitale pour la longueur des dents antérieures maxillaires, le collet des dents doit se trouver au-dessus de cette ligne.

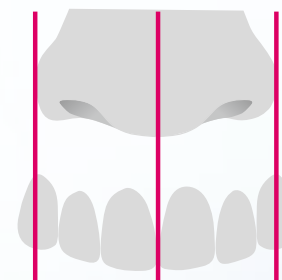

### Tracé des pointes canines

Ce tracé est déterminant pour la largeur du bloc antérieure maxillaire. Les pointes canines maxillaires doivent se trouver à cet endroit.




## Les points de mesure : voici comment les dimensions des dents sont déterminées.\*

### > Antérieure

Maxillaire et mandibulaire

**Largeur totale**

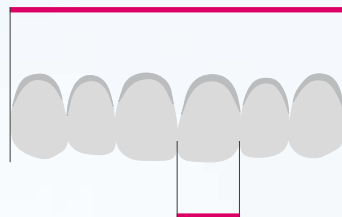

**Largeur de la dent**

Maxillaire : FDI 21 (US 9)  
Mandibule : FDI 31 (US 24)

Collet non mesuré



**Hauteur de la dent**

Dent artificielle conventionnelle




**Hauteur de la dent**

VITA VIONIC VIGO

### > Postérieure

Maxillaire et mandibulaire

**Largeur de la moitié maxillaire**

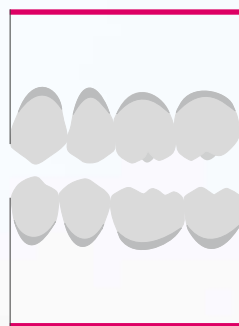

**Largeur de la moitié mandibulaire**



Maxillaire : FDI 26 (US 14)

Mandibule : FDI 36 (US 19)

\* Toutes les données en mm

Toutes les gammes de dents VITA introduites à partir de 2007 ont été mesurées numériquement

Écart maximal des mesures des dents en résine +/- 5 % selon DIN ISO 22112:2017



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

## Antérieure maxillaire



Ovale

|                                       |                                       |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>041</b><br><br>41,3<br>7,4<br>10,1 | <b>043</b><br><br>43,1<br>7,9<br>9,7  | <b>045</b><br><br>45,1<br>8,4<br>9,7  | <b>047</b><br><br>47,3<br>8,6<br>10,3 |
| <b>048</b><br><br>48,1<br>9,1<br>11,1 | <b>049</b><br><br>49,1<br>9,0<br>11,2 | <b>051</b><br><br>51,4<br>9,3<br>12,3 |                                       |
| <b>T42</b><br><br>42,0<br>7,7<br>9,5  | <b>T44</b><br><br>44,1<br>8,1<br>9,7  | <b>T46</b><br><br>46,2<br>8,2<br>11,1 | <b>T47</b><br><br>46,9<br>8,5<br>11,2 |
| <b>T48</b><br><br>48,1<br>8,7<br>10,5 | <b>T50</b><br><br>50,0<br>9,2<br>11,6 | <b>T51</b><br><br>51,4<br>9,4<br>11,8 | <b>T54</b><br><br>54,4<br>9,8<br>12,7 |
| <b>R45</b><br><br>45,4<br>8,2<br>9,9  | <b>R47</b><br><br>47,0<br>8,6<br>11,2 | <b>R49</b><br><br>49,1<br>8,9<br>11,6 |                                       |



Triangulaire



Rectangulaire



Carrée

S46

46,3



8,5



10,3

S48

47,9



8,7



9,1

S52

52,1



9,6



10,7

## Antérieure mandibulaire

L33

33,2



5,0



9,0

L35

35,3



5,2



9,9

L37

37,3



5,5



9,4

L37LC

37,4



5,6



11,4

L39

39,0



6,0



9,8

L41

41,2



6,1



10,8

► Remarque : pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM





VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

VITAPAN EXCELL®

Disponibles en 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

|                                     |  |             |             |             |             |                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Antérieure     | Max. / N°<br><br>mm | 041<br>41,3 | 043<br>43,1 | 045<br>45,1 | 047<br>47,3 | 048<br>48,1            | 049<br>49,1 | 051<br>51,4 | T42<br>42,0 | T44<br>44,1 | T46<br>46,2 | T47<br>46,9 | T48<br>48,1 | T50<br>50,0 | T51<br>51,4 | T54<br>54,4 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | L33<br>33,2 | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L37/L37LC<br>37,3/37,4 | L39<br>39,0 | L41<br>41,2 | L33<br>33,2 | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L37<br>37,3 | L39<br>39,0 | L39<br>39,0 | L41<br>41,2 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 21L<br>30,1 | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6            | 23L<br>34,2 | 24L<br>35,8 | 21L<br>30,1 | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 24L<br>35,8 | 23L<br>34,2 | 24L<br>35,8 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 21L<br>30,7 | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1            | 23L<br>34,8 | 24L<br>36,4 | 21L<br>30,7 | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 24L<br>36,4 | 23L<br>34,8 | 24L<br>36,4 |

|                                     |   |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Antérieure     | Max. / N°<br><br>mm  | R45<br>45,4 | R47<br>47,0 | R49<br>49,1 | S46<br>46,3 | S48<br>47,9 | S52<br>52,1 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm  | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L39<br>39,0 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L41<br>41,2 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm  | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 23L<br>34,2 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 23L<br>34,2 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 23L<br>34,8 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 23L<br>34,8 |

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.

► Remarque : pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME



## Antérieure maxillaire



|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>041</b><br>                              | <b>043</b><br> | <b>045</b><br> | <b>047</b><br> |
| <b>047L</b> (047 avec collet plus long)<br> | <b>049</b><br> | <b>051</b><br> |                |
| <b>T42</b><br>                              | <b>T44</b><br> | <b>T46</b><br> | <b>T47</b><br> |
| <b>T48</b><br>                              | <b>T50</b><br> | <b>T54</b><br> |                |
| <b>R45</b><br>                              | <b>R47</b><br> | <b>R49</b><br> |                |



Triangulaire




Rectangulaire



Carrée

S46

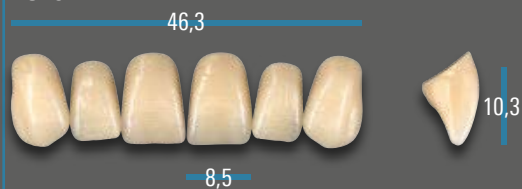


## Antérieure mandibulaire

L33




L39

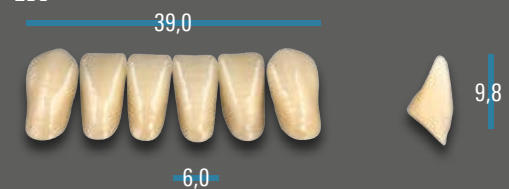

L35



L41

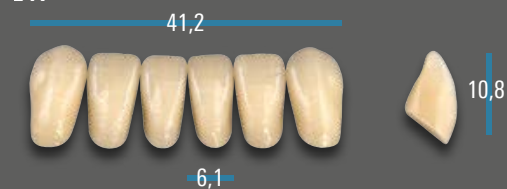





L37



L37L\* (L37 avec collet plus long)



| VITAPAN PLUS<br>Antérieure       | Max. / N°<br> mm | 041<br>41,3 | 043<br>43,1 | 045<br>45,1 | 047<br>47,3 | 047L*<br>47,3 | 049<br>49,1 | 051<br>51,4 | T42<br>42,0 | T44<br>44,1 | T46<br>46,2 | T47<br>46,9 | T48<br>48,1 | T50<br>50,0 | T54<br>54,4  | R45<br>45,4 | R47<br>47,0 | R49<br>49,1 | S46<br>46,3 |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                  | Man. / N°<br> mm | L33<br>33,2 | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L37L*<br>37,3 | L39<br>39,0 | L41<br>41,2 | L33<br>33,2 | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L37<br>37,3 | L39<br>39,0 | L 41<br>41,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L39<br>39,0 | L35<br>35,3 |
| VITAPAN LINGOFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br> mm | 21L<br>30,1 | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6   | 23L<br>34,2 | 24L<br>35,8 | 21L<br>30,1 | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 24L<br>35,8 | 24L<br>35,8  | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 23L<br>34,2 | 22L<br>31,6 |
|                                  | Man. / N°<br> mm | 21L<br>30,7 | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1   | 23L<br>34,8 | 24L<br>36,4 | 21L<br>30,7 | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 24L<br>36,4 | 24L<br>36,4  | 22L<br>32,1 | 22L<br>31,6 | 23L<br>34,8 | 22L<br>32,1 |

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre. \* Longue (047 et L37 avec collet plus long).

VITAPAN  
EXCELLVITAPAN  
PLUSVITAPAN  
LINGOFORMVITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORMVITAPAN  
SYNOFORMVITA VIONIC  
VIGOVITA VIONIC  
FRAME

## Postérieure

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>21L*</b></p> <p>30,1 9,6</p> <p>30,7 10,0</p>  | <p><b>22L*</b></p> <p>31,6 10,0</p> <p>32,1 10,2</p> | <p><b>23L*</b></p> <p>34,2 10,9</p> <p>34,8 10,8</p> |
| <p><b>24L*</b></p> <p>35,8 11,0</p> <p>36,4 11,2</p> |  |  |

\*) Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la (les) forme(s) choisie(s).



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME



## Antérieure maxillaire



Ovale

|   |  |                                       |                                       |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>01S*</b><br><br>42,3<br>10,8<br>7,6  | <b>02L</b><br><br>45,7<br>11,5<br>8,4  | <b>03M</b><br><br>47,2<br>10,8<br>8,6 | <b>04L</b><br><br>49,2<br>12,7<br>9,0 |
| <b>05L</b><br><br>50,1<br>11,4<br>9,1   | <b>06L</b><br><br>51,3<br>13,1<br>9,7  |                                       |                                       |
| <b>T6S**</b><br><br>41,0<br>10,4<br>7,4 | <b>T2S*</b><br><br>44,9<br>10,1<br>8,3 | <b>T1S</b><br><br>45,3<br>10,2<br>8,7 | <b>T3M</b><br><br>45,6<br>11,7<br>8,4 |
| <b>T4M*</b><br><br>45,6<br>11,3<br>8,8  | <b>T5M</b><br><br>46,2<br>11,1<br>8,8  | <b>T6L</b><br><br>47,3<br>12,4<br>8,9 | <b>T7M</b><br><br>47,5<br>11,6<br>8,8 |
| <b>T8L*</b><br><br>49,0<br>11,6<br>9,2  | <b>T9L</b><br><br>49,6<br>13,1<br>9,4  |                                       |                                       |



Triangulaire





Rectangulaire

X1M\*

46,3



8,8



11,0

X2L

46,2



8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



Carrée

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

## Antérieure mandibulaire

L1S\*

33,0



4,9



8,8

L2M\*

34,5




5,2



10,4

L3M\*

36,3

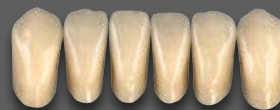

5,2



10,5

L4M\*

35,5



5,4



9,4

L5M\*

37,0



5,5



10,4

L6L

38,2



5,8



11,4

L7L

38,2



5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

\*) Couleur(s) éclaircies 0M1 et 0M3 disponible(s) exclusivement pour la ou les formes choisies.

\*\*) Forme(s) uniquement disponible(s) dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIDFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponibles en 28 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1–D4® (sans B1)

|                                   |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Antérieure  | Max. / N°<br><br>mm | 01S<br>42,3 | 02L<br>45,7 | 03M<br>47,2 | 04L<br>49,2 | 05L<br>50,1 | 06L<br>51,3 | T6S<br>41,0 | T2S<br>44,9 | T1S<br>45,3 | T3M<br>45,6 | T4M<br>45,6 | T5M<br>46,2 | T6L<br>47,3 | T7M<br>47,5 | T8L<br>49,0 | T9L<br>49,6 |
|                                   | Man. / N°<br><br>mm | L1S<br>33,0 | L2M<br>34,5 | L3M<br>36,3 | L6L<br>38,2 | L6L<br>38,2 | L8L<br>43,5 | L1S<br>33,0 | L2M<br>34,5 | L1S<br>33,0 | L3M<br>36,3 | L4M<br>35,5 | L3M<br>36,3 | L5M<br>37,0 | L7L<br>38,2 | L5M<br>37,0 | L6L<br>38,2 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 21E<br>30,5 | 22E<br>32,9 | 23E<br>33,5 | 24E<br>34,8 | 24E<br>34,8 | 25E<br>36,7 | 21E<br>30,5 | 21E<br>30,5 | 20E<br>29,4 | 22E<br>32,9 | 22E<br>32,9 | 23E<br>33,5 | 23E<br>33,5 | 23E<br>33,5 | 24E<br>34,8 | 25E<br>36,7 |
|                                   | Man. / N°<br><br>mm | 21E<br>32,7 | 22E<br>33,7 | 23E<br>34,6 | 24E<br>36,1 | 24E<br>36,1 | 25E<br>37,3 | 21E<br>32,7 | 21E<br>32,7 | 20E<br>31,0 | 22E<br>33,7 | 22E<br>33,7 | 23E<br>34,6 | 23E<br>34,6 | 23E<br>34,6 | 24E<br>36,1 | 25E<br>37,3 |







|                                   |   |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Antérieure  | Max. / N°<br><br>mm  | X1M<br>46,3 | X2L<br>46,2 | X3L<br>47,8 | Z1S<br>44,1 | Z2S<br>47,5 |
|                                   | Man. / N°<br><br>mm  | L3M<br>36,3 | L4M<br>35,5 | L5M<br>37,0 | L1S<br>33,0 | L5M<br>37,0 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm  | 23E<br>33,5 | 23E<br>33,5 | 24E<br>34,8 | 21E<br>30,5 | 22E<br>32,9 |
|                                   | Man. / N°<br><br>mm | 23E<br>34,6 | 23E<br>34,6 | 24E<br>36,1 | 21E<br>32,7 | 22E<br>33,7 |

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre.

# VITA PHYSIODENS®

Disponibles en 27 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) et 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)

## Postérieure
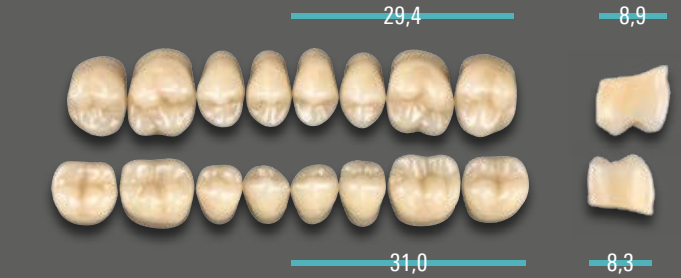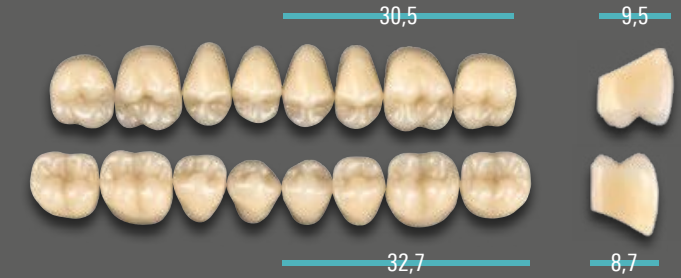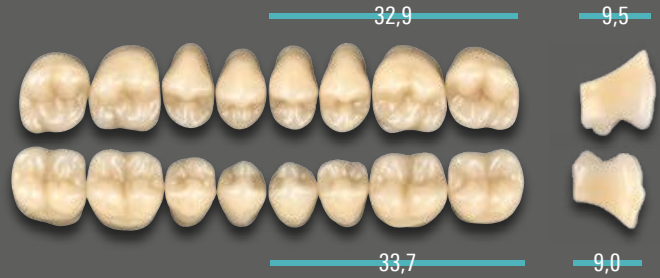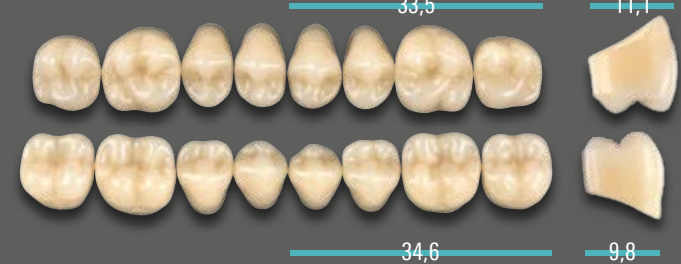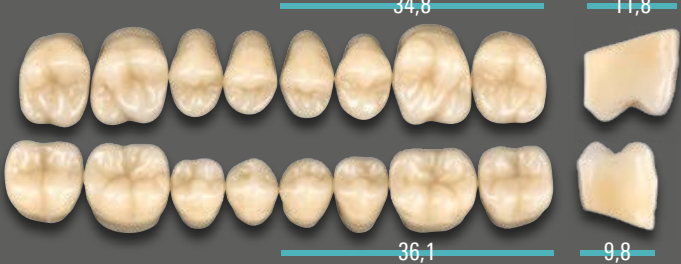
|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>20E</b><br>  | <b>21E*</b><br> | <b>22E*</b><br> |
| <b>23E*</b><br> | <b>24E*</b><br> | <b>25E</b><br>  |

\*) Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>013</b><br><br>41,7<br>7,9<br>9,5   | <b>025</b><br><br>42,8<br>8,1<br>9,9   | <b>034</b><br><br>43,3<br>8,0<br>9,7   | <b>035</b><br><br>43,2<br>8,0<br>9,8   |
| <b>043</b><br><br>43,6<br>8,2<br>9,4   | <b>086</b><br><br>47,1<br>8,9<br>9,9   | <b>097</b><br><br>49,2<br>9,0<br>11,5  | <b>098*</b><br><br>48,1<br>9,0<br>11,8 |
| <b>099</b><br><br>52,5<br>9,8<br>12,5  |  |  |  |
| <b>T36*</b><br><br>43,7<br>8,1<br>10,1 | <b>T53</b><br><br>44,6<br>8,1<br>9,2   | <b>T56</b><br><br>44,4<br>8,3<br>10,0  | <b>T66</b><br><br>44,6<br>8,3<br>10,2  |
| <b>T67</b><br><br>45,1<br>8,4<br>10,0  | <b>T76*</b><br><br>45,9<br>8,2<br>10,4 | <b>T77*</b><br><br>46,2<br>8,5<br>10,6 | <b>T88*</b><br><br>47,1<br>8,7<br>10,6 |





Rectangulaire



Carrée

T98

50,5




10,8

9,3

T99

48,0

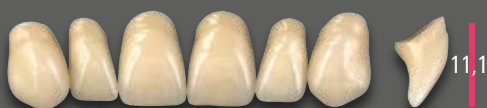

11,1

9,0

X13

41,5



9,3

7,7

X66

45,9



10,1

8,9

X77

47,0



10,1

8,5

X87

46,9



10,1

8,9

X96

50,0



10,0

9,3

X99

50,6



12,7

9,4

Z51

44,6



8,8

8,3

Z61

45,5




8,7

8,2

Z74

46,7

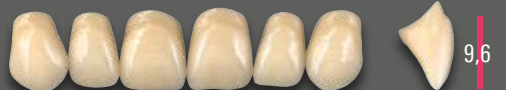

9,6

8,8

Z84

46,7



9,4

8,7

Z85

47,5



9,7

8,6

Z97

52,2



10,2

9,5

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO







VITA VIONIC  
FRAME









## Antérieure mandibulaire

|                                   |                                       |                                       |                                      |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bords incisifs entièrement formés | <b>L3</b><br><br>33,4<br>5,0<br>8,0   | <b>L5*</b><br><br>35,3<br>5,2<br>9,2  | <b>L5L</b><br><br>34,2<br>5,1<br>9,9 | <b>L7*</b><br><br>36,2<br>5,4<br>8,7  |
|                                   | <b>L9</b><br><br>36,1<br>5,6<br>9,0   | <b>L11*</b><br><br>36,9<br>5,7<br>9,1 | <b>L13</b><br><br>37,0<br>5,6<br>8,7 | <b>L15</b><br><br>38,0<br>5,7<br>12,2 |
| Bords incisifs abrasés            | <b>L4*</b><br><br>32,7<br>4,7<br>8,3  | <b>L8</b><br><br>38,9<br>5,8<br>9,8   | <b>L10</b><br><br>39,0<br>5,9<br>9,2 | <b>L12</b><br><br>41,0<br>6,2<br>9,8  |
|                                   | <b>L14</b><br><br>41,7<br>6,1<br>10,9 |                                       |                                      |                                       |

\*) Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponible(s) exclusivement pour la ou les formes choisies.


|                                     |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>Antérieure               | Max. / N°<br><br>mm | 013<br>41,7 | 025<br>42,8 | 034<br>43,3 | 035<br>43,2 | 043<br>43,6 | 086<br>47,1 | 097<br>49,2 | 098<br>48,1 | 099<br>52,5 | T36<br>43,7 | T53<br>44,6 | T56<br>44,4 | T66<br>44,6 | T67<br>45,1 | T76<br>45,9 | T77<br>46,2 | T88<br>47,1 | T98<br>50,5 | T99<br>48,0 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | L4<br>32,7  | L3<br>33,4  | L3<br>33,4  | L3<br>33,4  | L5<br>35,3  | L11<br>36,9 | L8<br>38,9  | L13<br>37,0 | L14<br>41,7 | L4<br>32,7  | L5<br>35,3  | L5<br>35,3  | L5<br>35,3  | L4<br>32,7  | L7<br>36,2  | L11<br>36,9 | L11<br>36,9 | L15<br>38,0 | L11<br>36,9 |
| VITAPAN<br>CUSPIFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 40C<br>28,1 | 40C<br>28,1 | 41C<br>29,9 | 41C<br>29,9 | 41C<br>29,9 | 42C<br>31,7 | 44C<br>32,8 | 42C<br>31,7 | 45C<br>34,8 | 40C<br>28,1 | 41C<br>29,9 | 41C<br>29,9 | 42C<br>31,7 | 42C<br>31,7 | 42C<br>31,7 | 42C<br>31,7 | 44C<br>32,8 | 45C<br>34,8 | 44C<br>32,8 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 40C<br>29,5 | 40C<br>29,5 | 41C<br>31,3 | 41C<br>31,3 | 41C<br>31,3 | 42C<br>33,4 | 44C<br>34,6 | 42C<br>33,4 | 45C<br>36,3 | 40C<br>29,5 | 41C<br>31,3 | 41C<br>31,3 | 42C<br>33,4 | 42C<br>33,4 | 42C<br>33,4 | 42C<br>33,4 | 44C<br>34,6 | 45C<br>36,3 | 44C<br>34,6 |
| VITAPAN<br>SYNOFORM<br>Postérieure  | Max. / N°<br><br>mm | 10S<br>29,0 | 10S<br>29,0 | 11S<br>30,0 | 11S<br>30,0 | 11S<br>30,0 | 12S<br>31,3 | 14S<br>33,1 | 12S<br>31,3 | 14S<br>33,1 | 10S<br>29,0 | 11S<br>30,0 | 11S<br>30,0 | 12S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 14S<br>33,1 | 14S<br>33,1 | 14S<br>33,1 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 10S<br>30,5 | 10S<br>30,5 | 11S<br>31,9 | 11S<br>31,9 | 11S<br>31,9 | 12S<br>32,7 | 14S<br>35,4 | 12S<br>32,7 | 14S<br>35,4 | 10S<br>30,5 | 11S<br>31,9 | 11S<br>31,9 | 12S<br>32,7 | 12S<br>32,7 | 12S<br>32,7 | 12S<br>32,7 | 14S<br>35,4 | 14S<br>35,4 | 14S<br>35,4 |

|                                     |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>Antérieure               | Max. / N°<br><br>mm   | X13<br>41,5 | X66<br>45,9 | X77<br>47,0 | X87<br>46,9 | X96<br>50,0 | X99<br>50,6 | Z51<br>44,6 | Z61<br>45,5 | Z74<br>46,7 | Z84<br>46,7 | Z85<br>47,5 | Z97<br>52,2 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm  | L4<br>32,7  | L9<br>36,1  | L11<br>36,9 | L11<br>36,9 | L10<br>39,0 | L15<br>38,0 | L3<br>33,4  | L3<br>33,4  | L9<br>36,1  | L9<br>36,1  | L13<br>37,0 | L12<br>41,0 |
| VITAPAN<br>CUSPIFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 41C<br>29,9 | 42C<br>31,7 | 42C<br>31,7 | 44C<br>32,8 | 44C<br>32,8 | 45C<br>34,8 | 43C<br>31,0 | 43C<br>31,0 | 42C<br>31,7 | 42C<br>31,7 | 44C<br>32,8 | 45C<br>34,8 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 41C<br>31,3 | 42C<br>33,4 | 42C<br>33,4 | 44C<br>34,6 | 44C<br>34,6 | 45C<br>36,3 | 43C<br>32,3 | 43C<br>32,3 | 42C<br>33,4 | 42C<br>33,4 | 44C<br>34,6 | 45C<br>36,3 |
| VITAPAN<br>SYNOFORM<br>Postérieure  | Max. / N°<br><br>mm | 11S<br>30,0 | 12S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 14S<br>33,1 | 14S<br>33,1 | 14S<br>33,1 | 13S<br>31,3 | 13S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 12S<br>31,3 | 14S<br>33,1 | 14S<br>33,1 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 11S<br>31,9 | 12S<br>32,7 | 12S<br>32,7 | 14S<br>35,4 | 14S<br>35,4 | 14S<br>35,4 | 13S<br>33,9 | 13S<br>33,9 | 12S<br>32,7 | 12S<br>32,7 | 14S<br>35,4 | 14S<br>35,4 |

Les données fournies dans le tableau de correspondance n’ont qu’une valeur indicative car elles varient d’un patient à l’autre.

## Postérieure

40C

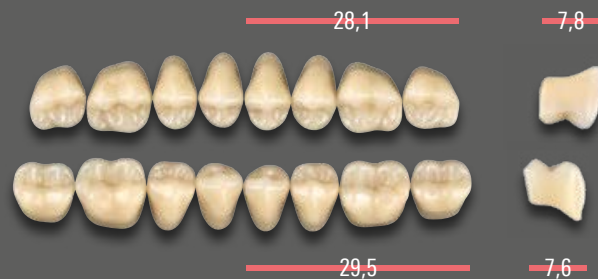

41C\*




42C\*




43C



44C\*

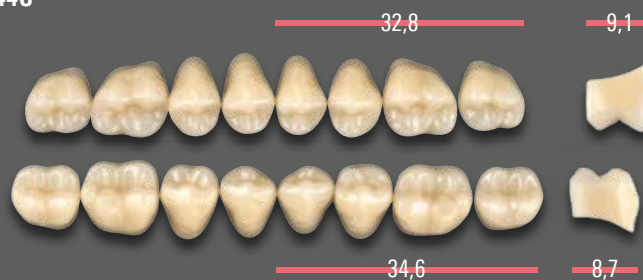

45C

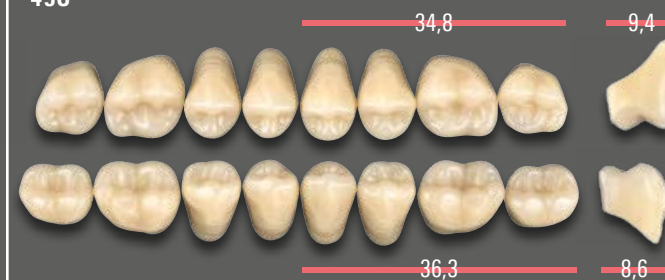


\*) Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.







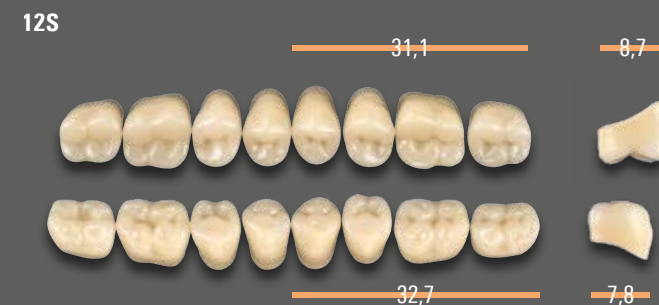



# VITAPAN SYNOFORM®

Disponibles en 15 couleurs VITA classical A1 – D4® (sans B1)


## Postérieure



## Antérieure maxillaire

| <br>Ovale         | <b>043</b><br><br>43,3<br>7,9<br>10,7 | <b>045</b><br><br>44,8<br>8,3<br>11,3 |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | <b>T44</b><br><br>44,0<br>8,1<br>11,7 | <b>T46</b><br><br>46,2<br>8,2<br>11,6 | <b>T48</b><br><br>48,3<br>8,7<br>12,5 | <b>T50</b><br><br>49,9<br>9,2<br>12,9 |
|   | <b>R47</b><br><br>47,0<br>8,6<br>10,7 | <b>R49</b><br><br>49,0<br>8,9<br>12,1 |  |  |
| <br>Triangulaire  |  |   |  |  |
| <br>Rectangulaire |  |   |  |  |

## Antérieure mandibulaire

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>L33</b><br><br>33,2<br>4,9<br>8,9 | <b>L35</b><br><br>35,2<br>5,2<br>9,5 | <b>L37</b><br><br>37,2<br>5,5<br>10,0 | <b>L39</b><br><br>39,2<br>5,8<br>10,5 |
|---|--|--|--|

➤ **Remarque :** la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base de la prothèse sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base de la prothèse fabriquée numériquement.




# VITA VIONIC VIGO®

Disponible en 7 couleurs VITA classical A1–D4® / éclaircie : (0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Postérieure



| VITA VIONIC<br>VIGO<br>Antérieure  | Max. / N°<br><br>mm | R47<br>47,0 | R49<br>49,0 | O45<br>44,8 | T50<br>49,9 | T46<br>46,2 | O43<br>43,3 | T44<br>44,0 | T48<br>48,3 |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | Man. / N°<br><br>mm | L37<br>37,2 | L39<br>39,2 | L35<br>35,2 | L39<br>39,2 | L35<br>35,2 | L33<br>33,2 | L33<br>33,2 | L37<br>37,2 |
| VITA VIONIC<br>VIGO<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 22L<br>31,8 | 23L<br>34,3 | 22L<br>31,8 | 24L<br>35,9 | 22L<br>31,8 | 21L<br>30,3 | 21L<br>30,3 | 22L<br>31,8 |
|                                    | Man. / N°<br><br>mm | 22L<br>32,6 | 23L<br>35,0 | 22L<br>32,6 | 24L<br>36,9 | 22L<br>32,6 | 21L<br>31,0 | 21L<br>31,0 | 22L<br>32,6 |

➤ **Remarque :** la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base de la prothèse sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base de la prothèse fabriquée numériquement.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM


VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Disponibles en 6 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Antérieure maxillaire

| <br>Ovale | <b>043</b><br><br>43,1<br>7,9<br>9,7 | <b>045</b><br><br>45,1<br>8,4<br>9,7  | <b>049</b><br><br>49,1<br>9,0<br>11,2 |  |
|---|---|---|--|--|
|   | <b>T44</b><br><br>44,1<br>8,1<br>9,7 | <b>T46</b><br><br>46,2<br>8,2<br>11,1 | <b>T48</b><br><br>48,1<br>8,7<br>10,5 | <b>T50</b><br><br>50,0<br>9,2<br>11,6 |
|   | <b>R45</b><br><br>45,4<br>8,2<br>9,9 | <b>R47</b><br><br>47,0<br>8,6<br>11,2 |  |  |

## Antérieure mandibulaire





|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>L33</b><br><br>33,2<br>5,0<br>9,0 | <b>L35</b><br><br>35,3<br>5,2<br>9,9 | <b>L37</b><br><br>37,3<br>5,5<br>9,4 | <b>L39</b><br><br>39,0<br>6,0<br>9,8 |
|---|--|---|---|

# VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

Disponibles en 6 couleurs VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Postérieure



|                                     |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Antérieure     | Max. / N°<br><br>mm | 043<br>43,1 | 045<br>45,1 | 049<br>49,1 | T44<br>44,1 | T46<br>46,2 | T48<br>48,1 | T50<br>50,0 | R45<br>45,4 | R47<br>47,0 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L39<br>39,0 | L33<br>33,2 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 | L39<br>39,0 | L35<br>35,3 | L37<br>37,3 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Postérieure | Max. / N°<br><br>mm | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 23L<br>34,2 | 21L<br>30,1 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 | 24L<br>35,8 | 22L<br>31,6 | 22L<br>31,6 |
|                                     | Man. / N°<br><br>mm | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 23L<br>34,8 | 21L<br>30,7 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 | 24L<br>36,4 | 22L<br>32,1 | 22L<br>32,1 |

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN


VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

Vous trouverez de plus amples informations sur les SOLUTIONS **PROTHÉTIQUES VITA** sous :  
[www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics)

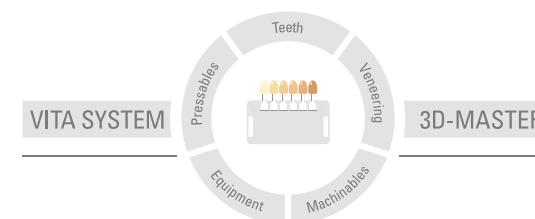

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition de ce mode d'emploi : 2022-07

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage

**CE 0124**:

Gamme de produits **VITAPAN®**, **VITA PHYSIODENS®**, gamme de produits **VITA VIONIC®**

MD

# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)