

# VITA SMART.FIRE

Die effiziente Brenneinheit für Chairside-Versorgungen



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 02.18

VITA – perfect match.

**VITA**

## Produktbeschreibung

VITA SMART.FIRE ist eine speziell für die Zahnarztpraxis entwickelte Brenneinheit für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände aller gängigen Chairside-Materialien. Materialwahl und Programmstart erfolgen in nur einem

Schritt. Für die einfache Brandführung sind materialspezifisch ideal abgestimmte Programme bereits vorinstalliert. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die Brenneinheit besonders platzsparend und ganz bequem in jeder Praxis aufstellen.

## VITA SMART.FIRE SYSTEM – ALLE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK



integriertes  
Zubehör-Set

Chairside-Brenneinheit

Bedienelement

### Was?

- VITA SMART.FIRE ist eine speziell für die Zahnarztpraxis entwickelte Brenneinheit für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände aller gängigen Chairside-Materialien.

### Wofür?

- Die Brenneinheit wird mittels Touch-Bedienelement gesteuert. Für die einfache Brandführung sind materialspezifisch ideal abgestimmte Programme bereits vorinstalliert.

### Womit?

- Das VITA SMART.FIRE SYSTEM umfasst die Brenneinheit, das Bedienelement sowie ein integriertes Zubehör-Set

## VORTEILE

### **TOUCH & FIRE!**

*Vorinstalliertes Programm auswählen,  
Brandführung direkt starten – fertig!*



**1. intuitive Bedienung**

**2. komfortabler Einsatz**

**3. verlässliche Funktion**

# TOUCH & FIRE

#### **Intuitiv**

- Intuitive Bedienung dank Materialwahl und Programmstart in einem Schritt
- Übersichtliche Menüführung mit selbsterklärenden Programmsymbolen

#### **Komfortabel**

- Vorinstallierte Programme für alle gängigen Chairside-Materialien
- Komfortabler Einsatz durch besonders platzsparende Bauweise

#### **Verlässlich**

- Zuverlässige Funktion durch langlebige Brenntechnik
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen

## DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Die Brenneinheit



### VITA SMART.FIRE Brenneinheit

#### Was?

- Platzsparende Chairside-Brenneinheit für komfortablen Einsatz
- Langlebige, robuste Brenntechnik für zuverlässige Funktion
- Beständiges Gehäuse mit versiegelten Oberflächen für einfache Reinigung
- Integrierte Service-Schublade für stets griffbereites Zubehör wie z.B. Brennträger
- Vollautomatische Temperaturkalibrierung für verlässliche Ergebnisse

#### Wofür?

- Für Kristallisations-, Glanz-, Malfarben- und Korrekturbrände

## DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Das Bedienelement



### VITA SMART.FIRE Bedienelement


#### Was?

- Bedienelement mit vorinstallierten Programmen für alle gängigen Chairside-Materialien
- Hochauflösendes 10-Zoll-Touch-Display für perfekte Bedienung und beste Bildqualität
- Intuitives Bedienkonzept für Materialwahl und Programmstart in einem Schritt
- Übersichtliches Menü mit selbsterklärenden Symbolen für schnelle Programmwahl
- Softwarebasierte Assistenzfunktion für gestützte Schritt-für-Schritt-Brandführung

#### Wofür?

- Für die intuitiv-einfache Brandführung

## DIE VITA SMART.FIRE KOMponentEN – Das Zubehör

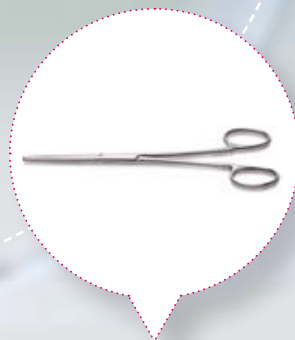

### VITA SMART.FIRE Zubehör


#### Was?

- In Brenneinheit integriertes Zubehör-Set zur komfortablen Brandführung
- Bestandteile: Brenngutträger, Wattebrenngutträger, Platinstifte, Brenngutzange und Abkühltisch

#### Wofür?

- So hat das Praxisteam direkt an der Brenneinheit alles Wichtige stets griffbereit


## PRODUKT- UND SYSTEMÜBERSICHT

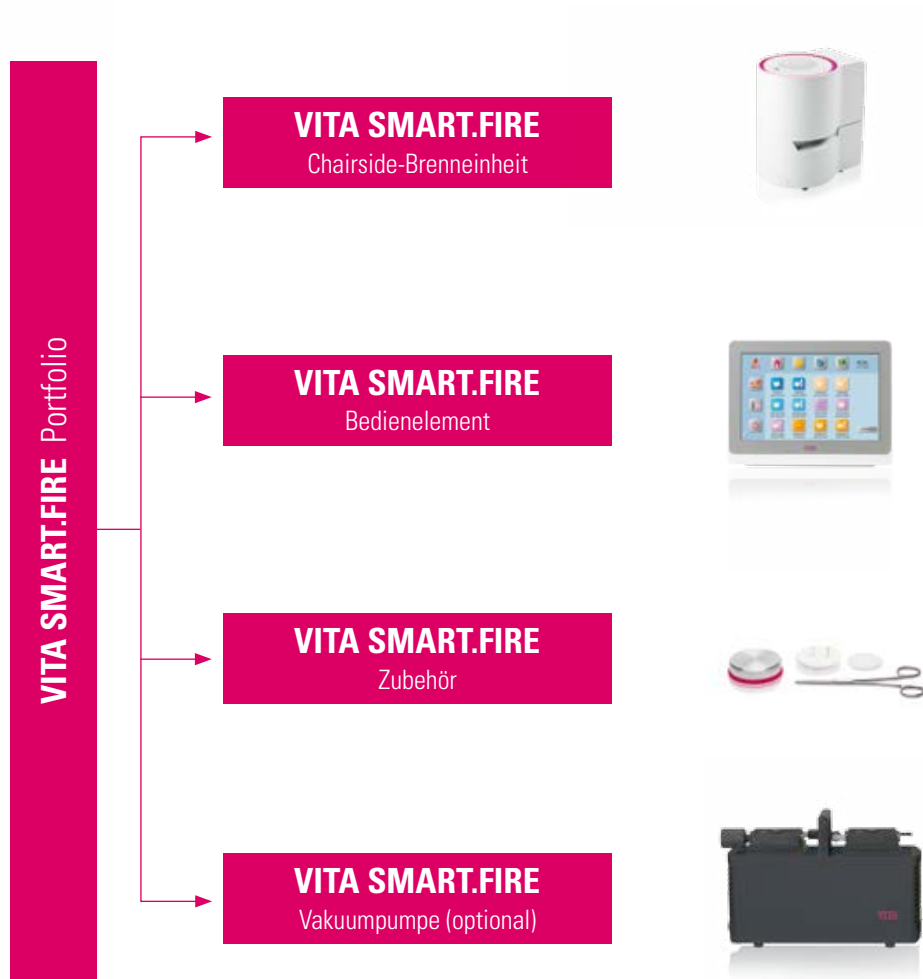

### VITA SMART.FIRE

Bezeichnung	Maße	Technische Daten	Lieferumfang	Art.-Nr.
Chairside-Brenneinheit	<b>Gehäuse</b> ø 230 mm T: 300 mm H: 340 mm <b>Brennkammer</b> ø 80 mm H: 43 mm	<b>Elektrischer Anschluss:</b> 230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz <b>Leistungsaufnahme:</b> 950 W <b>Brennkammertemperatur:</b> 1050 °C	1x Brenneinheit 1x Zubehör-Set 1x Bedienungsanleitung	<b>DSF220</b> (230V-Version)  <b>DSF100</b> (100V-Version)  <b>DSF110</b> (110V-Version)
Bedienelement	B: 260 mm T: 150 mm H: 200 mm	TFT-Touch-Display 10 Zoll, 1280 x 800 USB-/SD-Schnittstellen integrierte WLAN-Funktion	1x Anschlusskabel	
Zubehör	–	–	2x Platinstifte 1x Wattebrenngutträger 1x Brenngutträger 1x Brenngutzange 1x Abkühltisch	
Vakuumpumpe (optional)	–	–	1x Vakuumpumpe 1x Vakuumschlauch	<b>DVPU220</b>

Weitere Informationen zu VITA SMART.FIRE  
finden Sie unter: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

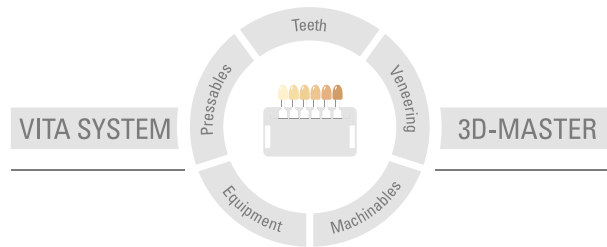

**Zur Beachtung:** Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben unabhängig vom Rechtsgrund und, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Falle auf den Wert der gelieferten Ware lt. Rechnung ohne Umsatzsteuer begrenzt. Insbesondere haften wir, soweit gesetzlich zulässig, in keinem Fall für entgangenen Gewinn, für mittelbare Schäden, für Folgeschäden oder für Ansprüche Dritter gegen den Käufer. Verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche (Verschulden bei Vertragsabschluss, pos. Vertragsverletzung, unerlaubte Handlungen etc.) sind nur im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gegeben. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 02.18

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

**VITA SMART.FIRE** ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EG.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)