

VITA SMART.FIRE

Le four efficace pour des restaurations au cabinet dentaire



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 02.18

VITA – perfect match.

VITA

Description du produit

VITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et aux cuissons de correction de tous les matériaux classiques, spécialement développé pour les cabinets dentaires. La sélection du matériau et le démarrage du programme s'effectuent en

une seule étape. Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont pré-installés pour une exécution plus simple de la cuisson. Grâce à sa structure compacte, le four peut être installé très facilement et sans prendre trop de place dans n'importe quel cabinet.

VITA SMART.FIRE SYSTEM – TOUTES LES SOLUTIONS EN UN CLIN D'ŒIL



**Ensemble
d'accessoires
intégré**

Four pour cabinet dentaire

Unité de commande

Quoi ?

- VITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et aux cuissons de correction de tous les matériaux classiques, spécialement développé pour les cabinets dentaires

Pourquoi ?

- Le four est piloté par le biais d'une unité de commande tactile. Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont pré-installés pour une exécution plus simple de la cuisson

Avec quoi ?

- Le VITA SMART.FIRE SYSTEM comprend le four, l'unité de commande ainsi que l'ensemble d'accessoires intégré

AVANTAGES

TOUCH & FIRE !

*Sélectionner le programme préinstallé,
lancer directement la cuisson – Et voilà !*



1. Manipulation intuitive

2. Utilisation confortable

3. Fonctionnement fiable

TOUCH & FIRE

Intuitif

- Une utilisation intuitive grâce à la sélection du matériau et au démarrage du programme en une seule étape
- Navigation claire dans les menus avec des symboles de programmation explicites

Confortable

- Programmes pré-installés pour tous les matériaux classiques utilisés dans les cabinets dentaires
- Utilisation confortable de par sa structure très peu encombrante

Fiable

- Fonctionnement fiable via une technique de cuisson durable
- Corps résistant avec surfaces scellées

LES COMPOSANTS VITA SMART.FIRE – Le four



**Pour toutes les cuissons
et tous les matériaux classiques**

Four VITA SMART.FIRE

Quoi ?

- Four de cabinet dentaire peu encombrant pour une utilisation confortable
- Technique de cuisson durable et éprouvée pour un fonctionnement fiable
- Corps résistant avec surfaces scellées pour un nettoyage aisé
- Tiroir de service intégré pour des accessoires toujours accessibles, comme les supports de cuisson
- Calibrage de la température entièrement automatisé pour des résultats fiables

Pourquoi ?

- Pour des cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et des cuissons de correction

LES COMPOSANTS **VITA SMART.FIRE** – L'élément de commande



L'unité de commande **VITA SMART.FIRE**


Quoi ?

- Unité de commande avec programmes préinstallés pour tous les matériaux classiques destinés aux cabinets dentaires
- Écran tactile 10 " haute résolution pour une utilisation parfaite et une qualité d'image optimale
- Concept de commande intuitif pour la sélection des matériaux et le démarrage du programme en une seule étape
- Menu clair avec des symboles explicites pour une sélection de programme rapide
- Fonction d'assistance logicielle pour une exécution de la cuisson étape par étape en toute sécurité

Pourquoi ?

- Pour une cuisson simple et intuitive

LES COMPOSANTS **VITA SMART.FIRE** – Les accessoires

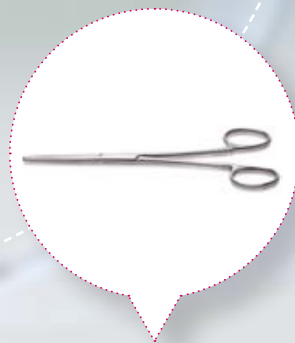

Accessoires **VITA SMART.FIRE**


Quoi ?

- Ensemble d'accessoires intégré au four pour une cuisson confortable
- Composants : supports de cuisson, supports en ouate réfractaire, tiges de platine, pince à four et tablette de refroidissement

Pourquoi ?

- L'équipe du cabinet a ainsi tous les accessoires importants à portée de main et à tout moment


APERÇU DU SYSTÈME ET DES PRODUITS

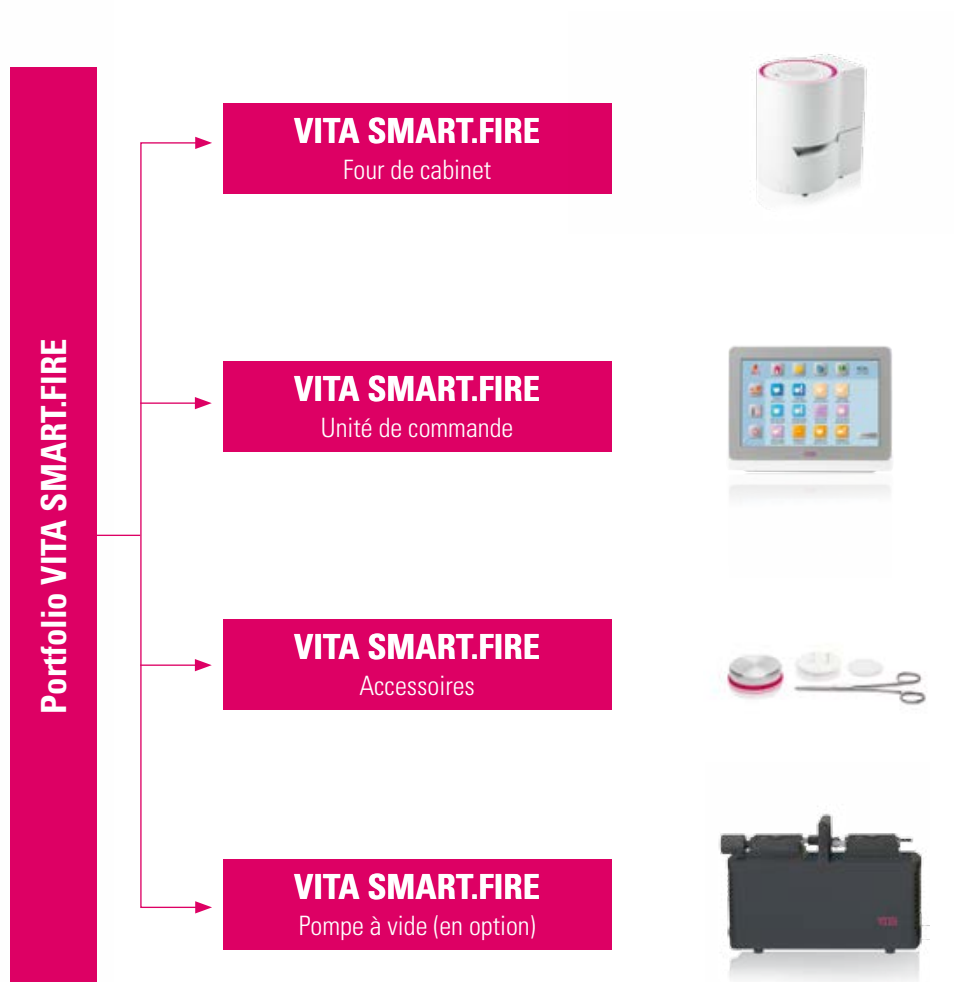

VITA SMART.FIRE

Désignation	Dimensions	Données techniques	Ensemble livré	Code art.
Four de cuisson pour cabinets dentaires	Corps ø : 230 mm P : 300 mm H : 340 mm Enceinte de cuisson ø : 80 mm H : 43 mm	Branchement électrique 230 V AC, 50 Hz ou 100/110 V AC, 50/60 Hz Puissance absorbée 950 W Température de l'enceinte de cuisson : 1.050 °C	1 four 1 ensemble d'accessoires 1 mode d'emploi	DSF220 (version 230 V) DSF100 (version 100 V) DSF110 (version 110 V)
Unité de commande	l : 260 mm P : 150 mm H : 200 mm	Écran tactile TFT 10", 1280 x 800 Fonction Wi-Fi intégrée avec interfaces USB/SD	1 câble de branchement	
Accessoires	–	–	2 tiges platine 1 support en ouate réfractaire 1 support de cuisson 1 pince de four 1 tablette à refroidissement	
Pompe à vide (en option)	–	–	1 pompe à vide 1 tuyau à vide	DVPU220

Pour de plus amples informations sur VITA SMART.FIRE,
consultez le site : www.vita-zahnfabrik.com

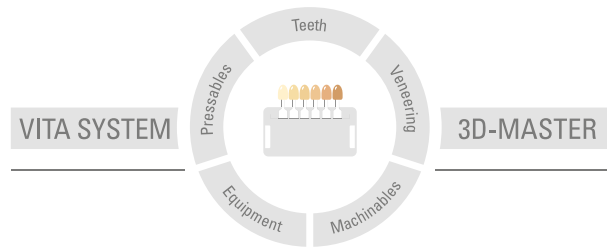

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En outre et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 02.18

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE porte le marquage CE conformément aux directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2011/65/CE.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik