

# VITAPM®9

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

Data 05.18

VITA – perfect match.

**VITA**

VITAPM®9 Sistema di ceramica pressabile

VITAVM®9 ADD-ON Sistema di individualizzazione

VITAPM<sup>®</sup>9 – garantisce una lavorazione razionale



### VITAPM<sup>®</sup>9: Ceramica pressabile „All-in-One“ per una maggiore economia

VITA PM 9 (Pressable Material) è una ceramica pressabile „All-in-One“ sviluppata sulla base della ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 9 affermata in milioni di casi. VITA PM 9 consente riabilitazioni economicamente sostenibili in un'ampia gamma di indicazioni. E' indicata sia per la tecnica di pressatura senza struttura (inlay, onlay, faccette e corone frontali) che per la sovrappressatura su strutture in biossido di zirconio. L'offerta compatta di colori comprende tre gradi di traslucenza (O, T, HT) in 10 varianti cromatiche.

#### Vantaggi

- Realizzazione razionale: l'ampia gamma di indicazioni (tecnica di pressatura senza struttura e sovrappressatura di strutture) di VITA PM 9 consente la realizzazione a costi contenuti e sicura di diversi tipi di restauri con un unico programma di pressatura ed un livello di scorte efficiente.
- Sicurezza clinica: la ceramica VITA PM 9 è stata sviluppata sulla base della ceramica feldspatica a struttura microfine VITA VM 9 affermata in milioni di casi garantendo la massima sicurezza clinica.
- Gioco cromatico naturale: soprattutto i pellet VITA PM 9 HT convincono per l'effetto camaleonte e garantiscono un effetto cromatico di grande naturalezza.
- Caratteristiche simili a quelle dei denti naturali: le caratteristiche naturali della ceramica VITA PM 9 risultano dalle superfici omogenee, l'elevata resistenza al deposito di placca ed un comportamento simile a quello dello smalto naturale.

#### Gamma di colori

La gamma compatta di colori comprendente 10 varianti in tre diversi gradi di traslucenza (O = Opaque, T = Translucent, HT = High Translucent) consente la realizzazione di riabilitazioni di elevata qualità estetica.

VITA PM 9 si basa sul sistema cromatico VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Colori pellet O-/T:



	Varianti cromatiche
Pellet O	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P
Pellet T	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

Colori pellet HT:

	Varianti cromatiche
Colori dentina	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
Colori smalto	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

#### Compatibilità di sistema

VITA PM 9 è compatibile con tutti i sistemi di messa in rivestimento e forni di pressatura in commercio.

## VITAVM®9 ADD-ON – garantisce un'estetica naturale

### VITAVM®9 ADD-ON : Masse di individualizzazione per un'estetica ai massimi livelli

Le masse VITA VM 9 ADD-ON a basso punto di fusione sono indicate espressamente per l'individualizzazione (tecnica di stratificazione) di restauri in VITA PM 9 senza struttura. Queste masse sono state sviluppate sulla base dell'affermata ceramica di rivestimento VITA VM 9 e sono disponibili in otto tonalità. Perché l'odontotecnico possa riprodurre in modo rapido e sicuro sfumature cromatiche individuali ed ottenere un'estetica di altissima qualità.



### Vantaggi

- Effetto cromatico naturale: grazie all'eccellente trasparenza, al comportamento di rifrazione della luce simile a quello dello smalto e al legame armonico con la base in VITA PM 9, le masse VITA VM 9 ADD-ON assicurano giochi cromatici di grande naturalezza.
- Sicurezza di legame: le masse VITA VM 9 ADD-ON sono adattate in modo ottimale alla ceramica VITA PM 9 e convincono per l'eccellente legame di sinterizzazione privo di distorsioni con la base VITA PM 9. E' in tal modo garantita la caricabilità nel lungo periodo.
- Economicità: l'ottima stabilità in fase di stratificazione e cottura, la retrazione minima si traducono in un processo di lavorazione razionale.
- Semplicità di lavorazione: le masse VITA VM 9 ADD-ON convincono per la struttura omogenea ed assicurano una buona molabilità e lucidabilità.



### Gamma di colori

Masse smalto / trasparenti	ADD1 (trasparente), ADD2 (smalto chiaro), ADD3 (smalto scuro), ADD4 (bianco traslucente)
Masse traslucenti	ADD5 (giallo traslucente), ADD6 (arancio traslucente), ADD7 (rosso traslucente), ADD8 (blu traslucente)

### Compatibilità di sistema

Le masse VITA VM 9 ADD-ON sono state sviluppate espressamente per l'individualizzazione di restauri in VITA PM 9 senza struttura. La cottura delle masse a basso punto di fusione avviene ad una temperatura di 800°C con qualsiasi forno per ceramica in commercio.


### VITA AKZENT Plus supercolori - Ottimizzato. Semplice. Completo.

Con 28 colori VITA AKZENT Plus offre a studi e laboratori un sistema di caratterizzazione cromatica completo e versatile. Con VITA AKZENT Plus è possibile caratterizzare non solo restauri in VITA PM 9, ma anche altri materiali ceramici dentali, indipendentemente dal loro CET. Questi nuovi supercolori fluorescenti assicurano semplicità di cromatizzazione interna dei restauri durante la stratificazione, pittura superficiale e fine velatura.

A seconda delle opzioni di lavorazione e dei settori di impiego i supercolori VITA AKZENT Plus sono disponibili come polveri e paste pronte per l'uso. I Body Stains per lasura e le masse Glaze sono disponibili anche come spray.



Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

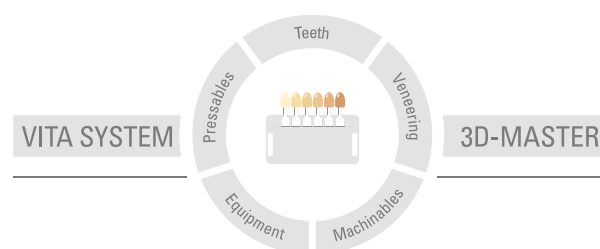

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori. La nostra responsabilità per la correttezza di queste indicazioni è indipendente dal titolo giuridico e, se legalmente consentito, è in ogni caso limitata al valore della merce fornita come da fattura al netto dell'IVA. In particolare, se legalmente consentito, non rispondiamo in alcun caso per mancato guadagno, danni indiretti, danni consequenziali o per rivendicazioni di terzi nei confronti dell'acquirente. Qualora una richiesta di risarcimento venga avanzata per comportamento colposo (colpa in "contrahendo", violazione contrattuale positiva, atto illecito) ad essa si darà luogo esclusivamente nel caso di dolo o colpa grave. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto.

Data di queste istruzioni di impiego: 05.18

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti prodotti sono marcati: **CE** 0124

VITA**VM**®9 · VITA**PM**®9 · VITA AKZENT® Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)