

# VITAPM®9

## Информация о продукции



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска 06.18

VITA – perfect match.

**VITA**

VITAPM®9 Система прессуемой керамики

VITAVM®9 ADD-ON Система материалов для индивидуализации

## VITAPM®9 – гарантирует рациональный рабочий процесс



### VITAPM®9: Керамика „все в одном“ - для более экономичного рабочего процесса

VITA PM 9 (Прессуемый Материал) является прессуемой керамикой „все в одном“, которая базируется на хорошо зарекомендовавшей себя тонкодисперсной облицовочной керамике VITA VM 9. VITA PM 9 обеспечивает экономичное использование для всего спектра показаний. Она подходит как для бескаркасной техники прессования (вкладки/накладки, виниры и фронтальные зубы), так и для напрессовывания на каркасы из диоксида циркона. Цветовой ассортимент состоит из трех степеней транслюценции (O, T, HT) по 10 вариантов цвета в каждой.

#### Преимущества

- Рациональность: Широкий спектр показаний (бескаркасная техника прессования и техника напрессовывания) VITA PM 9 дает возможность экономно и надежно изготавливать различные реставрации из одного и того же материала и в ходе одной программы прессования.
- Клиническая надежность: Керамика VITA PM 9 была разработана на базе хорошо зарекомендовавшей себя тонкодисперсной облицовочной керамики VITA VM 9 и поэтому гарантирует высочайшую клиническую надежность.
- Естественная игра цвета: В особенности высоко транслюцентные HT-таблетки VITA PM 9 привлекают своим эффектом хамелеона и гарантируют естественное воспроизведение цвета.
- Свойства, характерные для естественных зубов: керамика VITA PM 9 имеет равномерную поверхностную структуру, высокую резистентность к образованию налета, а также свойства, аналогичные естественной эмали.

#### Цветовой ассортимент

Цветовой ассортимент, состоящий из 10 вариантов цветов в каждой из трех групп транслюценции (O = опаковая, T = транслюцентная, HT = высоко транслюцентная), позволяет исполнить высокоэстетичные реставрации. VITA PM 9 базируется на цветовой системе VITA SYSTEM 3D-MASTER.

#### Цветовой обзор O-/T-таблеток



	Цветовой ассортимент
O-таблетки	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P
T-таблетки	0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P и 3M3P

#### Цветовой обзор HT-таблеток

	Цветовой ассортимент
дентинных оттенков	0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P
эмалевых оттенков	EN0P, EN1P, EN2P, ENLP, ENDP

#### Совместимость системы

VITA PM 9 может обрабатываться с любыми паковочными системами и в любых пресс-печах.

## VITAVM®9 ADD-ON – гарантирует естественную красоту зуба

### VITAVM®9 ADD-ON : Массы для высоко эстетичной индивидуализации

Специально для индивидуализации (послойная техника) бескаркасных реставраций VITA PM 9 предлагаются низкоплавкие массы VITA VM 9 ADD-ON. Массы были созданы на базе хорошо зарекомендовавшей себя облицовочной керамики VITA VM 9. Они доступны в восьми цветах. С их помощью техник может быстро и надежно воспроизвести индивидуальные цветовые оттенки и получить первоклассные эстетические результаты.



### Преимущества

- Естественные цвета: Массы VITA VM 9 ADD-ON отличаются превосходной транслюцентностью и светопреломлением как в естественной эмали, а также гармоничной связкой с базовой структурой VITA PM 9, что обеспечивает естественную игру цвета.
- Надежная связка: Массы VITA VM 9 ADD-ON оптимально соответствуют керамике VITA PM 9 и замечательно синтеризуются с базой VITA PM 9, не вызывая усадки. Благодаря этому гарантируется длительная нагрузочная способность.
- Экономичность: Отличная прочность при послойном построении, минимальная усадка и первоклассная стабильность при обжиге обеспечивают рациональный рабочий процесс.
- Простота в работе: Массы VITA VM 9 ADD-ON привлекают своей равномерной структурой и обеспечивают хорошие результаты шлифовки и полировки.



### Цветовой ассортимент

Эмаль / прозрачные массы	ADD1 (прозрачная), ADD2 (эмаль светлая), ADD3 (эмаль темная), ADD4 (беловато-прозрачная)
Транслюцентные массы	ADD5 (желтовато-транлюцентная), ADD6 (оранжево-транлюцентная), ADD7 (красно-транлюцентная), ADD8 (голубовато-транлюцентная)

### Совместимость системы

Массы VITA VM 9 ADD-ON были созданы специально для индивидуализации бескаркасных реставраций из VITA PM 9. Низкоплавкие массы можно обжигать согласно инструкции при температуре 800°C в любых печах для обжига керамики.


### VITA AKZENT® Plus - Оптимальные красители. Просто. Все есть.

Линейка керамических красителей VITA AKZENT Plus - комплексная система, состоящая из 28 оттенков, открывающая широкие возможности для лаборатории и клиники при воспроизведении естественных цветовых эффектов в реставрации. Красителями VITA AKZENT Plus можно просто и эффективно придать характерные нюансы реставрациям VITA PM 9, а также индивидуализировать любую реставрацию независимо от КТР облицовочной керамики. При помощи новых флуоресцентных красителей легко достигается как внутреннее, во время послойного построения, так и поверхностное окрашивание, и легкое лазерование реставраций.

Красители VITA AKZENT Plus доступны в форме порошков и паст, полностью готовых к применению. Транслюцентные красители Body Stains и глазурочный материал поставляются еще и в виде спрея.



Уникальная система VITA SYSTEM 3D-MASTER позволяет определить и с высокой точностью воспроизвести все цвета естественных зубов.

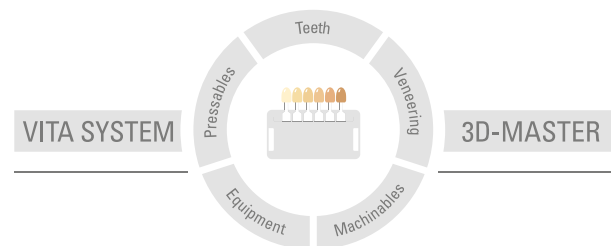

**Внимание:** Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании. Кроме того, наша ответственность за достоверность этих данных не зависит от правооснования, насколько это допускает законодательство, и в любом случае ограничивается указанной в счете-фактуре стоимостью поставленного товара без НДС. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом пределах за полученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные действия и т. п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции.

Дата выхода данной брошюры: 06.18

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Фирма VITA сертифицирована как производитель медицинской продукции, следующие виды ее продукции имеют маркировку:  0124

VITAVM<sup>®</sup>9 · VITAPM<sup>®</sup>9 · VITA AKZENT<sup>®</sup> Plus

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)