

VITA VMK Master[®]

Mesterszint minden esetben



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2019.01.



VITA – perfect match.

VITA

Mesterszint – a tökéletes eredményért



VITA VMK Master®

Mesterszint

Precizitás, amit kedvelni fog. Egész biztosan!

Jó tudni, hogy VITA a VITA VMK Master termékkel olyan precíz és természetes földpát leplezőkerámiát kínál Önnek, amely tökéletes eredményt biztosít minden klasszikus ötvözet esetében – legyen szó öntött, frézelt vagy szinterezett anyagról.

Ennek következtében VITA VMK Master tökéletesen pontos, megbízható színeket garantál Önnek, méghozzá ellenőrzött minőségben, amelyre mindig számíthat. Mert mi a VITÁ-nál kizárólag a legmagasabb gyártási szabványokra összpontosítunk – a VITA masszákat ugyanabban a gyárban állítjuk elő, mint a viágszerte jól ismert VITA classical A1–D4 színskálát és a VITA SYSTEM 3D-MASTER színskálát.

Legjobb, ha személyesen győződik meg róla: VITA VMK Master nem csak precíz, de mindig esztétikus eredményt biztosít Önnek – megbízható, ragyogó színek minden esetben!



Cirkon fog - króm-kobalt korong

Előnyök dióhéjban

- Feldolgozása precíz és biztonságos, így gyorsan elsajátítható
- Megbízhatóság és esztétika terén nem igényel kompromisszumot
- Kiváló feldolgozási jellemzők, mint pl. továbbfejlesztett modellezhetőség, egyszerű munkavégzés és minimális zsugorodás (ami már egyetlen kiegészítéssel lehetővé teszi a koronák készítését)
- Individualizálható VITA AKZENT Plus és VITA INTERNO anyagokkal
- Kapható VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 színekben



Csúcsteljesítmény – győzjön meg róla!



Csúcsteljesítmény

Tudásunk az esztétika szolgálatában

VITA a fogászati szakma úttörői közé tartozik. Fejlesztéseink és tapasztalatunk összessége képezi az anyagtechnológiai csúcsteljesítmények és a klinikai sikerek alapját – az egész világon, kompromisszumok nélkül.

Fémkerámiai leplező rendszerével VITA Zahnfabrik már több mint egy fél évszázaddal ezelőtt megjelent a piacon – akkoriban elsőként egész Európában. Ezt a kínálatot mára további fejlesztésekkel tökéletesítettük. Ennek eredménye az az egyedülálló folyamatbiztonság, ami páratlan a maga nemében.

VITA VMK Master olyan használatra kész termék, amely a kerámiával szemben támasztott minden követelménynek megfelel – egyéni, színe ragyogó, és természetesen mindig mentes a kompromisszumoktól.



Természetes fluoreszcencia

Előnyök dióhéjban

- Ragyogó színeredmény a meggyőző telítettség és a természetes fluoreszcencia révén
- Széleskörűen alkalmazható az egyszerű megoldásoktól kezdve egészen az egyedi karakterisztikát felmutató komplex esetekig
- Kiemelkedő folyamatbiztonság, hála a sokéves tapasztalatoknak



Csúcsteljesítmény



Kép 1a*

A régi koronák sem színüket, opacitásuk mértékét és formájukat tekintve, sem pedig felületi szerkezetük szempontjából nem illenek a maradék fogazathoz, és természetellenesnek hatnak.



Kép 1b*

Az új koronák a zománchoz hasonló fényjátékukkal lényegesen természetesebbek.



Kép 2a*

Az erősen abradált fogak leutánzása megköveteli a bruxizmusra jellemző összes jellegzetesség helyreállítását.



Kép 2b*

A 11-es fogon lévő korona a természetes mintát követi (21-es fog): éles metszőélek, repedések, hasadások, csiszolási fazetták, valamint az életkorra jellemző színbeli jellemzők.

Csúcsteljesítmény



Kép 3a*

A 22-es fog koronája a szomszédos 21-es és az átellenben lévő 12-es foggal összevetve idegen testként hat.



Kép 3b*

Az új 22-es korona erőteljes alapszínével és zománc-effektjeivel harmonikusan illeszkedik a szomszédos fogakhoz.



Kép 4a*

Az ellátás színe, formája és felszíne miatt a 22-es fogról azonnal leri, hogy fogpótlás.



Kép 4b*

A mélység illúziója és az élénk színjáték ugyanazt a kisugárzást kölcsönzi az új, 22-es koronának, mint az a szomszédos 21-es fognál megfigyelhető.

Csúcsteljesítmény



Kép 5a*

A helyreállításhoz a szomszédos fogak határozzák meg az életkorra jellemző, jellegzetes opacitást.



Kép 5b*

A fiatal fogra jellemző opacitás és fluoreszcencia tökéletes leképezésének köszönhetően a 12-es korona észrevétlenül illeszkedik a fogsorba.



Kép 6a*

Ennél az esetben a különleges kihívást a mélységi hatás és a fiatalos opaleszcencia egyidejű megléte mellett a szomszédos 21-es fog világos alapszíne jelenti.



Kép 6b*

Az új 22-es koronát a természetes mélységi hatás, az élénk színjáték, valamint az életkorra jellemző opaleszcencia teszi meggyőzővé.

Csúcsteljesítmény



Kép 7a*

A 21-es fog színét, felületét és fényességi szintjét tekintve nem harmonizál a szomszédos 11-es foggal.



Kép 7b*

A 21-es fémmérmia-korona nem tűnik fogpótlásnak, mivel természetes szomszédjának minden jellegzetességét visszatükrözi.



Kép 8a*

A letört 21-es fog számára a 11-es fog szolgál mintaként, annak minden sajátosságával: világos alapszín, erőteljesen translucens, sértetlen metszőél és gyöngyházszerű zomán-effektek.



Kép 8b*

A 21-es korona színe és zománceffektjei tekintetében egyaránt meggyőző másolata a szomszédos fognak, felmutatva annak minden jellegzetességét – beleértve a gyöngyház-hatást.

Precíz – az Ön igényének megfelelően



Precíz


Minden réteggel jobb!

Fejlesztőink nap mint nap olyan anyagokon dolgoznak, amelyek minimális ráfordítással a maximális eredményt biztosítják Önnek. Nem véletlen, hogy opaker anyagunk pl. már egyetlen kiégetés után elfedi a vázanyagot – akár porral, pasztával vagy szórásos technikával dolgozik.

Minél intuitívabb a felhasználás, annál inkább tud a döntő jelentőségű részletekre koncentrálni. Ezért helyezük a hangsúlyt a klasszikus standard-rétegezésre. Ezzel ugyanis már az első pillanattól kezdve élvezheti egy precíz, gyors és meggyőző munkafolyamat minden előnyét.

Előnyök dióhéjban

- Klasszikus rétegezés intuitív munkavégzéssel
- Elsősztályú anyagjellemzők – ami pl. csökkentett zsugorodást, jelentős időmegtakarítást és tartós színtabilitást biztosít
- Kiemelkedő hatékonyság és esztétikailag meggyőző eredmények

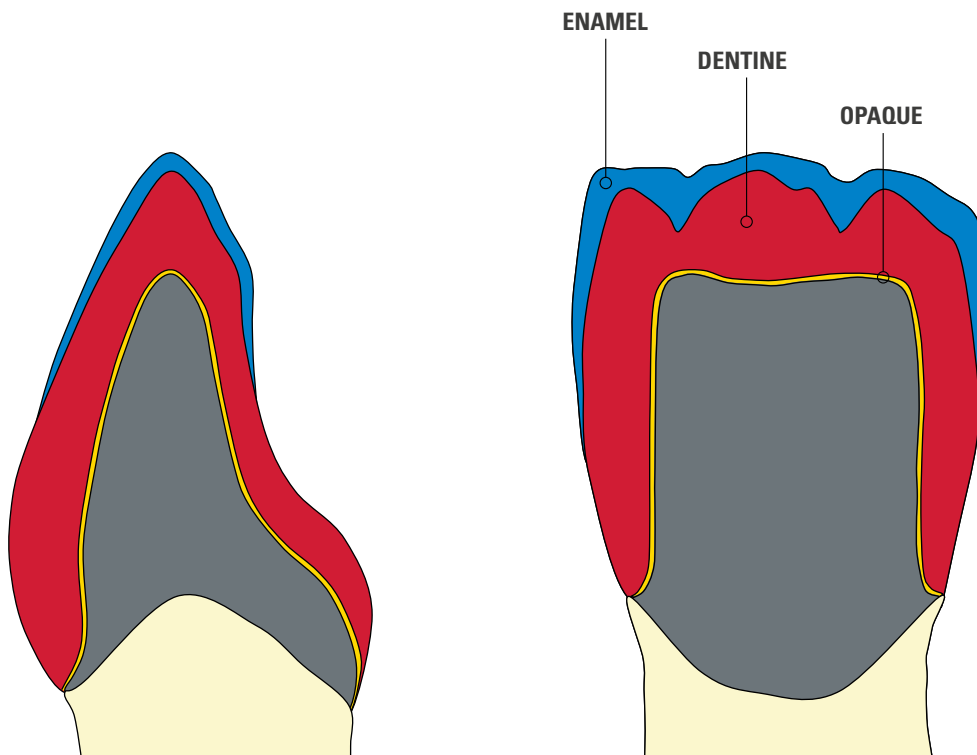

Klasszikus rétegséma

Precíz

A fokozottabb nedvesítéshez: VITA MODELLING FLUID RS

A szakértők a rétegzéshez nem csak kiváló stabilitása és csökkentett zsugorodása miatt részesítik előnyben a VITA MODELLING FLUID RS (red solution) folyadékot.

A kerámia selymes konzisztenciájának köszönhetően mindig biztosítható a megfelelő mértékű nedvesség. Ez eleget tesz a nedves a nedvesen rétegzési eljárásnak, és lehetővé teszi a színek összekeveredését rétegzéskor. Ez az eljárás tehát olyan diffúz fényhatás létrejöttét segíti elő, amely csak az elkészült munkán mutatkozik meg teljes valójában.

Előnyök dióhéjban

- Kiváló stabilitás
- Csökkentett zsugorodás
- Hosszabb feldolgozási idő



Precíz

A fokozottabb biztonságért: VITA NP BOND

Tény, hogy VITA VMK Master maximális megmunkálási tűrést mutat majdnem minden nemesfémmentes ötvözettel szemben, és nem véletlenül alkalmazzák sikerrel világszerte. Ha az adott fémtől függően a lehúási fázisban mégis hőtágulási egyenetlenségek keletkeznének, akkor VITA NP BOND paszta nyújtja Önnek azt a biztonságot, amire szüksége van.

Ez az innovatív bond anyag pufferként egyenlíti ki a hőtágulási együttható miatti feszültségeket, biztosítva ezzel a biztos kötést váz és kerámia között - minden esetben. Lehet szó akár lézerrel szinterelt, CAD/CAM-mel frézelt vagy öntött, nemesfémmentes ötvözetekből készült vázról.

Előnyök dióhéjban

- Szinte korlátlan biztonság – még ötvözetspecifikus egyedi esetekben is
- Egyszerű feldolgozás, megbízható tapadókötés és használatra kész paszta
- Meleg aranszín a megfelelő esztétikai eredmény érdekében

A következő ötvözeteket teszteltük az Ön számára:

<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



Használatra kész VITA NP BOND paszta




Meleg alapszín fémekhez



Változó – ezért olyan sokoldalú

VITA VMK MASTER® Szortimentfelépítés

VITA VMK olyan gazdag szortimentben áll az Ön rendelkezésére, hogy szinte minden megoldandó feladathoz átfogó kínálatot talál. Hiszen minél jobb a rendszer, annál szélesebb körben alkalmazható.

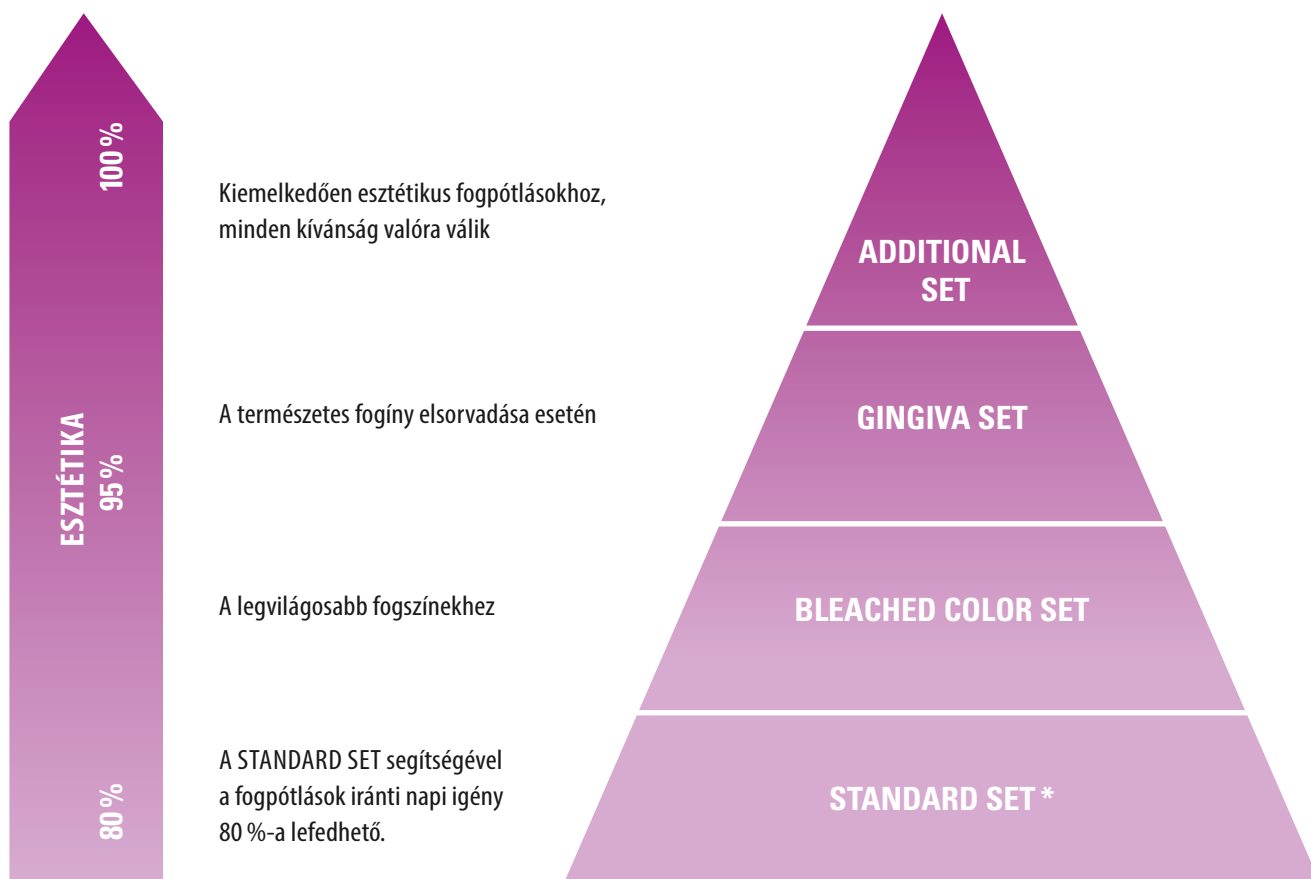

* A STANDARD SET az alábbi kivitelekben kapható:

- STANDARD SET POWDER VITA classical A1 – D4
- STANDARD SET PASTE VITA classical A1 – D4
- STANDARD SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 10-COLOR SET PASTE VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master® MARGIN



A VITA vállmasszák szabadalmaztatott gyártási eljárásának köszönhetően a leplező kerámia oly módon dolgozható fel, mint azt a fogtechnikusok a műanyagok feldolgozásánál már megismerték.



VITA VMK Master® LUMINARY



Erősen fluoreszcens masszák, a fogpótlás mélységi fluoreszcenciájának fokozására.



VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Mélységi effektek belső színelakításához



VITA VMK Master® CERVICAL



Mélység hatás erősítéséhez



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 transzlucens színárnyalat a természetes fogzománc legkülönbözőbb transzparenciáinak leutánzására



VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master® NECK




A NECK masszakkal még tovább fokozható az optimális színhelyreállítás a cervikális régióban.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Gyöngyházzsínű felszíni csillogás / a fiatalos és translucens fogak opálhatásának létrehozásához

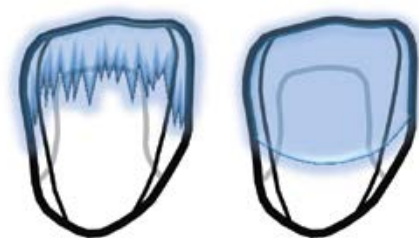

VITA VMK Master® A lehetőségek száma végtelen

Változó

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



A lágyszövet-veszteség színében pontos helyreállításához



VITA VMK Master® WINDOW




Átlátszó WINDOW massza



A VITA VMK Master leplezőkerámia VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1-D4 színekben kapható. Valamennyi VITA SYSTEM 3D-MASTER és VITA classical A1–D4 anyaggal biztosított a színt kompatibilitás.

Az egyedülálló VITA SYSTEM 3D-MASTER rendszerrel valamennyi természetes fogszín szisztematikusan meghatározható és teljes egészében reprodukálható.

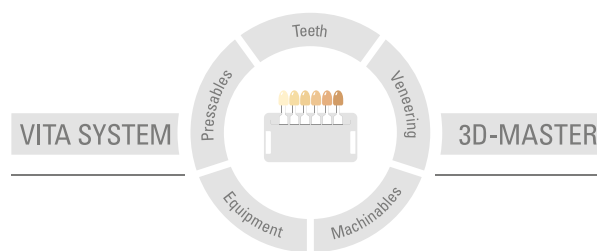

Figyelem: termékeinket a használati utasításban leírtaknak megfelelően kell alkalmazni. Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek szakszerűtlen anyagkezelésből vagy feldolgozásból erednek. A felhasználó továbbá köteles még a munka megkezdése előtt ellenőrizni, hogy a termék a kívánt felhasználási célra alkalmas-e. Felelősségünket kizárja, ha más gyártók nem kompatibilis vagy nem engedélyezett anyagaival vagy eszközeivel együtt használják termékeinket, és ebből kár keletkezik. VITA Modulbox nem kötelező eleme a terméknek. Jelen ismertető kiadásának dátuma: 2019.01

Jelen használati útmutató kiadásával minden korábban megjelent kiadás érvényét veszti. A mindenkor aktuális változat megtalálható a honlapon www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik tanúsított cég, és az alábbi termékek viselik a **CE** 0124 jelzést:

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)