

VITA VMK Master®

Magistral în toate cazurile



VITA Determinarea culorii

VITA Transmiterea culorii

VITA Reproducerea culorii

VITA Verificarea culorii

Ediția: 01.19



VITA – perfect match.

VITA

**Magistral - pentru rezultatele dumneavoastră
excelente**



VITA VMK Master®

Magistral

Precizie ce vă va cuceri. Cu siguranță!

E bine de știut că prin VITA VMK Master firma VITA vă oferă o ceramică feldspatică naturală și precisă pentru fațăre, ce garantează rezultate excelente cu toate aliajele clasice - fie că sunt turnate, frezate sau sinterizate.

Cu VMK Master aveți garanția calității controlate și stabilității coloristice absolute. La VITA, ne străduim să atingem doar cele mai înalte standarde de producție - materialele VITA sunt realizate în aceeași fabrică ca și renumitele chei de culori VITA classical A1–D4 și VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Convingeți-vă! Cu VITA VMK Master veți obține rezultate precise, estetice în culori strălucitoare și fiabile - în toate situațiile!



Disc crom-cobalt Zirkonzahn®

Principalele avantaje

- Prelucrare precisă și sigură, ușor de învățat
- Un material care nu face compromisuri în ceea ce privește fiabilitatea și estetica.
- Caracteristici de prelucrare excelente, precum proprietăți de modelare optimizate, manipulare ușoară și contracție minimă (ceea ce permite doar un singur proces de ardere la realizarea coroanelor)
- Se poate individualiza cu VITA AKZENT Plus și VITA INTERNO
- Disponibil în culorile VITA SYSTEM 3D MASTER și VITA classical A1–D4



Performanță maximă - convingeți-vă



Performanță maximă

Cunoștințele noastre în serviciul esteticii

VITA face parte dintre pionierii de vârf ai industriei dentare. Astăzi, totalitatea inovațiilor și cunoștințelor noastre stă la baza materialelor elaborate și a succesului clinic obținut în întreaga lume.

VITA Zahnfabrik a lansat pe piață un sistem de fațetare metalo-ceramic cu peste jumătate de secol în urmă - primul de acest fel al vremii în Europa. Astăzi, în urma optimizării continue acest sistem este de o fiabilitate de neegalat.

Astfel, VITA VMK Master permite o gamă largă de aplicații pentru îndeplinirea tuturor cerințelor ceramicii - este individuală și are o cromatică strălucitoare.



Fluorescență naturală

Principalele avantaje

- Rezultate strălucitoare datorită cromaticii convingătoare și a fluorescenței naturale
- Gamă largă de aplicații, de la obiective simple la cazuri complexe cu caracteristici individuale
- Procesabilitate de calitate repetabilă, bazată pe mulți ani de experiență



Performanță maximă



Figura 1a*
Coroanele vechi nu se mai potrivesc cu dentiția existentă: ca formă, ca nuanță, ca nivel de opacitate și structură a suprafeței, având un aspect nenatural.



Figura 1b*
Cu un joc de lumini similar cu cel al dintelui, noile coroane au un aspect mult mai natural.



Figura 2a*
Reproducerea danturii puternic abrazate necesită reconstruirea tuturor caracteristicilor tipice bruxismului.



Figura 2b*
Coroana de pe dintele 11 este realizată după dintele natural adiacent (dintele 21): muchii incizale ascuțite, fisuri, fațete vestibulare abrazate, precum și efecte cromatice caracteristice grupului de vârstă.

Performanță maximă



Figura 3a*
Coroana de pe dintele 22 este total diferită față de dintele adiacent (dintele 21) și de cel corespondent (dintele 12).



Figura 3b*
Noua coroană (dintele 22), cu o culoare de bază intensă și efecte de enamel se potrivește perfect cu dintele adiacent.



Figura 4a*
Datorită culorii, formei și suprafeței lucrării, se observă imediat că dintele 22 este o restaurare.



Figura 4b*
Efectul de profunzime și jocul viu de lumini îi conferă noii coroane (dintele 22) aceeași strălucire naturală pe care o are dintele adiacent (dintele 21).

Cea mai bună performanță



Figura 5a*
Dintele adiacent este modelul pentru opacitatea deosebită a restaurării, specifică vârstei.



Figura 5b*
Datorită reproducerii perfecte a opacității și fluorescenței tipice dinților tineri, coroana de pe dintele 12 se integrează perfect în dantură.



Figura 6a*
Cu efecte de profunzime și o opalescență deosebită, culoarea de bază deschisă a dintelui adiacent 21 reprezintă o adevărată provocare în acest caz.



Figura 6b*
Noua coroană (dintele 22) impresionează prin efectele de profunzime naturală, jocul viu de culori și opalescența tipică grupei de vârstă.

Cea mai bună performanță



Figura 7a*
Dintele 21 nu seamănă cu dintele adiacent 11 în aspecte importante ca nuanță, suprafață sau strălucire.



Figura 7b*
Coroana metalo-ceramică (dintele 21) nu pare a fi o restaurare, deoarece reflectă toate caracteristicile dinților naturali adiacenți.



Figura 8a*
Dintele 11 a fost folosit ca model pentru dintele fracturat (dintele 21) datorită particularităților: o nuanță de bază deschisă, transluciditate deosebită, muchie incizală intactă și efecte de smalt perlate.



Figura 8b*
Coroana 21 este o replică convingătoare a dintelui adiacent, atât în ceea ce privește culoarea, cât și efectele de enamel, având toate caracteristicile - inclusiv efectul perlat.

Precizia de care aveți nevoie



Exact


Cu fiecare strat, mai bun

Echipa noastră de dezvoltare lucrează zilnic la materiale care să permită obținerea unor rezultate maxime cu efort minim. De exemplu, opacul nostru acoperă scheletul metalic după o singură ardere și din motive bine întemeiate - indiferent dacă folosiți pulberea, pasta sau tehnica spray-on.

Cu cât mai intuitiv este modul de aplicare, cu atât mai bine vă puteți concentra pe detaliile critice. Noi ne axăm pe stratificarea clasică standard, astfel puteți experimenta toate avantajele unui proces exact, rapid și convingător de la bun început.

Principalele avantaje

- Stratificare clasică pentru stratificare intuitivă
- Proprietăți de primă clasă - ce asigură contracție redusă, economie semnificativă de timp și stabilitate cromatică permanentă
- Rentabilitate maximă și rezultate estetice

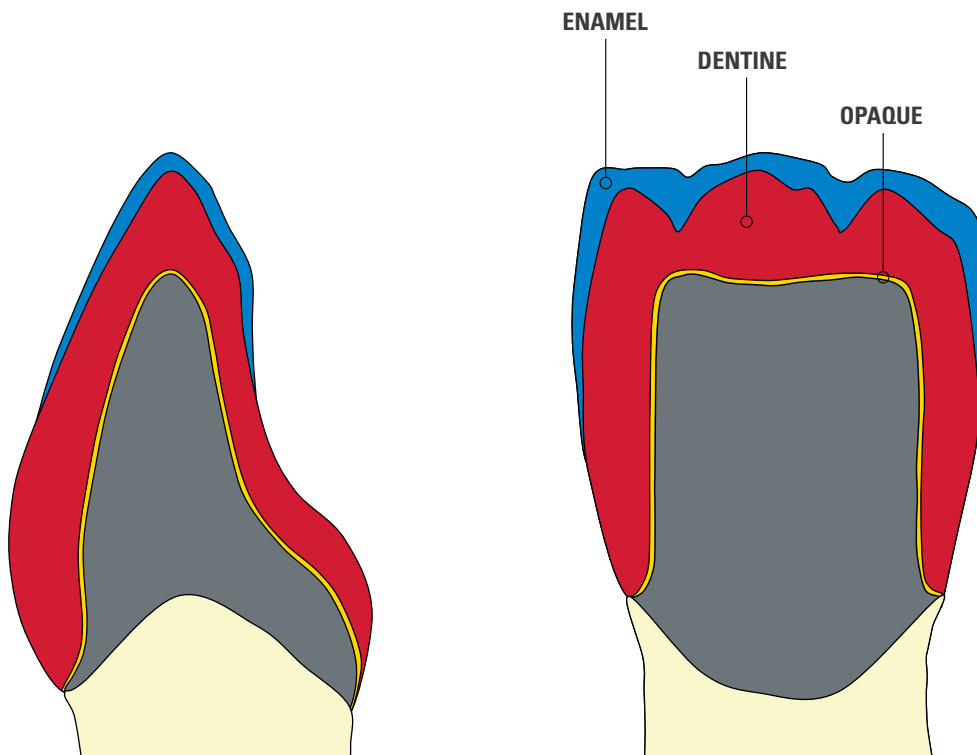

Tehnică de stratificare clasică

Exact

VITA MODELLING FLUID RS pentru păstrarea mai bună a umidității.

Experții preferă pentru stratificare VITA MODELLING FLUID RS (soluție roz) pentru stabilitatea excelentă și contracția redusă.

Datorită consistenței fine a ceramicii, puteți menține întotdeauna nivelul potrivit de umiditate al lucrării. Acest lucru favorizează stratificarea umedă și gradientele de trecere fine ale culorilor în timpul stratificării. Astfel se vine în sprijinul efectelor de lumină dispersată care pot fi apreciate în totalitate doar după finisare.

Principalele avantaje

- Stabilitate excelentă
- Contracție redusă
- Timp de prelucrare prelungit



Exact

Pentru mai multă fiabilitate: VITA NP BOND

VITA VMK MASTER oferă cea mai mare toleranță la aproape toate aliajele nenobile și se folosește cu succes în întreaga lume. Dacă în perioada răcirii apar probleme datorate valorii CTE a metalului, cu VITA NP BOND Paste obțineți fiabilitatea dorită.

Ca un element tampon, bondingul inovator reglează tensiunile legate de CTE și garantează o adeziune sigură între scheletul dentar și ceramică - de fiecare dată, indiferent dacă substructura este din metal sinterizat cu laser, frezat CAD/CAM sau turnat din aliaj nenobil.

Principalele avantaje

- Fiabilitate aproape nelimitată - chiar și în cazuri individuale cu aliaje speciale
- Prelucrare simplă, adeziune puternică și pastă gata de utilizare
- Nuanță aurie caldă pentru rezultate estetice

Am testat următoarele aliaje pentru dumneavoastră:
<https://www.vita-zahnfabrik.com/npbond>



VITA NP BOND Pastă gata de utilizare



Nuanțe calde pentru aliaje


Flexibil - datorită unei game largi de opțiuni



Flexibil

VITA VMK MASTER® conceptul sortimentelor

VITA VMK MASTER vă oferă un sortiment larg și complet cu soluții pentru majoritatea cazurilor. Cu cât mai cuprinzătoare este trusa, cu atât mai multe sunt posibilitățile de aplicare.

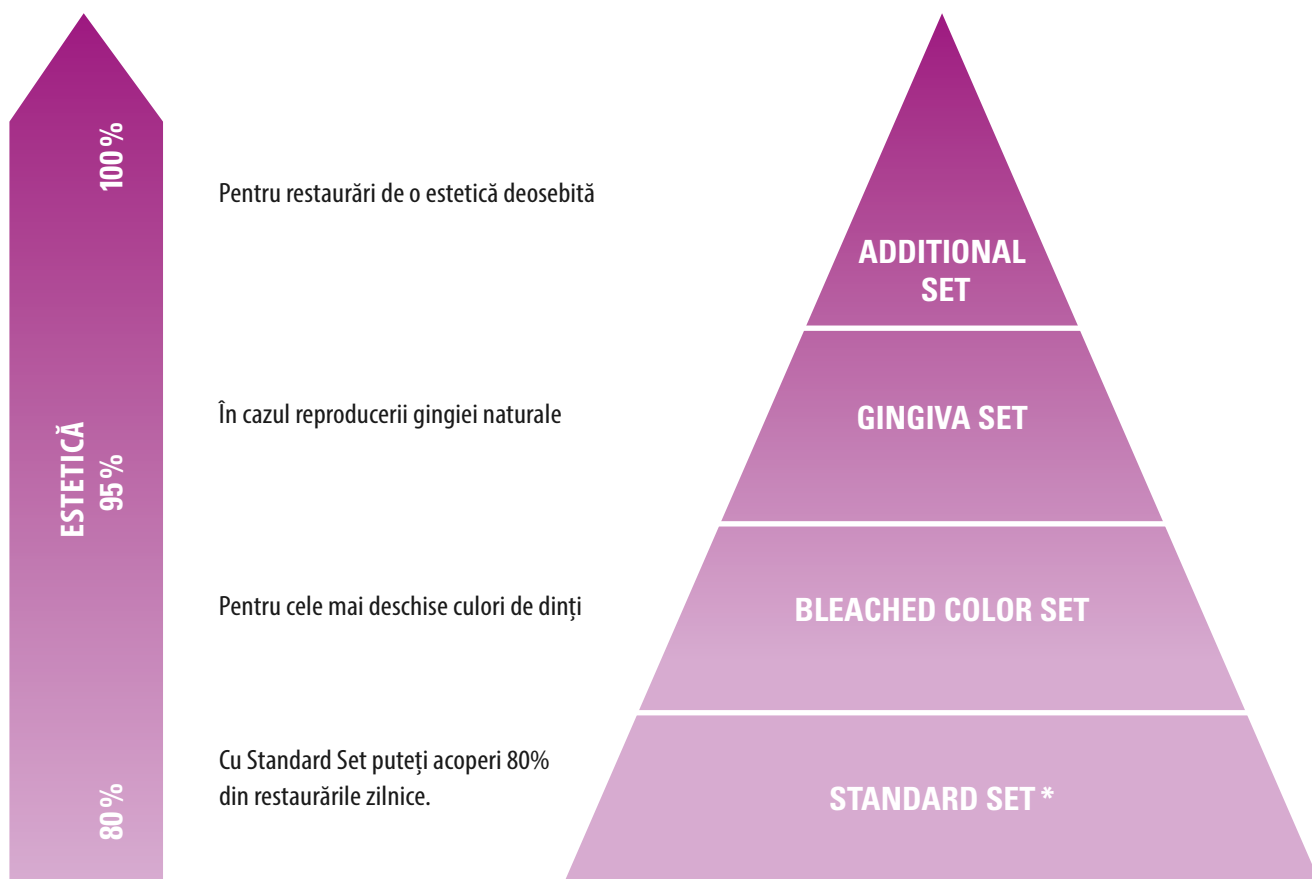

* Standard Set este disponibil în următoarele versiuni:

- STANDARD SET POWDER opac pulbere VITA classical A1–D4
- STANDARD SET PASTE opac pastă VITA classical A1–D4
- STANDARD SET POWDER opac pulbere VITA SYSTEM 3D-MASTER
- STANDARD SET PASTE opac pastă VITA SYSTEM 3D-MASTER
- SET 10 CULORI POWDER opac pulbere VITA SYSTEM 3D-MASTER
- SET 10 CULORI PASTE opac pastă VITA SYSTEM 3D-MASTER

Flexibil

VITA VMK Master® MARGIN



Datorită procedurii brevetate de fabricare a materialelor VITA pentru prag ceramic, (MARGIN), această ceramică poate fi prelucrată într-un mod similar cu materialele acrilice.



VITA VMK Master® LUMINARY



Materiale extrem de fluorescente pentru dozarea fluorescenței restaurării.



Flexibil

VITA VMK Master® DENTINE MODIFIER



Pentru colorarea din interior cu scopul de a obține efectul de profunzime



VITA VMK Master® CERVICAL



Pentru sporirea efectului de profunzime



VITA VMK Master® TRANSLUCENT



8 nuanțe translucide pentru redarea celei mai largi palete de transparență a smalțului natural



VITA VMK Master® Opțiuni nelimitate

Flexibil

VITA VMK Master® NECK




Reproducerea perfectă a nuanței în zona cervicală poate fi susținută de materialele NECK.



VITA VMK Master® PEARL / OPAL TRANSLUCENT



Strălucire sidefată /
Pentru a reda efectul de opalescență la restaurările dinților tineri și translucizi

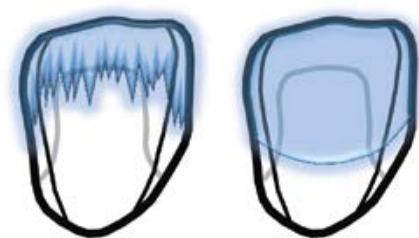

Flexibil

VITA VMK Master® GINGIVA / GINGIVA OPAQUE



Pentru redarea fidelă a culorii țesutului gingival.



VITA VMK Master® WINDOW




Materiale WINDOW transparente



Ceramica de fațetare VITA VMK Master este disponibilă în culorile VITA SYSTEM 3D-MASTER și VITA classical A1–D4. Compatibilitatea cromatică cu toate materialele VITA SYSTEM 3D-MASTER și VITA classical A1–D4 este garantată.

Cu ajutorul sistemului VITA SYSTEM 3D-MASTER se determină și se reproduc cu precizie toate culorile dentare naturale.

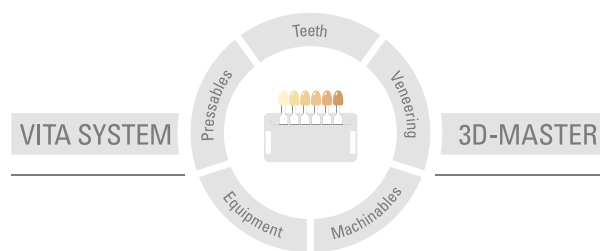

Atenție: Produsele noastre se utilizează cu respectarea instrucțiunilor de folosire. Nu ne asumăm răspunderea pentru daune produse din cauza unei manipulări sau prelucrări necorespunzătoare. Suplimentar, utilizatorul este obligat să verifice înainte de utilizare dacă produsul este corespunzător pentru domeniul de utilizare respectiv. Nu ne asumăm răspunderea pentru cazurile în care produsul nu este compatibil cu materialele și aparatele altui producător și din aceasta rezultă o pagubă. VITA Modulbox nu este neapărat un component al produsului. Editarea acestor instrucțiuni s-a făcut la: 01.19

Odată cu publicarea acestei ediții cu informații privind utilizarea, toate edițiile precedente își pierd valabilitatea. Versiunea actuală aferentă o puteți găsi la adresa www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik este o firmă certificată, iar următoarele produse poartă marca **CE** 0124:

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® Plus · VITA INTERNO®

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik